

## EINBINDUNG DES DEMIS-MELDEPORTALS BEI ANBINDUNG AN DIE TELEMATIK-INFRASTRUKTUR

23. November 2021

Liebe WINAPO®-Anwenderin, lieber WINAPO®-Anwender,

mit dem DEMIS-Meldeportal können z.Z. positive SARS-CoV-2-Schnelltestergebnisse direkt an das zuständige Gesundheitsamt geschickt werden.

Auf den nächsten Seiten finden Sie eine kurze Anleitung, in der beschrieben wird, wie Sie die Einbindung des Meldeportals in wenigen Schritten eigenständig vornehmen können.




Eine zwingende Voraussetzung dafür ist der Anschluss an die Telematik-Infrastruktur. Nur in diesem Fall steht Ihnen der Zugriff auf die Portalseite <https://portal.demis.rki.de/> zur Verfügung.

Wenn Sie noch nicht über eine Anbindung verfügen, diese Funktion aber gerne nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen Ansprechpartner.

Mit freundlichen Grüßen  
**Ihr CGM LAUER Team**

## Konfiguration des Konnektors

Um das Portal erreichen zu können, müssen einige Einstellungen am Konnektor vorgenommen werden. Melden Sie sich dazu am Konnektor an. Zuvor benötigen Sie die IP-Adresse ihres Apothekennetzes.



- Klicken Sie dazu an einem beliebigen Arbeitsplatz auf das  Symbol in der Taskleiste und wählen Sie **INFOSYS**. Nach kurzer Zeit öffnet sich ein Fenster mit Informationen über ihr Apothekennetz.

Unter IP-Adresse sind die Adressen aller Rechner zu sehen. Sie haben die Form 10.A.B.C, wobei A und B jeweils gleich sind.

- Öffnen Sie ein Browserfenster (Chrome, Firefox oder Edge - nicht den Internet Explorer) und geben Sie als Adresse

**https://10.A.B.253:9443/administration/start.html**

ein, wobei sie A und B durch ihre Zahlen ersetzen.

 <p><b>Ihre Verbindung ist nicht privat.</b></p> <p>Angreifer versuchen möglicherweise Ihre Informationen von <b>10.254.92.253</b> zu stehlen (z. B. Kennwörter, Nachrichten oder Kreditkarten).</p> <p>NET-ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID</p> <p><b>Erweitert</b> <span style="float: right;"><b>Zurück</b></span></p>	 <p><b>Warnung: Mögliches Sicherheitsrisiko erkannt</b></p> <p>Firefox hat ein mögliches Sicherheitsrisiko erkannt und 10.254.92.253 nicht geladen. Falls Sie die Website besuchen, könnten Angreifer versuchen, Passwörter, E-Mails oder Kreditkartendaten zu stehlen.</p> <p><b>Was können Sie dagegen tun?</b></p> <p>Am wahrscheinlichsten wird das Problem durch die Website verursacht und Sie können nichts dagegen tun.</p> <p>Falls Sie sich in einem Firmennetzwerk befinden oder Antivirus-Software einsetzen, so können Sie jeweils deren IT-Support kontaktieren. Das Benachrichtigen des Website-Administrators über das Problem ist eine weitere Möglichkeit.</p> <p><a href="#">Weitere Informationen...</a></p> <p style="text-align: right;"><b>Zurück (empfohlen)</b> <b>Erweitert...</b></p>
--	---

- Sollten Sie Warnungen über eine unsichere Verbindung bekommen, so können Sie diese über *Erweitert*

<p>Dieser Server konnte nicht nachweisen, dass es sich bei ihm um <b>10.254.92.253</b> handelt. Das Sicherheitszertifikat wird vom Betriebssystem Ihres Computers nicht als vertrauenswürdig eingestuft. Dies kann auf eine fehlerhafte Konfiguration zurückzuführen sein oder auf einen Angreifer, der Ihre Verbindung abfängt.</p> <p><b>Weiter zu 10.254.92.253 (unsicher)</b></p>	<p>Eventuell täuscht jemand die Website vor und es sollte nicht fortgefahren werden.</p> <p>Websites bestätigen ihre Identität mittels Zertifikaten. Firefox vertraut 10.254.92.253:9443 nicht, weil der Aussteller des Zertifikats unbekannt ist, das Zertifikat vom Aussteller selbst signiert wurde oder der Server nicht die korrekten Zwischen-Zertifikate sendet.</p> <p>Fehlercode: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER</p> <p><a href="#">Zertifikat anzeigen</a></p> <p style="text-align: right;"><b>Zurück (empfohlen)</b> <b>Risiko akzeptieren und fortfahren</b></p>
---	---

und *Weiter zu* oder *Risiko akzeptieren und fortfahren* in diesem Fall akzeptieren.

- Nun erscheint ein Anmeldefenster:

KoCoBox-Managementsschnittstelle

Name:

Passwort:

- Als Benutzer geben Sie koco-root ein. Das Passwort dieses Users wurde bei der Installation der TI individuell für Ihre Apotheke festgelegt. Sie finden es in der Dokumentation, die Ihnen von unserem Techniker nach der TI-Einrichtung übergeben wurde.
- Geben Sie ihr Passwort ein und bestätigen Sie mit *Anmelden*.
- Möglicherweise werden Sie nun aufgefordert, ein neues Passwort für den gewählten User zu vergeben. Was dabei zu beachten ist, wird im Abschnitt *Passwortänderung* beschrieben. Nachdem Sie das Passwort geändert haben, können Sie hier fortfahren.
- Es wird nun das Hauptmenü angezeigt. Sollte ein Hinweisfenster angezeigt werden, so bestätigen Sie dieses mit *OK*.
- Navigieren Sie zum Menüpunkt *LAN / WAN*:



- Verwenden Sie nun die Schaltflächen auf der linken Seite im Bereich *Aktive Bestandsnetze*, um diese zu aktivieren. Klicken Sie dazu **jede** Schaltfläche an, die kein X in der Spalte *Aktiv* besitzt:

Aktive Bestandsnetze				
Aktiv	ID	Name	Netz	
<input type="checkbox"/>	SNK	KV-SafeNet	188.144.0.0/15	
<input type="checkbox"/>	KZVWL	ZOD-Portal KZV WL	212.3.66.8/29	
<input type="checkbox"/>	LKNRW	Landeskrebsregister NRW	213.146.104.80/29	
<input type="checkbox"/>	ACTINEO	ACTINEO - Belegbeschaffung	83.236.194.125/32	
<input type="checkbox"/>	IBM	Impfnachweis	161.156.128.32/28	
<input type="checkbox"/>	Demis	Demis Meldeportal	84.17.163.80/30	
<input type="checkbox"/>	gematik	TI-SplitDNS	84.17.163.84/30	
<input type="checkbox"/>	RZV	RZV eHealth-Netz	185.226.121.64/28	
<input type="checkbox"/>	AOKNiedersachsen	AOK Niedersachsen	213.61.31.224/28	
<input type="checkbox"/>	AOKPLUS	AOK PLUS	213.61.31.240/28	
<input type="checkbox"/>	ORGTI	OGR-Telematikinfrastruktur - PI	193.28.70.16/30	

Danach sollte die Anzeige wie folgt aussehen:

Aktive Bestandsnetze				
Aktiv	ID	Name	Netz	
<input checked="" type="checkbox"/>	X	SNK	KV-SafeNet	
<input checked="" type="checkbox"/>	X	KZVWL	ZOD-Portal KZV WL	
<input checked="" type="checkbox"/>	X	LKNRW	Landeskrebsregister NRW	
<input checked="" type="checkbox"/>	X	ACTINEO	ACTINEO - Belegbeschaffung	
<input checked="" type="checkbox"/>	X	IBM	Impfnachweis	
<input checked="" type="checkbox"/>	X	Demis	Demis Meldeportal	
<input checked="" type="checkbox"/>	X	gematik	TI-SplitDNS	
<input checked="" type="checkbox"/>	X	RZV	RZV eHealth-Netz	
<input checked="" type="checkbox"/>	X	AOKNiedersachsen	AOK Niedersachsen	
<input checked="" type="checkbox"/>	X	AOKPLUS	AOK PLUS	
<input checked="" type="checkbox"/>	X	ORGTI	OGR-Telematikinfrastruktur - PI	

Je nach Bundesland können die Bezeichnungen und die Anzahl abweichen.

- Sichern Sie die Einstellungen mit *Übernehmen*:

**Intranetrouten**


Intranetroute hinzufügen ...

Segment	Next-Hop

Damit ist die Einrichtung des Konnektors beendet und das Browserfenster kann nach dem Abmelden geschlossen werden.

## Aufrufen der Portalseite

Auf Ihrem Laufwerk X finden Sie die Datei "DEMIS.exe".

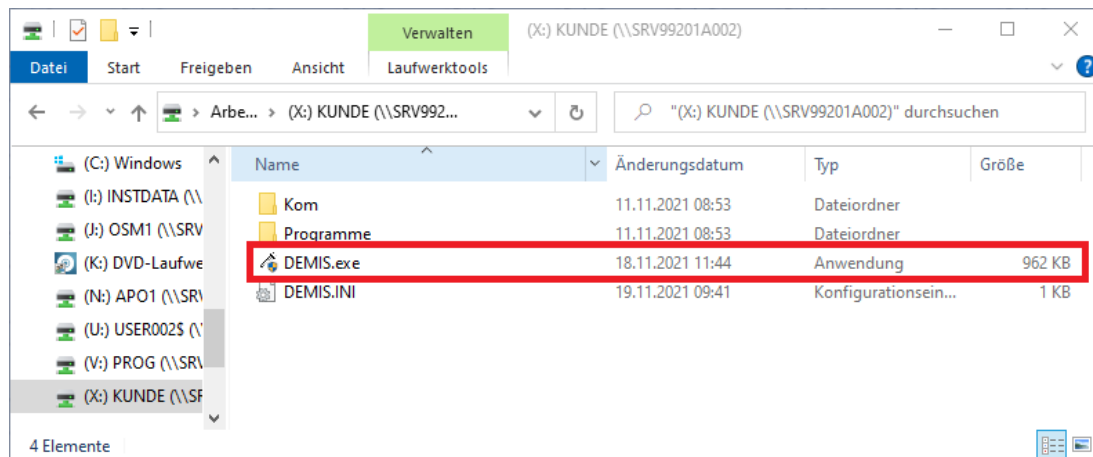


- Führen Sie die Datei mit einem Doppelklick aus.
- Der Dialog *Benutzerkontensteuerung* öffnet sich, bestätigen Sie diesen mit *Ja*.



Die Datei "DEMIS.exe" muss an jeder Station ausgeführt werden, an der Sie auf das Meldeportal zugreifen wollen, da sonst die Verknüpfung nicht auf dem Desktop vorhanden ist.

Daraufhin öffnet sich der Browser *Microsoft Edge*, möglicherweise nach einer kurzen Wartezeit, mit der Portalseite:

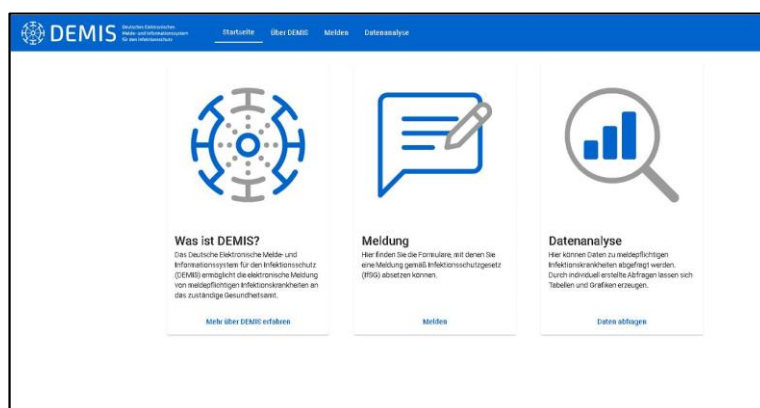

- Melden Sie sich hier mit Ihren Zugangsdaten an.
- Nach der ersten Anmeldung genügt es, wenn Sie über die Verknüpfung auf Ihrem Desktop gehen. Diese Anwendung ist an jeder Station möglich, an der die Datei "DEMIS.exe" ausgeführt wurde.



Damit ist die Einrichtung abgeschlossen.

## Passwortänderung durchführen

Aus Sicherheitsgründen ist die Gültigkeit der Passwörter des Konnektors auf maximal 365 Tage beschränkt. Erfolgt nach Ablauf dieser Frist eine Anmeldung, muss zwingend erst ein neues Passwort vergeben werden:

### KoCoBox-Managementschnittstelle

Sie müssen ein neues Passwort wählen. Beachten Sie dabei die Passwort-Policy!

Das Passwort muss zwischen 8 und 20 Stellen lang sein und muss mindestens 3 Zeichenklassen (Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen (!@#\$%^&\* -+~/)) aufweisen. Der Benutzername darf darin nicht vorkommen, auch nicht rückwärts geschrieben. Außerdem darf es nicht identisch sein mit einem der letzten 3 Passwörter.

altes Passwort:

neues Passwort:

neues Passwort bestätigen:

- Geben Sie im oberen Eingabefeld *altes Passwort* das Auslieferungspasswort ein.
- Geben Sie anschließend Ihr persönliches neues Passwort ein und wiederholen Sie es korrekt.



Bitte beachten Sie dabei:

- Die Länge muss mindestens 8 und kann maximal 24 Zeichen betragen.
  - Verwenden Sie mindestens ein Zeichen aus den Zeichenklassen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. Diese sind wie folgt definiert:
    - Großbuchstaben: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
    - Kleinbuchstaben: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
    - Zahlen: 0123456789
    - Sonderzeichen sind: !@#\$%^&\* \_ =+ - /
  - Im Passwort müssen drei der vier Zeichenklassen enthalten sein.
  - Der Benutzername darf nicht enthalten sein (weder vor- noch rückwärts, unter Ignorierung der Groß-/Kleinschreibung).
  - Beim Vergeben eines neuen Passworts dürfen die letzten drei Passwörter nicht noch einmal verwendet werden.
  - Verwenden Sie keine trivialen Passwörter, einfache Namen oder Begriffe aus dem Wörterbuch – egal in welcher Sprache.
  - Verwenden Sie keine Passwörter, die eine persönliche Information (Vornamen, Familiennamen, Kosenamen, Geburtsdaten, Telefonnummern etc.) enthalten.
  - Verwenden Sie keine Anagramme, Zahlenfolgen wie 12345 oder Buchstabenfolgen wie abcde etc.
- Klicken Sie abschließend auf *Passwort ändern*. Die erfolgreiche Änderung wird bestätigt und es wird das Login-Fenster wieder angezeigt. Melden Sie sich nun mit dem Benutzernamen und dem neuen Passwort an.



Notieren Sie unbedingt das neue Passwort in der TI-Dokumentation!

- Fahren Sie nun mit dem Update fort.

## Fehler bei der Passwortänderung

Bei fehlenden Einträgen erscheint eine entsprechende Meldung:

### KoCoBox-Managementschnittstelle

Sie müssen ein neues Passwort wählen. Beachten Sie dabei die Passwort-Policy!

Das Passwort muss zwischen 8 und 20 Stellen lang sein und muss mindestens 3 Zeichenklassen (Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen { !@#\$%^&\* -+=:/ }) aufweisen. Der Benutzername darf darin nicht vorkommen, auch nicht rückwärts geschrieben. Außerdem darf es nicht identisch sein mit einem der letzten 3 Passwörter.

altes Passwort:

neues Passwort:

neues Passwort bestätigen:

**Es ist ein Fehler bei der Passwortänderung aufgetreten!**

- Löschen Sie ggf. die Fehleingabe(n) und tragen Sie sowohl das alte Passwort als auch das neue persönliche Passwort korrekt neu ein. Beachten Sie dabei die Vorgaben zu Länge und Aufbau des Passworts. Bestätigen Sie das neue Passwort mit *Passwort ändern*.