

Doc rev: 03

Last update:30/04/2026

Manuale Utente CGM CARE MAP

Synchronizing Healthcare



CompuGroup
Medical

Contenuto

Introduzione	6
Dati identificativi	6
Precauzioni di utilizzo	6
Generali	6
Avvertenze.....	7
Login	8
Autenticazione a due fattori.....	9
Home	10
Dashboard	11
Assistiti	13
Nuovo Assistito	14
Esporta Excel/Esporta PDF	15
Dettagli assistito	17
DATI GENERALI	17
Dati anagrafici.....	17
Mappa	19
Prodotti.....	20
Kit.....	22
Arruolamento	23
SCHEMA PAZIENTE.....	25
Parametri	25
PAI.....	27
Calendario	30
Rilevazione Misura	31
Pro-Memoria terapeutico.....	31
Questionari	31
Questionari App.....	31
Videoconsulto.....	32
Soglie	33

ECG Giornalieri.....	35
ALLARMI	45
Esporta Excel/Esporta PDF	47
CARTELLA PERSONALE	48
Anamnesi	48
Terapia	50
Esporta Excel/Esporta PDF.....	51
Accessi.....	52
Diario	53
Esporta Excel/Esporta PDF	55
Eventi	56
Segnalazione Eventi	57
Valutazione Infermieristica	59
Esami	61
COMUNICAZIONE.....	67
Questionari	67
Questionari App.....	69
Chat	71
Formazione	73
Contatti Chat	74
Documenti Personali.....	76
COMPLIANCE	77
Impostazione Terapia	77
Vassoi Terapia.....	78
Misura Compliance	83
Operatore.....	86
Allarmi.....	86
Esporta Excel/Esporta PDF	88
Agenda	88
Attività	92

Esporta Excel/Esporta PDF	93
Chat	94
Formazione	96
News	98
Documenti	99
Report	100
Questionari	101
Statistiche	102
Referti	103
CER-S Gateway	104
Installazione di CER-S Gateway	104
Utilizzo di CER-S Gateway	107
Admin	121
Gestione Assistiti	121
Gestione Operatori	123
Gestione Profili	125
Gestione Kit	126
Visualizzazione password paziente	127
Gestione Dispositivi	128
Gestione PDTA	129
Gestione Questionari	130
Gestione Questionari App	132
Gestione Organizzazioni	135
Configurazione automatica destinatari allarmi:	136
Configurazione Stati Allarme	138
Tipo regola “Notifica”	140
Tipo regola “Cambio stato allarme”	142
Tipo regola “Genera attività”	142
Gestione Gruppi Chat	143
Gestione Caregivers	145
Gestione Attività	145
Gestione Prodotti	149
Impostazioni Generali	151

Videochiamata	151
Impostazioni Account	151
Lingua	153
Informazioni generali e riferimenti	154
Destinazione d'uso	154
Classificazione	154
Utilizzatori previsti	154
Pazienti, indicazioni e controindicazioni	154
Prestazioni essenziali	155
Specifiche tecniche	155
Fabbricante	156



Rev.	Descrizione	Elaborato R. Com.	Verificato R.G.Q.	Approvato D.G.	Data
00	Prima emissione	A.Belloni <i>A. Belloni</i>	A.Belloni <i>A. Belloni</i>	A.Pravettoni <i>Alberto Pravettoni</i>	12/12/23
01	Risoluzione delle NC rilevate dall'Ente durante la prima valutazione della documentazione	A.Belloni <i>A. Belloni</i>	A.Belloni <i>A. Belloni</i>	A.Pravettoni <i>Alberto Pravettoni</i>	31/07/24
02	Risoluzione delle NC rilevate dall'Ente durante la seconda valutazione della documentazione	A.Belloni <i>A. Belloni</i>	A.Belloni <i>A. Belloni</i>	A.Pravettoni <i>Alberto Pravettoni</i>	20/12/24
03	Aggiornamento per sviluppi	A.Belloni <i>A. Belloni</i>	A.Belloni <i>A. Belloni</i>	A.Pravettoni <i>Alberto Pravettoni</i>	30/04/26

Introduzione

Il presente documento descrive le funzionalità del portale web CGM CARE MAP, in modo da renderle utilizzabili in modo semplice da parte dell'utilizzatore.

Per rendere facilmente accessibile ed in modo contestuale tale supporto, le funzionalità sono state dettagliate mantenendo il legame con la maschera relativa.

Questo manuale descrive tutte le sezioni dell'applicativo web, ma ogni utente vedrà solo le sezioni abilitate in base alla configurazione del profilo a lui assegnato.

Al termine del documento sono riportate le principali evidenze di soddisfacimento del Regolamento (UE) 2017/745, quali l'indicazione del produttore, la classificazione del dispositivo (Classe IIa), la destinazione d'uso ed eventuali indicazioni ed avvertenze d'uso aggiuntive.

Il dispositivo è composto da diversi moduli, di cui solo alcuni rientrano nella definizione di dispositivo medico. I moduli con funzionalità mediche, soggetti alla valutazione dell'organismo notificato (IMQ) e che quindi presentano la marcatura CE con il codice 0051, sono i seguenti:

- CGM CARE MAP:
 - Refertazione
 - Allarmi
- CGM CARE MAP Mobile:
 - Acquisizione misure da dispositivo
- CGM POINT OF CARE:
 - Acquisizione misure da dispositivo

Tutti gli altri moduli risultano fondamentali per il corretto funzionamento del dispositivo, ma non contengono funzionalità mediche. Questi moduli non sono soggetti alla valutazione dell'organismo notificato.

Dati identificativi

Il modulo CGM CARE MAP è parte del dispositivo medico:

Nome commerciale	CGM CARE MAP
Modello	CGM CARE MAP
Marca	CGM TELEMEDICINE
Versione SW	4.0.0.0

Precauzioni di utilizzo

Il capitolo fornisce all'utente le informazioni necessarie al fine di utilizzare correttamente e con sicurezza l'applicativo CGM CARE MAP.

Generali

- Leggere attentamente il manuale utente in tutte le sue parti prima di utilizzare CGM CARE MAP.
- Il fabbricante garantisce la sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni di CGM CARE MAP solo se lo stesso è utilizzato conformemente alle istruzioni per l'uso contenute nel presente documento.
- Ogni responsabilità del fabbricante e la garanzia decadono nel caso di mancato rispetto da parte dell'utilizzatore di quanto contenuto nel presente documento.
- L'applicativo CGM CARE MAP necessita di una connessione internet per funzionare correttamente.
- Segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.
- L'installazione e la disinstallazione del prodotto sono effettuati dal Fabbricante o da persone appositamente autorizzate dallo stesso, contattare il Fabbricante per ulteriori dettagli.
- Contattare il Fabbricante ai contatti forniti al termine del documento per ottenere il documento di Technical Description del prodotto.

Avvertenze

- Utilizzare l'applicativo solamente con i dispositivi medici autorizzati dal Fabbricante.
- L'applicativo web è compatibile con le versioni recenti di tutti i browser di largo utilizzo, verificare i dettagli indicati nel capitolo "Specifiche tecniche" alla fine del documento.
- Consultare un medico o un altro operatore sanitario in caso di dubbi sulla validità delle misure effettuate o in generale su qualsiasi argomento di natura medica.
- Solo i dati derivanti da dispositivi medici di misura marcati CE vengono utilizzati dai moduli medici per le finalità mediche descritte nella destinazione d'uso. I dati derivanti da altre tipologie di dispositivi non medici (ad es. FitBit) non sono elaborati dai moduli medici e non vengono usati per finalità mediche e sono quindi esclusi dal perimetro di marcatura del dispositivo. Gli allarmi generati a partire da misure non provenienti da dispositivi medici non devono essere utilizzati per prendere decisioni di tipo diagnostico e/o terapeutico.

Login

La home Page della piattaforma è la maschera iniziale utilizzata per accedere al sistema. Consente agli operatori di accedere al sistema ma offre le seguenti funzioni:

- Accesso al sistema
- Cambia password
- Recupera password



La prima funzione obbligatoria per aver accesso alle diverse funzioni della piattaforma richiede un'autenticazione mediante username e password. L'accesso al sistema e di conseguenza le funzioni che vengono presentate all'operatore vengono modulate in base al profilo impostato sull'utente.

Per accedere al sistema è necessario inserire username e password e premere il tasto **[Accedi]**.

Se l'utente ha smarrito la password la piattaforma offre la possibilità di recuperare la password mediante la funzione **[Recupera Password]**.

Per recuperare la password l'operatore deve introdurre il proprio username e cliccare sul link [Recupera Password]. La piattaforma inoltra via SMS ed e-mail un codice di autenticazione da inserire nella schermata. Una volta inserito il codice la piattaforma offre la possibilità di ricevere la password attuale via e-mail o SMS (la disponibilità dei canali e-mail e SMS dipende dalla configurazione del sistema).

Alla prima login l'utente deve forzatamente cambiare la propria password.

Per accedere alla funzione di cambio password l'operatore deve cliccare sul tasto [Cambia password]. La piattaforma inoltra via SMS ed e-mail un codice di autenticazione da inserire nella schermata. Una volta inserito il codice vengono richiesti l'inserimento della password corrente e di

quella nuova, che deve rispettare i seguenti vincoli (i valori effettivi potrebbero essere differenti da quelli elencati in quanto dipendono da una configurazione):

- Lunghezza minima 10 caratteri
- Almeno un carattere numerico
- Almeno un carattere maiuscolo e uno minuscolo
- Almeno un carattere speciale

Le password hanno una durata di 90 giorni, dopo di che scadono e devono essere cambiate.

L'utente viene avvertito tramite e-mail dell'avvicinarsi del termine di validità.

Autenticazione a due fattori


La piattaforma permette di aumentare la sicurezza del prodotto abilitando l'autenticazione a due fattori (2FA), che richiede un'ulteriore fase di autenticazione mediante l'inserimento di un codice monouso generato dal sistema ed inviato all'utente durante la fase di login tramite SMS o e-mail (in base alle configurazioni).

L'abilitazione è possibile per ciascun profilo utente, in base alle proprie necessità (ad esempio, è possibile abilitarla solo per il profilo ADMIN).

Se l'autenticazione 2FA è abilitata, dopo aver immesso utente e password il sistema invia all'utente un codice temporaneo tramite email/SMS e viene presentata una maschera in cui inserirlo entro 5 minuti:



È sufficiente inserire il codice ricevuto nella maschera e premere [Accedi] per accedere al portale:

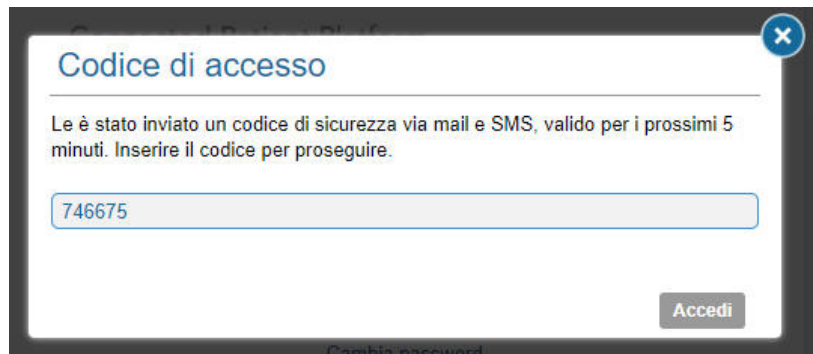

Home

La maschera che l'operatore utilizza per accedere alle diverse funzioni contiene un menu sempre a disposizione degli operatori in alto a sinistra così composto:

- Dashboard
- Home
- Assistiti
- Operatore (che contiene Allarmi, Agenda, Attività, PDTA e News)
- Admin (per gestire Assistiti, Operatori, Profili, Autorizzazioni, Kit, Dispositivi e Questionari)
- Referti
- Account (che permette di modificare le Impostazioni Account o di fare Logout)

Ogni voce di menu è composta da diverse funzioni che vengono proposte come sottomenu della voce selezionata.

La parte centrale della maschera è contestuale alla voce di menu selezionata.

Il primo menu che viene proposto dopo il login agli operatori è [Home] che contiene una visualizzazione con un insieme di indicatori utili ad aver una visione completa della situazione operativa propria e quella dei pazienti. Sono presenti 4 sezioni: Allarmi, Agenda, Nuovi pazienti e Attività.

The screenshot displays the CGM TELEMEDICINE dashboard with the following components:

- Header:** CGM TELEMEDICINE logo, navigation tabs for ALLARMI (4919), CHAT (8), and ATTIVITÀ (385), and a main menu with DASHBOARD, HOME, ASSISTITI, OPERATORE, REFERTI, and ADMIN.
- ALLARMI (0):** A table with columns for DATA/ORA, ASSISTITO, MESSAGGIO, and STATO.
- NUOVI PAZIENTI (125):** A table listing patients with columns for PRODOTTI, ASSISTITO, DATA NASCITA, and NOTE. Visible entries include:


PRODOTTI	ASSISTITO	DATA NASCITA	NOTE
Prodotto 1, Prodotto 2, Prodotto 10, Prodotto 10	Diabete UC Paziente	22/08/2014	Prova
Prodotto 1, Prodotto 2, Prodotto 10, Prodotto 10	CAIO TIZIO	12/05/2016	
Prodotto 1, Prodotto 2, Prodotto 10, Prodotto 10	Rossi Mario 1	09/02/2019	
Prodotto 1	Rossi Mario 2	07/02/2019	
- ATTIVITÀ (385):** A table listing activities with columns for date/time, patient name, status, and type. Visible entries include:

DATE/TIME	PATIENTE	STATUS	TIPICO
01/07/2023 00:00:00	Test1 Marco	Da eseguire	Temperatura corporea
30/06/2023 21:00:00	PAZIENTE DEMO SUPPORT...	Da eseguire	Ossimetria
30/06/2023 20:45:00	PAZIENTE DEMO SUPPORT...	Da eseguire	Ossimetria
30/06/2023 20:30:00	SUPPORTO TEST	Da eseguire	Ossimetria
30/06/2023 20:15:00	PAZIENTE DEMO SUPPORT...	Da eseguire	Ossimetria
30/06/2023 20:00:00	Test1037 Test1037	Da eseguire	Ossimetria
30/06/2023 20:00:00	PAZIENTE DEMO SUPPORT...	Da eseguire	Ossimetria
30/06/2023 19:45:00	Prova Paziente Telemontitag...	Da eseguire	Temperatura corporea
30/06/2023 19:45:00	TIZIO CAO	Da eseguire	Ossimetria
30/06/2023 19:15:00	Prova Paziente Telemontitag...	Da eseguire	Ossimetria
30/06/2023 19:15:00	PROVA TEST	Da eseguire	Ossimetria
- Calendar View:** A weekly view for 30/06/2023 showing activity blocks for various patients and tests.
- Footer:** CGM CARE MAP logo and Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

Cliccando su un allarme, su un paziente o su un'attività si entra nel menù con il dettaglio del paziente.

Dashboard

Più a sinistra di Home è presente il menù Dashboard che comprende un altro tipo di visualizzazione degli stessi contenuti presenti in Home. È presente un grafico a torta che valuta lo stato dei vari pazienti e tre indicatori che selezionati portano alle Attività agli Allarmi ai Referti e all'Agenda. Questi indicatori mostrano il conto delle Attività e degli Allarmi dell'Operatore.

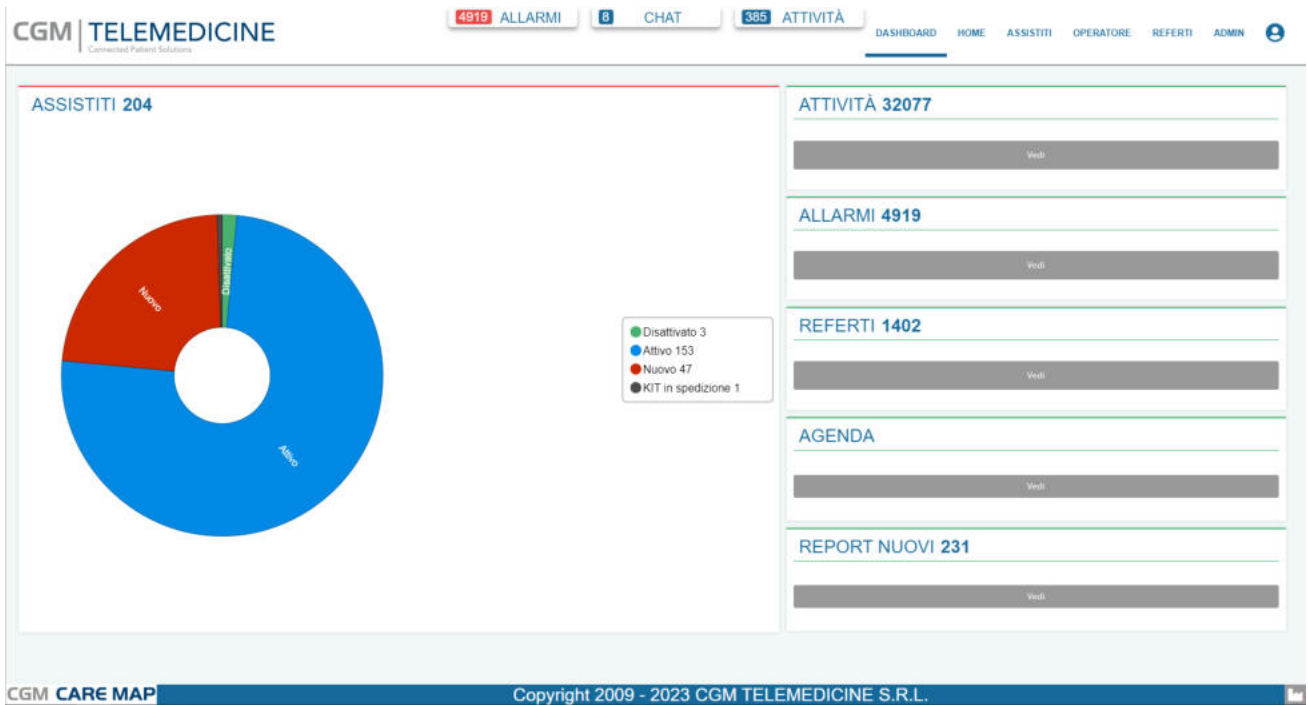

Cliccando sulla legenda del grafico a torta, per ogni tipo di paziente si passa alla visualizzazione dell'elenco degli assistiti selezionati nel menù Assistiti.

Cliccando sul pulsante Vedi della zona di Attività, Allarmi, Referti e di Agenda si passa alla visualizzazione delle attività, degli allarmi, dei referti e dell'agenda nelle rispettive sezioni sotto il menù Operatore.

Assistiti

La maschera assistiti è la prima che ci porta ad analizzare ed approfondire lo stato sociosanitario di ogni paziente.

La maschera contiene una griglia con l'elenco dei pazienti associati all'operatore loggato. È possibile visualizzare tutti i pazienti oppure solamente quelli nuovi.

Le colonne con i dati sui pazienti si distinguono in: Prodotto, Tipo Assistito, Codice, Assistito, Stato, Telefono, Mail, Patologie, Data di nascita e Note.

CGM | TELEMEDICINE
Connected Patient Solutions


DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE ADMIN

ASSISTITI TUTTI NUOVI

PRODOTTO	TIPO ASSISTITO	CODICE	ASSISTITO	DATA NASCITA	CODICE FISCALE	TEL.	MAIL	PATOLOGIE	NOTE	STATO
Telemonitoring		00000110	Demo 1 Paziente	21/05/1953	DMEPNT53H419H501L	1234567890	lpodesta@hsa.it	Iperensione essenziale non specificata. Gastrite acuta senza menzione di emorragia. Atriali generalizzata, sedi multiple. Anamnesi familiare di diabete mellito. Diabete mellito, tipo II (non insulinodipendente) (diabete dell'adulto) e non specificato, non definito se controllato, senza menzione di complicanze		Attivo
Service Demo 1	Telemonitoring	00000111	Demo 2 Paziente	16/12/1964	DMEPNT6471ED015L	1234567890		Iperensione essenziale non specificata. Ipocolesterolemia pura		Attivo
Telemonitoring		00000112	V A	07/03/1987		5350	3452457799	Iperensione essenziale non specificata		Attivo
Telemonitoring		00000113	C D	31/01/1961		264P	1234567890	Iperensione essenziale non specificata. Branche cronica neutrina, senza menzione di esacerbazione acuta		Attivo
Telemonitoring		00000114	Demo 5 Paziente	23/10/1980	DMEPNT68Q23L820N	1234567890		Iperensione essenziale non specificata. Ama estroscopo senza menzione di stato asmatico. Ginecchio valpi (acquistato). Altri disordini specificati del metabolismo degli aminoacidi. Carenza non specificata di vitamina D. Ipocolesterolemia pura		Attivo
Telemonitoring		00000115	Z N	23/10/1964		717X	1234567890	Iperensione essenziale non specificata		Attivo
Telemonitoring		00000116	Demo 7 Paziente	30/05/1969	DMEPNT69E70E897G	1234567890		Iperensione essenziale non specificata		Attivo
Telemonitoring		00000117	Demo 8 Paziente	26/01/1962	DMEPNT62A2D0612L	1234567890		Iperensione essenziale non specificata		Attivo
Telemonitoring		00000118	Demo 9 Paziente	25/11/1979	DMEPNT70S2D0643Z	1234567890		Iperensione essenziale non specificata		Attivo
Telemonitoring		00000119	Demo 10 Paziente	29/03/1964	DMEPNT64B8R219K	1234567890		Iperensione essenziale non specificata. Ipocolesterolemia pura		Attivo
Telemonitoring		00000120	Demo 11 Paziente	05/10/1963	DMEPNT63R05C195P	1234567890		Iperensione essenziale non specificata		Attivo
Telemonitoring		00000121	Demo 12 Paziente	11/05/1963	DMEPNT63H519H501M	1234567890		Iperensione essenziale non specificata		Disattivato
Telemonitoring		00000122	Demo 13 Paziente	04/05/1964	DMEPNT64H64A745F	1234567890		Iperensione essenziale non specificata		Attivo

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2020 H&S S.p.A. Mostro: 1 - 20 di 37

Per ogni colonna è possibile accedere alle funzioni di ordinamento e per i campi Stato e Data di nascita è presente anche un filtro cliccabile sulla testata della colonna. È anche possibile filtrare con una ricerca testuale con il tool centrale in alto.

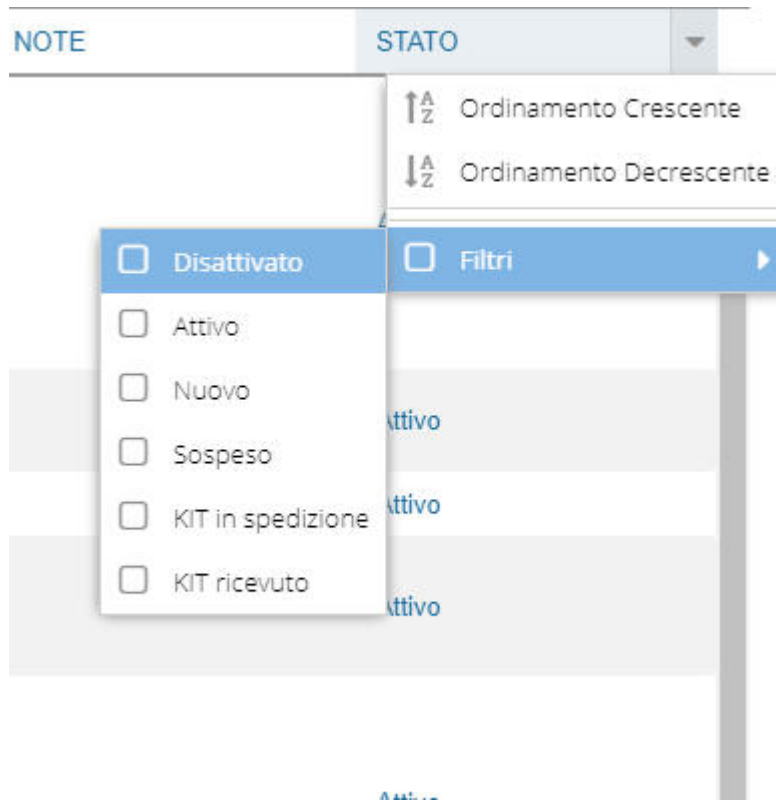

Cliccando su una riga della griglia si ha la possibilità di accedere al dettaglio dei dati dell'assistito.

Nuovo Assistito

Con il + in basso a destra nella schermata Assistiti è possibile inserire un nuovo assistito, compilando i campi necessari nella maschera. I campi sono divisi in 4 sezioni: Dati assistito, Informazioni di contatto, Ulteriori informazioni e Indirizzo. Al termine della compilazione di ogni pagina, è presente un tasto che manda alla pagina successiva. Nell'ultima pagina Indirizzo è presente il tasto Salva per inserire il nuovo paziente.

CGM | TELEMEDICINE Connected Patient Solutions 4919 ALLARMI 8 CHAT 385 ATTIVITÀ DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

AGGIUNGI ASSISTITO Compila tutti i campi con l'asterisco (*)

Dati assistito

Nome * Altezza

Cognome * Lingua

Codice Fiscale * Paziente straniero Nationalità

Eventuali validazioni sul formato del Codice Fiscale verranno effettuate al salvataggio finale

Tessera Sanitaria: Note:

Data di nascita *

Luogo di nascita

Sexo *

Vai a informazioni contatto

Informazioni di contatto

Ulteriori informazioni

Indirizzo

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

CGM | TELEMEDICINE Connected Patient Solutions 4919 ALLARMI 8 CHAT 385 ATTIVITÀ DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

AGGIUNGI ASSISTITO Compila tutti i campi con l'asterisco (*)

Dati assistito

Informazioni di contatto

Ulteriori informazioni

Indirizzo

Provincia *

Città

Località

Indirizzo *

Cap * CAP info

Telefono

Note

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

Esporta Excel/Esporta PDF

Tramite i pulsanti [Esporta in Excel] ed [Esporta in PDF] nel fondo della pagina, è possibile scaricare un file contenente la griglia visualizzata nell'istante del click sul pulsante. Nel documento sarà visualizzato un elenco con gli eventuali filtri applicati sulle colonne e nella ricerca global.

The screenshot displays the 'ASSISTITI' (Assisted) section of the CGM TELEMEDICINE system. At the top, there are navigation tabs for 'ALLARMI' (4919), 'CHAT' (8), and 'ATTIVITÀ' (385). The main header includes 'CGM TELEMEDICINE' and a search bar for 'Cerca assistito'. Below the header is a table with columns: PRODOTTO, TIPO ASSISTITO, CODICE, ASSISTITO, DATA NASCITA, CODICE FISCALE, TEL, MAIL, PATOLOGIE, NOTE, and STATO. The table lists several patients, including 'DemoDoc10 Paziente', 'Bianchi Andrea', and 'Burlo Paziente'. At the bottom of the table, there are two buttons: 'Esporta in Excel' and 'Esporta PDF', both highlighted with a red box. The footer of the interface shows 'CGM CARE MAP' and 'Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.'.

PRODOTTO	TIPO ASSISTITO	CODICE	ASSISTITO	DATA NASCITA	CODICE FISCALE	TEL	MAIL	PATOLOGIE	NOTE	STATO
Prodotto 2, Prodotto 10, Prodotto 10	Telemonitoraggio	00001305	DemoDoc10 Paziente	23/08/1990	DMDPNT01A01A010		M118'@aaa.it"			Nuovo
Prodotto 2, Prodotto 10, Prodotto 10	Telemonitoraggio	00001309	DemoDoc14 Paziente	27/08/1990	DMDPNT01A01A014		M158'@aaa.it"			Nuovo
Prodotto 2, Prodotto 10, Prodotto 10	Telemonitoraggio	00001313	DemoDoc18 Paziente	31/08/1990	DMDPNT01A01A018		M198'@aaa.it"			Nuovo
Telemonito...		00002337	Bianchi Andrea	21/02/1967	BLINDR67XXXXX	348123456	andrea.bianchi@cg...			Attivo
		00002338	Prova2 Prova	14/11/1965	CTTCLN65554F456L	1234567890	clao@hs.it			Attivo
		00002340	Paziente Nuovo	01/01/1950	UTNASS50A01A001L	1234567890				Attivo
		00002341	Prova Seconda	01/01/1994	UTACCS50A01A001L	1234567894				Attivo
		00002342	Paziente Paziente	01/01/1970	ASDASS50A01A001L	1235460794				Attivo
Prodotto 2, Prodotto 10, Prodotto 10, Prodotto 10, Test	Telemonitoraggio	00002343	Burlo Paziente	01/01/1990	RRNZR080A01G535L	1235467894	carolina.cattivel@cg...			Attivo
Massimal 2, Test attività tempale		00002344	Vinsmoke Burlo Sanj	02/01/1980	VNSSNJ80A42D150Q	9876543210	carolina.cattivel@cg...			Attivo
Sperimenta, Burlo Nascita		00002346	Condiviso 2 Nuovo Paziente	02/01/1980	VNSSNJ80A42D123L	1324567894				Attivo
		00002349	Organizzazione Prova	14/11/1965	CTTCLN65554F456L	1234567890				Attivo
		00002351	Test Luca	05/05/1925	Tmshh25d05866F	2222225555	a@ja.it			Attivo

Esporta in Excel

Esporta PDF

Dettagli assistito

DATI GENERALI

Dati anagrafici

Selezionando un paziente dalla Lista Assistiti, si apre la schermata con il dettaglio delle informazioni su tale paziente. La maschera sotto riportata contiene i dati anagrafici del paziente sotto la voce Dati generali. I dati sono modificabili da parte dell'operatore.

The screenshot displays the 'Dati generali' (General Data) section for a patient named 'Patient Demo 2'. The interface includes a top navigation bar with 'ALLARMI' (4674), 'CHAT' (4), and 'ATTIVITÀ' (433) indicators. A left sidebar contains a menu with options like 'Dati Anagrafici', 'Mappe', 'Prodotti', 'Kit', 'Annullamento', 'SCHEDE PAZIENTE', 'ALLARMI', 'CARTELLA PERSONALE', 'COMUNICAZIONE', and 'COMPLIANCE'. The main content area is divided into several sections:

- Header:** Patient name 'Patient Demo 2', Product, Code '00000054', State 'Attivo', Phone '+39475; +359585', Email 'supporto.hpi@hva.it', Pathologies, and Notes 'note'.
- Dati assistito:** Name 'Patient', Surname 'Demo 2', Fiscal Code 'UTNA5550481A021A', Sanitary Card '01380200800004617001', External Code '000001', Birth Date '29/05/2014', Birth Place 'Wiesbaden', Sex 'Maschio', Blood Type 'A/Rz', Rh 'ITS', and Citizenship 'CIR'.
- Informazioni di contatto:** Phone '+39475', Email 'mail', Cellphone '+359585', and a field for 'Altri contatti'.
- Ulteriori informazioni:** Assisted Condition 'Viva solo, non autosufficiente', Organization 'ASL Piacenza', Monitoring State 'Attivo', and Time Zone '(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bonn, Rome, Stockholm, Vienna'.
- Address:** 'Via Emilia Parmense 204 - 29122 Piacenza'.

La schermata è così suddivisa:

- A sinistra è presente il menù completo e l'indicazione di quale scheda stiamo esaminando;
- In alto sono presenti dei dati che rimangono fissi a nostra disposizione visuale come: il nome del paziente, il prodotto, il codice del paziente, lo stato di monitoraggio, i numeri di telefono, l'indirizzo e-mail, la data di nascita, le patologie e le note;
- Al centro a sinistra abbiamo i Dati assistito con i dati generali della persona. Il + in basso consente di aggiungere un nuovo indirizzo per il paziente;

Nuovo Indirizzo

Provincia:

Comune:

Località:

Indirizzo *

Cap *

Telefono:

Latitudine:

Longitudine:

Note:

imposta come prefinito

- Al centro a destra in alto abbiamo le Informazioni di contatto con le quali è possibile comunicare con il paziente. Il + serve per poter aggiungere un nuovo contatto. Nel caso in cui al paziente sia associato un CareGiver il contatto di quest'ultimo viene aggiunto automaticamente alla pagina. Sotto a queste, nella sezione "Ulteriori informazioni" vengono riportati dati relativi alla condizione dell'assistito, all'organizzazione di appartenenza, allo stato del monitoraggio e al fuso orario di riferimento per la programmazione degli eventi e la rilevazione delle misure.

Nuovo Contatto

Ruolo: Tipo contatto:

Nome * Cognome *

Data di nascita: Sesso:

Telefono: Cellulare:

Priorità: Scolarità:

Mail:

Occupazione:


C/P: Indirizzo:

Comune: CAP:

Note:

Mappa

Sotto il menù dei Dati generali è presente anche la Mappa che indica dove sono gli ospedali e le farmacie.

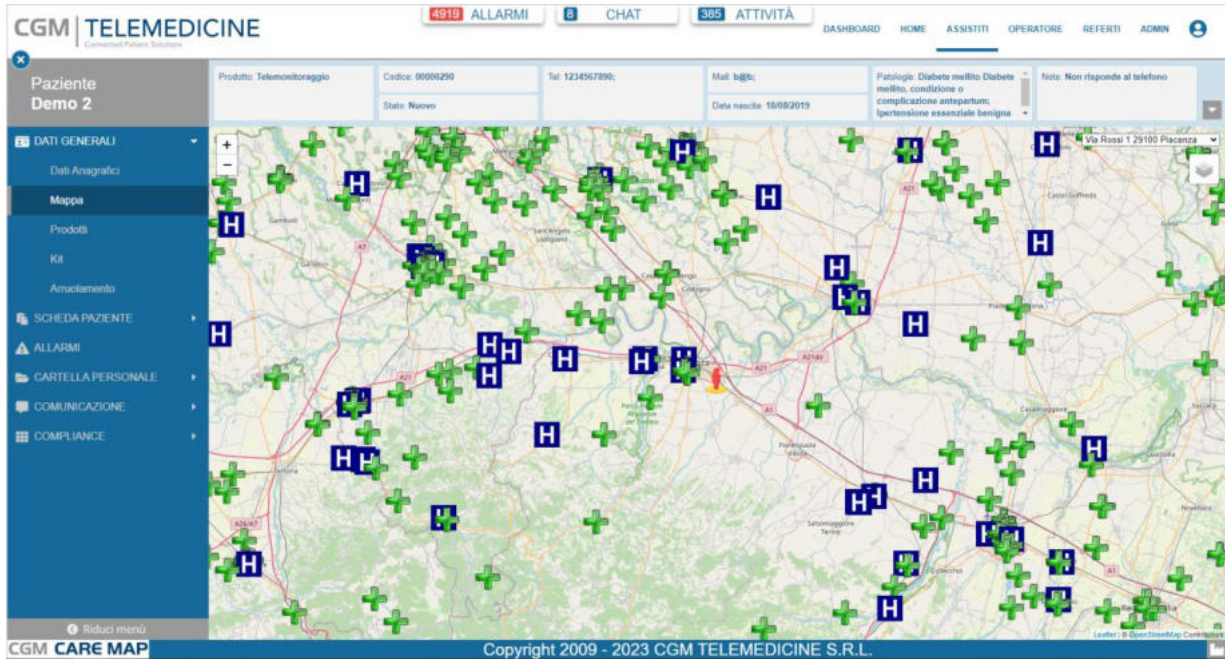

In alto sono sempre presenti i dati in perenne visualizzazione (ampliabili con la freccia verde) e a sinistra è visibile la voce del menù che stiamo esaminando.

Premendo il tasto a destra in alto sulla mappa è possibile visualizzare solamente le farmacie o solamente gli ospedali, oppure niente di tutto ciò.

In alto a destra è presente anche l'indirizzo visualizzato sulla mappa. È selezionabile un altro indirizzo se è presente nei dati del paziente.

Prodotti

Sotto il menù dei Dati generali sono presenti anche i Prodotti che indicano i prodotti e i tipi di monitoraggio del paziente.

The screenshot displays the CGM TELEMEDICINE interface for a patient named "Demo 2". The top navigation bar includes "ALLARMI" (4674), "CHAT" (4), and "ATTIVITÀ" (433). The main content area is divided into two sections: "Prodotti/Tipi assistito" and "Tipi monitoraggio".

Data inizio	Data fine	Prodotto	Tipo assistito	Ruolo
19 Marzo 2019			UsualCare Chronic	

Below the table, there are buttons for "Genera attività" and "Genera soglie". The "Tipi monitoraggio" section lists "Diabete" and "Percorso nascita controllo".

Cliccando sul pulsante "Genera attività" il sistema, sulla base del tipo monitoraggio selezionato per il paziente, genera le relative attività nel calendario.

Cliccando sul pulsante "Genera Soglie" il sistema, sulla base del tipo monitoraggio selezionato per il paziente, genera le relative soglie.

Con i pulsanti "+" in basso a destra nelle due sezioni è possibile aggiungere un nuovo prodotto e un nuovo tipo di monitoraggio.

This form is titled "Aggiungi prodotto/tipo assistito". It contains the following fields:

- Prodotto: (dropdown menu)
- Tipo assistito: (dropdown menu)
- Data inizio: (calendar icon)
- Data fine: (calendar icon)

At the bottom right, there are "Salva" and "Cancella" buttons.


This form is titled "Aggiungi tipo monitoraggio". It contains the following field:

- Tipo monitoraggio: (dropdown menu)

At the bottom right, there are "Salva" and "Cancella" buttons.

Cliccando sul pulsante “Invio credenziali app” si inviano al paziente tre mail che contengono il link al il sito dal quale scaricare l’app e le credenziali (una mail per l’utente ed un’altra per la password) che servono per il suo utilizzo.

Dalla pagina che si apre seguendo il link è possibile scegliere se scaricare l’app per Android o per iOS.

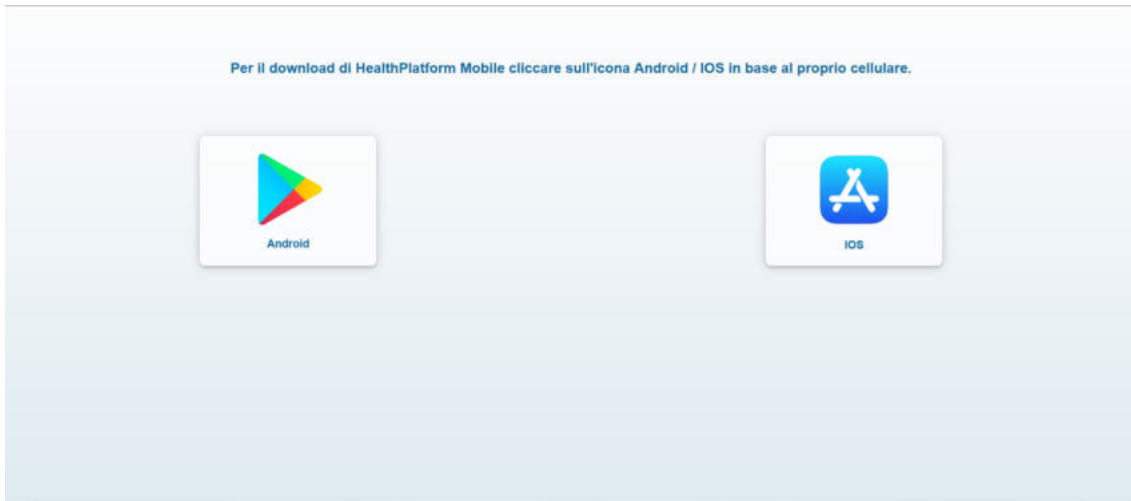

Kit

Aprendo il dettaglio paziente, nella maschera KIT è possibile visionare tutto l'elenco dei KIT e dei dispositivi di cui il paziente è in possesso.

Nella parte superiore sono elencati i kit di Telemedicina; ogni riga comprende un Kit, caratterizzato da codice kit, seriale del kit, lo stato del kit. Inoltre, tramite il pulsante “x” c'è la possibilità di dissociare il kit.

Aprendo la riga del kit attraverso il + a sinistra di ogni riga, si accede al dettaglio dei dispositivi di cui è composto. Ogni dispositivo è caratterizzato da ID, nome, o stato, tipo.

Per ogni dispositivo è anche possibile sospendere (o riprendere) il suo utilizzo, oltre a poter visualizzare il PDM e le soglie del dispositivo.

Con il + in basso a destra è possibile assegnare al paziente un nuovo kit tra quelli disponibili.

Nella parte inferiore è visualizzata la lista “Altri dispositivi” in cui sono elencati i dispositivi assegnati all’assistito ma che non rientrano in un kit. Con il + in basso a destra è possibile assegnare al paziente un dispositivo già censito oppure inserirne uno nuovo.

Arruolamento

L’arruolamento contiene le caratteristiche del paziente raccolte durante l’intervista iniziale.

Per alcuni progetti, soprattutto in ambito cronicità, i criteri di arruolamento sono importanti per verificare se il paziente è in possesso delle caratteristiche per fare parte del piano di monitoraggio.

La schermata è divisa in due parti, in alto è presente la verifica criteri di inclusione di un assistito con il consenso alla privacy, il consenso al servizio, le date di inizio e fine, lo stato, la condizione e le note.

Dopo aver inserito tutti questi dati è possibile salvare l’arruolamento del paziente. I possibili stati di un assistito sono: Arruolabile, Arruolato, Uscito da arruolamento, Non arruolato, Stand by. Solamente se il paziente ha lo stato Arruolato è possibile attivare il suo PAI.

La data inizio e fine monitoraggio sono fondamentali per la creazione dell’agenda delle misure che il paziente deve eseguire.

Il pulsante [Consensi App] permette di visualizzare i consensi che il paziente ha espresso tramite l’utilizzo dell’App CGM CARE MAP Mobile, mentre il pulsante [Consensi Dinamici] permette di visualizzare e modificare i consensi espressi dal paziente tramite gli altri canali; in questo caso è possibile modificarne lo stato e la data per riflettere nel sistema lo stato corretto dei consensi.

Consensi App

Data	Stato	Descrizione
01/12/2022	Non Pervenuto	test
01/12/2022	Non Pervenuto	Termini e condizioni

« < | Pagina 1 di 1 | > » | ↻

Mostrati 1 - 2 di 2

Gestione consensi dinamici

Data	Descrizione	Stato
16/11/2022	GDPR	<input checked="" type="checkbox"/>
01/12/2022	MDS	<input type="checkbox"/>
01/12/2022	COUNSELLING	<input type="checkbox"/>
01/12/2022	TEST DBS	<input type="checkbox"/>
01/12/2022	Smaltimento	<input type="checkbox"/>

« < | Pagina 1 di 1 | > » | ↻

Mostrati 1 - 5 di 5

In basso è possibile caricare dei documenti (tramite pulsante “+” in basso a destra), su cui viene tracciata la data e ora di creazione, il nome del documento e l’utente che ha effettuato l’upload.

Aggiungi Documento

Nome Documento *

Allegato: * Scegli...



Salva Chiudi

SCHEDA PAZIENTE

La seconda sezione del menù dopo Dati generali è Scheda paziente.

Parametri

Il primo sottomenù è quello che comprende i Parametri del paziente.

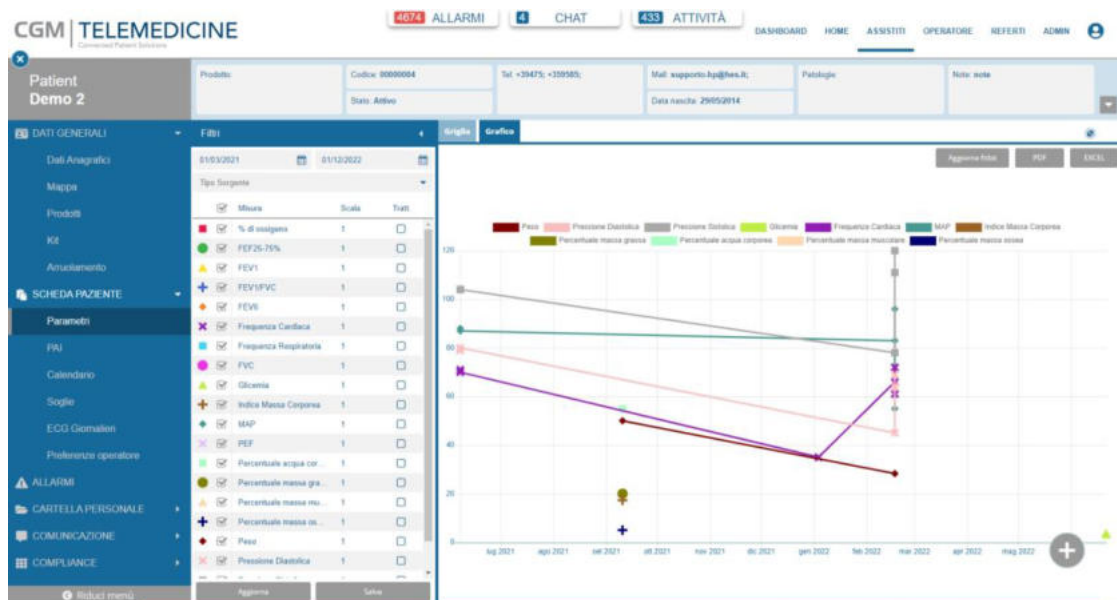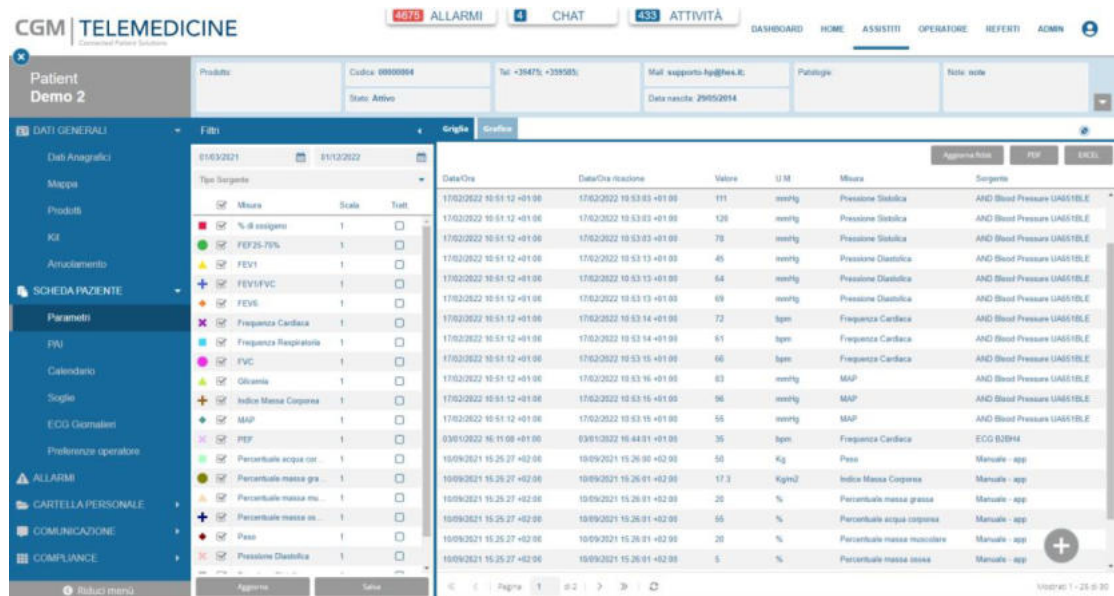


La schermata è divisa in due parti: a sinistra sono presenti i filtri applicabili come data di inizio e di fine, tipo sorgente e le varie tipologie di misure; a destra è presente la griglia o il grafico visualizzato seguendo i filtri applicati.

È possibile filtrare le tipologie di misure, come ad esempio: % di ossigeno, BADL, frequenza cardiaca, glicemia, glicemia test, indice massa corporea, MAP, peso, pressione diastolica, pressione sistolica.

Se al kit di telemonitoraggio è collegato anche il dispositivo fitbit, nella sezione parametri è possibile visualizzare le misure giornaliere registrate dal dispositivo, ad esempio distanza percorsa, calorie bruciate, ecc...

Le misure provenienti dal dispositivo FitBit sono riportate con un nome che inizia con 'FitBit' e fanno riferimento alle registrazioni del giorno precedente.

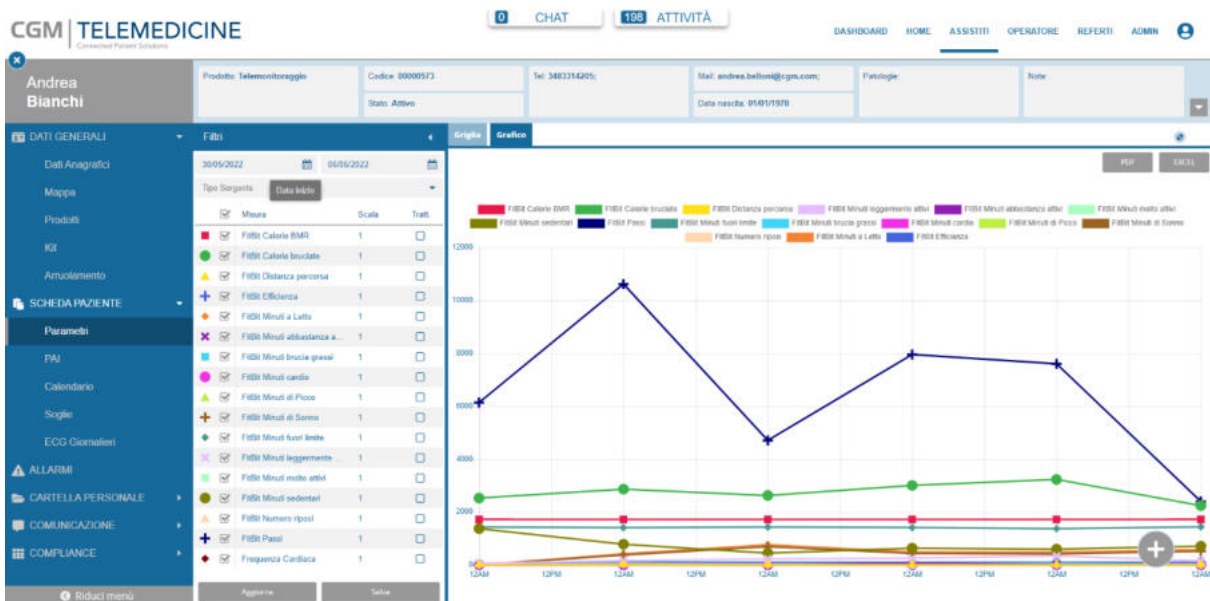

Nel caso in cui i parametri Fitbit non siano presenti, ad esempio per un problema nella fase di sincronizzazione con il server Fitbit, è possibile premere [Aggiorna fitbit] per richiedere al portale una nuova sincronizzazione, specificando la data e la tipologia di dati da richiedere:

Aggiorna fitbit

Seleziona la data di riferimento per la richiesta di aggiornamento dati al server Fitbit

01/12/2022

Seleziona la tipologia di dati da aggiornare

Sonno:


Attività:

Frequenza cardiaca:

Aggiorna
Chiudi

Selezionando un parametro dalla griglia o dal grafico è poi possibile visualizzare i suoi dettagli e, nel caso, eliminarlo. I parametri rossi o gialli (con allarme) hanno nel dettaglio anche una sezione Allarme che descrive il dettaglio dell'allarme riscontrato.

Con il pulsante in alto a sinistra si può allargare il grafico o la griglia a schermo intero e con i due pulsanti sotto è possibile salvare i dati caricati in un documento PDF o Excel.

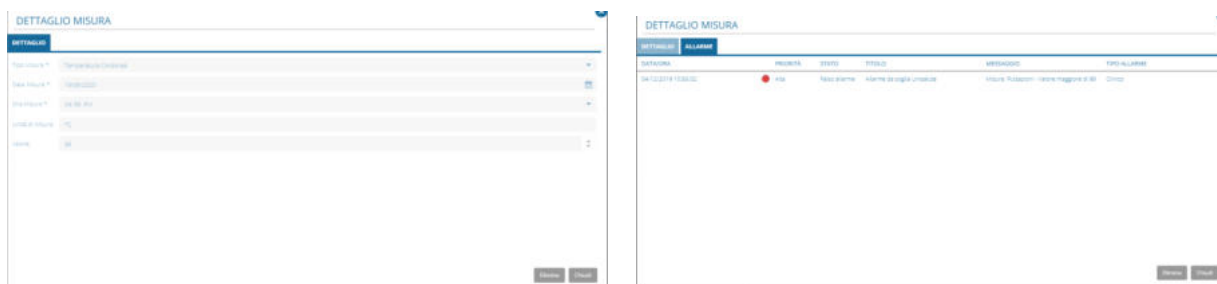

Con il + in basso a destra è possibile aggiungere una nuova misura alla griglia o al grafico.

PAI

Ogni operatore mediante la maschera PAI può impostare un Piano Assistenziale Individuale sul paziente, in base alle patologie del paziente potrà selezionare uno o più PDTA e pianificare le attività nel calendario.

La schermata è divisa in due parti, a sinistra sono presenti i dati PAI (ampliato sopra), il PDTA (ampliato sotto), le autorizzazioni e le misure. Nel PAI sono presenti i tasti Attiva PAI o Chiudi PAI, Lista PAI e crea nuova bozza con cui poter attivare un PAI, selezionare un nuovo PAI dalla lista e creare una bozza.

Cliccando sul triangolo in alto a destra è possibile passare dalla visualizzazione grafica a quella testuale delle attività.

Con questi dati è possibile compilare il calendario annuale a destra (trascinando dentro i dati), che mostra appunto tutti gli eventi avuti dal paziente durante l'anno selezionato.

Nella parte in basso a sinistra è possibile visualizzare le prestazioni (come sopra) oppure le misure (come sotto). Entrambe sono trascinabili nel Calendario a destra per inserire nel PAI del paziente.

Prestazione	Frequenza
BATTERI POTERE BATT...	Ogni 12
ANTICORPI ANTI INSUL...	Ogni 12
MICETI ESAME COLTUR...	Ogni 12
IGG SOTTOCLASSE 3	Ogni 12
ACTINOMICETI ESAME...	Ogni 12
C PEPTIDE. DOSAGGI S...	Ogni 12
ALFA 2 ANTIPLASMINA	Ogni 12
FERRO [DU]	Ogni 12
RX POLSO DX - CONTR...	Ogni 36
TEST DI KLEIHAUER (RI...	Ogni 12
CAMPYLOBACTER ESA...	Ogni 12

Misure	Frequenza
Glucosio	
Pressione arteriosa	
Ossimetria	
Pesa	
Temperatura corporea	
Frag. Htop. a Cardio	
Ossimetria	

Cliccando sul tasto “+” nella scheda PDTA è possibile aggiungere un PDTA alla pianificazione impostando la data di inizio.

PDTA

Selezione PDTA *: PDTA BPCO

Data inizio *: 01/07/2020

Attività del PDTA

Inclusa	Tipo attività	Titolo	Frequenza
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestazione	FARMACI ANTIARITMICI - PROCAINAMIDE	Ogni 12
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestazione	FRATTURE, DISTORSIONI, STIRAMENTI E LUSSAZIONI DI AVAMBRACCIO, M.L.	Ogni 12
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestazione	FERRO [DU]	Ogni 12
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestazione	GALATTOSIO [S]	Ogni 12
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestazione	GASTRINA [S]	Ogni 6
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestazione	ESTRONE (E1)	Ogni 12
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestazione	ESTRIOLO NON CONIUGATO	Ogni 12
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestazione	COLESTEROLO LDL	Ogni 12

Salva Chiudi

Cliccando sul pulsante a destra di ogni riga è possibile modificare la singola schedulazione di ogni attività

PDTA

Schedulazione

Tipo pianificazione *: Ricorrente

Tipo frequenza *: Mensile

Ogni N mesi *: 12

Salva Chiudi

Quando il PAI è in bozza le attività non sono visibili sul calendario fino a che non si viene attivato.

Calendario

In questa schermata è presente il calendario del paziente, compilato con le attività che ha svolto o dovrà svolgere. La visualizzazione può essere giornaliera, settimanale o mensile.

The screenshot displays the 'CGM TELEMEDICINE' interface for a patient named 'Demo 2'. At the top, there are notification counts: 4675 ALLARMI, 1 CHAT, and 433 ATTIVITÀ. The patient's details include: Prodotto, Codice: 00000004, Tel: +39475 +359585, Mail: supporto.fg@hes.it, Patologie, Note: note, Stato: Attivo, and Data nascita: 29/05/2014. The main area is a calendar grid showing 'Therapeutic reminder' events for each day from Sunday to Saturday. A sidebar on the left lists navigation options: DATI GENERALI (Dati Anagrafici, Mappa, Prodotti, Kit, Annullamento), SCHEDE PAZIENTE (Parametri, PAI, Calendario, Soglie, ECG Giornalen, Preferenze operatore), ALLARMI, CARTELLA PERSONALE, COMUNICAZIONE, and COMPLIANCE. A '+ Add Event' button is visible in the bottom right corner of the calendar grid.

Con il + in basso a destra è possibile aggiungere un evento al calendario inserendo l'attività, la pianificazione, il luogo e visualizzando lo storico, oltre a poter inserire le note operative e reminder da visualizzare su APP. Cliccando su un'attività è possibile modificarne i dati allo stesso modo.

This screenshot shows the 'Dettaglio attività ID 115637' form. It includes tabs for 'Attività', 'Pianificazione', 'Stato', 'Note operative', 'Reminders APP', and 'Luogo'. The form fields are:

- Nome: JAMES BROWN
- Cognome: Thompson
- Via: Via Roma
- CAP: 00186
- Città: ROMA
- Descrizione: [Empty]
- Zona: [Dropdown menu]
- Stato: [Dropdown menu]
- Indirizzo mail: [Input field]
- Verifica sulla APP: [Checkbox]
- Note: [Text area]

This screenshot shows the 'Dettaglio attività ID 115637' form with different data:



- Nome: JAMES BROWN
- Cognome: Thompson
- Via: Via Roma
- CAP: 00186
- Città: ROMA
- Descrizione: [Empty]
- Zona: [Dropdown menu]
- Stato: [Dropdown menu]
- Indirizzo mail: [Input field]
- Verifica sulla APP: [Checkbox]
- Note: [Text area]

This screenshot shows the 'Dettaglio attività ID 115637' form with a table of activity history:

DATA INIZIO	DATA FINE	TITOLO	DESCRIZIONE	Operatore	STATO	NDG	DATA MODIFICA
29/11/2022	12:46	PAZIENZA	Problemi Alimentari	Stefano	OK	11/2022 10:10	
29/11/2022	12:48	PAZIENZA	APPUNT	Stefano	OK	11/2022 12:48	

This screenshot shows the 'Dettaglio attività ID 115637' form with a table of activity history:

DATA	TITOLO	DESCRIZIONE	NOTE	OPERATORE
29/11/2022	10:00	10:00	10:00	10:00

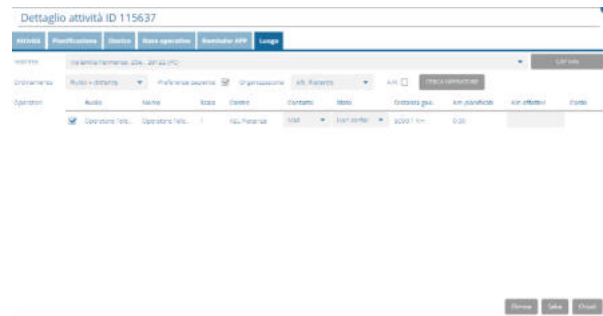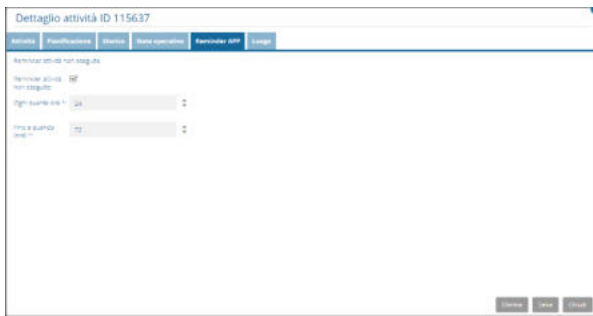

La pianificazione di un'attività può essere ricorrente giornalmente, settimanalmente o mensilmente. È possibile inviare una notifica al paziente per ogni ricorrenza dell'attività o solo in occasione della prima ricorrenza.

Tra le possibili attività vi sono:

- Rilevazione misura
- Promemoria terapeutico
- Questionario/Questionario App
- Videoconsulto
- Polisonnografia
- Visita medica

Rilevazione Misura

Tramite queste attività viene notificato al paziente quali misure rilevare (es. pressione, peso, ...) e in quali giorni ed orari; le notifiche sono visibili all'interno dell'app.

Queste attività sono generate automaticamente dal piano di monitoraggio definito per il paziente ma agendo sul calendario è possibile inserirne altre manualmente e modificare quelle esistenti.

Pro-Memoria terapeutico

Tramite queste attività vengono gestite le terapie sui vassoi contenenti i farmaci; la notifica generata dall'attività si traduce in un promemoria contenente la terapia che deve essere assunta.

Queste attività sono generate automaticamente dall'impostazione delle terapie e dalla preparazione dei vassoi ma agendo sul calendario è possibile inserirne altre manualmente e modificare quelle esistenti.

Questionari

Tramite queste attività viene programmata la compilazione periodica di questionari sul portale.

Questionari App

Tramite queste attività viene programmata la compilazione periodica di questionari all'interno dell'app.

Videoconsulto

Per gli utenti abilitati è possibile creare un'attività di tipo "Videoconsulto" con la quale è possibile programmare una videochiamata con un paziente.



Al paziente arriverà una notifica via mail/sms con il link per accedere alla videochiamata sul portale esterno CGM ELVI, mentre l'operatore potrà accedervi direttamente dal dettaglio dell'attività premendo il pulsante "Avvia video".

Dettaglio attività

Attività Pianificazione Storico

Tipo Attività: Videoconsulto

Operatore *: Operatore EMI

Descrizione:

Orario *: 11:30

Stato: Da eseguire

Invia su Hub:

Note:

Avvia video Elimina Salva Chiudi

L'operatore, inoltre, tramite l'icona dell'utente può accedere direttamente al portale esterno per la videochiamata.



Al termine dell'attività verrà creato un esame di videoconsulto.

Soglie

Nella schermata soglie è presente l'elenco delle soglie del paziente. Per ogni soglia è presente il tipo di soglia, il tipo di misura, la priorità dell'allarme (quattro livelli: bassa, media, alta, altissima), il messaggio dell'allarme e i possibili valori 1, 2 e 3.

CGM | TELEMEDICINE 4675 ALLARMI | 4 CHAT | 433 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

Paziente Diabete UC


Prodotto: Prodotto 1; Prodotto 2; Prodotto 10; Prodotto 10
 Codice: 0000018
 Tel: _____
 Mail: rrepetti@hes.it
 Patologie: _____
 Note Prova: _____
 Stato: KIT in spedizione
 Data nascita: 22/08/2014

TIPO SOGLIA	TIPO MISURA	PRIORITÀ ALLA...	MESSAGGIO ALLARME	VALORE 1	VALORE 2	VALORE 3	SORGENTE
Valore maggiore di XX	Pressione Diastolica	Alta	Pressione Diastolica molto alta	80			Operatore
Valore maggiore di XX	Pressione Sistolica	Alta	Pressione Sistolica molto alta	130			Operatore
Valore inferiore di XX(%) rispetto a N'Misure precedenti	Peso	Alta	Decremento di peso anomalo		3		Operatore
Valore superiore di XX(%) rispetto a N'Misure precedenti	Peso	Alta	Incremento di peso anomalo		3		Operatore
Valore maggiore di XX	Glicemia	Alta	I livello iperglicemico	7.78			Operatore
Valore minore di XX	Glicemia	Alta	Livello ipoglicemico	3.61			Operatore
8 N° Valori è minore di XX negli ultimi YY 09	Pressione Diastolica	Bassa	Compliance Misura pressione non rispettata				Operatore
8 N° Valori è minore di XX negli ultimi YY 09	Peso	Bassa	Compliance Misura peso non rispettata				Operatore
8 N° Valori è minore di XX negli ultimi YY 09	Glicemia	Bassa	Compliance Misura glicemia non rispettata				Operatore

Mostrati 1 - 9 di 9

Premendo ogni soglia è possibile vederne i dettagli e i dettagli dell'allarme. Premendo il + in basso a destra è possibile inserire una nuova soglia inserendo i dettagli della soglia, degli allarmi e visualizzando lo storico e la validità.

La validità della soglia permette di definire i giorni della settimana e le fasce orarie per cui la soglia è valida.

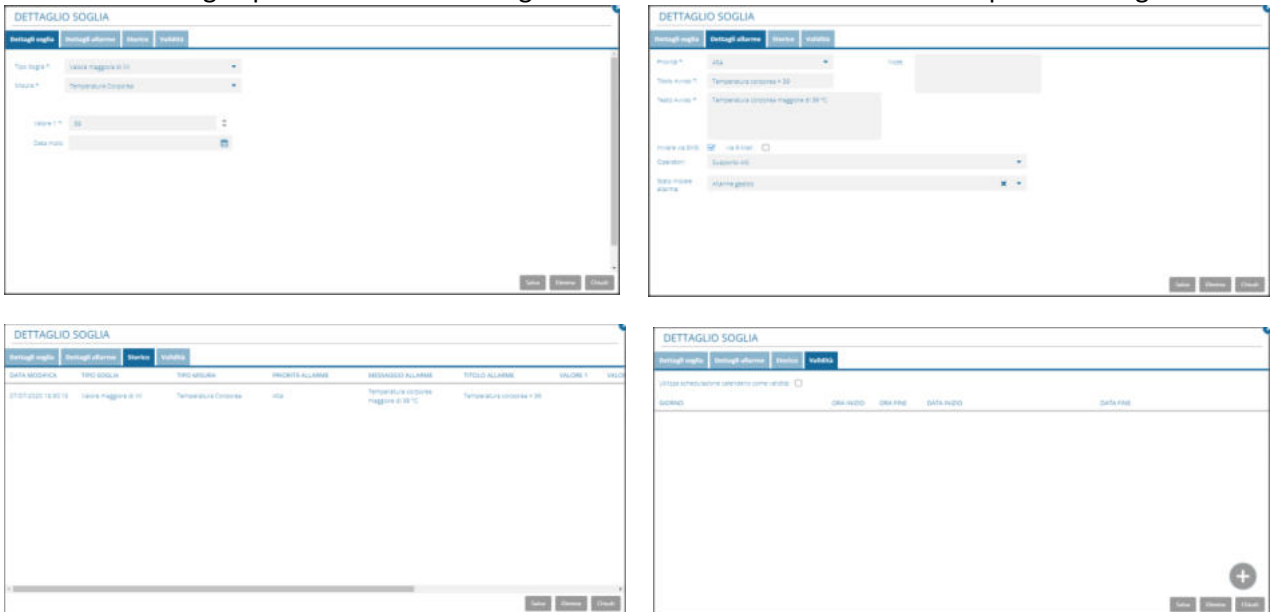

Quindi, se specificata, gli allarmi scatteranno solo per le misure prese nei giorni e nelle fasce orarie indicate. In alternativa, attivando il flag "Utilizza schedulazione calendario come validità", è possibile far scattare gli allarmi solo se per il giorno in cui è stata presa la misura esiste in calendario un'attività di rilevazione relativa alla stessa tipologia (ad esempio Ossimetria).

È possibile definire le soglie per ciascuna di queste tipologie:

- Valore minore di XX
- Valore maggiore di XX
- N°Valori consecutivi maggiori di XX
- N°Valori consecutivi minori di XX
- N°Valori non consecutivi in XX gg. maggiori di XX
- N°Valori non consecutivi in XX gg. minori di XX
- Valore compreso fra XX e YY
- N°Valori consecutivi compresi fra XX e YY
- N°Valori non consecutive in XX gg. comprese fra XX e YY
- Il N° Valori è minore di XX negli ultimi YY gg.
- N°Valori consecutivi in XX gg. compresi fra XX e YY
- N° Valori consecutivi in XX gg. minori di XX
- N° Valori consecutivi in XX gg. maggiori di XX
- Valore inferiore di XX(%) rispetto al precedente
- Valore superiore di XX(%) rispetto al precedente
- Il numero di Valori è maggiore di XX negli ultimi YY gg.
- Valore superiore di XX(%) rispetto a YY gg fa

- Valore superiore di XX rispetto a YY gg fa
- Variazione tra N°Misure compresa tra Valore1 e Valore2
- Variazione tra N°Misure maggiore di Valore1
- Valore medio maggiore di Valore1 ogni XX minuti
- Valore medio minore di Valore1 ogni XX minuti
- Valore medio compreso tra Valore1 e Valore2 ogni XX minuti
- Valore inferiore di XX(%) rispetto a YY gg fa
- Valore inferiore di XX rispetto a YY gg fa
- Media YY gg fa minore di Valore1
- Media YY gg fa maggiore di Valore1
- Media YY gg fa compresa tra Valore1 e Valore2
- Giornate con allarme consecutive entro YY gg da Soglie di riferimento maggiori di Valore1
- Più di <Valore1> giornate, con allarmi consecutivi da una o più Soglie di riferimento (in OR) entro <YY> gg
- Più di <Valore1> giornate, con allarmi consecutivi da tutte le Soglie di riferimento (in AND) entro <YY> gg
- Soglie combinate in AND
- Soglie combinate in OR

ECG Giornalieri

Nella schermata ECG Giornalieri sono presenti inizialmente 3 tab

1. **TAB ECG:** Appena aperto è presente la lista dei giorni in cui sono presenti eventi e tra parentesi il numero degli eventi inseriti nel report.

The screenshot displays the CGM TELEMEDICINE interface. At the top, there are status indicators for '4675 ALLARMI', '4 CHAT', and '433 ATTIVITÀ'. The patient profile for 'Patient Demo 2' is visible, including fields for 'Prodotto', 'Codice', 'Tel.', 'Mail', 'Patologie', and 'Note note'. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'DATI GENERALI', 'SCHEDA PAZIENTE', 'ALLARMI', 'CARTELLA PERSONALE', 'COMUNICAZIONE', and 'COMPLIANCE'. The main content area shows the 'ECG' tab selected, with a sub-tab 'ECG GIORNALIERI'. Below this, there is a table titled 'Data Eventi' with columns for 'Data' and 'Numero Eventi'. The table contains one entry for the date '07/06/2028' with '13 (2)' events.

Data	Numero Eventi
07/06/2028	13 (2)

Selezionando una o più giornate e dando un click sul tasto “Genera file holter” viene generato un esame di Holter ECG che viene messo a disposizione nella sezione “Cartella personale / esami”

NOTA: gli ECG vengono archiviati dopo 30 giorni (60 se contengono eventi non programmati).

Se per il paziente che si sta visualizzando esistono ECG archiviati viene visualizzato il tab Archivio accedendo al quale si possono ripristinare gli ECG, che vengono resi disponibili il giorno successivo alla richiesta di ripristino. Gli ECG ripristinati rimarranno disponibili per almeno una settimana prima di essere archiviati di nuovo.

CGM TELEMEDICINE
Connected Patient Solutions

4675 ALLARMI | CHAT | 433 ATTIVITÀ | DASHBOARD | HOME | ASSISTITI | OPERATORE | REFERITI | ADMIN

Patient Demo 2

Prodotto: Codice: 00000004 | Tel: +39475; +359585; | Mail: supporto.fcg@hcs.it; | Patologia: | Note: note
Stato: Attivo | Data nascita: 29/05/2014

ECG | ARCHIVIO | REPORT | CONFIG ECG HI


Archivio

<input type="checkbox"/>	Date	Tipo archiviazione	Stato archiviazione	Note
<input type="checkbox"/>	15/02/2022	Totale	Archiviato	
<input type="checkbox"/>	03/01/2022	Totale	Archiviato	
<input type="checkbox"/>	01/02/2021	Totale	Archiviato	
<input type="checkbox"/>	19/09/2020	Totale	Archiviato	
<input type="checkbox"/>	07/09/2020	Totale	Archiviato	
<input type="checkbox"/>	06/08/2020	Totale	Archiviato	

Restituisci | Annulla ripristino

Reduce menu | Pagina 1 di 1 | Mostrati 1 - 6 di 6

Cliccando su un giorno si apre il dettaglio di esso che visualizza in un grafico diviso per ore del giorno partendo dalle 00 e finendo alle 24 del giorno successivo l'andamento della frequenza cardiaca e il livello di attività, nella griglia sotto sono presenti tutti gli eventi trovati suddivisi per ora. Nel caso in cui sia stata abilitata l'esportazione dei dati in formato ISHNE nella sezione di configurazione ECG HI, in questa schermata compaiono i pulsanti che servono a preparare il file e a scaricarlo.

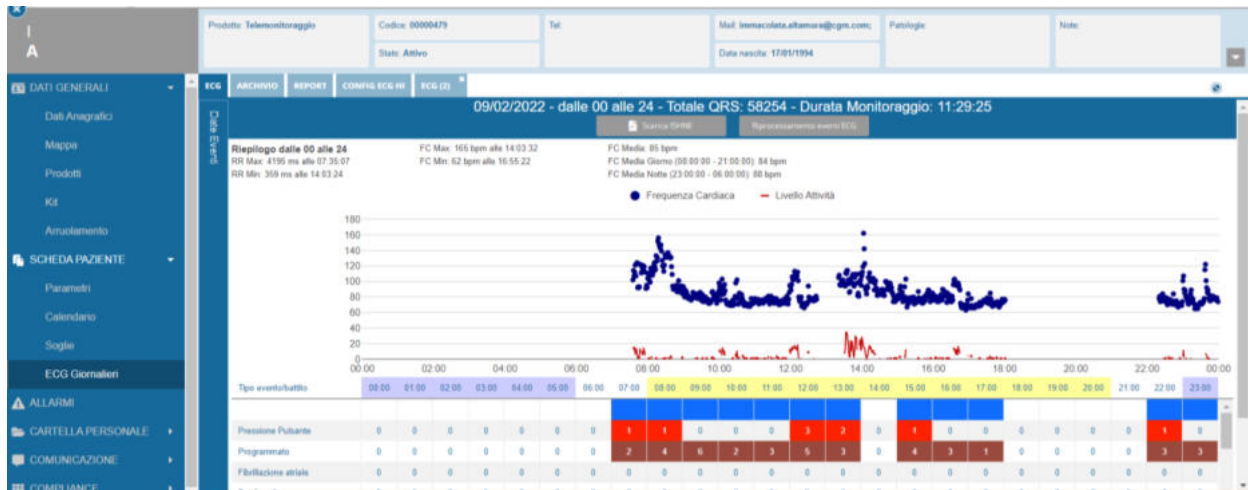

Espandendo il pannello "Eventi" è possibile vedere una lista degli eventi giornalieri che può essere filtrata utilizzando i flag mostrati sopra.

Data	Ora	Durata	Tipo	Seriale	Note
09/02/2022	23:45:44	09:59:990	Programmato		
09/02/2022	23:40:50	00:00:500	Battito ventricolare isolato		
09/02/2022	23:40:07	00:02:640	Rumore		
09/02/2022	23:38:46	00:01:913	Rumore		
09/02/2022	23:37:14	00:02:226	Rumore		
09/02/2022	23:36:59	00:02:990	Rumore		
09/02/2022	23:35:44	09:59:990	Programmato		
09/02/2022	23:06:25	00:12:726	Run sopravventricolare		

Cliccando su un determinato evento è possibile aprire il dettaglio di esso con la visualizzazione delle 3 derivazioni nell'arco temporale di 20 secondi. Partendo da sinistra, i pulsanti che appaiono sopra il grafico

consentono di visualizzare i righelli orizzontali e verticali, di aggiungere un nuovo evento, di passare all'evento precedente, di spostare la visualizzazione del grafico indietro o avanti di 5/10 secondi, di passare all'evento successivo, di visualizzare altre misure o di aggiornare la visualizzazione dei grafici.



Dando un click su uno dei pallini neri (o grigi, se l'evento è stato contrassegnato come errore) è possibile marcare l'evento come errore, contrassegnarlo per l'inclusione nel report, cambiare la tipologia di evento o aggiungere una descrizione.

Dettagli evento - Battito ventricolare isolato

Ora inizio *: 12:32:34

Ora fine *: 12:32:35


Descrizione:

Informazioni da algoritmo:

Utilizza per il report: Imposta come errore:

Cambia tipo evento Salva Chiudi

È possibile anche visualizzare un riepilogo degli eventi visualizzati dando un click sull'icona con il cerchio azzurro rappresentativo degli eventi dell'intera ora oppure dell'intera giornata.

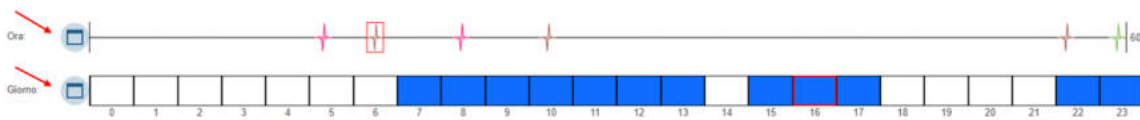


Cliccando sulla vista "ora" è possibile vedere la lista di tutti gli eventi dell'ora e le relative preview.

ORA EVENTO	TIPO EVENTO	Anteprima	REPORT	ERRORE	DETTAGLIO
12:30:00	Programato		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yes
12:30:59	Rumore		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yes
12:31:59	Rumore		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yes
12:32:35	Battito ventricolare isolato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yes


Da questa schermata è possibile cambiare la derivazione da visualizzare, caricare le anteprime di tutti gli eventi o solo di alcuni di essi, filtrare per tipologia di eventi, cambiare la tipologia di evento o impostare un evento come errore, inserire gli eventi di interesse nel report.

L'aggiunta di un nuovo evento si effettua dando un click sul terzo pulsante da sinistra nella pagina di visualizzazione del grafico, poi dandone un altro nel punto del grafico in cui si intende inserire il nuovo evento; si aprirà il seguente pannello:

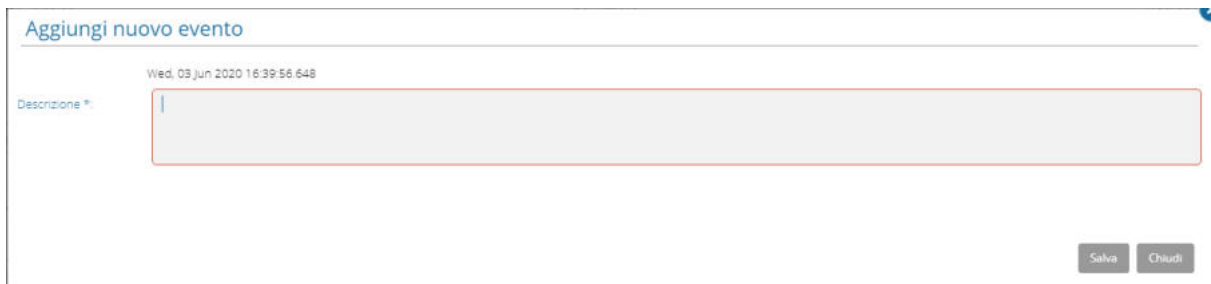

Gli eventi inseriti manualmente vengono di default marcati per l'utilizzo nel report.

2. **TAB Report:** In questo tab è possibile vedere la lista di eventi marcati come "Usa nel Report" e selezionare quelli da inserire nel report corrente, una volta selezionati è possibile generare il documento cliccando sul pulsante "Genera Report" in alto a destra, una volta generato sarà creato automaticamente un nuovo esame di tipo ECG 1-3 Derivazioni visualizzabile in Cartella Personale > Esami

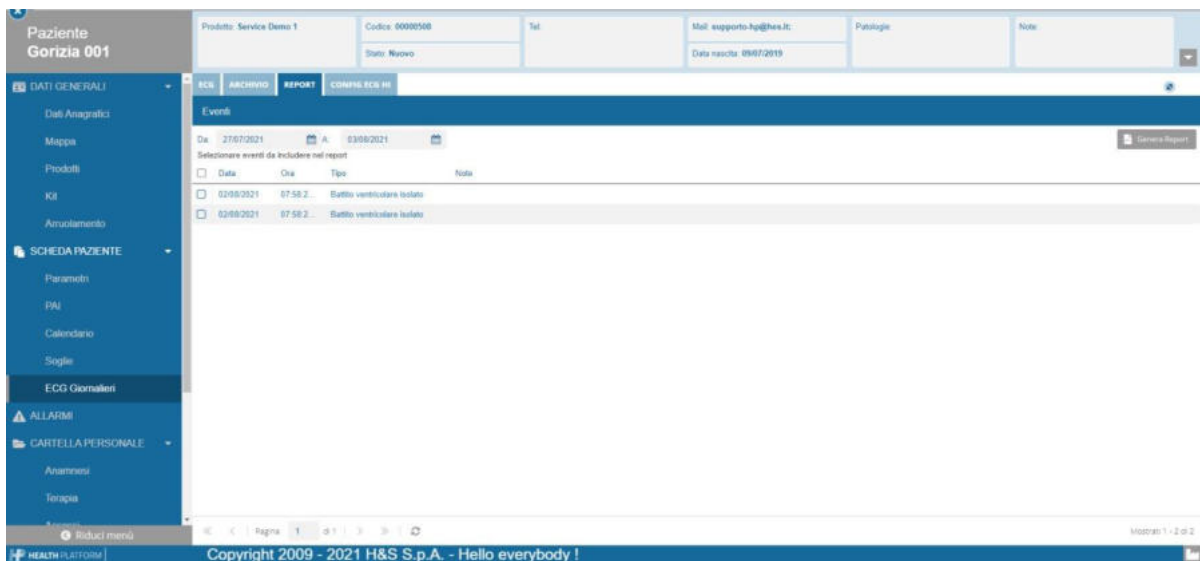


3. **TAB Config ECG HI:** In questo tab è possibile configurare le impostazioni generali del dispositivo, la tipologia di monitoraggio da applicare e i parametri da utilizzare per l'analisi dell'ECG. È anche possibile definire la durata della sessione di monitoraggio e la modalità di processamento del dato.

Inizialmente è necessario scegliere il tipo di monitoraggio che si desidera effettuare per il paziente, scegliendo tra 4 tipologie: Teleholter, Telemonitoring, Tele ECG e Configurazione libera.


Per farlo è sufficiente dare un click sul pulsante “Cambia tipo monitoraggio”, si aprirà una maschera di selezione con l’elenco dei tipi disponibili:



Scegliere il tipo desiderato e premere “Salva”, viene visualizzata una maschera di conferma in cui si avverte che il cambio di tipo monitoraggio provoca anche un cambio delle configurazioni e pertanto nel caso sia in corso una sessione è consigliabile interromperla ed avviarne una nuova, per essere sicuri che la nuova recepisca la nuova impostazione:

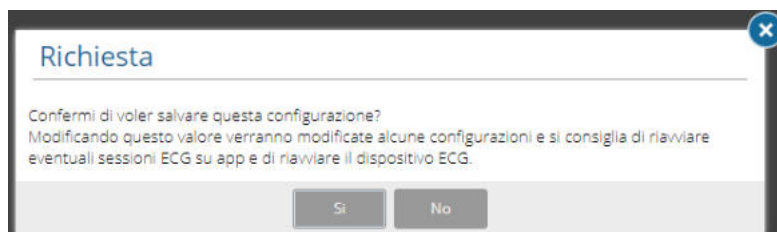

E premendo “OK” la modifica viene salvata nel sistema:

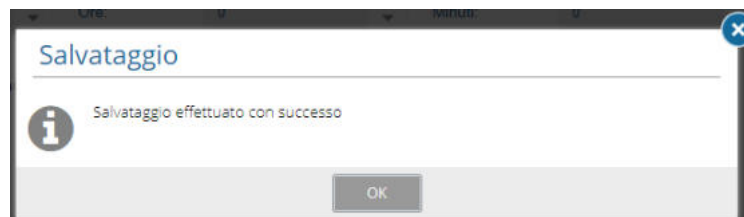

Di seguito sono riportati i dettagli delle configurazioni disponibili per i vari tipi di monitoraggio.

Teleholter

Holter da remoto fino a 30 giorni con trasmissione del dato in piattaforma web based e avanzato software di analisi Holter dedicato, utilizzando l’applicativo dedicato di analisi CER-S (tramite CER-S Gateway).

È possibile specificare se visualizzare nel tracciato tutti i battiti, abilitare il recupero dei dati presenti nella memoria del dispositivo una volta che questo viene spento e riacceso, scegliere la frequenza di campionamento del segnale (se abilitato lo specifico permesso, altrimenti la frequenza è fissa) e definire la durata della sessione, che deve essere compresa fra 10 minuti e 30 giorni.

Telemonitoring

Monitoraggio da remoto fino a 7 giorni con trasmissione online e analisi del dato in piattaforma, utilizzando la visualizzazione dei tracciati descritta nei paragrafi precedenti.

È possibile specificare se visualizzare nel tracciato tutti i battiti, abilitare il recupero dei dati presenti nella memoria del dispositivo una volta che questo viene spento e riacceso, scegliere la frequenza di campionamento del segnale (se abilitato lo specifico permesso, altrimenti la frequenza è fissa) e definire la durata della sessione, che deve essere compresa fra 10 minuti e 7 giorni.

È possibile inoltre specificare se abilitare il software di analisi interno del portale e quando deve essere eseguito, in base alle esigenze; ogni 10 minuti se è necessario monitorare in tempo quasi reale il paziente, ogni 60 minuti, a fine sessione oppure giornalmente se l'analisi non ha tempistiche ristrette:

TeleECG

Esame ECG a riposo da remoto al manifestarsi di sintomi o su sessioni programmate, con trasmissione online e analisi del dato in piattaforma.

The screenshot shows the 'CONFIG ECG HI' interface. At the top, there are navigation tabs: ECG, ARCHIVIO, REPORT, and CONFIG ECG HI. Below the tabs, there is a 'Salva' button. The main content area is titled 'Monitoraggio ECG: Tele ECG' with a 'Cambia tipo monitoraggio' button. Below this, there is a dropdown menu for 'Freq. camp. ECG' set to '128 Hz'. Underneath, there are two input fields for 'Durata sessione': 'Minuti' (0) and 'Secondi' (30). At the bottom, a note states: 'La durata della sessione può essere tra un minimo di 10 secondi ed un massimo di 1 minuto con i secondi che devono essere multiplo di 10.'

È possibile scegliere la frequenza di campionamento del segnale (se abilitato lo specifico permesso, altrimenti la frequenza è fissa) e definire la durata della sessione, che deve essere compresa fra 10 secondi e un minuto, con i secondi che devono essere multiplo di 10.

Configurazione libera

Consente di definire liberamente le caratteristiche del monitoraggio e personalizzare quindi la sessione in base alle specifiche necessità del paziente.

Selezionando nella lista in alto a sinistra "Parametri generali" è possibile accedere alla maschera di configurazione della sessione.

Oltre ai parametri visti per le altre modalità, è possibile scegliere il formato di visualizzazione dell'orario e la modalità di acquisizione a scelta tra continua e programmata.

Nel primo caso il tracciato è acquisito in modo continuo durante tutta la durata della sessione, mentre nel secondo caso il tracciato verrà acquisito solamente per 10 minuti ogni 30, 60 o 120 minuti a seconda di quanto selezionato nel campo "Freq. Scaricamento". Ad esempio, utilizzando 60 minuti si otterrà un tracciato di 10 minuti ogni ora.

The screenshot shows the 'CONFIG ECG HI' interface with the 'Parametri generali' dropdown selected. The main content area is titled 'Monitoraggio ECG: Configurazione libera' with a 'Cambia tipo monitoraggio' button. Below this, there is a dropdown menu for 'Formato orario visualizzazione' set to '24 ore'. Underneath, there are three checkboxes: 'Visualizzare tutti i battiti' (unchecked), 'Recupero dati dopo spegnimento' (checked), and 'Freq. camp. ECG' (128 Hz). Below these, there is a dropdown menu for 'Modalità' set to 'Modalità continua' with a 'Freq. camp. ECG' button. Underneath, there are three input fields for 'Durata sessione': 'Giorni' (0), 'Ore' (0), and 'Minuti' (0). At the bottom, there is a dropdown menu for 'Analisi ECG' set to 'Disattivo'. At the bottom, a note states: 'La durata della sessione può essere tra un minimo di 10 secondi ed un massimo di 1 minuto con i secondi che devono essere multiplo di 10.'

ECG ARCHIVIO REPORT CONFIG ECG HI

Parametri generali Salva

Monitoraggio ECG: Configurazione libera Cambia tipo monitoraggio

Formato orario visualizzazione: 24 ore

Visualizzare tutti i battiti:

Recupero dati dopo spegnimento:

Freq. camp. ECG: 128 Hz

Modalità: Modalità programmata

Freq. scaricamento: 30 Min

Durata sessione: Giorni: 0 Ore: 0 Minuti: 0

Analisi ECG: Disattivo Analisi ECG

I dati registrati nella modalità programmata avranno una durata predefinita di 10 minuti.
La durata della sessione può essere tra un minimo di 10 secondi ed un massimo di 1 minuto con i secondi che devono essere multiplo di 10.

Selezionando nella lista in alto a sinistra “Algoritmo analisi ECG” è possibile accedere alla maschera di configurazione degli algoritmi di analisi del tracciato ECG, oltre a poter selezionare su quali derivazioni è abilitata l’analisi effettuata lato server.

ECG ARCHIVIO REPORT CONFIG ECG HI CHAT ATTIVITÀ

Algoritmo analisi ECG Salva

Leads selezionati

Derivazione I:

Derivazione II:

Derivazione III:

Canali non abilitati per analisi cardiocam

Parametri algoritmo

Finestra RBP *	8	:
RRR (Rr prolungato) rapporto RRR/RR (%)*	200	:
Pause (soglia (ms))*	2500	:
Longhezza minima della fibrillazione atriale (s)*	8	:
Indice prematuro (%)*	75	:

Bradicardia

Soglia (bpm)*	45	:
Longhezza minima (s)*	10	:

Tachicardia

Soglia ventricolare (bpm)*	150	:
Soglia ventricolare superiore (bpm)*	150	:
Longhezza minima (s)*	<input checked="" type="radio"/> batti <input type="radio"/>	:
Longhezza minima (s)*	8	:
Longhezza minima (batti)*	8	:

Le voci successive sono specifiche per l’algoritmo di analisi direttamente a bordo del dispositivo Hi.

ALLARMI

La maschera Allarmi consente all'operatore di verificare gli allarmi scattati per il paziente in analisi. Ogni allarme è caratterizzato dalla criticità che incide sul colore del bollino e da altre informazioni importanti come data/ora, priorità, stato, titolo, messaggio, tipo allarme per verificare lo stato del paziente.

The screenshot shows the 'ALLARMI' (Alarms) section of the CGM TELEMEDICINE interface. At the top, there are navigation buttons for 'ALLARMI' (4677), 'CHAT', and 'ATTIVITÀ' (438). Below this is a patient information header for 'Patient Demo 2' with fields for Product, Codice (0000004), Tel (+39475; +359585), Mail (supporto_hp@hes.it), Patologia, and Note. A table below lists the alarms with columns for DATA/ORA, STATO, TITOLO, MESSAGGIO, and TIPO ALLARME. The table contains 20 rows of data, all with a red status indicator and the title 'Mancata medicazione'. The messages indicate that the patient has not taken their medication. The interface also includes a sidebar menu on the left with categories like 'DATI GENERALI', 'SCHEDE PAZIENTE', 'ALLARMI', 'CARTELLA PERSONALE', 'COMUNICAZIONE', and 'COMPLIANCE'.

DATA/ORA	STATO	TITOLO	MESSAGGIO	TIPO ALLARME
01/12/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
30/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
29/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
28/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
27/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
26/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
25/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
24/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
23/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
22/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
21/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
20/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
19/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
18/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
17/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
16/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
15/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
14/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
13/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
12/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita

Una volta verificato l'allarme l'operatore può inserire note o cambiare lo stato dello stesso cliccando sulla riga dell'allarme. Qui l'operatore può modificare i campi del dettaglio, visualizzare le misure puntuali del paziente e lo storico delle modifiche, note o cambiamenti di stato che sono stati apportati all'allarme e le notifiche inviate cioè mail/sms inviati agli operatori sulla generazione dell'allarme.

The screenshot shows the 'DETTAGLIO ALLARME' (Alarm Detail) interface for Patient Demo 2. It features a 'Salva' button and a tabbed interface with 'Dettaglio', 'Misure', 'Storico', and 'Notifiche inviate'. The 'Dettaglio' tab is active, showing the following information: ID AVVISO: 143216, TIPOLOGIA: Clinico, DATA: 04/12/2019, TIPO MISURA: Frequenza Cardiaca, VALORE LETTO: 120 (04/12/2019 10:32:24 (+01:00)), VALORE SOGLIA: 99, TITOLO: Allarme da soglia Umsalute, MESSAGGIO: Misura: Pulsazioni - Valore maggiore di 99, STATO: Falso allarme, and NOTE: (empty). A 'Salva' button is located in the top right corner.

DETTAGLIO ALLARME

● Demo 2 Paziente Salva

[Dettaglio](#) | [Misure](#) | [Storico](#) | [Notifiche inviate](#)

Misurazione	Valore	Data
Frequenza Cardiaca	120	04/12/2019 10:34:01
Frequenza Cardiaca	120	04/12/2019 10:24:01
Frequenza Cardiaca	115	04/12/2019 10:16:09
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 09:34:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 09:24:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 09:14:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 09:04:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 08:54:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 08:44:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 08:34:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 08:24:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 08:14:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 08:04:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 07:54:00

DETTAGLIO ALLARME

● Demo 2 Paziente Salva

[Dettaglio](#) | [Misure](#) | [Storico](#) | [Notifiche inviate](#)

Modificato il	Modificato da	Stato	Note
04/12/2019 10:34:02		Da gestire	

DETTAGLIO ALLARME

● TIZIO CAIO Salva

[Dettaglio](#) | [Misure](#) | [Storico](#) | [Notifiche inviate](#)

Data invio	Destinatario	Indirizzi	Stato invio	Messaggio
19/05/2020 16:40:33	Operator@4 Test	mmarina@hes.it	Inviato	Allarme soglia - CAIO TIZIO
19/05/2020 16:40:33	Admin HP3	matteo.marina@cgm.com	Inviato	Allarme soglia - CAIO TIZIO

Esporta Excel/Esporta PDF

Tramite i pulsanti Esporta in Excel ed Esporta in PDF nel fondo della pagina, è possibile scaricare un file contenente la griglia visualizzata nell'istante del click sul pulsante. Nel documento sarà visualizzato un elenco con gli eventuali filtri applicati sulle colonne.

CGM | TELEMEDICINE
Connected Patient Solutions

4677 ALLARMI | 4 CHAT | 438 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

Patient Demo 2

Prodotto: Codice: 00000004 Tel: +39475; +359585; Mail: supporto-hp@hes.it; Patologie: Note: note

Stato: Attivo Data nascita: 29/05/2014

DATA-ORA	STATO	TITOLO	MESSAGGIO	TIPO ALLARME
01/12/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
30/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
29/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
26/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
27/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
26/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
25/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
24/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
23/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
22/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
21/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
20/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
19/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
18/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
17/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
16/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
15/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
14/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
13/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
12/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2022 H&S S.p.A. - News di prova

Esporta in Excel Esporta PDF

CARTELLA PERSONALE

Anamnesi

La prima voce del menù Cartella personale è Anamnesi. Questa voce comprende due sezioni: le survey di anamnesi in alto e le patologie in basso.

Nella sezione survey di anamnesi è possibile per ogni survey copiarla, eliminarla, creare un PDF (se è compilata), visualizzare la data di compilazione, la fine dell'inserimento, la tipologia, se è compilata e chi l'ha compilata.

The screenshot displays the 'Anamnesi' section of the 'Cartella Personale' in the CGM Telemedicine system. At the top, there are navigation buttons for 'ALLARMI' (4077), 'CHAT' (1), and 'ATTIVITÀ' (438). The patient profile for 'Demo 2' is visible, including fields for 'Prodotto', 'Codice', 'Tel.', 'Mail', 'Patologie', and 'Note'. The 'SURVEY ANAMNESI' table has columns for 'DATA COMP.', 'INVIA', 'FINE INS.', 'TIPOLOGIA', 'COMPIATO', and 'COMPILATORE'. A single survey entry is shown with a date of 18/02/2021 12:28, type 'Anamnesi', and compiler 'Operator4 Test'. Below this is the 'PATOLOGIE' table with columns for 'DATA INIZIO', 'DATA FINE', 'PATOLOGIA', and 'NOTE'. Two pathology entries are listed with dates 02/09/2022 and 03/04/2022, and descriptions related to hypercholesterolemia and essential hypertension. A '+' button is present in the bottom right of both tables.

Con il pulsante + in basso a destra è possibile compilare una nuova survey, selezionando inizialmente il tipo di survey. Cliccando su una survey è possibile rivedere ogni risposta data dall'assistito.

SELEZIONE

Seleziona questionario *:

Anamnesi

Salva
Annulla

The screenshot displays the CGM Telemedicine interface for a patient named 'Demo 2'. At the top, there are status indicators for 'ALLARMI' (4077), 'CHAT' (4), and 'ATTIVITÀ' (438). The main header includes navigation links: DASHBOARD, HOME, ASSISTITI, OPERATORE, REFERITI, and ADMIN. The patient's profile information is shown in a grid:

- Prodotto: [empty]
- Codice: 00000004
- Tel: +39475; +399583
- Mail: supporto-tp@hcs.it
- Patologie: [empty]
- Nota note: [empty]
- Stato: Attivo
- Data nascita: 29/05/2014

 The left sidebar contains a menu with categories: 'SCHEDA PAZIENTE' (Parametri, PAI, Calendario, Soglia, ECG Giornalieri, Preferenze operative), 'ALLARMI', and 'CARTELLA PERSONALE' (Anamnesi, Terapia, Accessi, Diario, Eventi, Segnalazione Eventi, Valutazione Infermeristi, Esami). The main content area is divided into three sections:

- 1. Anamnesi personale fisiologica:** 1.01 Anamnesi, 1.02 Nascita del Paziente, 1.03 Se il sesso Femminile, 1.04 Scolarità, 1.05 Sili di vite, 1.06 Allergie, 1.07 Attività lavorativa, 1.08 Note operatori Sanitari.
- 2. Anamnesi patologica remota:** [empty]
- 3. L'anamnesi familiare:** [empty]

 The '1.02 Nascita del Paziente' section is expanded, showing:

- 1.02.01 Parto naturale: SI, NO
- 1.02.02 Parto cesareo: SI, NO
- 1.02.03 Peso alla nascita: [input field]

 At the bottom of this section are buttons for 'Indietro', 'Avanti', 'Info', and 'Elimina il questionario'.

Nella sezione Patologie è possibile per ogni patologia visualizzare la data di inizio, la data di fine, il nome della patologia e le note.

Cliccando su una patologia è possibile vederne i dettagli e modificarli, con il + in basso a destra è possibile inserire una nuova patologia per il paziente.

The screenshot shows the 'DETTAGLIO PATOLOGIA' form. It contains the following fields:

- Patologia *: (I2720) Ipercolesterolemia pura
- Data inizio *: 01/01/2016
- Data fine: [empty]
- Note: [empty text area]

 At the bottom right, there are three buttons: 'Salva', 'Elimina', and 'Chiudi'.

Terapia

Nel menù Cartella personale è presente l'elenco delle terapie del paziente. Per ogni terapia è presente la data di inizio, la data di fine, il nome della terapia e le note. Nella parte bassa dello schermo è presente l'elenco delle terapie erogate tramite i vassoi terapia, che sono in sola lettura (vedi sezione Compliance).

The screenshot displays the 'CGM TELEMEDICINE' interface for 'Patient Demo 2'. The top navigation bar includes '4677 ALLARMI', 'CHAT', and '438 ATTIVITÀ'. The patient's profile shows: Codice: 60000004, Tel: +39475; +399589, Mail: supporto-hp@hes.it, Pathologie: Iperensione essenziale non specificata; Ipercolesterolemia pura, and Note: note. The 'CARTELLA PERSONALE' menu is expanded to show 'Terapia'. Below this, there are two tables. The first table, titled 'Terapia', lists treatments with columns for DATA INIZIO, DATA FINE, TERAPIA, POSOLOGIA, ORARIO, and NOTE. The second table, titled 'Terapie PII Dispenser', lists dispenser therapies with the same columns. A '+ in basso a destra' button is visible in the top right of the therapy list area.

DATA INIZIO	DATA FINE	TERAPIA	POSOLOGIA	ORARIO	NOTE
05/09/2022		NEBIVOLOLO	5.9		
02/05/2022		ARGIPRESSINA (NASOPRESSINA)	10		

DATA INIZIO	DATA FINE	TERAPIA	POSOLOGIA	ORARIO	NOTE
03/10/2022	03/10/2022	TANTUM VERDE GOLA	1 volta al di		Terapia PII Dispenser
03/10/2022	31/10/2022	MOMENT	1 cp al di	16.15	Terapia PII Dispenser
03/10/2022	31/10/2022	MOMENT	1 cp al di	16.15	Terapia PII Dispenser
15/07/2022		PARACETAMOLO	1 day	16.0	Medication therapy
07/05/2021	03/10/2022	ASPIRINA	1 al di	14.45	Terapia PII Dispenser
17/03/2021	31/10/2022	RAVICTI	10	16.15	Terapia PII Dispenser

Cliccando su una terapia è possibile vederne i dettagli e lo storico, con la possibilità di modificare i dati, con il + in basso a destra compare lo stesso pop-up ed è possibile inserire una nuova terapia per il paziente.

The 'DETTAGLIO TERAPIA' pop-up window shows the following details:

- DETTAGLIO** / **STORICO** (selected)
- Patologia: (S3500) Gastrite acute senza menzione di emorragia
- Farmaco ATC: [Empty field]
- Farmaco AIC: [Empty field]
- Nome farmaco *: lansoprazolo
- N° volte: 1, Ogni: [Empty field], G3/55/MA, Giorno: [Empty field]
- Posologia: 30.0 ml, Orario: test
- Inizio terapia *: 01/01/2019
- Fine terapia: [Empty field]
- Note: Data inizio fittizia t

Buttons: Salva, Elimina, Chiudi



Esporta Excel/Esporta PDF

Tramite i pulsanti Esporta in Excel ed Esporta in PDF nel fondo della pagina, è possibile scaricare un file contenente la griglia visualizzata nell'istante del click sul pulsante. Nel documento sarà visualizzato un elenco con gli eventuali filtri applicati sulle colonne.

DATA INIZIO	DATA FINE	TERAPIA	POSOLOGIA	GRABO	NOTE
01/01/2016		insulina	0.5		
01/01/2016		antidolorici	0.5		
01/01/2016		aspirina	10.0		
01/01/2016		olevix	1000.0		
01/01/2016		cardiolipid	10.0		

 Esporta in Excel

 Esporta in PDF

Accessi

Nel menù Cartella personale dopo Terapia è presente anche Accessi, con l'elenco degli accessi fatti a domicilio del paziente. Per ogni accesso l'operatore deve indicare la data e ora, il fornitore, la durata, lo stato, l'assegnamento o meno, la figura professionale, il tipo di accesso, il numero di intervento e l'autorizzazione. È possibile visualizzarli, modificarli ed aggiungerne di nuovi.

The screenshot shows the 'CGM TELEMEDICINE' interface. At the top, there are navigation tabs: '4078 ALLARMI', '4 CHAT', and '438 ATTIVITÀ'. Below these are menu items: 'DASHBOARD', 'HOME', 'ASSISTITI', 'OPERATORE', 'REFERITI', and 'ADMIN'. The main content area is titled 'Patient Demo 2' and displays a table of access records. The table has columns for 'DATA E ORA', 'FORNITORE', 'DURATA', 'STATO', 'ASSEGNATO', 'FIGURA PROFESSIONALE', 'TIPO ACCESSO', and 'N° INTERVENTO'. A single record is visible: 19/10/2020 08:00, HES, 01:00:00, Pianificato, , Datore, Accesso std OSS, 1. A sidebar on the left contains a menu with options like 'DATI GENERALI', 'SCHEDA PAZIENTE', 'ALLARMI', and 'CARTELLA PERSONALE', with 'Accessi' selected. A '+ ' button is visible in the bottom right corner of the table area.

Cliccando su un accesso è possibile vederne i dettagli e modificarli (a parte la figura professionale e l'autorizzazione), con il + in basso a destra è possibile inserire un nuovo accesso per il paziente.

The screenshot shows the 'MODIFICA ACCESSO' form. It contains the following fields:

- Fornitore:** CENTRI MEDICI UNISALUTE
- Data *:** 24/06/2020
- Ora *:** 07:00 PM
- Durata:** 01:00:00
- Stato *:** Pianificato
- Assegnato:**
- Tipo accesso *:** Accesso std OSS
- Figura professionale *:** Op. Socio Sanitario
- Note:** (empty text area)

 At the bottom right, there are three buttons: 'Salva', 'Elimina', and 'Chiudi'.

INSERIMENTO ACCESSO

Fornitore:

Data *: 24/06/2020

Ora *:

Durata:

Stato *: Pianificato

Assegnato:

Tipo accesso *:

Figura professionale *:

Note:

Diario

La pagina Diario comprende l'elenco di tutto quello che è successo al paziente (Attività, Eventi clinici, Note operative, Allarmi, esami, ecc...), con i dati non modificabili ma solo in visualizzazione. Le uniche categorie modificabili sono gli Eventi e le Note operative. In alto a destra sono presenti dei filtri per visualizzare solo i tipi di eventi desiderati.

CGM | TELEMEDICINE

4078 ALLARMI | 4 CHAT | 438 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERITI ADMIN

Patient Demo 2

Prodotto: Codice: 80000004 | Tel: +39475 +399585 | Mail: supporto-hp@hcs.it | Patologia: ipertensione essenziale non specificata: ipertensione essenziale non specificata | Note: note

Stato: Attivo | Data nascita: 29/05/2014

Data inizio	Data fine	Evento Clinico, Note			
Data	Categoria	Titolo	Sottotitolo	Note	Utente
22/11/2022 16.2	Nota Operativa	Inviata comunicazione		Generata automaticamente su invito email, messaggio: Prova Patient	
21/11/2022 16.2	Nota Operativa	Inviata comunicazione		Generata automaticamente su invito email, messaggio: Prova Patient	
20/11/2022 16.2	Nota Operativa	Inviata comunicazione		Generata automaticamente su invito email, messaggio: Prova Patient	
19/11/2022 16.2	Nota Operativa	Inviata comunicazione		Generata automaticamente su invito email, messaggio: Prova Patient	
18/11/2022 16.2	Nota Operativa	Inviata comunicazione		Generata automaticamente su invito email, messaggio: Prova Patient	
16/11/2022 13.1	Esame	Videoconsulti			HP3 Admin
17/11/2022 16.2	Nota Operativa	Inviata comunicazione		Generata automaticamente su invito email, messaggio: Prova Patient	
17/11/2022 15.4	Esame	Ritiro holter cardiaco			
17/11/2022 15.3	Evento Clinico	Diario paziente			Test Referenzia
17/11/2022 15.3	Esame	holter ECG			
17/11/2022 15.2	Esame	Ritiro holter cardiaco			
16/11/2022 16.2	Nota Operativa	Inviata comunicazione		Generata automaticamente su invito email, messaggio: Prova Patient	
15/11/2022 16.2	Nota Operativa	Inviata comunicazione		Generata automaticamente su invito email, messaggio: Prova Patient	
15/11/2022 15.4	Esame	Ritiro holter cardiaco			
15/11/2022 13.1	Esame	Ritiro holter cardiaco			
15/11/2022 13.0	Esame	Ritiro holter cardiaco			
14/11/2022 15.4	Esame	Ritiro holter cardiaco			
14/11/2022 17.4	Esame	Ritiro holter cardiaco			
14/11/2022 17.4	Esame	Ritiro holter cardiaco			
14/11/2022 17.1	Esame	Ritiro holter cardiaco			

Per ogni evento è presente la data, la categoria, il titolo, il sottotitolo, l'utente e le note. Per alcuni eventi è disponibile anche un allegato, cliccando sul simbolo della graffetta è possibile visualizzarlo.

The image displays three screenshots of a software interface:

- DETTAGLIO EVENTO:** Shows event details with fields for 'Tipo *' (Appointment personal), 'Sottotipo *' (TEST Appointment), 'Data Comp *' (20/12/2018), 'diagnostica' (Survey ASRA_new.pdf), and 'visita *' (Globe). A '+ Aggiungi...' button is visible next to the 'diagnostica' field. 'Salva' and 'CANCELLA' buttons are at the bottom.
- MODIFICA NOTA OPERATIVA:** Shows a form for editing an operational note. Fields include 'Titolo *' (Monitoraggio parametri), 'Sottotipo *' (Assistenza-chiave HO ripetizione), 'Data nota operativa *' (03/12/2022), and 'Carica allegato' (+ Aggiungi...). The 'Note' field contains 'Servizio di assistenza monitoraggi parametri di...'. 'Salva' and 'CANCELLA' buttons are at the bottom.
- MODIFICA NOTA OPERATIVA:** Shows a table for managing operational notes. The table has columns: 'DATA', 'TITOLO', 'SOTTOTITOLO', 'NOTE', and 'MODIFICATO...'. The table is currently empty. 'Salva' and 'CANCELLA' buttons are at the bottom.

Con il + in basso a destra è possibile inserire solamente una nuova Nota operativa sul Diario.

This screenshot shows the 'MODIFICA NOTA OPERATIVA' form. A red rectangular box highlights the '+ Aggiungi...' button located next to the 'Carica allegato' field. The form fields are: 'Titolo *' (empty), 'Sottotipo *' (empty), 'Data nota operativa' (03/12/2022 16:09), 'Carica allegato' (+ Aggiungi...), and 'Note' (empty). 'Salva' and 'CANCELLA' buttons are at the bottom right.

Esporta Excel/Esporta PDF

Tramite i pulsanti Esporta in Excel ed Esporta in PDF nella parte superiore della pagina, è possibile scaricare un file contenente la griglia visualizzata nell'istante del click sul pulsante. Nel documento sarà visualizzato un elenco con gli eventuali filtri applicati sulle colonne.

The screenshot displays the H&S Health Platform interface for a patient named 'Paziente Demo 2'. The top navigation bar includes 'DASHBOARD', 'HOME', 'ASSISTITI', 'OPERATORE', and 'ADMIN'. The patient information section shows details such as 'Codice: 0000111', 'Tel: 1234567890', 'Mail', 'Data nascita: 16/12/1964', and 'Patologie: ipertensione essenziale non specificata; ipercolesterolemia pura'. Below this, there are filters for 'Alarmi', 'Attività', 'Eventi Clinici', 'Note Operative', 'FNU', and 'Terapie'. The main area contains a table with columns for 'Data', 'Categoria', 'Titolo', 'Sottotitolo', 'Note', and 'Libreria'. The table lists various events, including appointments, measurements, and alarms. At the top of the table, there are buttons for 'Esporta in Excel' and 'Esporta in PDF'. The footer of the interface includes 'HEALTH PLATFORM' and 'Copyright 2009 - 2020 H&S S.p.A.'.

Esporta in Excel

Esporta in PDF

Eventi

La pagina Eventi comprende l'elenco degli eventi della storia socio-sanitaria del paziente, ma stavolta modificabili. Ogni evento ha come parametri data, titolo, sottotitolo, utente, visibilità e note.

La visibilità dell'evento è un'informazione importante per garantire una maggiore privacy e una corretta gestione delle informazioni.

The screenshot displays the 'Eventi' (Events) section of the CGM TELEMEDICINE interface. The interface includes a top navigation bar with 'ALLARMI' (4878), 'CHAT', and 'ATTIVITÀ' (438) indicators. The main content area shows a table of events for 'Patient Demo 2'. The table has columns for 'DATA', 'TITOLO', 'SOTTOTITOLO', 'UTENTE', 'VISIBILITÀ', and 'NOTE'. The events listed are:

DATA	TITOLO	SOTTOTITOLO	UTENTE	VISIBILITÀ	NOTE
17/11/2022	Diario paziente		Referatore Test	Globale	
04/11/2022	Appuntamento personale	Prontuario	Operatore Test	Globale	
22/07/2022	Diario paziente		Referatore Test	Globale	
22/07/2022	Diario paziente		Referatore Test	Globale	
22/07/2022	Diario paziente		Referatore Test	Globale	
22/07/2022	Diario paziente		Referatore Test	Globale	
10/09/2020	Visita medica		Demo 2 Patient	Globale	Visita medica
10/09/2020	Appuntamento personale		Demo 2 Patient	Globale	Test appuntamento personale
04/08/2020	Appuntamento personale	Prontuario Assistito	Demo 2 Patient	Globale	test

The interface also features a left sidebar with navigation options like 'DATI GENERALI', 'SCHEDE PAZIENTE', 'ALLARMI', and 'CARTELLA PERSONALE'. A '+', 'Save', 'Elimina', and 'Crea!' buttons are visible at the bottom right of the event details form.

Cliccando su un evento è possibile visualizzarne i dettagli e modificarli. Cliccando sul + in basso a destra è possibile inserire un nuovo evento.

The 'DETTAGLIO EVENTO' (Event Details) form is shown, allowing for the modification of event information. The fields are as follows:

- TITOLO ***: Appuntamento personale
- SOTTOTITOLO**: Prontuario Assistito
- Data Comp. ***: 04/05/2020
- Sfoga**: [Empty field with 'Sfoga...' button]
- Visibilità ***: Globale
- Note**: [Empty text area]

Buttons for 'Save', 'Elimina', and 'Crea!' are located at the bottom right of the form.

Segnalazione Eventi

La pagina Segnalazione Eventi sotto il menù Cartella Personale comprende l'elenco delle segnalazioni di eventi avversi avvenute sul paziente. Ogni evento avverso ha come parametri data e ora, descrizione evento, farmaco e utente. Per ogni segnalazione è anche possibile inviare una mail in base al prodotto selezionato (se fatto, la segnalazione diventa in sola lettura) e fare il download i dati (con la graffetta).

Per ogni giorno in cui vengono segnalati uno o più eventi avversi il sistema genera un report che può essere scaricato nella relativa sezione del portale.

CODICE EVENTO	DATA E ORA	INVIO MAIL	DESCRIZIONE EVENTO	FARMACO	UTENTE	INVIATO
1034	02/09/2022 00:00:00		Test	cl	Admin HP3	<input type="checkbox"/>
1032	30/06/2021 00:00:00		test	test	Operatore4 Test	<input checked="" type="checkbox"/>
1024	12/06/2019 00:00:00		test riconciliazione	glb	Operatore4 Test	<input type="checkbox"/>
10	27/03/2019 00:00:00		prova riconciliazione	test	Operatore4 Test	<input type="checkbox"/>

CGM CARE MAP p.A. - News di prova

Con il pulsante + in basso a destra è possibile inserire una nuova segnalazione, inserendo il prodotto, la data di segnalazione, la descrizione dell'evento, il farmaco ed eventuali altre informazioni.

INSERISCI EVENTO AVVERSO

Prodotto *:

Data segnalazione *:

Data di insorgenza evento:

Data di inizio trattamento:

Descrizione evento *:

Farmaco *:

Azienda farmaceutica:

Posologia: Specificare

Frequenza:

Correlazione: Esito

Gravità:

Se la segnalazione è relativa ad un paziente con prodotto Sanofi le informazioni richieste sono diverse:

INSERISCI EVENTO AVVERSO

Prodotto *

Data segnalazione *

Data di insorgenza evento:

Data di inizio trattamento:

Data di fine trattamento:

Descrizione evento *

Farmaco *

Azienda farmaceutica:

Posologia: Specificare:

Frequenza:

Correlazione: Esito:

INSERISCI EVENTO AVVERSO

Prodotto *

Gravità:

Ritorno:

Continuo:

Segnale:

Esito dell'evento:

Relativo al prodotto aziendale:

Data di morte:

Causa di morte:

Persona che completa questo modulo Medico Curante Corrispondente

Nome, titolo:

Persona che completa questo modulo Medico Curante Corrispondente

Nome, titolo:

Telefono:

Persona che completa questo modulo Medico Curante Corrispondente

Nome medico curante:

Indirizzo medico curante:

Telefono medico curante:

Email medico curante:

Persona che completa questo modulo Medico Curante Corrispondente

Nome corrispondente:

Indirizzo corrispondente:

Operatore sanitario:

Telefono corrispondente:

Email corrispondente:

Valutazione Infermieristica

La pagina di Valutazione infermieristica comprende tre sezioni.

In alto ci sono le scale di valutazione, ognuna con la possibilità di copiarla, eliminarla e crearne un PDF (se compilata). Oltre a questa possibilità, per ogni scala sono presenti vari dati come la data di compilazione, la fine dell'inserimento dei dati, la tipologia, la compilazione o meno e il nome del compilatore. La compilazione di una scala può generare un indice che è poi visualizzabile nella pagina Parametri in base al tipo di misura selezionato. Quando una scala ha il campo compilato flaggato, diventa di sola lettura (non modificabile).

Con il + in basso a destra è anche possibile scegliere una nuova scala di valutazione.

Al centro ci sono le Aree di intervento, ognuno con la data e il nome del compilatore. Premendo su una riga è possibile visualizzare il dettaglio del problema. Anche in questo caso è possibile inserire una nuova area con il pulsante + in basso a destra.

In basso sono presenti le eventuali note operative. Premendo su una riga è possibile visualizzare il dettaglio e lo storico della nota operativa.

Con i rispettivi + in basso a destra è possibile:

- Per le scale di valutazione: scegliere una nuova scala di valutazione e visualizzarne il contenuto;

The screenshot shows the 'CGM TELEMEDICINE' interface for a patient named 'Demo 2'. The top navigation bar includes 'ALLARMI', 'CHAT', and 'ATTIVITÀ'. The patient's profile information is visible at the top, including 'Codice: 0000004', 'Tel: +39075-33585', 'Mail: supporto_tg@bes.it', and 'Data nascita: 29/05/2014'. The main content area displays a list of assessment scales (01-04) with radio button options for selection. The scales are:

- 01 PERCEZIONE SENSORIALE -** Abilità a rispondere in modo corretto alla sensazione di disagio correlata alla posizione *
- 02 UMIDITÀ CUTANEA -** Grado di esposizione della pelle all'umidità *
- 03 ATTIVITÀ -** Grado di attività fisica *
- 04 MOBILITÀ -** Capacità di cambiare e di controllare le posizioni del corpo *

- Per le Aree di intervento: inserire un nuovo problema;

The screenshot shows the 'MODIFICA PROBLEMA' form. The fields are:

- Area di intervento ***: Nutrizione e metabolismo
- Valutazione problema**: (Empty field)
- Obiettivo ***: Test
- Intervento ***: Demo
- Data problema ***: 24/06/2020

Buttons for 'ELIMINA' and 'SALVA' are located at the bottom right of the form.

- Per le note operative: inserire una nuova nota operativa.

MODIFICA NOTA OPERATIVA

Dettaglio **Storico**

Titolo * Monitoraggio parametri

Sottotitolo * Avviso giallo- chiusura Si ripetizione

Data nota operativa 04/03/2019 08:35:54

Cerca allegato:

Note:

cliente ripete misurazione dopo invio mail valori nella norma
chiudo avviso

MODIFICA NOTA OPERATIVA

Dettaglio **Storico**

DATA	TITOLO	SOTTOTITOLO	NOTE	MODIFICATO DA
------	--------	-------------	------	---------------

Esami

La pagina “Esami” mostra tutti i referti dell’assistito filtrabili per data e tipo di esame.

The screenshot displays the CGM TELEMEDICINE interface for a patient named "Demo 2". The top navigation bar includes "4678 ALLARMI", "4 CHAT", and "438 ATTIVITÀ". The patient's profile information is shown at the top, including contact details and medical history. The main area is divided into two sections: "Elenco referti" (Exam List) and "Dettaglio esame" (Exam Detail).

Elenco referti:

ID	DATA ESAME	DATA REFERTO	TIPO
7197	1/11/2022		Microport cardio
7146	19/11/2022		Ritiro holter cardiaco
7143	15/11/2022		Ritiro holter cardiaco
7142	19/11/2022		Ritiro holter cardiaco
7141	14/11/2022		Ritiro holter cardiaco
7127	14/11/2022		Ritiro holter cardiaco
7126	14/11/2022		Ritiro holter cardiaco
7119	14/11/2022		Ritiro holter cardiaco
7118	14/11/2022		Ritiro holter cardiaco
7117	14/11/2022		Ritiro holter cardiaco
7116	14/11/2022		Ritiro holter cardiaco
7115	14/11/2022		Ritiro holter cardiaco
7096	22/07/2022		Holter ECG
7005	22/07/2022		Holter pressorio
1204	30/03/2021		Microport ritiro holte
69	06/08/2020	06/10/2020	Spirometria
68	06/08/2020		Spirometria

Dettaglio esame:

ID Esame: 7006
 Tipo: Holter ECG
 Data *: 22/07/2022
 Ora *: 16:50
 Stato: Non referato
 Motivo esame: Test
 Fattori di rischio: Obesità, Dislipidemia
 Patologie: Cardiopatico grave
 Note:

CGM CARE MAPs di prova

A sinistra abbiamo l’elenco dei referti, il pulsante “Aggiorna” che ricarica la lista di referti fatti dal paziente e il pulsante “Nuovo” che permette di aggiungere un nuovo referto. Cliccando su un esame oppure sul pulsante “Nuovo” aggiorna la schermata al centro a destra.

Nel caso di esami di tipo Holter ECG e Holter Pressorio, sulla destra sono presenti dei campi aggiuntivi: fattori di rischio, motivo esame e patologie, che vengono inseriti dall’applicativo CGM POINT OF CARE in fase di esame.

Dettaglio esame

ID Esame: 7191

Tipo: Holter ECG

Data *: 30/11/2022

Ora *: 16:00

Stato: Non refertato

Sostituisci allegato: Scegli...

Motivo esame: Controllo periodico

Fattori di rischio:

Patologie:

Note: 29/11/2021 - 29/11/2021

Apri allegato Apri dettagli Referta Salva Elimina

Cliccando un referto di tipo:

- **“Spirometria”**, nella schermata a destra si visualizza i dettagli dell’esame con tipo, data, ora, stato, sostituisci allegato, quesito diagnostico, motivo esame, note. In basso si hanno quattro pulsanti: [Apri allegato], [Referta], [Salva], [Elimina].

Cliccando [Apri allegato] si potranno visualizzare il grafico e il dettaglio degli esami. Cliccando [Referta], in seguito alla conferma di presa in carico, visualizza il grafico e il dettaglio degli esami.

Refertazione esame

Riferimento esame: 65.4.20200121145818

Esame Spirometria

Nome:	Paziente Demo 2		
Sesso:	M		
Data di nascita:	16/12/1964		
Data:	21/01/2020		
Codice Fiscale:	DMEPNT64T16D815L		

Altezza: 185cm

Parametro	Valore	Teoric. - ERS_93	U.M.	% Teor.
TEMP	27	-	°C	-

Testo referto:

Salva e termina refertazione Salva Chiudi

Se si clicca il pulsante [Salva] il testo referto verrà salvato. Cliccando [Chiudi] la refertazione non terminerà e, nel caso la si voglia terminare, è presente un pulsante [Termina refertazione].

Cliccando il pulsante [Salva e termina refertazione] invece richiederà la firma e la refertazione verrà salvata in pdf e non si potrà più modificare.

Dopo aver terminato la refertazione, premendo il pulsante “Visualizza referta” sarà disponibile un’anteprima del referto, dove si disporrà delle funzioni di stampa e scaricamento.

- **“ECG 12 derivazioni”**, nella schermata a destra si visualizza i dettagli dell’esame con tipo, data, ora, stato, in carico a, motivo esame, conclusioni diagnostiche, fattori di rischio, patologie, note, testo referto. In basso, vi sono quattro pulsanti: [Apri allegato], [Apri dettagli], [Referta], [Annulla refertazione], [Salva].

Cliccando [Apri allegato] si potranno visualizzare il grafico e il dettaglio degli esami. Cliccando [Apri dettagli], in seguito alla conferma di presa in carico, verranno visualizzati il grafico e il dettaglio dell’esame.




I due pulsanti accanto alla freccia rossa permettono di ingrandire o rimpicciolire la parte selezionata dal mouse.

Cliccando il pulsante [Referta], in seguito alla conferma di presa in carico, verrà visualizzata la refertazione dell’esame e di fianco lo spazio per impostare il testo del referto.

Tramite il pulsante “Template referti” è possibile scegliere un template precedentemente salvato, così da velocizzare l’operazione di refertazione. Viene visualizzata una maschera in cui sono presentati i template disponibili e cliccando “Seleziona” il testo del template viene riportato nel campo “Testo referto:” presente nella maschera di refertazione. Sempre dalla stessa maschera è possibile aggiungere, modificare e cancellare i

template. I template sono personali dell'operatore e distinti per tipologia di esame, e sono disponibili per tutte le tipologie di esame refertabile.

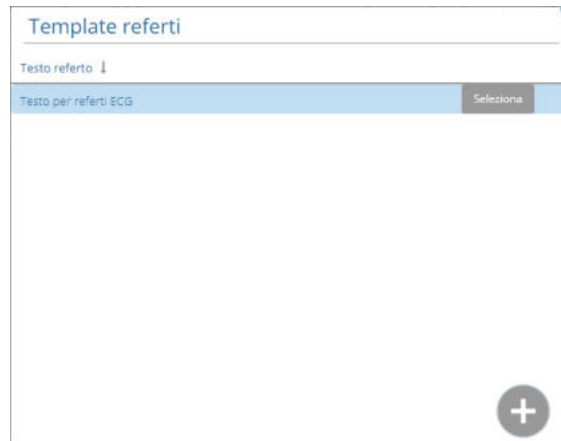

Se si clicca il pulsante [Salva] il testo referto verrà salvato.

Cliccando il pulsante [Chiudi], la refertazione non viene terminata; mentre, nel caso si volesse terminare, è presente un pulsante [Termina refertazione].

Cliccando il pulsante [Salva e termina refertazione] invece richiederà la firma, la refertazione verrà salvata in pdf e non si potrà più modificare.

Dopo aver terminato la refertazione, premendo il pulsante [Visualizza referta] sarà disponibile un'anteprima del referto, il quale disporrà delle funzioni di stampa e scaricamento.

Se l'esame è già stato refertato, cliccando [Annulla refertazione] è possibile riportare l'esame in stato da refertare e quindi disponibile per una nuova refertazione.

- **“Checkup”**, nella schermata a destra vengono visualizzati i dettagli dell'esame con tipo, data, ora, stato, sostituisci allegato, motivo esame e note


In basso, sono presenti quattro pulsanti: [Apri allegato], [Referta], [Salva] ed [Elimina].

Dettaglio esame

Riferimento esame: 65.8.20200122103003

Esame Checkup	
Nome:	Paziente Demo 1
Sesso:	F
Data di nascita:	21/06/1953
Data:	22/01/2020 10:32
Codice Fiscale:	DMEPNT53H61H501L

Misura	Valore	Unità di misura	Valore di riferimento
Pressione diastolica	94 *	mmHg	60 - 90
Pressione sistolica	150 *	mmHg	100 - 130
Pulsazioni	99 *	bpm	< 80
MAP	110	mmHg	
Peso	71,8	Kg	



Cliccando [Apri allegato], sarà possibile visualizzare il dettaglio degli esami.

Cliccando il pulsante [Referta], in seguito alla conferma di presa in carico, verrà

visualizzata la refertazione dell'esame e, di fianco, lo spazio per scrivere il testo del referto. Se si clicca il pulsante [Salva] il testo referto verrà salvato. Cliccando il pulsante [Chiudi], la refertazione non viene terminata; mentre, nel caso si volesse terminare, è presente un pulsante [Termina refertazione].

Cliccando il pulsante [Salva e termina refertazione] ci sono due possibilità:

- Il profilo dell'utente è abilitato alla firma "semplice" e quindi verrà richiesta la firma
- Il profilo dell'utente è abilitato alla firma certificata e ne è stata caricata una, verrà inviato un codice di sicurezza alla casella di posta elettronica del refertatore con cui proseguire con il referto dell'esame.

Dopo il passaggio di firma il documento di refertazione verrà salvato in pdf e non sarà più modificabile.

Al termine della refertazione, premendo il pulsante [Visualizza referto], sarà disponibile un'anteprima del referto stampabile e scaricabile.

Se si clicca il pulsante [Nuovo] nella schermata al centro a destra è presente una scheda da compilare per inserire un esame nuovo. Richiede i seguenti dati: tipo, data, ora, stato, documento allegato, quesito diagnostico, note. Alla fine della schermata si ha un pulsante che permette di salvare il nuovo esame.

Il referto di un esame può essere scaricato dal sito e consegnato al paziente o visualizzato direttamente online da quest'ultimo, se lo ha richiesto. In questo caso al termine della refertazione dell'esame il paziente riceve una e-mail che gli comunica le credenziali con le quali potersi connettere al portale per la visualizzazione del referto.

COMUNICAZIONE

Questionari

L'ultima voce del menù è Comunicazione e il primo sottomenù che comprende è quello dei Questionari.


The screenshot displays the CGM TELEMEDICINE web application interface. At the top, there are navigation tabs for 'ALLARMI' (4678), 'CHAT' (4), and 'ATTIVITÀ' (438). Below these are menu items: DASHBOARD, HOME, ASSISTITI, OPERATORE, REFERTI, and ADMIN. The main header shows 'Patient Demo 2' and a patient information bar with fields for 'Prodotto', 'Codice', 'Tel.', 'Mail', 'Data nascita', and 'Note'. A table below lists questionnaire records with columns: DATA COMP, FINE INS, IDQA, TIPOLOGIA, COMPIATO, COMPILATORE, REPARTO, and NOTE. The first row shows a record for 'Questionario UNISALUTE v1' with a search icon and a search term '15/07/2022'. The left sidebar menu is expanded to 'COMUNICAZIONE', with 'Questionari' highlighted. The footer includes 'CGM CARE MAP', 'Pagina 1 di 1', 'Mostra 1 - 1 di 1', and 'Copyright 2009 - 2021'.

In questa pagina sono appunto presenti tutti i questionari compilati dal paziente, ognuno con la possibilità da parte dell'operatore di rivedere le risposte, la data di compilazione, la fine dell'inserimento dei dati (se presente), la tipologia di questionario, la conferma di compilazione o meno, il compilatore, il reparto e le note.

Cliccando su ogni riga è possibile, se il questionario non è stato compilato fino alla fine, modificare i dati del questionario selezionato, con la possibilità di vederlo, copiarlo e crearne un PDF. Se il questionario è stato compilato fino alla fine, non è modificabile. Cliccando sul pulsante + in basso a destra è possibile inserire un nuovo questionario.

Cliccando su Compila nel Dettaglio Questionario non compilato è possibile compilare i vari quesiti del questionario. Se è stato già compilato, il tasto sarà Vedi. Oltre a questo tasto sono presenti anche un Copia questionario e un PDF (se compilato) per esportare un documento.

È possibile programmare periodicamente la compilazione di questionari, sia pianificandoli direttamente nel calendario che inserendoli nel piano di monitoraggio e facendoli poi generare come accade per le altre attività.

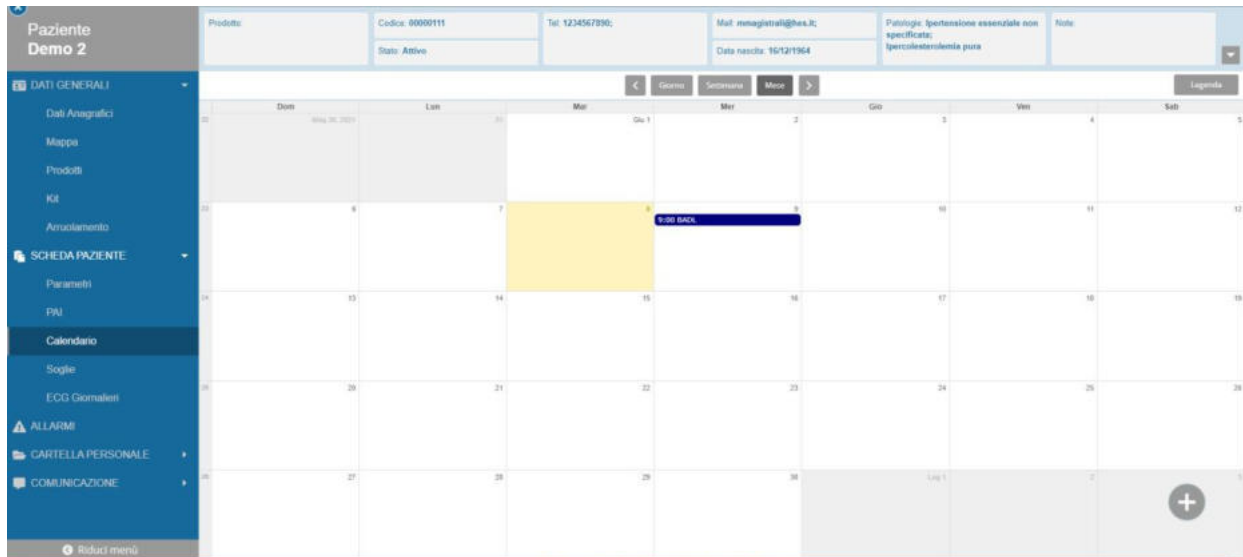

Dettaglio attività

Attività Pianificazione Storico

Tipo ATTIVITÀ: Questionario

Questionario *: BADL

Descrizione:

Orario *: 09:00

Stato: Da eseguire

Note:

Compila Elimina Salva Chiudi

Dettaglio attività

Attività Pianificazione Storico

Tipo pianificazione *: Ricorrente

Tipo frequenza *: Mensile

Ogni N mesi *: 1

Giorno del mese *: 9

Data inizio *: 09/06/2021

Data fine:

Ora *: 09:00

Compila Elimina Salva Chiudi

Questionari App

Prova Provato		Prodotto: Service Demo 1	Codice: 00000000	Tel: +393285738360	Mail	Patologia	Note
		Stato: Attivo		Data nascita: 02/02/1988			
QUESTIONARIO	DESCRIZIONE	DATA RICEZIONE	DATA COMPLETAMENTO	PUNTEGGIO	COMPLETATO		
Hub_Survey_1	Salute rispetto ultimo controllo	15/04/2020 12:08:34	06/04/2020 09:58:41		<input checked="" type="checkbox"/>		
Hub_Survey_1	Salute rispetto ultimo controllo	06/04/2020 17:27:29	06/04/2020 09:58:40		<input checked="" type="checkbox"/>		
Hub_Survey_2	Stato di salute giornaliero				<input type="checkbox"/>		
Hub_Survey_1	Salute rispetto ultimo controllo	06/04/2020 06:45:10			<input type="checkbox"/>		
Hub_Survey_1	Salute rispetto ultimo controllo	06/04/2020 09:59:02			<input type="checkbox"/>		

In questa pagina sono presenti tutti i questionari assegnati al paziente che può compilare direttamente dall'APP HP Mobile ognuno di essi ha la possibilità di vedere le risposte date cliccando sul singolo questionario

DOMANDE/RISPOSTE	
DOMANDA	RISPOSTA
Come giudica oggi il suo stato di salute?	Cattivo
Come si sente oggi rispetto all'ultimo controllo?	Invariato
Dall'ultimo controllo sono emersi nuovi problemi?	Sì, ho eseguito nuovi esami di controllo; Sì, sono andato in PS
Ha eventuali note o segnalazioni da fare?	testo


Chat

La pagina della chat permette di comunicare rapidamente con gli utenti che sono stati inseriti nella sezione Contatti Chat . È possibile inviare e ricevere sia messaggi che eventuali allegati.



Cliccando sull'icona della graffetta in basso a destra è possibile inviare un allegato come messaggio, sono supportati solo PDF e immagini e devono avere dimensione inferiore ai 5 MB.

Nel caso di un allegato PDF viene mostrata un'anteprima della prima pagina e sotto l'indicazione del numero di pagine del documento

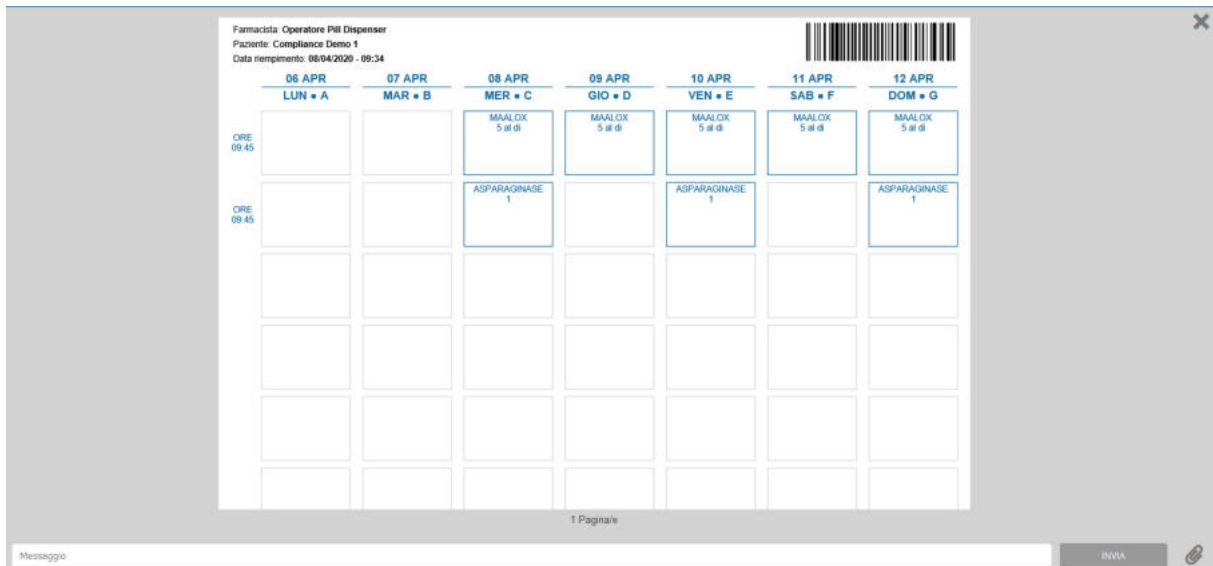

Se invece si tratta di un'immagine ne viene mostrata l'anteprima.



Una volta selezionato l'allegato o scritto il messaggio cliccare il tasto "Invia" per inviarlo.

I messaggi ricevuti vengono visualizzati con eventuale allegato, testo e la data.



Formazione

Si tratta di una pagina che comprende i documenti associati al paziente dall'operatore e anche gli altri documenti a disposizione dell'operatore, che potrebbe decidere di associare al paziente in seguito. Per associare un documento a un paziente, da questa pagina l'operatore può trascinare un documento presente nella colonna di sinistra (quelli associabili) nella colonna di destra (quelli associati a questo paziente specifico).

Premendo la x a destra della riga del documento associato nella colonna di destra, un operatore può decidere di disassociare tale documento dal paziente.

In ogni colonna è anche presente un filtro testuale per cercare i documenti desiderati.

CGM | **TELEMEDICINE**
Connected Patient Solutions

4679 ALLARMI | 4 CHAT | 438 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERITI ADMIN

Patient Demo 2

Prodotto: Codice: 00000004 Tel: +39475; +359585; Mail: supporto_hp@res.it; Patologie: Iperensione essenziale non specificata; Ipercolesterolemia pura; Stato: Attivo; Data nascita: 29/05/2014; Note: note

ASSOCIABILI

PUBBLICATO IL	NOME	DESCRIZIONE	SCADENZA
09/04/2021	Prova privato	Prova privato	
26/07/2020	Bilancia Name	Bilancia descrizione	

ASSOCIATI

VISIBILE DAL	NOME	DESCRIZIONE	SCADENZA
13/04/2021	TestLit	TestLit	
14/03/2021	caso	caso in formato descr...	31/07/2022
12/07/2020	Esempio test	TEST ESEMPIO	
10/04/2019	Nome Esempio Prova N...	Link Prova	
07/03/2019	WebMail	WebMail Roundcube	14/05/2022
	Prova	Prova	12/07/2021

Menu: CARTELLA PERSONALE (Anamnesi, Terapia, Accessi, Diario, Eventi, Segnalazione Eventi, Valutazione Infermerist..., Esami), COMUNICAZIONE (Questionari, Questionari App, Chat, Formazione), Contatti Chat, Documenti Personali, COMPLIANCE. Riduci menù

Questo materiale sarà poi accessibile dall'APP nella sezione empowerment.

Contatti Chat

In questa pagina è possibile gestire i contatti dell'assistito aperto nel dettaglio paziente, i contatti possono essere di tipo "Operatore", "Infermiere", "Gruppo" o "Call Center"

CONTATTI

Cerca contatti

TIPO	NOMINATIVO
Infermiere	Adrian HP3
Call Center	CUP PARMA
Utente	Jimmy Connors
Infermiere	Operator4 Test
Utente	Roger Federer
Gruppo	secondo gruppo

Menu: DATI GENERALI (Dati Anagrafici, Mappa, Prodotti, ICD, Anamnesi), SCHEDA PAZIENTE, ALLARMI, CARTELLA PERSONALE, COMUNICAZIONE (Questionari, Questionari Hub, Formazione), Contatti Chat, COMPLIANCE. Riduci menù

Cliccando il pulsante "+" si apre la finestra di dettaglio dove è possibile inserire un nuovo contatto, in base alla tipologia viene mostrata la relativa lista di possibilità:

- Gruppo, viene mostrata la lista dei gruppi a cui può essere associato l'assistito
- Operatore/Infermiere, vengono mostrati gli operatori a cui può essere associato l'assistito

- Call Center, vengono mostrati i riferimenti a cui può essere associato l'assistito con il numero di telefono in modalità di sola lettura

Inserimento nuovo contatto

Tipo contatto: Call Center

Riferimento: CUP Piacenza

Numero di telefono: 0523943524

Salva Chiudi

Documenti Personali

In questa pagina sono presenti i documenti personali e i referti degli esami fatti. Se la colonna “Sorgente” è vuota il documento è stato inserito dal paziente, altrimenti c'è il nome dell'operatore che lo ha caricato.

The screenshot shows the CGM TELEMEDICINE interface for a patient named "Patient Demo 2". The top navigation bar includes "ALLARMI" (4679), "CHAT" (4), and "ATTIVITÀ" (438). The patient's profile information is displayed at the top, including their ID (0000004), phone number (+39473; +359585), email (supporto.tgi@hex.it), birth date (29/05/2014), and medical history (Patologia: ipertensione essenziale non specificata; Ipercolesterolemia pura). The main area contains a table of documents:

DATA	ALLEGATO	NOME	TIPOLOGIA	NOTE	SORGENTE	FEEDBACK LETTURA
18/11/2022 13:15:59		Videoconsulti	Referto		Adm. HP3	
08/10/2020 09:43:36		Spirometria	Referto		Operatori Test	

A sidebar on the left lists various menu items, with "Documenti Personali" highlighted. A plus sign (+) button is visible in the bottom right corner of the document list area.

Per inserire un nuovo documento occorre dare un click sul tasto +; si aprirà la seguente schermata:

The screenshot shows the "DETTAGLIO DOCUMENTO PERSONALE" form. It contains the following fields:

- Nome documento *:
- Tipologia *:
- Note:
- Visibile al paziente:
- Allegato:

At the bottom right, there are "Salva" and "Chiudi" buttons.

Al termine del salvataggio e nel caso in cui si sia contrassegnato il flag “Visibile al paziente” quest’ultimo verrà avvertito via e-mail della presenza del nuovo documento.

COMPLIANCE

Impostazione Terapia

In questa pagina è possibile impostare le schedulazioni delle terapie che vanno assunte tramite vassoio monouso. Nel calendario è possibile selezionare la riga su cui si vuole aggiungere la terapia farmacologica e la relativa pianificazione e visualizzare i blister che hanno già una pianificazione grazie alla presenza del cerchietto blu sul loro angolo superiore destro.

The screenshot shows the 'COMPLIANCE' section of the CGM Telemedicine interface. At the top, there are navigation tabs for 'ALLARMI', 'CHAT', and 'ATTIVITÀ'. Below this, patient information for 'Andrea Bianchi' is displayed. The main area features a calendar from 19/06/2023 to 25/06/2023. The calendar grid has columns for days of the week (LUN, MAR, MER, GIO, VEN, SAB, DOM) and rows for blister slots (A1-A5, B1-B5, C1-C5, D1-D5, E1-E5, F1-F5, G1-G5). A red box highlights the A2 slot. To the right, a detailed view for the selected therapy (A2) shows parameters: 'ORA *' (15:30), 'PIANIFICAZIONE *' (Ricorrente), 'FREQUENZA *' (Giornaliera), 'RICORRENZA (giorni)' (1), 'DATA INIZIO *' (19/06/2023), and 'DATA FINE' (23/06/2023). At the bottom right, there are buttons for 'Elimina' (red) and 'Salva' (green).

Le prime 5 righe da A1 fino a A5 permettono di inserire e gestire le terapie dentro al vassoio; l'ultima riga, contraddistinta da 3 puntini (...), invece consente la gestione delle terapie fuori vassoio, ad esempio farmaci in forma liquida che non possono essere inseriti nel blister.

Nelle pianificazioni della terapia è possibile impostare l'orario, il tipo di pianificazione (una volta/ricorrente), la frequenza (Giornaliera/Settimanale/Mensile), la ricorrenza (ogni quanti giorni/settimane/mesi), una data di inizio e una di fine.

Sulla stessa riga di blister (ad esempio A2 ...G2) è possibile inserire terapie diverse a scadenza settimanale facendole partire da blister diversi: ad esempio cliccando sul blister A2 ed inserendo una terapia a ricorrenza settimanale selezionando i giorni dal lunedì al venerdì e poi, cliccando su F2, inserirne un'altra, sempre a ricorrenza settimanale ma selezionando i giorni di sabato e domenica.

Cliccando sul pulsante "Aggiungi terapia" si apre un dettaglio in cui scegliere il farmaco ATC/AIC, specificare la posologia ed inserire una descrizione relativa alla forma della pillola per un rapido riconoscimento da parte dell'utente:

MODIFICA TERAPIA - 27/06/2023 - B1

Principio attivo-ATC:	(R06AA02) DIFENIDRAMINA HCl 0.2 g C.R. (cloride) H- 12.TS012.83R
Nome commerciale-AIC:	
Posologia *:	1 cps di
Descrizione farmaco:	pillola tonda di colore bianco

Salva Chiudi

Per i fuori vassoio la finestra del dettaglio prevede anche la pianificazione della terapia

MODIFICA TERAPIA - 26/06/2023 - A ...

Principio attivo-ATC:	
Nome commerciale-AIC:	(D29668017) CORTISONE ACETATO
Posologia *:	1 cps di
Descrizione farmaco:	bustina di colore blu

ORA *:	17:30
PIANIFICAZIONE *:	Ricorrente
FREQUENZA *:	Settimanale
RICORRENZA (Settimanale):	1
GIORNO *:	lunedì, mercoledì, venerdì
DATA INIZIO *:	19/06/2023
DATA FINE:	30/06/2023

Salva Chiudi

Vassoi Terapia

In questa pagina è possibile vedere una lista di vassoi creati, ogni vassoio fa riferimento ad una settimana di terapia. Per ciascun vassoio è possibile vedere il codice, la data, l'operatore che lo ha riempito (se riempito), la data di riempimento (se riempito), l'operatore che lo ha controllato (se controllato), la data di consegna (se consegnato), visualizzare la compliance e stampare il report.

Cliccando sul pulsante “+” si apre una nuova finestra che mostra la prima settimana disponibile da cui iniziare a creare un vassoio con relativa lista di farmaci presenti in quella settimana e la loro quantità totale.

FARMACO	POSOLOGIA	DOSAGGIO	QUANTITÀ
(029666017) CORTISONE ACETATO	1 cps dl	20 COMPRESSE 25 MG	3
(R06AA02) DIFENIDRAMINA -/- 0.2 g O.R. (chloride) -/- 12.750'12.83R	1 cps dl		7
(H02AB10) CORTISONE -/- 37.5 mg O.P. -/- 12.85	1 cps dl		8

Proseguendo cliccando su “Inizia Riempimento” si passa automaticamente allo step successivo di riempimento del vassoio, dove, grazie ad una procedura guidata, è possibile riempire ogni singolo blister inserendo codice a barre, lotto e scadenza dei farmaci presenti nelle terapie.

CGM | TELEMEDICINE

26303 ALLARMI 0 CHAT 10 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

Andrea Bianchi

Prodotto: Telemonitoraggio; Service Demo 1
Codice: 0000573
Tel: 11223264854; Stato: Attivo
Mail: test@tes.com; Data nascita: 01/01/1970
Patologie: Note

dal 19/06/2023 al 25/06/2023

19 GIU LUN • A	20 GIU MAR • B	21 GIU MER • C	22 GIU GIO • D	23 GIU VEN • E	24 GIU SAB • F	25 GIU DOM • G
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1
A2	B2	C2	D2	E2	F2	G2
A3	B3	C3	D3	E3	F3	G3
A4	B4	C4	D4	E4	F4	G4
A5	B5	C5	D5	E5	F5	G5

Riempi Blister A1 - 16:30

Step 1 di 15
Procedura di riempimento:
1) Identificare il blister indicato in figura
2) Verificare che il blister sia correttamente sanificato
3) Inserire al suo interno la seguente terapia:

1 cps 45, DIFENDRAMINA /- 0.2 g O.R (chloride) /- 12,75012,83R

Codice a barre: 758947548478
Lotto: L05453
Scadenza: 19/03/2024
Terapia inserita:

AVANTI

Dopo aver flaggato “Terapia Inserita” si può andare avanti, per il riempimento dei blister successivi: i campi Codice a barre, Lotto e scadenza saranno precompilati sarà sufficiente flaggare “Terapia inserita” per poter proseguire. Dopo aver riempito tutti i blister il Pulsante “Avanti” verrà sostituito da “Report” cliccando il quale si completerà il riempimento del vassoio e si potrà stampare il report di lavorazione del vassoio.

Dati Generali		MDS
Farmacista	Administrator General	A0000001084230619
Paziente	Bianchi Andrea	
Data riempimento	19/06/2023 16:31	

	19 GIU LUN • A	20 GIU MAR • B	21 GIU MER • C	22 GIU GIO • D	23 GIU VEN • E	24 GIU SAB • F	25 GIU DOM • G
ORE 16:30	DIFENIDRAMI NA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75O12,83R 1 cps di	DIFENIDRAMI NA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75O12,83R 1 cps di	DIFENIDRAMI NA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75O12,83R 1 cps di	DIFENIDRA MINA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75O12,83 R 1 cps di	DIFENIDRAM INA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75O12,83 R 1 cps di	DIFENIDRA MINA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75O12,83 R 1 cps di	DIFENIDRAMI NA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75O12,83R 1 cps di
ORE 16:30	CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85 1 cps di	CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85 1 cps di	CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85 1 cps di	CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85 1 cps di	CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85 1 cps di		

	17:30 CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85 1 cps di Antiinfiammat orio		17:30 CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85 1 cps di Antiinfiammat orio		17:30 CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85 1 cps di Antiinfiammat orio		

Scatole utilizzate				
Farmaco	Barcode	Lotto	Scadenza	Totale
DIFENIDRAMINA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75O12,83R	756947549478	L05453	19/03/2024	7
CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85	8799354353	L34276	19/12/2023	5
CORTISONE ACETATO 20 COMPRESSE 25 MG	029666017			1
CORTISONE ACETATO 20 COMPRESSE 25 MG	029666017	L12287	20/09/2023	2
Totale:				15

Firma Operatore Preparazione

Firma Operatore Controllo

Il pulsante **REPORT** è presente anche nella schermata dell'elenco dei vassoi e consente, oltre alla stampa del report di controllo, anche quella dell'etichetta da utilizzare sul vassoio.

PAZIENTE: BIANCHI ANDREA
DAL 19/06/2023 AL 25/06/2023

Per qualsiasi problema o dubbio riguardante l'assunzione dei farmaci contattare:
H&S Telemonitoraggio
H&S Telemonitoraggio descrizione

Paziente		MDS	
Nome	Andrea	A0000001084230619	
Cognome	Bianchi		
Data di nascita	01/01/1970		
Codice fiscale	ANDBNC87D22G535F		
Data inizio	19/06/2023		
Data fine	25/06/2023	Data riempimento	19/06/2023 16:31
Farmaci In Blister	Descrizione Farmaco	Posologia	Quantità
(R06AA02) DIFENIDRAMINA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75O12,83R		1 cps di	7
(H02AB10) CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85		1 cps di	5
Farmaci Fuori Blister	Descrizione Farmaco	Posologia	Quantità
(029666017) CORTISONE ACETATO 20 COMPRESSE 25 MG	Antiinfiammatorio	1 cps di	3
(H02AB10) CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85		1 cps di	3

L'etichetta riporta le indicazioni terapeutiche che il paziente deve seguire nella settimana di terapia a cui fa riferimento il blister.

Tornati alla lista di vassoi nella riga che indica quello appena riempito sarà possibile tramite il pulsante “Controlla” effettuare una verifica delle terapie inserite nel vassoio per intercettare eventuali errori di riempimento. Quindi l’operatore adibito al controllo del blister dovrà effettuare accesso in piattaforma con le credenziali ricevute e verificare che il vassoio sia stato correttamente riempito.

The screenshot shows the CGM TELEMEDICINE interface. At the top, there are navigation tabs for 'ALLARMI', 'CHAT', and 'ATTIVITÀ'. Below this, a header bar contains user information for 'Andrea Bianchi'. The main content area is a calendar view from 19/06/2023 to 25/06/2023, showing a grid of blister trays (A1-G5) for each day. The A1 tray is highlighted with a red border. To the right, a 'Controlla Blister A1 - 16:30' panel displays patient details and a 'CONFERMA' button.

Per ogni blister saranno visualizzate le terapie inserite con la possibilità di cambiarle nel caso ci siano errori. Premendo il pulsante “Salva” vengono apportate eventuali modifiche al blister corrente, con il pulsante “Esci” si torna alla lista di vassoi e con “Conferma” si dichiara che il vassoio è valido finendo l’operazione di controllo.


Dopo aver terminato questa operazione sarà possibile effettuare la consegna del vassoio tramite l’apposito pulsante “Consegna” che aprirà un dettaglio dove sarà possibile indicare data e ora di consegna (Precompilati con data e ora attuali).

The screenshot shows the 'CONSEGNA VASSOIO' form. It includes fields for 'Data' (19/06/2023), 'Ora' (16:41), and a 'Note' field. There are 'Salva' and 'Chiudi' buttons at the bottom right.


Misura Compliance

Finite le operazioni sul vassoio ed effettuata la consegna sarà possibile visualizzare e modificare la compliance tramite la sezione dedicata. I feedback sui blister nei vassoi monouso saranno di default in stato “preso” e per l’operatore sarà possibile modificare manualmente la compliance se il vassoio risulta non completamente vuoto al momento della riconsegna. Le icone di compliance saranno verdi se la terapia risulta correttamente assunta, gialle se risulta assunta in ritardo, rosso se non risulta assunta.

Grazie al grafico superiore si può vedere l’andamento nella settimana, mentre in quello inferiore si ha una percentuale degli stati tramite un grafico a torta.

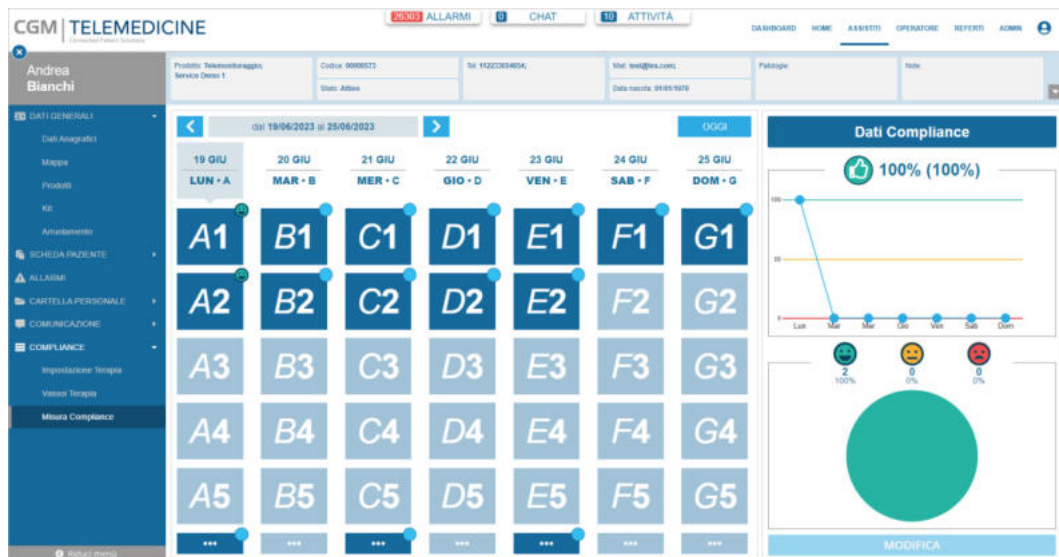

Cliccando su “Modifica” è possibile modificare lo stato del blister selezionato (verde se assunta, rosso se non assunta).

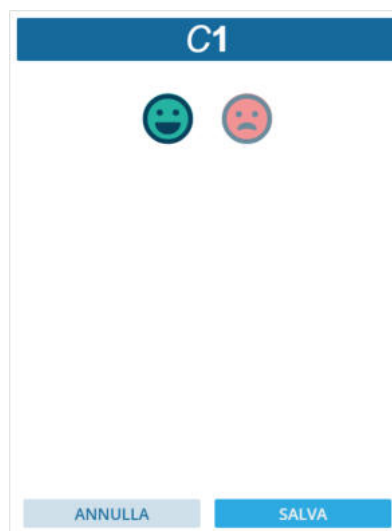

Ogni attività legata alla Compliance terapeutica sarà visualizzata in calendario come “Pro-Memoria terapeutico” in modalità sola lettura.

Dettaglio attività ID 285520

- Attività
- Pianificazione
- Operatori
- Terapie
- Storico
- Reminder
- Note operative

Paziente:

Prodotto:

Tipo Attività:

Titolo *:

Descrizione:

Orario: Durata effettiva (min):

Stato:

Note:

Nella pagina “Cartella personale - Terapia” sarà visibile una seconda lista contenente tutte le terapie legate alla Compliance terapeutica.

CGM TELEMEDICINE

4677 ALLARMI | 4 CHAT | 438 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

Patient Demo 2

Prodotto: Codice: 00000004 Tel: +390475; +390585; Mail: supporto_tpm@hes.it; Patologie: ipertensione essenziale non specificata; ipercolesterolemia pura Note: note

Stato: Attivo Data nascita: 29/05/2014

Terapia

DATA INIZIO	DATA FINE	TERAPIA	POSIOLOGIA	ORARIO	NOTE
05/09/2022		NEBIVOLOLO	5.0		
02/05/2022		ARGOPRESSINA (VASOPRESSINA)	10		

Terapia Pili Dispenser

DATA INIZIO	DATA FINE	TERAPIA	POSIOLOGIA	ORARIO	NOTE
03/10/2022	03/10/2022	TANTUM VERDE GOLA	1 volta al dì		Terapia Pili Dispenser
03/10/2022	31/10/2022	MOMENT	1 cp al dì	16.15	Terapia Pili Dispenser
03/10/2022	31/10/2022	MOMENT	1 cp al dì	16.15	Terapia Pili Dispenser
15/07/2022		PARACETAMOLO	1 day	16.0	Medication therapy
07/05/2021	03/10/2022	ASPIRINA	1 al dì	14.45	Terapia Pili Dispenser
17/03/2021	31/10/2022	RAVICTI	10	16.15	Terapia Pili Dispenser

CGM CARE MAP rova

Operatore

Allarmi

La maschera Allarmi si trova sotto il menù Operatore e consente all'operatore di verificare gli allarmi scattati per i propri pazienti. Ogni allarme è caratterizzato dalla Criticità che incide sul colore della seconda colonna e da altre informazioni importanti per verificare lo stato del paziente come Data e ora, Stato, Nome assistito, Titolo, Messaggio, Tipo allarme.

In alto a destra è presente un pulsante Aggiorna per aggiornare la pagina con gli allarmi più recenti.

È possibile visualizzare tutti gli allarmi o solamente quelli aperti. Sono presenti anche filtri di ordinamento su ogni colonna, filtri specifici per le colonne stato, titolo, messaggio, tipo allarme e un filtro testuale con la ricerca al centro delle pagine in alto.

ALLARMI

TUTTI APERTI

Cerca allarmi

Ultima Sincronizzazione: 16:44:21

AGGIORNA

DATA/ORA	STATO	ASSISTITO	TIPO ASSISTITO	TIPO ALLARME	MESSAGGIO	MODIFICATO DA
14/11/2022 15:50:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
15/11/2022 15:50:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
16/11/2022 15:50:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
17/11/2022 15:50:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
18/11/2022 15:50:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
19/11/2022 15:50:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
20/11/2022 15:50:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
21/11/2022 15:50:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
22/11/2022 15:50:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
23/11/2022 15:50:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
24/11/2022 15:50:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
25/11/2022 15:50:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
26/11/2022 15:50:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
27/11/2022 15:50:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
28/11/2022 15:50:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
29/11/2022 15:50:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
30/11/2022 15:50:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
29/11/2022 12:35:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
27/11/2022 12:35:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
28/11/2022 12:35:00	Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	

Cliccando su un allarme si apre la schermata con il dettaglio del paziente nella sezione allarmi.

La maschera Dettaglio Allarmi va ad analizzare l'allarme direttamente sulla corrispettiva pagina nel menù dell'assistito e consente all'operatore di visualizzare i dettagli dell'allarme, di cambiarne lo stato, inserire note e visualizzare lo storico degli allarmi di quello specifico utente.

DETTAGLIO ALLARME		DETTAGLIO ALLARME		DETTAGLIO ALLARME	
● ROSSI		● ROSI		● ROS	
Dettaglio	Misure	Storico	Dettaglio	Misure	Storico
ID AVVISO	43761	Misurazione	Valore	Data	Modificato il
TIPOLOGIA	Clinico	Pressione Sistolica	130	08/09/2019	Modificato da
DATA	18/12/2018	Pressione Sistolica	144	08/09/2019	Stato
TIPO MISURA	Pressione Sistolica	Pressione Sistolica	123	05/09/2019	Note
VALORE LETTO	156 (18/12/2018 13:05:51 (+01:00))	Pressione Sistolica	126	01/09/2019	20/12/2018
VALORE SOGLIA	145	Pressione Sistolica	130	27/02/2019	Maddalena Vigg
TITOLO	Allarme da soglia Unisalute	Pressione Sistolica	140	21/02/2019	Maddalena Vigg
MESSAGGIO	Misure: Pressione Sistolica - valore compreso tra 145 e 180	Pressione Sistolica	136	19/02/2019	Chiusura NO ricezioni...
STATO	Chiusura NO ricezioni misura	Pressione Sistolica	149	16/02/2019	contattata di sta bene...
NOTE	contattata di sta bene. Non può procedere oltre nella conversazione.	Pressione Sistolica	143	15/02/2019	nessuna risposta ric...
		Pressione Sistolica	157	15/02/2019	terzo contatto per a...
		Pressione Sistolica	148	15/02/2019	
		Pressione Sistolica	134	14/02/2019	
		Pressione Sistolica	139	14/02/2019	
		Pressione Sistolica	155	14/02/2019	
		Pressione Sistolica	129	12/02/2019	
		Pressione Sistolica	123	08/09/2019	

Esporta Excel/Esporta PDF

Tramite i pulsanti Esporta in Excel ed Esporta in PDF nel fondo della pagina, è possibile scaricare un file contenente la griglia visualizzata nell'istante del click sul pulsante. Nel documento sarà visualizzato un elenco con gli eventuali filtri applicati sulle colonne e nella ricerca globale.

ALLARMI							TUTTI	APERTI	Cerca allarmi	Q	Ultima Sincronizzazione: 15/22/06
DATA/ORA	STATO	ASSISTITO	TIPO ASSISTITO	TIPO ALLARME	MESSAGGIO	Modificato da					
21/01/2020 14:41:00	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misure: Pulsazioni - Valore maggiore di 99	Case Manager Demo					
22/01/2020 09:40:01	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misure: Pressione Diastolica - Valore maggiore di 105						
22/01/2020 09:42:00	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misure: Pulsazioni - Valore maggiore di 99						
29/01/2020 20:09:01	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misure: Pulsazioni - Valore maggiore di 99						
29/01/2020 20:26:00	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misure: Pulsazioni - Valore maggiore di 99						
29/01/2020 20:36:01	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misure: Pulsazioni - Valore maggiore di 99						
29/01/2020 21:21:06	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misure: Pulsazioni - Valore maggiore di 99						
29/01/2020 21:22:01	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misure: Pulsazioni - Valore maggiore di 99						
29/01/2020 21:28:01	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misure: Pulsazioni - Valore maggiore di 99						
30/01/2020 07:54:01	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misure: Pulsazioni - Valore maggiore di 99						
30/01/2020 08:05:01	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misure: Pulsazioni - Valore maggiore di 99						
31/01/2020 10:06:00	Da gestire	Compliance Demo 1		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio gill dispenser						
04/02/2020 10:14:00	Da gestire	Compliance Demo 1		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio gill dispenser						
05/02/2020 08:20:00	Da gestire	Compliance Demo 1		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio gill dispenser						
05/02/2020 08:20:00	Da gestire	Compliance Demo 1		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio gill dispenser						
05/02/2020 09:53:00	Da gestire	Compliance Demo 1		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio gill dispenser						
05/02/2020 11:05:00	Da gestire	Compliance Demo 1		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio gill dispenser						
05/02/2020 12:07:00	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misure: Pulsazioni - Valore maggiore di 99						
05/02/2020 10:14:00	Da gestire	Compliance Demo 1		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio gill dispenser						
06/02/2020 08:20:00	Da gestire	Compliance Demo 1		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio gill dispenser						



Esporta in Excel



Esporta in PDF

Agenda

Synchronizing Healthcare



CompuGroup
Medical

Agenda – Nuova attività

È possibile inserire una nuova attività in agenda con il pulsante + in basso a destra. Nella schermata sono presenti le aree “Attività” e “Pianificazione” con i soliti parametri, oltre a “Reminder APP”.

Cliccando su un evento in agenda, si passa direttamente alla pagina Calendario sotto Scheda Paziente nel menù dell’assistito, e viene aperto lo stesso pop-up a centro pagina con la possibilità di rivedere ed eventualmente modificare i dati dell’evento.

The screenshots show the following details for activity ID 121023:

- Attività Tab:**
 - Paziente: Digita nome e/o cognome per cercare...
 - Tipo Attività: Appuntamento personale
 - Titolo *: Farmacia
 - Descrizione: Acquisto farmaci
 - Orario: 17:00 (Durata effettiva (min):)
 - Stato: Da eseguire
 - Inviare su Hub:
 - Notifica solo la prima:
 - Note: (empty text area)
- Pianificazione Tab:**
 - Tipo pianificazione *: Una volta
 - Data *: 02/12/2022 (Ora *: 17:00)
 - Fine *: 02/12/2022 (Ora *: 17:30)
- Reminder APP Tab:**
 - Reminder attività non eseguite:
 - Reminder attività non eseguite:
 - Ogni quante ore *: 24
 - Fino a quando (ore) *: 72
- Note operative Tab:**

DATA INIZIO	ORA INIZIO	TL...	D...	Operatore	STATO	N...	DATA MODIFICA
02/12/2022	17:00	Fa...	Ac...	Admin HP3	Da eseguire		02/12/2022 16:52

The 'Note operative' tab shows a table with columns: Data, Titolo, Sottotitolo, Note, Utenti... A large '+' button is visible at the bottom right of the table area.

È possibile aggiungere note operative sull’attività tramite il tasto +

La pianificazione dell'attività può essere una volta o ricorrente e la ricorrenza può essere giornaliera, settimanale o mensile.


Attività

Sotto il menù Operatore è presente anche la schermata Attività, che visualizza le attività di tutti i pazienti in cura dall'operatore. Ogni attività ha la data di inizio, il nome del paziente, il tipo di attività, il titolo, la descrizione, le note e lo stato.

Sono presenti filtri di ordinamento e specifici su ogni colonna e un filtro testuale con la ricerca al centro della pagina in alto.

DATA INIZIO	PAZIENTE	TIPO ATTIVITÀ	TITOLO	DESCRIZIONE	ASSEGNATO A	NOTE	STATO	MODIFICATO DA
30/11/2022 16:45	Quilato Patient...	Ribrevazione mi...	ECG HE		Operatore Barlo		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 16:50	Demo 2 Patient	Pro-Memoria L...	Therapeutic reminder	1	Operatore4 Test, Operatore No Last Change Test		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 16:50	Quilato Patient...	Ribrevazione mi...	Prescrizione antibiotica		Operatore Barlo		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 16:50	Diabete+ LFC ...	Pro-Memoria L...	Pro-Memoria terapeutico	100	Sensuale Last		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 15:45	Quilato Patient...	Ribrevazione mi...	Glucozolo		Operatore Barlo		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 15:30	Nascita Prova ...	Ribrevazione mi...	Glucozolo		Operatore Barlo		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 15:30	PAZIENTE DE...	Pro-Memoria L...	Pro-Memoria terapeutico	1	Adelio MP3		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 13:15	Nascita Prova ...	Formazione	Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova	Formazione da template			Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 13:00	Nascita Prova ...	Formazione	Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova	Formazione da template			Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 12:45	Nascita Prova ...	Formazione	Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova	Formazione da template			Scaduta	Processo automatico

Cliccando su un'attività è possibile rivederne i dettagli e modificarli allo stesso modo dell'Agenda.

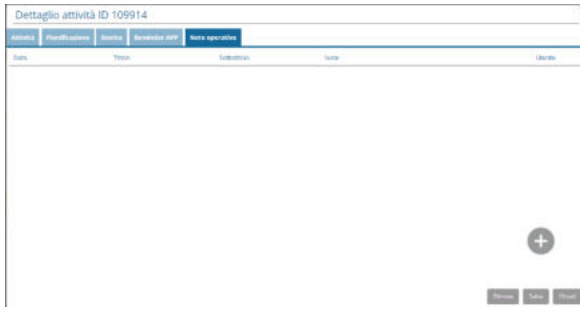

Esporta Excel/Esporta PDF

Tramite i pulsanti Esporta in Excel ed Esporta in PDF nel fondo della pagina, è possibile scaricare un file contenente la griglia visualizzata nell'istante del click sul pulsante. Nel documento sarà visualizzato un elenco con gli eventuali filtri applicati sulle colonne.

CGM | TELEMEDICINE 4372 ALLARMI 4 CHAT 439 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN +

ATTIVITÀ

Cerca attività 02/11/2022 02/12/2022 Aggiorna

DATA INIZIO	FAZIENTE	TIPO ATTIVITÀ	TITOLO	DESCRIZIONE	ASSEGNATO A	NOTE	STATO	MODIFICATO DA
30/11/2022 16:45	Quinto Patient...	Rilevazione ml...	EKG MI		Operatore Barlo		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 16:58	Devo 2 Patient	Pro Memoria L...	Therapeutic consider	1	Operatore Test, Operatore Mi Last Change Test		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 16:58	Quinto Patient...	Rilevazione ml...	Pressione arteriosa		Operatore Barlo		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 16:58	Diabete+ LTC ...	Pro Memoria L...	Pro Memoria terapeutico	100	Sensale Last		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 15:45	Quinto Patient...	Rilevazione ml...	Glucosio		Operatore Barlo		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 15:38	Nascita Prova ...	Rilevazione ml...	Glucosio		Operatore Barlo		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 15:38	FAZIENTE DE...	Pro Memoria L...	Pro Memoria terapeutico	1	Adonis HP3		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 13:15	Nascita Prova ...	Formazione	Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova	Formazione da template			Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 13:08	Nascita Prova ...	Formazione	Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova	Formazione da template			Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 12:45	Nascita Prova ...	Formazione	Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova	Formazione da template			Scaduta	Processo automatico

Supporto 121-140-1887

 Esporta in Excel

 Esporta in PDF

Chat

La pagina della chat permette di comunicare rapidamente con i pazienti provvisti di app o di accesso al portale web, con altri operatori o con gruppi.

Cliccando sull'icona della graffetta in basso a destra è possibile inviare un allegato come messaggio, sono supportati solo PDF e immagini e devono avere dimensione inferiore ai 5 MB.

Nel caso di un allegato PDF viene mostrata un'anteprima della prima pagina e sotto l'indicazione del numero di pagine del documento

	06 APR LUN • A	07 APR MAR • B	08 APR MER • C	09 APR GIO • D	10 APR VEN • E	11 APR SAB • F	12 APR DOM • G
ORE: 09:45			MAALOX 5 al di	MAALOX 5 al di	MAALOX 5 al di	MAALOX 5 al di	MAALOX 5 al di
ORE: 09:45			ASPARAGINASE 1		ASPARAGINASE 1		ASPARAGINASE 1

Nel caso di un'immagine viene mostrata l'anteprima di essa.



Una volta selezionato l'allegato o scritto il messaggio cliccare il tasto "Invia" per inviarlo.

I messaggi ricevuti vengono visualizzati con eventuale allegato, testo e la data.

Formazione

La pagina Formazione mostra tutti i file di formazione che l'operatore può condividere con i suoi pazienti. Questi file possono essere documenti, video o link (indicato dall'icona a sinistra).

Tra i dati associati ad ogni file vi sono le date di pubblicazione e di scadenza, nome e descrizione, due flag che indicano se il documento sia stato pubblicato e se venga messo a disposizione dei pazienti automaticamente o su richiesta, il flag che contrassegna il documento come privato, cioè visibile solo all'operatore che l'ha caricato, l'eventuale riferimento alle patologie trattate, l'indicazione della sezione alla quale il documento appartiene e l'ordine di visualizzazione del documento all'interno di una sezione.

CGM TELEMEDICINE		4679 ALLARMI	4 CHAT	439 ATTIVITÀ	DASHBOARD	HOME	ASSISTITI	OPERATORE	REFERTI	ADMIN
FORMAZIONE										
Cerca formazione										
PUBBLICATO IL	SCADENZA	NOME	DESCRIZIONE	PUBBLICATO	INSERIMENTO AUTOM.	PRIVATO	PATOLOGIE	SEZIONE	ORDINAMENTO	
14/09/2021		Centers	test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Informazioni generali	10	
26/05/2021		Nome Esempio Prova No...	Link Prova	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Documenti cardiologici	2	
14/05/2021	31/05/2022	Prova Burlo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Prova Burlo	1	
14/04/2021		TestUit	TestUit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Test	4	
09/04/2021		Prova privato	Prova privato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Test	3	
28/07/2020		Bianca Nome	Bianca descrizione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Prova1	1	
13/07/2020		Esempio test	TEST ESEMPIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Test	2	
14/03/2019	01/08/2020	Nome	Descrizione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sadimo sessuale		0	
14/03/2019	31/07/2022	caso	caso in formato descri...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Documenti cardiologici	2	
07/03/2019	14/05/2022	WebMail	WebMail Roundcube	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Shigella dysenteriae, Kurashitar	Test	1	
06/03/2019	08/03/2019	YouTube	Pagina iniziale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sadimo sessuale		0	
06/03/2019	08/03/2019	FonAwesome	Pagina documento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0	
06/03/2019	14/03/2022	Ext.net	DragDrop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Documento it	1	
	01/08/2020	Nome	Descrizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Visita di controllo succes...	Documenti cardiologici	1	
		asdasasd	asdasdas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			10	
		dasdasdasdasdasd	dasdasdasdasdasd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			12	
	17/06/2021	Prova_1	Prova_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Documento it	1	
		Repubblica	test	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Informazioni generali	11	
		Il Fatto	test	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Informazioni generali	12	
		Gazzetta		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Informazioni generali	14	

Cliccando su un file di formazione è possibile visualizzare i suoi dettagli, modificarli o eliminare il file.

Cliccando il + (in basso a destra) sulla pagina principale è possibile inserire un nuovo file di formazione, visualizzando solamente la schermata di Dettaglio Formazione.

The image displays two screenshots of a web application interface for 'DETTAGLIO FORMAZIONE'.

The top screenshot shows the 'DETTAGLIO' tab. It features a form with the following fields and controls:

- Codice:** Input field with a search icon.
- Tipo Simulazione:** Dropdown menu with 'Documenti' selected.
- Data:** Date picker.
- Nome:** Input field with a search icon.
- Descrizione:** Input field with a search icon.
- Fornitore:** Input field with a search icon.
- Materiale:** Input field with a search icon.
- Prenota:** Input field with a search icon.
- Sede:** Input field with a search icon.
- Tag:** Input field with a search icon.
- Categorie:** Input field with a search icon.

The bottom screenshot shows the 'VISIBILITÀ' tab. It features a table with the following columns:

- ORGANIZZAZIONE**
- PRODOTTO**
- TIPO ASSISTITO**

Both screenshots include a green '+' icon in the bottom right corner, indicating the ability to add or edit content.

Con il + nelle pagine di Patologia e Visibilità è possibile aggiungere una patologia o modificare la visibilità al documento di formazione, questa configurazione permetterà di selezionare il contenuto specifico nella scheda paziente sotto Comunicazione>Formazione.

News

La maschera News offre la possibilità agli operatori di poter visionare, modificare ed eliminare le news cliccando su di essa.

Ogni news è caratterizzata da:

- Data inizio
- Data fine
- Testo
- Creato da
- Modificato da

CGM | TELEMEDICINE
Connected Patient Solutions

4679 ALLARMI | 4 CHAT | 439 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

NEWS

Cerca news

DATA INIZIO	DATA FINE	TESTO	CREATO DA	MODIFICATO DA	VISIBILITÀ
22/09/2022		News di prova	Admin HP3	Admin HP3	Visibile a tutti
09/09/2021	10/09/2021	News Operatore Burlo	Operatore Burlo	Operatore Burlo	Condiviso tra organizzazioni
01/09/2021	04/09/2021	News Operatore	Operatore4 Test	Operatore4 Test	Condiviso tra organizzazioni
27/05/2021	28/05/2021	Test1	Admin HP3	Admin HP3	Visibile a tutti
01/03/2019	09/09/2021	Test_2	Operatore4 Test	Admin HP3	Visibile a tutti
01/03/2019	09/09/2021	Test_3	Operatore4 Test	Admin HP3	Visibile a tutti
01/03/2019	09/09/2021	Test_4	Operatore4 Test	Admin HP3	Visibile a tutti
16/01/2019	09/09/2021	Test_1	Operatore4 Test	Admin HP3	Visibile a tutti

CGM CARE MAP Copyright

Il testo è quello che appare nel banner a scorrimento per il periodo di validità definito nei campi data Inizio e data Fine. La visibilità di ogni news inserita è definita dall'operatore che lo ha generata.

Ogni news può avere diversi ambiti di visibilità in base al tipo di news/comunicazione, per operatori, per distretto, per azienda ecc.

Con il + in basso a destra è possibile inserire una nuova news.

DETTAGLIO NEWS

DETTAGLIO

Testo * News di prova

Data inizio * 22/09/2022

Data fine *

VISIBILITÀ * Visibile a tutti

Salva Elimina Cancella

Documenti

La schermata Documenti contiene i vari documenti associati all'operatore. Ogni documento ha una data, un nome, una descrizione e una visibilità ed è possibile allegare un file o inserire un link.

CGM | TELEMEDICINE
Commercial Patient Solutions

4679 ALLARMI | CHAT | 459 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

DOCUMENTI

DATA DOCUMENTO	NOME	DESCRIZIONE	VISIBILITÀ
19/07/2022	test	test	Condiviso
11/03/2022	Prova Roberto	Prova Roberto	Personale
24/02/2022	Test 1	Test 1	Personale
23/02/2022	prova test	desc	Condiviso
20/01/2022	Test	Test-Ts	Visibile a tutti
21/01/2022	ProvaUM	ProvaUM	Visibile a tutti
06/06/2021	Test500	Prova	Condiviso
04/06/2021	Prova visibile a tutti	Prova visibile a tutti	Visibile a tutti
04/06/2021	Prova condiviso fratello	Prova condiviso fratello	Condiviso
04/06/2021	Prova condiviso figlio	Prova condiviso figlio	Condiviso
04/06/2021	Prova condiviso padre	Prova condiviso padre	Condiviso
01/07/2020	test	desc	Visibile a tutti
03/10/2014	aaa	aaa	Condiviso
02/09/2014	Prova Personale	asd	Condiviso

Mostra 1 - 14 di 14

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2022 H&M

Cliccando su ogni documento è possibile vedere i dettagli, modificarli o eliminare il documento.

Cliccando il + in basso a destra si apre lo stesso pop-up ed è possibile inserire un nuovo documento.

DETTAGLIO DOCUMENTO

DETTAGLIO

Nome *: Brochure APP Paziente

Descrizione *: Scheda cartacea inviata al paziente in merito all'uso dello smartphone

Visibilità *: Visibile a tutti

Link:

Documento: Scegli...


Salva Elimina Chiudi

Selezionando il box 'Link' è possibile inserire un link web (Url) invece di un documento, in questo caso l'icona del documento nella lista dei documenti apparirà con un differente formato per indicarne la tipologia:

14/12/2018	 Brochure Bilancia	Scheda cartacea inviata al paziente in merito all'uso della bilancia	Visibile a tutti
14/12/2018	 Link APP Paziente	Scheda cartacea inviata al paziente in merito all'uso dello smartphone	Visibile a tutti

Report

La schermata Report visualizza l'elenco dei report generati dal sistema e disponibili all'utente.



TELEMEDICINE
Connected Patient Solutions





















4679 ALLARMI

4 CHAT

439 ATTIVITÀ

[DASHBOARD](#)
[HOME](#)
[ASSISTITI](#)
[OPERATORE](#)
[REFERTI](#)
[ADMIN](#)

REPORT

DATA	TIPO REPORT	NOME	DESCRIZIONE	VISUALIZZATO
01/12/2022		Riconciliazione eventi avversi	Riconciliazione eventi avversi - Prodotto 1 - 01/12/2022	<input type="checkbox"/>
01/12/2022		Riconciliazione eventi avversi	Riconciliazione eventi avversi - Prodotto 2 - 01/12/2022	<input type="checkbox"/>
01/12/2022		Riconciliazione eventi avversi	Riconciliazione eventi avversi - Test Massimali 1 - 01/12/2022	<input type="checkbox"/>
01/12/2022		Riconciliazione eventi avversi	Riconciliazione eventi avversi - Prodotto 5 - 01/12/2022	<input type="checkbox"/>
01/12/2022		Cosma report mensile	Cosma report mensile - 01/12/2022	<input type="checkbox"/>
01/12/2022		ECG Giornalieri nell'arco dell'associazione	ECG Giornalieri nell'arco temporale dell'associazione - Farmacia	<input type="checkbox"/>
28/11/2022		Stato telemonitoraggio pazienti	Stato telemonitoraggio pazienti - Distretto Montale - 28-11-2022	<input type="checkbox"/>
24/11/2022		ECG Giornalieri nell'arco dell'associazione	ECG Giornalieri nell'arco temporale dell'associazione - Farmacia	<input type="checkbox"/>
21/11/2022		Stato telemonitoraggio pazienti	Stato telemonitoraggio pazienti - Distretto Montale - 21-11-2022	<input type="checkbox"/>
17/11/2022		ECG Giornalieri nell'arco dell'associazione	ECG Giornalieri nell'arco temporale dell'associazione - Farmacia	<input type="checkbox"/>
14/11/2022		Stato telemonitoraggio pazienti	Stato telemonitoraggio pazienti - Distretto Montale - 14-11-2022	<input type="checkbox"/>
10/11/2022		ECG Giornalieri nell'arco dell'associazione	ECG Giornalieri nell'arco temporale dell'associazione - Farmacia	<input type="checkbox"/>
07/11/2022		Stato telemonitoraggio pazienti	Stato telemonitoraggio pazienti - Distretto Montale - 07-11-2022	<input type="checkbox"/>
03/11/2022		ECG Giornalieri nell'arco dell'associazione	ECG Giornalieri nell'arco temporale dell'associazione - Farmacia	<input type="checkbox"/>
01/11/2022		Riconciliazione eventi avversi	Riconciliazione eventi avversi - Prodotto 1 - 01/11/2022	<input type="checkbox"/>
01/11/2022		Riconciliazione eventi avversi	Riconciliazione eventi avversi - Prodotto 2 - 01/11/2022	<input type="checkbox"/>
01/11/2022		Riconciliazione eventi avversi	Riconciliazione eventi avversi - Test Massimali 1 - 01/11/2022	<input type="checkbox"/>
01/11/2022		Cosma report mensile	Cosma report mensile - 01/11/2022	<input type="checkbox"/>
31/10/2022		Stato telemonitoraggio pazienti	Stato telemonitoraggio pazienti - Distretto Montale - 31-10-2022	<input type="checkbox"/>
27/10/2022		ECG Giornalieri nell'arco dell'associazione	ECG Giornalieri nell'arco temporale dell'associazione - Farmacia	<input type="checkbox"/>


< < | Pagina 1 di 12 | > > | 🔄

Mostrato 1 - 20 di 229

Questionari


In questa pagina è possibile visualizzare le statistiche relative alle risposte ricevute alle domande di un questionario e scaricarle in formato Excel.

La parte superiore della pagina consente di selezionare un questionario e di effettuare poi altri filtri sulle risposte in base al periodo di compilazione del questionario ed al sesso ed all'età dei compilatori. Una volta premuto il pulsante Aggiorna vengono visualizzate le statistiche richieste.

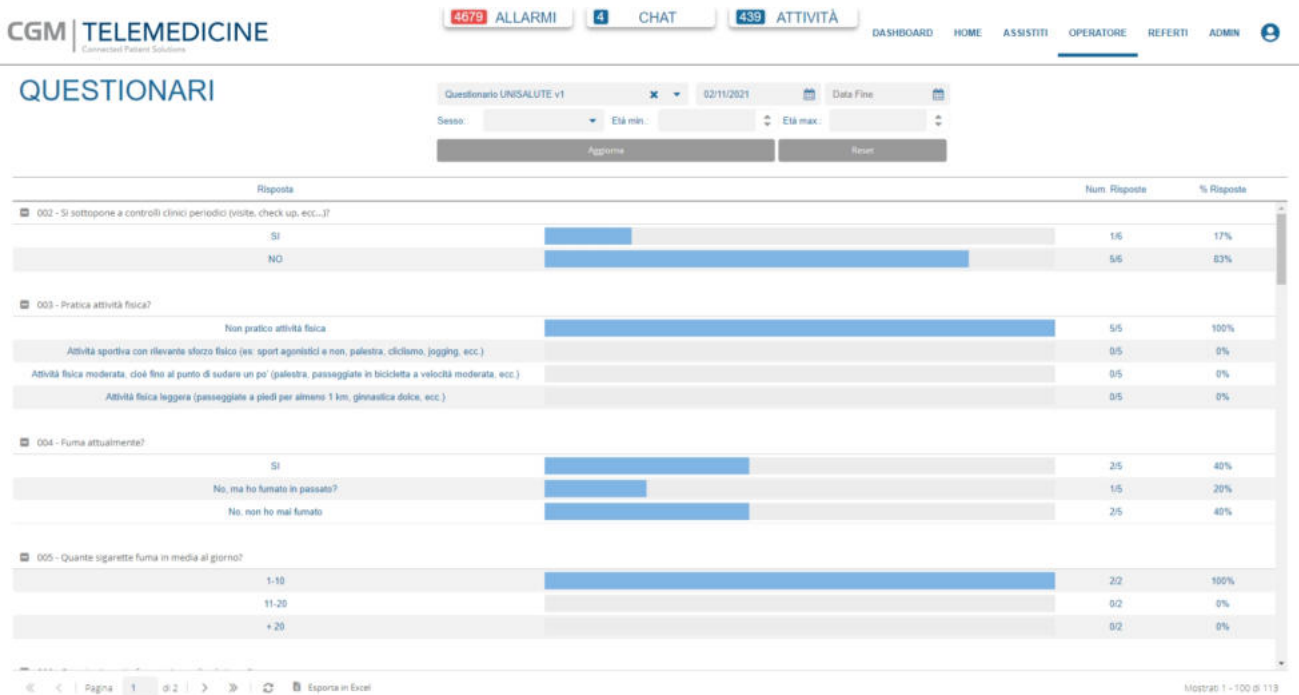

Cliccando su una risposta viene visualizzato il dettaglio delle risposte, con l'elenco degli assistiti che hanno risposto e per ciascun assistito è possibile visualizzare le singole risposte premendo su "VISUALIZZA RISPOSTE QUESTIONARIO", che apre la maschera di dettaglio relativa al questionario:

DETTAGLIO RISPOSTE		
ASSISTITO	DATA RISPOSTE	DETTAGLIO
Paziente Demo 9	17/01/2019	VISUALIZZA RISPOSTE QUESTIONARIO
Paziente Demo 11	09/02/2019	VISUALIZZA RISPOSTE QUESTIONARIO
Paziente Demo 12	16/02/2019	VISUALIZZA RISPOSTE QUESTIONARIO
Paziente Demo 13	29/12/2018	VISUALIZZA RISPOSTE QUESTIONARIO

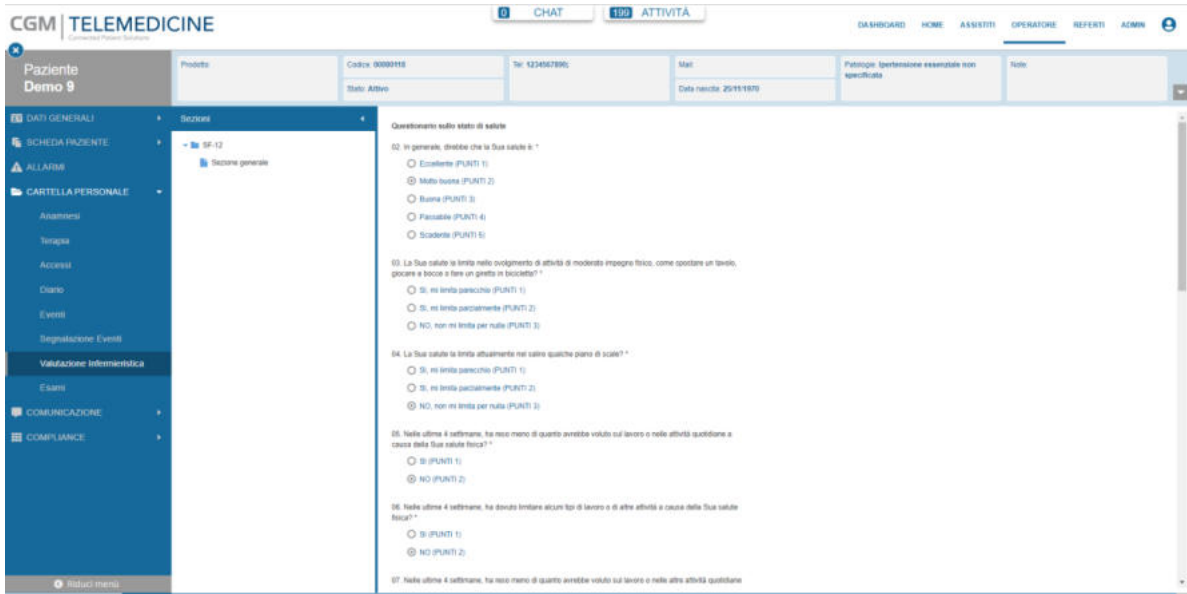


Statistiche

In questa pagina è possibile generare un report contenente informazioni sui pazienti e scaricarlo in formato Excel.

Nella parte superiore della pagina è possibile selezionare uno tra i tipi di report disponibili: Dettaglio stato assistiti, dettaglio allarmi e dettaglio attività. Nella parte inferiore della pagina è possibile poi effettuare dei filtri in modo da selezionare solo un sottoinsieme delle informazioni disponibili, in base al nome e cognome del paziente, dell'organizzazione di appartenenza, prodotto e tipologia, oltre che dell'intervallo temporale.

Una volta premuto il pulsante 'Genera Excel' viene prodotto il report ed effettuato il download.

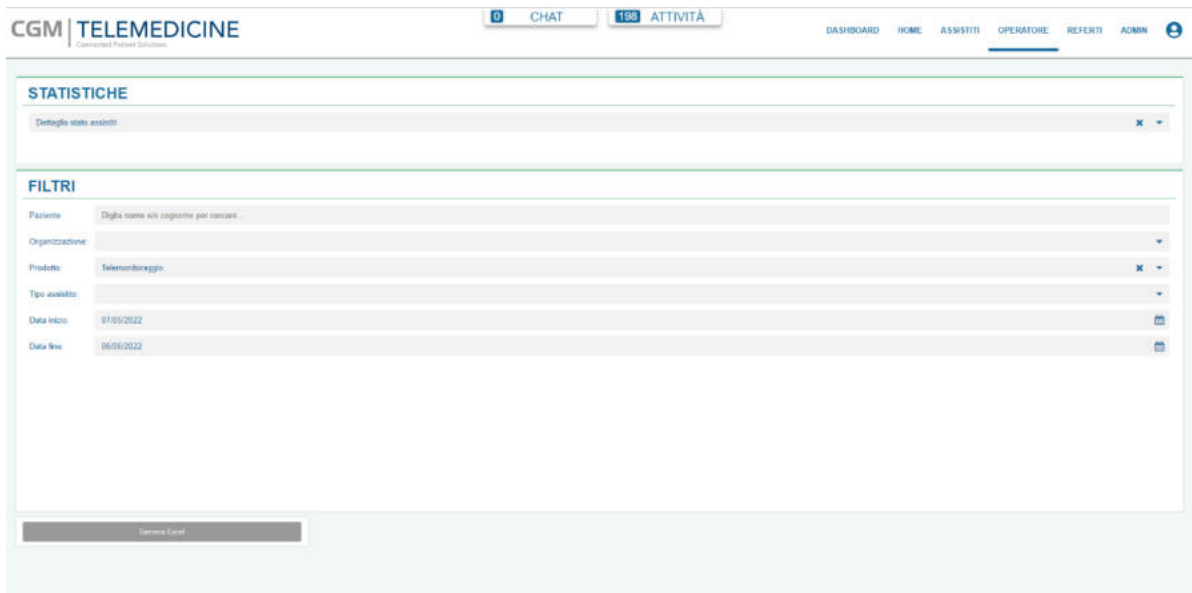

Referti

La pagina REFERTI contiene un elenco di esami descritti da data esame, assistito, tipo, stato, data refezione, in carico a, note, farmacia, telefono farmacia, per una visione più rapida della lista essa è filtrata in automatico per gli esami in stato NON referato, è possibile vederli tutti togliendo l'apposito filtro sulla colonna "Stato".

REFERTI

Cerca in referti


DATA ESAME	CODICE	ASSISTITO	TIPO	STATO	DATA REFERTAZIONE	IN CARICO A	NOTE	FARMACIA	TELEFONO FARMACIA
21/11/2022 13:02:54	00005508	ATTRIB ERRATA 001 PAZIE...	Spirometria	Non referato				Test assegnazione esami	
17/11/2022 15:48:52	00000004	Patient Demo 2	Ritiro holter cardiaco	Non referato				ASL Piacenza	12136548
17/11/2022 15:33:25	00000004	Patient Demo 2	Holter ECG	Non referato				ASL Piacenza	12136548
17/11/2022 15:29:03	00000004	Patient Demo 2	Ritiro holter cardiaco	Non referato				ASL Piacenza	12136548
17/11/2022 15:24:36	00002337	Andrea Bianchi	ECG 12 derivazioni	Non referato				ASL Piacenza	12136548
17/11/2022 15:02:00	00002337	Andrea Bianchi	ECG 12 derivazioni	Non referato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 17:03:55	00002337	Andrea Bianchi	Checkup	Non referato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 15:59:54	00000005	Jimmy Connors	Ritiro holter cardiaco	Non referato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 16:59:41	00000005	Jimmy Connors	Ritiro holter cardiaco	Non referato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 16:37:40	00004491	Z-TEST 007 PAZIENTE DE...	Ritiro holter cardiaco	Non referato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 16:14:54	00002337	Andrea Bianchi	Bianca diagnostica	Non referato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 15:49:52	00000005	Jimmy Connors	Ritiro holter cardiaco	Non referato				Arù	+123456789
15/11/2022 15:46:56	00000005	Jimmy Connors	Ritiro holter cardiaco	Non referato				Arù	+123456789
15/11/2022 15:46:15	00000005	Jimmy Connors	Ritiro holter cardiaco	Non referato				Arù	+123456789
15/11/2022 15:44:55	00000004	Patient Demo 2	Ritiro holter cardiaco	Non referato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 15:17:36	00000018	Paziente Diabete UC	Ritiro holter cardiaco	Non referato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 15:14:56	00000018	Paziente Diabete UC	Ritiro holter cardiaco	Non referato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 13:18:27	00000004	Patient Demo 2	Ritiro holter cardiaco	Non referato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 13:04:15	00000004	Patient Demo 2	Ritiro holter cardiaco	Non referato				ASL Piacenza	12136548
14/11/2022 18:40:19	00000004	Patient Demo 2	Ritiro holter cardiaco	Non referato				ASL Piacenza	12136548

CER-S Gateway

CER-S Gateway è un applicativo che consente di far comunicare CGM CARE MAP e il software di refertazione CER-S di CardioCalm, automatizzando le fasi di scaricamento dei tracciati ECG e di successivo caricamento sul portale dei risultati delle elaborazioni effettuate con CER-S.


Installazione di CER-S Gateway

CER-S Gateway deve essere installato sul PC dell'operatore su cui è presente il software CER-S, il pacchetto di installazione è disponibile per il download dalla maschera di Elenco referti tramite il pulsante "Scarica HP3 CER-S Gateway" posto in basso a destra quando è selezionato un esame di tipo "Holter ECG HI":

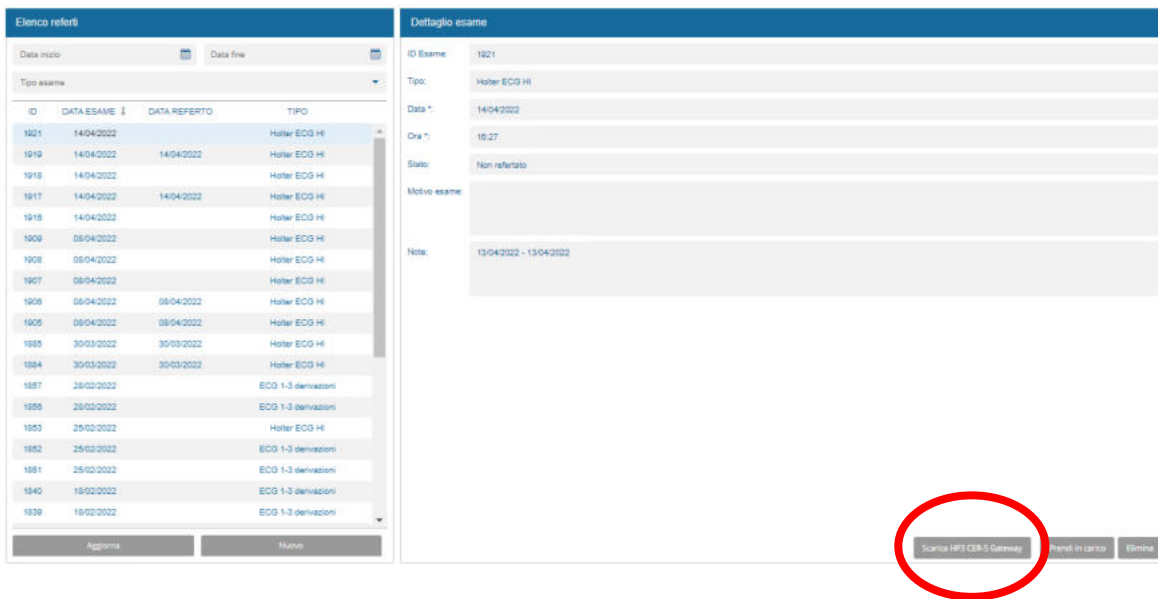


Viene scaricato un pacchetto "HP3CersGateway_Installer_v.x.y.z.zip" in cui sono contenuti i file di installazione, salvare il pacchetto sul PC ed avviare il file eseguibile presente all'interno. In fase di installazione è possibile scegliere la lingua preferita (Inglese o Italiano).


Terminata l'installazione, viene presentata una finestra in cui deve essere inserito il percorso in cui è installato l'applicativo CER-S, cercare il file eseguibile di CER-S tramite il pulsante cerca e confermare:

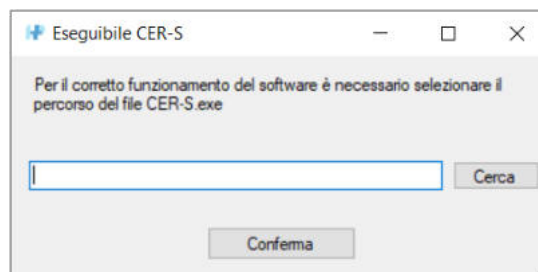

Una volta installato, l'icona di CER-S Gateway è presente in basso a destra nella barra delle applicazioni, se non fosse visibile cliccare sul simbolo ^:

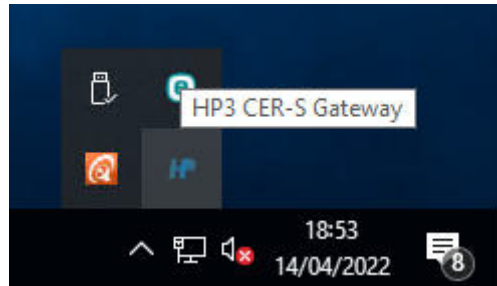

Cliccando col tasto destro sull'icona viene visualizzato un menù contestuale:

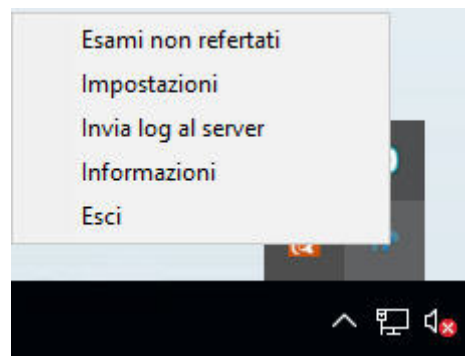


“Esami non refertati” apre la finestra principale con l'elenco degli esami presenti sul PC e non ancora refertati:

ID Esame	Codice Assistito	Stato	
1753	00000479	Da refertare	Apri in CER-S

Aggiorna

Per ogni riga viene riportato l'ID dell'esame, il codice paziente, lo stato dell'esame ed un link per aprire l'esame in CER-S. Con il tasto Aggiorna presente in basso è possibile aggiornare la lista.

"Impostazioni" apre la finestra in cui è possibile visualizzare e modificare le impostazioni della lingua e del percorso del file eseguibile di CER-S:

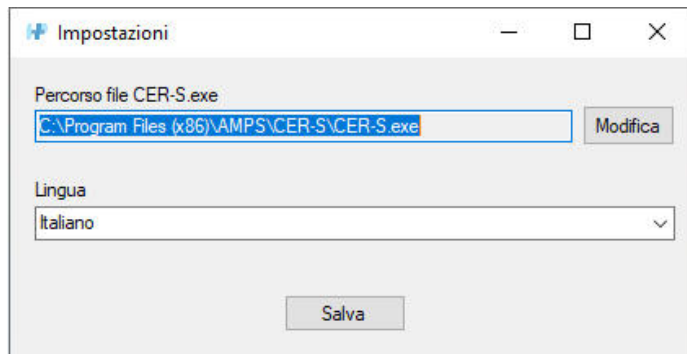

"Invia log al server" consente di inviare i log dell'applicativo al server, nel caso fosse richiesto dal personale di supporto in caso di problemi.

"Informazioni" visualizza la schermata con le informazioni su versione del programma e produttore:



Cliccando "Controlla aggiornamenti" viene verificata la presenza di versioni più recenti del software e viene offerta la possibilità di installarle, nel caso la versione presente sul PC sia l'ultima viene visualizzato un messaggio di conferma.

"Esci" permette di terminare il programma.

Utilizzo di CER-S Gateway

Viene descritto nel seguito il processo di refertazione dei tracciati Holter ECG acquisiti dai pazienti tramite il dispositivo Hi.

Dalla “SCHEDA PAZIENTE – ECG Giornalieri” è possibile visualizzare le giornate per cui sono presenti tracciati ECG e generare un esame specifico a partire dai dati raccolti premendo il tasto “Genera file holter”, selezionando opportunamente anche l’intervallo temporale desiderato:

The screenshot shows the H&S Health Platform interface. The main content area displays a table titled "Date Eventi" with the following data:

Seleziona esame Holter	Data	Numero Eventi
<input type="checkbox"/>	03/08/2021	38 (0)
<input type="checkbox"/>	02/08/2021	259 (1)
<input type="checkbox"/>	01/08/2021	256 (0)
<input type="checkbox"/>	31/07/2021	156 (0)
<input type="checkbox"/>	30/07/2021	154 (0)
<input type="checkbox"/>	29/07/2021	91 (0)
<input type="checkbox"/>	28/07/2021	139 (0)
<input type="checkbox"/>	27/07/2021	31 (0)
<input type="checkbox"/>	22/07/2021	6 (0)

Nella finestra “Esame Holter” che viene visualizzata è possibile modificare l’intervallo temporale per cui si vuole generare l’esame:

The "Esame Holter" dialog box contains the following information:


NOTA: I dati di tutte le giornate incluse nel periodo indicato verranno utilizzati per la generazione del file

Da: 13/04/2022 00:00


A: 13/04/2022 23:59

Conferma generazione esame

Una volta premuto “Conferma generazione esame”, viene generato un esame di Holter ECG e viene inviata una mail all’operatore quando l’esame sarà effettivamente disponibile nella sezione “Cartella personale / Esami” del paziente:

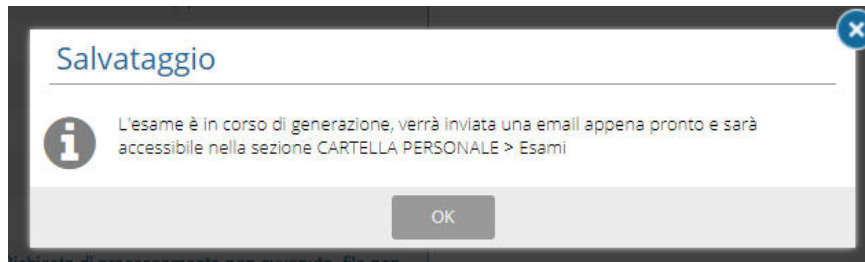

Nel caso in cui fosse già stato generato un esame per lo stesso intervallo temporale, l’esame non viene generato e viene visualizzato un messaggio di errore:

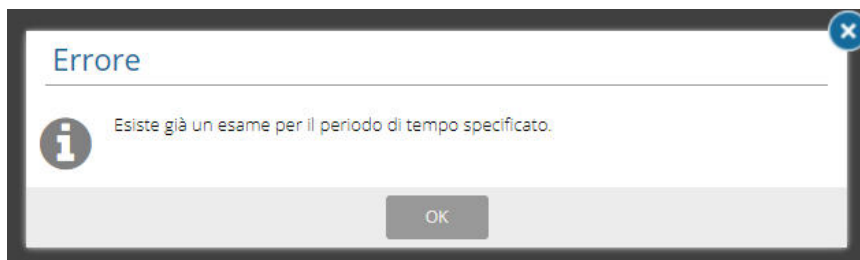


Verificare l’effettiva necessità di creare un ulteriore esame ed in tal caso è necessario modificare l’intervallo temporale prima di poter generare un nuovo esame.


Una volta che l’esame è stato generato, è possibile visualizzarlo nella cartella Esami del paziente. In alternativa, l’esame è visibile nell’elenco degli esami della pagina REFERTI ed una volta selezionato viene aperta la cartella Esami del paziente:

Elenco referti				Dettaglio esame	
Data inizio: [calendar icon] Data fine: [calendar icon]				ID Esame:	1921
Tipo esame: [dropdown]				Tipo:	Holter ECG HI
ID	DATA ESAME	DATA REFERTO	TIPO	Data *:	14/04/2022
1921	14/04/2022		Holter ECG HI	Ora *:	16:27
1919	14/04/2022	14/04/2022	Holter ECG HI	Stato:	Non refertato
1918	14/04/2022		Holter ECG HI	Motivo esame:	
1917	14/04/2022	14/04/2022	Holter ECG HI	Note:	13/04/2022 - 13/04/2022
1916	14/04/2022		Holter ECG HI		
1909	08/04/2022		Holter ECG HI		
1908	08/04/2022		Holter ECG HI		
1907	08/04/2022		Holter ECG HI		
1906	08/04/2022	08/04/2022	Holter ECG HI		
1905	08/04/2022	08/04/2022	Holter ECG HI		
1885	30/03/2022	30/03/2022	Holter ECG HI		
1884	30/03/2022	30/03/2022	Holter ECG HI		
1857	28/02/2022		ECG 1-3 derivazioni		
1856	28/02/2022		ECG 1-3 derivazioni		
1853	25/02/2022		Holter ECG HI		
1852	25/02/2022		ECG 1-3 derivazioni		
1851	25/02/2022		ECG 1-3 derivazioni		
1840	18/02/2022		ECG 1-3 derivazioni		
1839	18/02/2022		ECG 1-3 derivazioni		
[Aggiorna] [Nuovo]				[Scarica PDF CER-S Gateway] [Prendi in carico] [Elimina]	


Per poter refertare l'esame è necessario prima prenderlo in carico tramite il pulsante "Prendi in carico" presente in basso a destra, si apre una finestra di conferma:

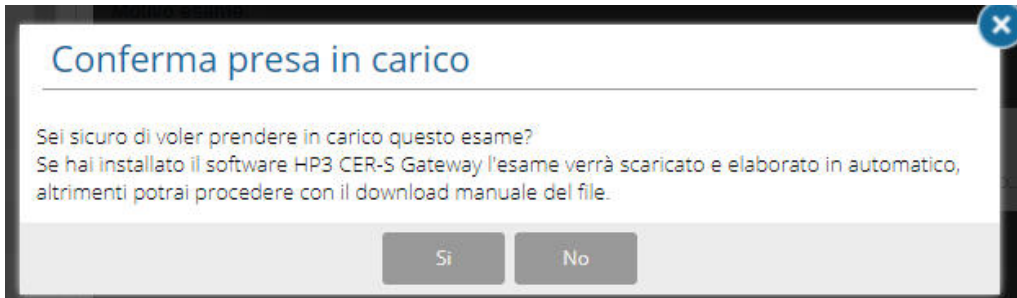


e premendo Sì viene avviato lo scaricamento dell'esame sul proprio PC ed avviato il CER-S Gateway, nel caso in cui venisse visualizzato un messaggio di conferma premere su Yes/Sì:

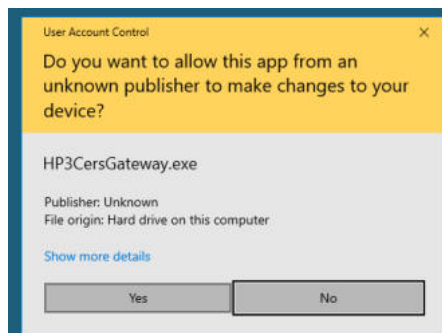

Lo scaricamento dell'esame potrebbe richiedere qualche minuto anche in funzione della connessione e dell'ampiezza dell'intervallo temporale, durante questa fase viene visualizzato un messaggio temporaneo nella parte in basso a destra dello schermo:

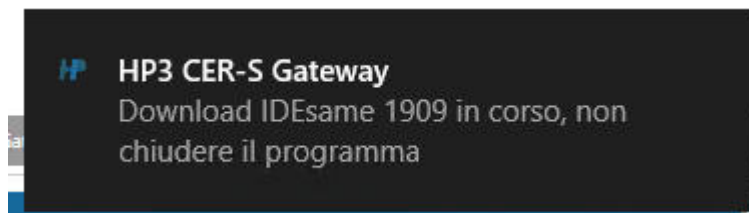

ed una volta completato lo scaricamento viene mostrato un messaggio di conferma:

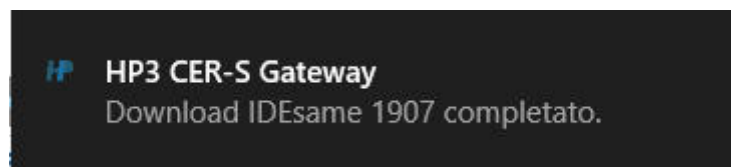


In ogni caso è sempre possibile visualizzare lo stato degli esami nella finestra principale di CER-S Gateway:


ID Esame	Codice Assistito	Stato	
1753	00000479	Da refertare	Apri in CER-S
1909	00000479	Da refertare	Apri in CER-S

Aggiorna



Una volta scaricato l'esame viene avviato automaticamente il programma CER-S con già caricato il tracciato dell'esame. In caso contrario, è possibile avviare il CER-S cliccando sul link "Apri in CER-S" presente sulla destra della riga corrispondente all'esame.

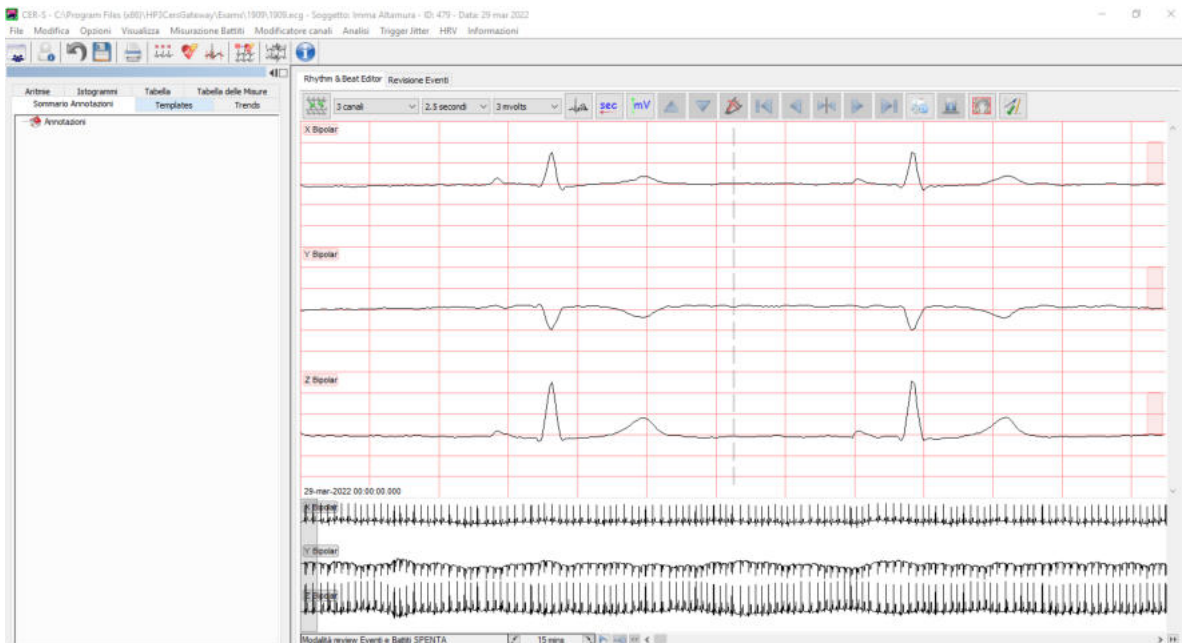

Una volta avviato CER-S, è possibile effettuare l'analisi del tracciato avviando in sequenza l'Analisi dei Battiti e l'Analisi del Ritmo tramite i due pulsanti nella barra superiore dell'applicativo:

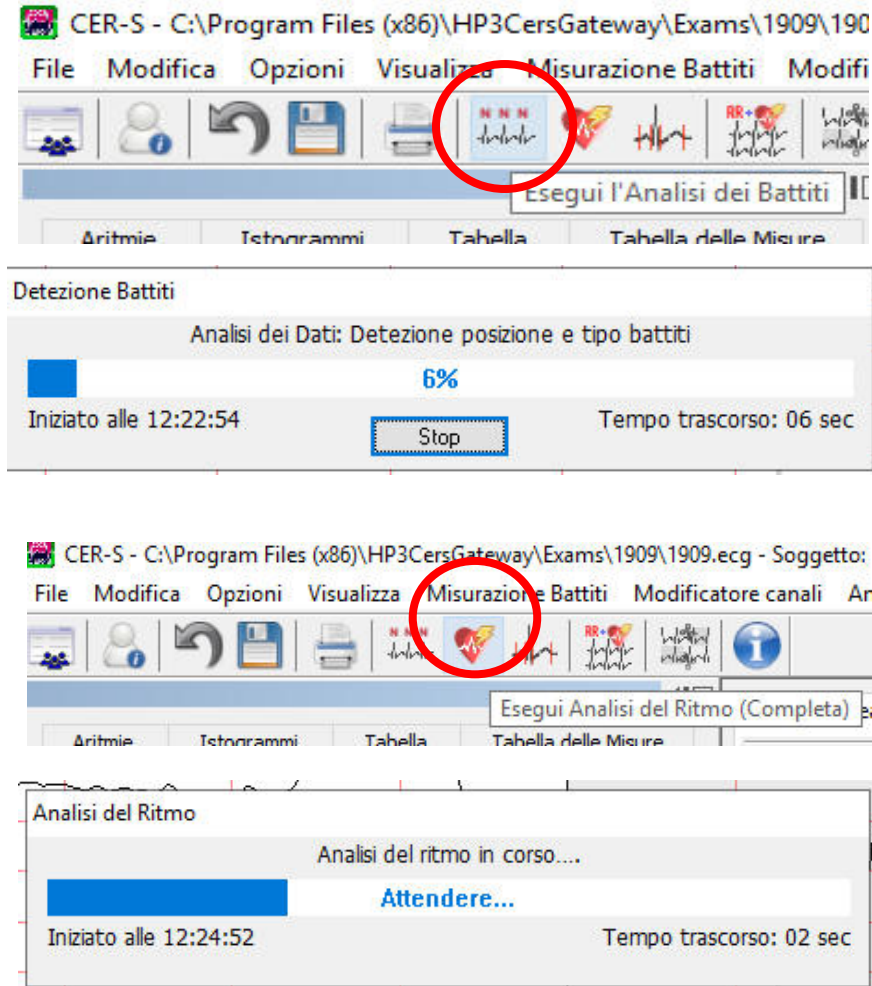

Una volta completata l'analisi, nel riquadro a sinistra saranno presenti tutte le annotazioni rilevate da CER-S raggruppate per tipologia:

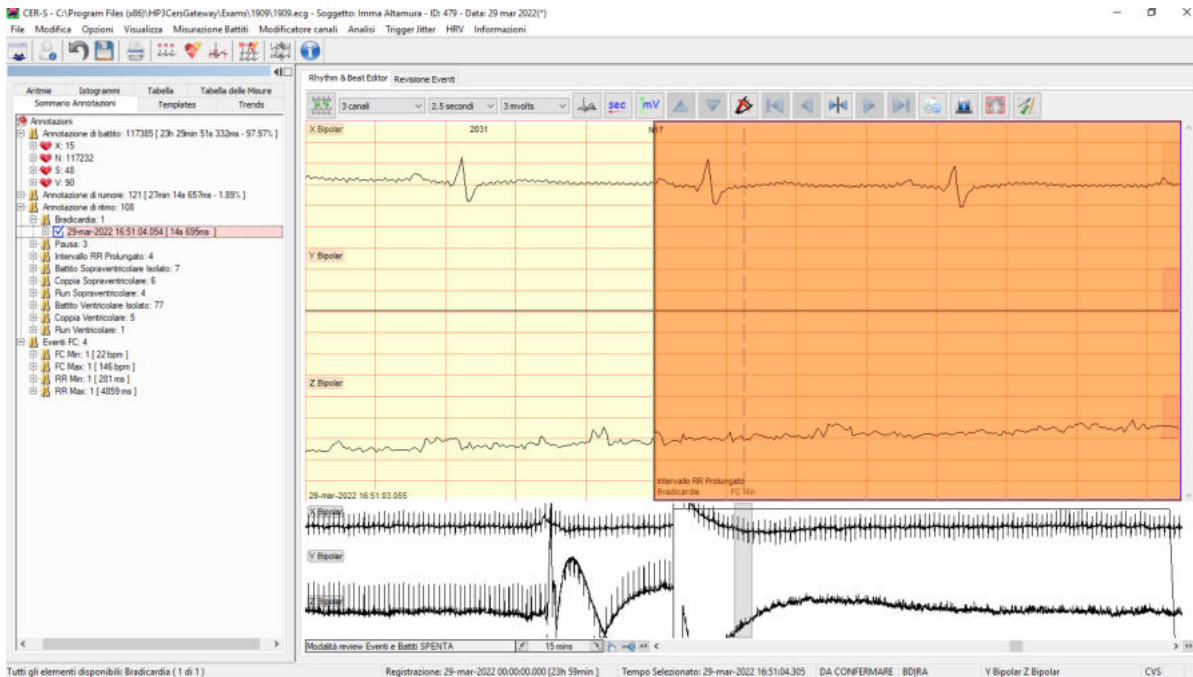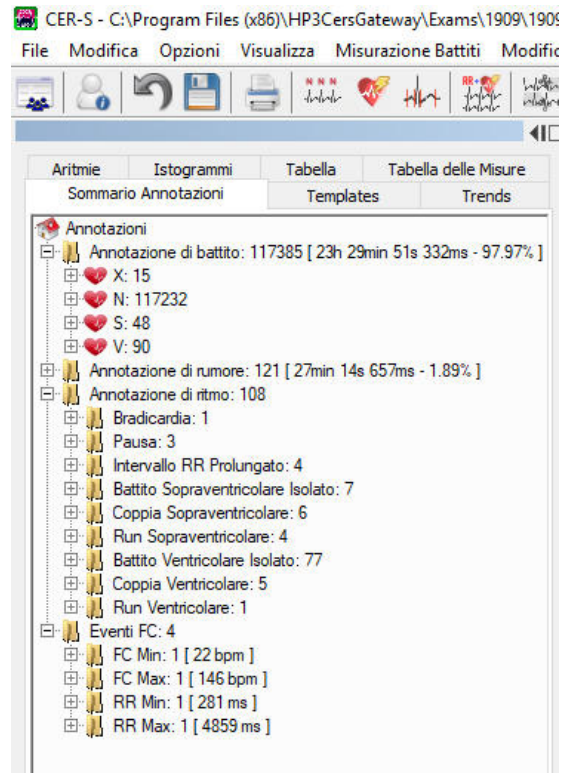


Nella parte sinistra, è visibile il tab Templates dove tutti i battiti vengono suddivisi in famiglie sulla base dei template di famiglie di battiti individuati a valle dell'analisi ECG.


Nella parte destra dello schermo è possibile visualizzare due tab:

- Rhythm&Beat Editor dove è visibile l'intera traccia ECG. Selezionando uno degli eventi della lista a sinistra "Sommaro Annotazioni", il relativo tracciato ECG viene evidenziato in arancio.
- Revisione Eventi: nella quale è possibile visualizzare tutti i battiti che sono ricaduti all'interno di una tipologia di evento-


È possibile selezionare gli eventi errati o gli artefatti, al fine di 'pulire' il tracciato e renderlo disponibile per successive fasi di analisi che permettano di concentrarsi sugli eventi significativi:

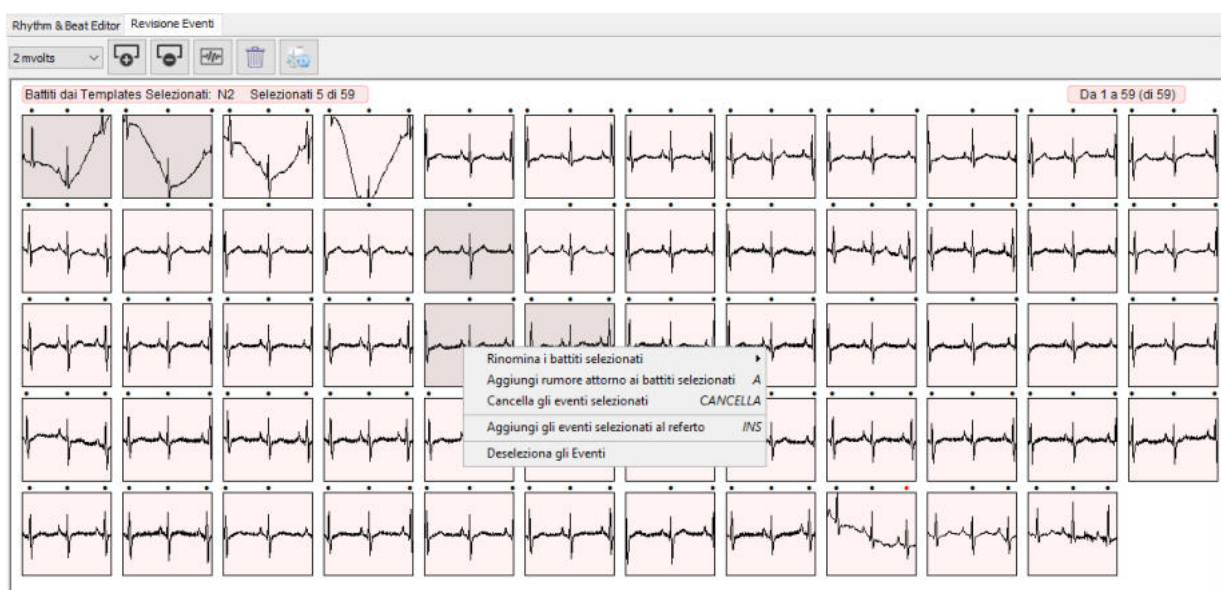


Una volta terminata questa fase è necessario salvare l'esame con il pulsante con l'icona associata

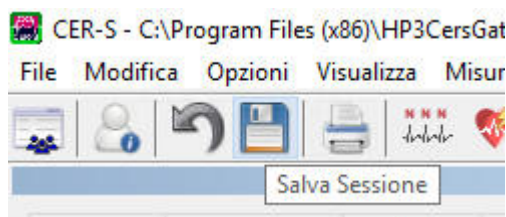

e poi selezionare dal menù “Stampa referto” per poter inserire le informazioni all’interno del report:

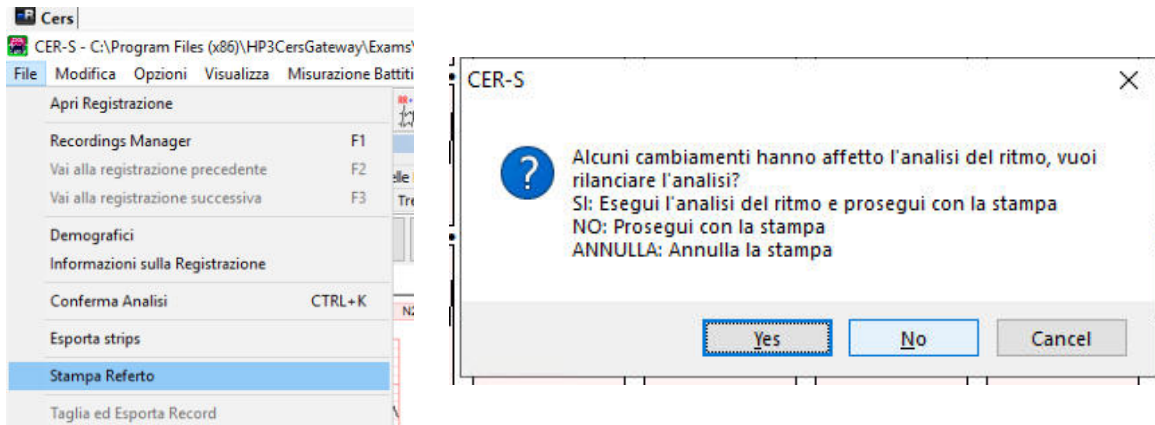

Se viene visualizzata la finestra di conferma, selezionare No, viene visualizzata la maschera di “Opzioni del Referto” in cui cliccando su “Modifica Commenti & Demografici”:

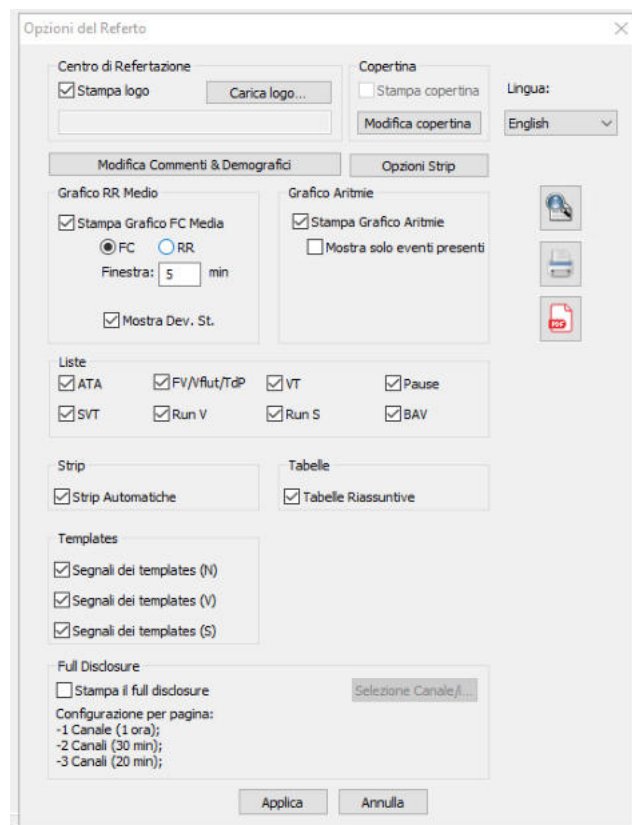

Nel tab “Paziente e Esame” è possibile verificare le informazioni del paziente ed inserire informazioni sull’esame:

Demografici

Paziente e Esame Commenti Esame Clinico

Paziente

Nome
Andrea

Cognome
Rossi

ID
479

Genere
Femmina

Razza

Data di Nascita
 17/gen/1994

Età Unità
28 Anni

Info ECG
Data e Ora dei Registrazione
29/mar/2022 00:00:00

Esame

Richiesto da

Trattamento

Indicazioni

Salva & Chiudi Chiudi

mentre nel tab “Commenti” è presente un riepilogo dell’analisi ed è possibile inserire commenti sull’esame:

Demografici

Paziente e Esame Commenti Esame Clinico

Frase Predefinite

Aggiungi Modifica Frasi Predefinite...

Commenti
Inserire i propri commenti in questa casella di testo

Dati Analisi

Total QRS: 117365 - N: 117227 V: 90 S: 48
Analyzed Data: 23h 29min 51s - Noise: 27min 14s (1.9%)

RR Min 281 ms at 15:24:31
RR Max 4859 ms at 16:51:06
RR Avr 722 ms
HR Min 22 bpm at 16:51:02
HR Max 146 bpm at 08:49:47
HR Avr 86 bpm

Ventricular Events
V Total Number: 90 C.I. Min: 305 ms - C.P. Max: 2031 ms
V Isolated: 77
V Couplets: 5
V Run: 1
Longest at 21:45:52 - 3 beats - HR 85 bpm
Fastest at 21:45:52 - 3 beats - HR 85 bpm


V Bigeminy 0
V Trigeminy 0
V Tachycardia: 0

Supraventricular Events
SV Total Number: 48 (0.04%)
SV Isolated: 7
SV Couplets: 6
SV Run: 4
Longest at 02:43:35 - 19 beats - HR 100 bpm
Fastest at 23:06:03 - 3 beats - HR 124 bpm
SV Bigeminy 0

Salva & Chiudi Chiudi

Premere “Salva & Chiudi” e poi “Applica” e poi “Annulla” nella finestra Opzioni.


Per completare l’analisi è necessario prima salvare l’esame e poi selezionare “Conferma Analisi” nel menù File, in seguito non sarà possibile effettuare altre modifiche.

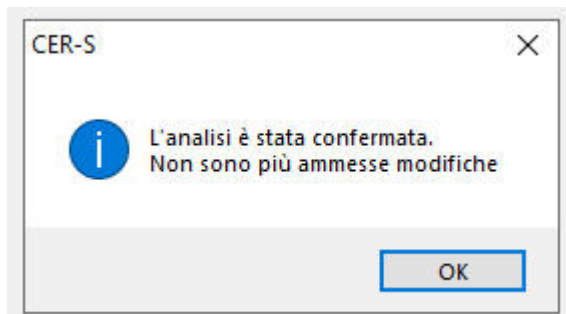


Chiudere infine il programma CER-S.

CER-S Gateway inizia automaticamente a processare l’esame appena confermato e ad inviarlo al server, è possibile seguire l’avanzamento delle azioni nella finestra principale di CER-S Gateway.

Compare una notifica nello schermo in basso per informare che è stato creato correttamente il report ed è iniziato il processo di invio al server:

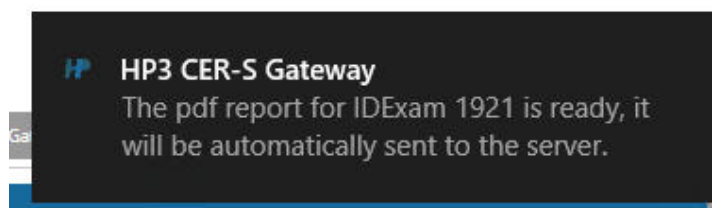

Se CER-S non viene chiuso immediatamente dopo la conferma del referto, è possibile che CER-S Gateway trovi il file non disponibile e visualizzi un errore:

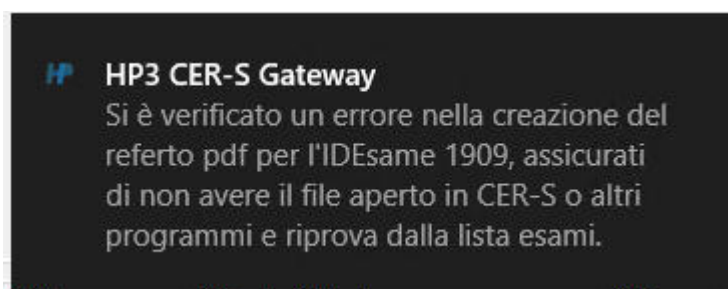

Nella finestra principale è presente l'errore per l'esame, verificare che il CER-S sia chiuso e cliccare su "Crea report pdf", il programma procede con la creazione del report e con il caricamento sul server:

ID Esame	Codice Assistito	Stato	
1753	00000479	Da refertare	Apri in CER-S
1907	00000479	Da refertare	Apri in CER-S
1909	00000479	Errore nella creazione del referto	Crea report pdf


Aggiorna

ID Esame	Codice Assistito	Stato	
1753	00000479	Da refertare	Apri in CER-S
1907	00000479	Da refertare	Apri in CER-S
1909	00000479	Referto in attesa di invio al server	

Operazione completata ×

Il referto pdf per l'IDEsame 1909 è pronto, verrà automaticamente inviato al server.

Aggiorna

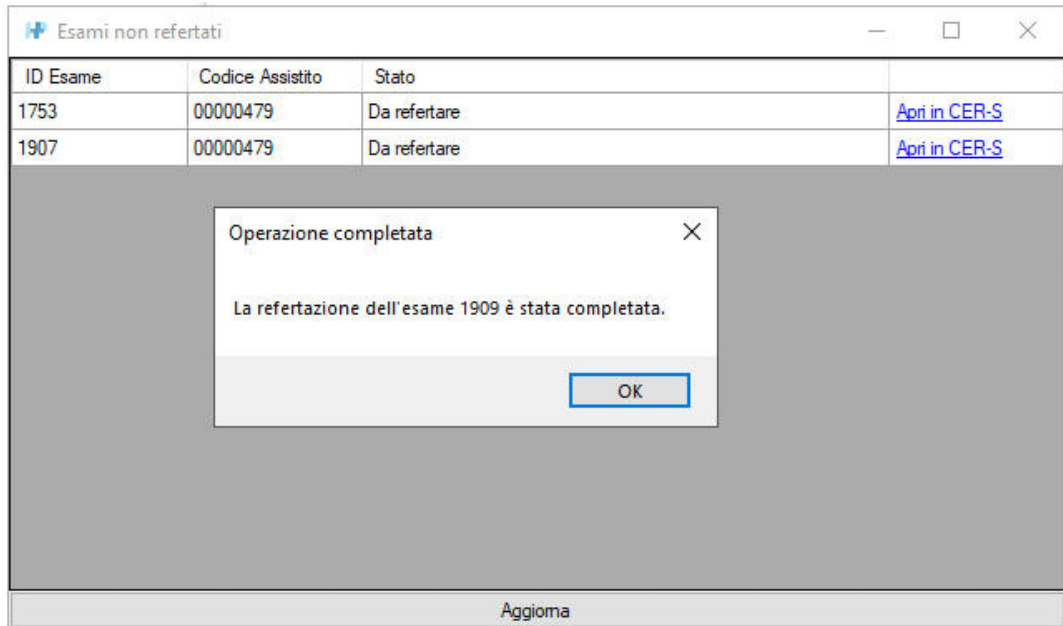

Nel caso in cui compaia una richiesta di autenticazione, inserire nome utente e password nella finestra per confermare la propria identità:

The screenshot shows an authentication dialog box titled "Autenticazione richiesta". It contains two input fields: "Nome utente" and "Password". Below the fields are two buttons: "Autenticazione" and "Cancel".

Autenticazione richiesta

Nome utente

Password

Autenticazione Cancel

Una volta completate le operazioni sul PC ed inviato il report al server, l'esame compare come Refertato nell'elenco degli esami ed è valorizzata la "DATA REFERTO" nella lista:

Elenco referti

Data inizio Data fine

Tipo esame:

ID	DATA ESAME	DATA REFERTO	TIPO
1921	14/04/2022	14/04/2022	Holter ECG HI
1919	14/04/2022	14/04/2022	Holter ECG HI
1918	14/04/2022	14/04/2022	Holter ECG HI
1917	14/04/2022	14/04/2022	Holter ECG HI
1916	14/04/2022	14/04/2022	Holter ECG HI
1909	08/04/2022	15/04/2022	Holter ECG HI
1908	08/04/2022	15/04/2022	Holter ECG HI
1907	08/04/2022	15/04/2022	Holter ECG HI
1906	08/04/2022	08/04/2022	Holter ECG HI
1905	08/04/2022	08/04/2022	Holter ECG HI
1885	30/03/2022	30/03/2022	Holter ECG HI
1884	30/03/2022	30/03/2022	Holter ECG HI
1857	28/02/2022		ECG 1-3 derivazioni
1856	28/02/2022		ECG 1-3 derivazioni
1853	25/02/2022		Holter ECG HI
1852	25/02/2022		ECG 1-3 derivazioni
1851	25/02/2022		ECG 1-3 derivazioni
1840	18/02/2022		ECG 1-3 derivazioni
1839	18/02/2022		ECG 1-3 derivazioni

Aggiorna Nuovo

Dettaglio esame

ID Esame: 1921

Tipo: Holter ECG HI

Data *: 14/04/2022

Ora *: 16.27

Stato: Refertato

In carico a: Refertatore-Test

Motivo esame:

Note: 13/04/2022 - 13/04/2022

Testo referto:

Scarica HP3 CEH-S Gateway Visualizza referto Download File Esame Salva

Premendo “Visualizza referto” viene aperta una maschera in cui è presente il referto:

store.ashx
1 / 13 | 75% | [Icona] [Icona]

1

2

3

479
Imma Altamura
13-Apr-2022 00:00:25

Patient		Recording Date	
ID: 479	Name: Imma Altamura	Date & Time: 13-Apr-2022 00:00:25	
Date of Birth: 17-Jan-1994	Age: 28 Years	Duration: 10:08:34	N. Leads: 3
Gender: Female	Race:	Recorder:	Serial N.:
Treatment:			
Indications:			
Indicated by:			

Report Summary			
Total QRS: 47694	N: 47553 V: 103 S: 231	Min	Max
Analysis Date: 10:51:07	Notes: 00:00:38 (1.0%)	RR (ps) 414 at 08:22:30	1802 at 08:13:00
		HR (bpm) 47 at 00:02:38	143 at 08:02:38

Ventricular Events		Supraventricular Events	
Total Number: 103 (0.53%)	C1, Min: 352 ms - C.P. Max: 338 ms	Total Number: 201 (0.81%)	
Isolated: 103		Isolated: 3	
Complex: 0		Complex: 8	
Run: 0		Run: 16	
Bigeminy: 0		Longest: at 03:02:23 - 3d beats - HR: 99 bpm	
Trigeminy: 0		Fastest: at 07:35:54 - 21 beats - HR: 109 bpm	
Tachycardia: 0		Trigeminy: 0	
		Tachycardia: 0	

Arythmias		
Atrial Fibrillation: 0		
Pauses: 0	Prolonged R-R Interval: 2	Longest (1.85s) at 08:10:00

HRV	
TPRMSD: 28.41%	
SDANN: 207.66 ms	
RMSSD: 77.93 ms	

Comments

Ritornando nella sezione “SCHEMA PAZIENTE – ECG Giornalieri” è possibile verificare che gli eventi rilevati da CER-S e caricati sul server tramite il CER-S Gateway sono elencati nella griglia degli eventi giornalieri e nel tab Eventi.

<input type="checkbox"/>	Data	Ora	Tipo	Note
<input type="checkbox"/>	14/04/2022	11:58:45.95...	Run ventricolare	
<input type="checkbox"/>	14/04/2022	08:06:15.11...	Intervallo RR prolungato	
<input type="checkbox"/>	14/04/2022	00:53:45.6...	Coppia di battiti sopraventric...	

Richiesta

Si vuole refertare il report ECG subito dopo la generazione?
 Il report verrà salvato negli Esami del paziente e potrà essere accessibile per la refertazione anche in un secondo momento

Admin

Gestione Assistiti

Tramite questa funzione l'amministratore di sistema può gestire gli assistiti. Al centro in alto è presente un filtro testuale per cercare l'assistito desiderato.

Per ogni assistito sono presenti i campi stato, codice, nome, cognome, codice fiscale, organizzazione e note.

STATO	CODICE	NOME	COGNOME	CODICE FISCALE	ORGANIZZAZIONE	NOTE
Cancellato	00000160	NomeWS	CognomeWS	XXXXYYA99888C770F	MEDICOPERTUTTI S.R.L.	
Attivo	00000161	NomeWS2	CognomeWS2	XXXXYYA99888C770G	MEDICOPERTUTTI S.R.L.	
Cancellato	00000162	NomeWS3	CognomeWS3	XXXXYYA99888C770H		
Cancellato	00000167	NomeWS4	CognomeWS4	XXXXYY99B12C770I	MEDICOPERTUTTI S.R.L.	
Cancellato	00000183	Vito	Abreacia	TSTPNT90A01A662S	ASL Bari	
Cancellato	00000184	VITTORINO	BAIO	TSTPNT92C03A662F	ASL Bari	
Cancellato	00000185	VITTORINO	BAIO	TSTPNT95H46A662G	ASL Bari	
Cancellato	00000186	Paziente	Test08	TSTPNT97M48A662N	ASL Bari	
Cancellato	00000187	Paziente	Test 10	TSTPNT99R50A662O	ASL Bari	
Cancellato	00000189	Paziente	Test09	TSTPNT98P49A662B	ASL Bari	
Cancellato	00000190	Paziente	Test02	TSTPNT91B02A662X	ASL Bari	
Cancellato	00000191	Paziente	Test05	TSTPNT94E95A662R	ASL Bari	
Cancellato	00000202	Paziente	Test01	BBTNTN27D04A662F	ASL Bari	
Cancellato	00000203	Paziente	Test02	BBTNTN87M21A225R	ASL Bari	
Cancellato	00000205	Paziente	Test04	BCCRRA48E55C070H	ASL Bari	
Cancellato	00000206	Paziente	Test05	BCCTRS27S50A662E	ASL Bari	
Cancellato	00000207	Paziente	Test04	TSTPNT93D04A662K	ASL Bari	
Cancellato	00000208	Xxxxx	Yyyyyy	ABCDEF12G34H567I	MEDICOPERTUTTI S.R.L.	
Cancellato	00000215	Garga	Mella	MLLGRG	Organizzazione condivisione 1	
Cancellato	00000216	ANNA	BOCCAFORNO	BCCNNA58E59F220F	ASL Bari	

Per modificare un assistito è sufficiente cliccare su di esso. Facendolo si apre la schermata con i dati modificabili di tale assistito. Sono presenti 6 tab per inserire i vari tipi di dati diversi (Dati assistito, Informazioni di contatto, Dettaglio sociale, Dettaglio account, Operatori associati, Prodotti). Col + in basso a destra è possibile creare un nuovo assistito, si apre la stessa schermata della modifica e si devono inserire i nuovi dati.

CGM | TELEMEDICINE
Connected Patient Solutions

4923 ALLARMI | 8 CHAT | 390 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

Paziente
Diabete UC

Dati assistito | Informazioni di contatto | Dettaglio sociale | Dettaglio account | Operatori associati | Prodotti

Nome *: Paziente

Cognome *: Diabete UC

Cod. fiscale *: AAAAAAAAAA Paziente straniero

Tessera sanitaria: 12345

Data di nascita *: 22/08/2014

Luogo di nascita: Piacenza

Sesso *: M

Lingua *: Italiano

Nazionalità: Italiana

Note: Prova

Salva | Elimina | Chiudi

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

Dando un click sul pulsante “Importa da file” presente sull’elenco dei pazienti è possibile effettuare importazioni massive di anagrafiche facendo caricare i dati da un apposito template in Excel.

Nella fase di importazione è possibile specificare l’organizzazione da attribuire ai nuovi pazienti. Il prodotto può essere letto dal file di importazione o assegnato di default a tutti i pazienti importati.

Nel caso i cui il prodotto sia “Polisonnografia” i pazienti vengono creati in stato “Attivo”, altrimenti in stato “Nuovo”.

Importa da file

Organizzazione *:

Tipo assistito *:

Leggi prodotto da file:

Prodotto *:

File *: Scegli...

Importa | Chiudi

Gestione Operatori

Tramite questa funzione l'amministratore di sistema può gestire gli operatori.

CODICE OPERAT.	NOME	COGNOME	CODICE FISCALE	USERNAME	PROFILO UTENTE	NOTE
00000003	Operatore	Demo	TSTPTR14E29G535H	OPERATORE	Telemonitoraggio H...	
00000004	Administrator	General	TSTPTR14E29G535Z	ADMIN	Admin_HP	
00000005	Operatore SIS	Unisalute	SISUNI14E29G535H	OPERATORE SIS	Operatore SIS	
00000006	Medico US	Unisalute	MDCUNI14E29G535H	OPERATOREMUS	Medico US	
00000007	Operatore US	Unisalute	OUSUNI14E29G536H	OPERATOREUS	Operatore US	
00000146	Marco	Magistrali	MGSMRC78E24G545D	MMARCO	Case Manager	
00000152	Operatore	Almirall	LMRPTR80A01A944U	ALMIRALLOP	Operatore Almirall	
00000153	DEMO	FORNITORE	FRNDME80A01A644Z	FORNITORE	Fornitore	CENTRI MEDICI UNISALUTE
00000154	Admin	Operatori US	PRTDMN80A01F295H	ADMINUS	Admin US	
00000164	Refertatore	Test	TSTPTR14E29G536K	REFERTATORE	Refertatore	
00000167	Operatore	FR Dispenser	PLLPTR80A01G535P	OPDISPENSER	Operatore Cinghia	
00000168	DEMO OPERATOR	CGM ROMANIA	DMOCMR20B21G535A	OPCGMROM	Case Manager	
00000169	Better At	Home	HMOBTR80A01F205L	BEHOME	Telemedicina LITE	DEMO
00000170	BelHome	CaseManager	CSMBHM80A01F205K	BEHOMECS	COS Case Manager	DEMO
00000171	Operatore	Covid-19	CVQPTR80A01F205S	OPCOVID	Operatore Telemoni...	
00000172	Operatore Bolzano	Covid-19	PRTTMN80A01G535J	OPBOLZANO	Operatore TLM Co...	
00000173	Operator	France	PRTFRFC	OP_FRA	Operatore TLM Co...	
00000174	MALTA	PILOT 1	OPHOLLAND	OP_HOLLAND	Telemedicina LITE	
00000175	OPERATORE	FRANCE	TRLSJWNS78920MBL	OPERATORE_FR	Case Manager	
00000176	Operatore	Holland	TCPNASCBA8373MDB	OPERATORE_HL	Case Manager	

Per modificare un operatore è sufficiente cliccare su di esso. Facendolo si apre la schermata con i dati modificabili di tale operatore.

Col + in basso a destra è possibile creare un nuovo operatore, si apre la stessa schermata della modifica con i campi vuoti.

Le informazioni sono suddivise in tre sezioni:

- Dettaglio: Comprende:
 - I dati anagrafici
 - Le informazioni di contatto
 - Le informazioni relative allo stato ed al ruolo dell'operatore. In particolare, il profilo utente stabilisce a quali sezioni del portale l'utente abbia accesso, mentre l'organizzazione e, nel caso in cui l'operatore faccia riferimento ad un fornitore, la specifica di quest'ultimo consentono di limitare la visibilità dell'utente ai pazienti che si riferiscono alla stessa organizzazione ed alle attività consentite a quel fornitore.

- **Assistiti Associati:** questa sezione permette di dare visibilità per singolo paziente nel caso in cui il profilo dell'utente non permetta di vedere tutti gli assistiti delle organizzazioni associate all'utente.
- **Esami associati:** nel caso in cui l'operatore sia un refertatore in questa sezione è possibile specificare quali tipologie di esame possa refertare.

The screenshot displays the 'Operatore Demo' profile page in the CGM TELEMEDICINE system. The interface is organized into several sections:

- Header:** Includes the CGM logo, navigation tabs for '26697 ALLARMI', '0 CHAT', and '2 ATTIVITÀ', and a main menu with 'DASHBOARD', 'HOME', 'ASSISTITI', 'OPERATORE', 'REFERITI', and 'ADMIN'.
- Operator Profile:** A dropdown menu shows 'Operatore Demo'.
- Main Menu:** A horizontal bar contains tabs for 'DETTAGLIO', 'ASSISTITI ASSOCIATI', 'ESAMI ASSOCIATI', 'DISPONIBILITÀ', 'FORMAZIONE', 'TARIFE', 'DOCUMENTI', 'CONTATTI', and 'ALTRI DATI OPERATORE'.
- Dati operatore (Operator Data):** A form with fields for:
 - Nome: Operatore
 - Cognome: Demo
 - Codice fiscale: T5TPTR14E29G539H
 - Tessera sanitaria: 1
 - Data di nascita: 29/05/1988
 - Luogo di nascita: Piacenza
 - Sex: M
 - Lingua: Italiano
 - Nazionalità: Italiana
- Informazioni di contatto (Contact Information):** A form with fields for:
 - Telefono: [empty]
 - Cellulare: [empty]
 - E-Mail: danilo.cristali@cgmn.com
 - Codice V@lpassid: [empty]
 - Nome utente: OPERATORE
 - Stato utente: Attivo
 - Profilo utente: Telesonboraggio H5 CER-5
 - Tipo operatore: Infermiere
 - Organizzazione: H&S Telesonboraggio, MAUGERI DI LUMEZZANE, EsaOta, Farmacia Rosati, H&S Telesonboraggio 2 (sanza Abile), COSMOFARMA, EXPOSANITA
 - Familiare: [empty]
 - Fuso orario: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
 - Integrazione cartella clinica:
- Footer:** Contains buttons for 'Salva', 'Elimina', 'Account ClickDoc', 'Reset password', 'Configura scadenza', and 'Logout', along with the text 'CGM CARE MAP' and 'Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.'.

I pulsanti definiscono le azioni che si possono eseguire sull'operatore, in particolare:

- **Account ClickDoc:** se il profilo al quale è associato l'utente prevede il videoconsulto, tramite questo pulsante è possibile gestire l'associazione dell'operatore ad un account ClickDoc, che è il portale utilizzato per il videoconsulto
- **Reset Password:** Consente di resettare la password dell'operatore al quale verrà inviata una password temporanea tramite SMS e/o e-mail. Al primo accesso verrà chiesto all'operatore di cambiare la password.
- **Configura scadenza:** consente di stabilire una data di scadenza per l'account dell'operatore e di definire quale stato utente e quale profilo verranno assegnati all'utente dopo la scadenza.

Gestione Profili

Un profilo definisce le funzioni del portale alle quali l'utente ha accesso in base al ruolo: ad esempio un utente refertatore avrà accesso alla gestione degli esami effettuati dai pazienti ma non a quella delle terapie, che sarà invece affidata agli operatori che si occupano della compliance. Ogni paziente ed ogni operatore inserito nel sistema è associato ad un profilo utente.

Ogni profilo ha i campi descrizione, note e autorizzazioni. Le autorizzazioni definiscono le sezioni applicative abilitate e le funzionalità (sola lettura o modifica) che gli utenti del profilo hanno.

DESCRIZIONE	NOTE	AUTORIZZAZIONI
Admin_US	Amministratori Uniscabute	74/282
Admin_HP	Amministratori di sistema	135/282
Care Giver		34/282
Case Manager		101/282
Case Manager Televisa		99/282
COS Admin		59/282
COS Case Manager		53/282
COS Medico		46/282
Farmacista	Profilo Farmacia Rossi Cosmolama	21/282
Farmacista_Cosmolama		43/282
Farmacista_PresainCarico	Farmacista_PresainCarico - UniTo	35/282
Fornitore		13/282
GVM Amministrativo	Utenti amministrativo GVM	38/282
GVM Clinico	Utenti GVM Clinico	63/282
GVM Operatore	Utenti operatori GVM	14/282
Infermieri demo Allianz		78/282
Medico US		65/282
OP Televisa Esteso		74/282
Operateur de Mésurveillance		34/282
Operatore Almiral	Profilo per Almiral	34/282

Selezionando un profilo si apre un popup dove sono presenti i dettagli, i prodotti associati e gli stati degli allarmi da gestire del profilo selezionato.

Gestione Kit

La maschera sotto riportata è a disposizione dell'amministratore del sistema e consente la gestione dei vari kit.

CGM TELEMEDICINE		26697 ALLARMI		0 CHAT		2 ATTIVITÀ		DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN	
GESTIONE KIT									
KIT	TIPO	STATO	SERIALE KIT	SERIALE SIM	IMEI	ORGANIZZAZIONE	ASSOCIATO A		
KI0058	Smartphone	Assegnato	KUJ5000001	8939010002302897503	35374708590180	H&S Compliance	Compliance Dem...		
KI0064	KIT Unikalute 3 (...)	Disassociato	KUJ5000005	8939010002268071150	353747085916004	H&S Telemotoraggio			
KI0066	Smartphone	Disassociato	KUJ5000016			H&S Telemotoraggio			
KI0068	KIT Unikalute 4 (...)	Disassociato	KUJ5000014	8939010002268071168	353747085915204	H&S Telemotoraggio			
KI0073	KIT Unikalute 4 (...)	Assegnato	KUJ5000009	8939010002302897537	353747085916228	H&S Telemotoraggio	Assisto DEMO		
KI0074	KIT Unikalute 4 (...)	Assegnato	KUJ5000008	8939010002302897529	353747085905064	H&S Telemotoraggio	Marco Majestrà		
KI0076	KIT Unikalute 4 (...)	Disassociato	KUJ5000006	8939010002302897594	353747085919020	H&S Telemotoraggio			
KI0078	KIT Unikalute 8 (...)	Assegnato	KUJ5000040	8939010002268068008	353747085948307	H&S Telemotoraggio	Demo 9 Paziente		
KI0080	KIT Unikalute 8 (...)	Assegnato	KUJ5000038	8939010002268068016	353747085941481	H&S Telemotoraggio	Venanzoni Igor		
KI0086	KIT Unikalute 8 (...)	Assegnato	KUJ5000032	8939010002268068054	353747085940908	H&S Telemotoraggio	Demo 13 Paziente		
KI0089	KIT Unikalute 4 (...)	Assegnato	KUJ5000023	8939010002268068026	353747085951100	H&S Telemotoraggio	Demo 8 Paziente		
KI0091	KIT Unikalute 4 (...)	Disassociato	KUJ5000021	8939010002268071176	353747085915824	H&S Telemotoraggio			
KI0092	KIT Unikalute 4 (...)	Assegnato	KUJ5000020	8939010002268071184	353747085904422	H&S Telemotoraggio	Demo 12 Paziente		
KI0093	KIT Unikalute 4 (...)	Assegnato	KUJ5000019	8939010002268071192	353747085918426	H&S Telemotoraggio	Demo 10 Paziente		
KI0096	KIT Unikalute 4 (...)	Assegnato	KUJ5000029	8939010002268068002	353747085951126	H&S Telemotoraggio	Demo 15 Paziente		
KI0097	KIT Unikalute 4 (...)	Assegnato	KUJ5000028	8939010002268068078	353747085951043	H&S Telemotoraggio	Demo 11 Paziente		
KI0235	KIT Unikalute 8 (...)	Disassociato	KUJ5000135	8939010002332773492		H&S Telemotoraggio			
KI0256	Smartphone	Assegnato	TestECGH		353747085946282	H&S Telemotoraggio	Venanzoni Igor		
KI0259	Smartphone	Disassociato	TestECGH	357956070838962	357956070838962	H&S Telemotoraggio			
KI0261	Smartphone	Disassociato	Hi_test			H&S Telemotoraggio			

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

Per ogni riga è evidenziato il kit, il seriale del kit, il seriale della sim, l'IMEI, l'organizzazione e il paziente al quale il kit è associato.

Cliccando su un kit è possibile modificarne i dati, rimuovere dispositivi presenti nel kit o aggiungerne di nuovi da quelli a disposizione con il pulsante Aggiungi dispositivo.

DETTAGLIO KIT

Nome kit: Unikalute
Stato: Disassociato
Organizzazione: H&S Telemotoraggio
Assistente: Marco Majestrà

ID	Nome	Stato	Seriale Kit	Seriale Sim	IMEI
100	Unikalute	Disassociato	KUJ5000005	8939010002268071150	353747085916004
101	Unikalute	Disassociato	KUJ5000014	8939010002268071168	353747085915204

AGGIUNGI DISPOSITIVO

ID	Nome	Stato	Seriale Kit	Seriale Sim	IMEI
102	Unikalute	Disassociato	KUJ5000019	8939010002268071192	353747085918426
103	Unikalute	Disassociato	KUJ5000029	8939010002268068002	353747085951126

Cliccando sul + in basso a destra è possibile inserire un nuovo kit compilando i campi obbligatori.

Visualizzazione password paziente

In caso il paziente abbia impostato una password personale sull'APP del KIT, nel dettaglio KIT è presente un pulsante che permette di visualizzarla.

In questo modo, se il paziente dimenticasse la password, l'operatore può visualizzarla e comunicarla

DETTAGLIO KIT

Seriale kit *: HESTEST006 Tipo kit *: Standard
 Seriale Hub *: 7CF31BEEC48E Cod. Prod. Hub: 358854103713010
 Seriale sim: IMEI: 358854103713010
 Lingua *: Italiano Num. Tel. Hub:
 Stato kit *: Assegnato Organizzazione *: H&S Telemonitoraggio TEST
 Tipo: Assitto Assitto: Paziente Demo 2
 Note:

Dispositivi

ID	NOME	SERIALE	INDIRIZZO BT	STATO
600	X00000000000X	111111111111	0000000000	Assegnato
609	AND UA-767BT - Sfigmomanometro	S100900775	00A096331097	Assegnato
725	GIMA QX1-10	XBA00QC0622	88:1b:99:2f:99:3c	Assegnato
901	Pulsossimetro POD-1W	XCK001QE023356	78:DB:2F:B812:4A	Assegnato

Mostra la pwd impostata sul kit
Mostra password Salva Aggiungi dispositivo Chiudi


Dettaglio password

Password: pwdadjQE6

Chiudi

Gestione Dispositivi

In questa maschera è possibile gestire un singolo dispositivo anche non facente parte di un kit. Ogni dispositivo ha come campi l'ID del dispositivo, il nome del dispositivo, il numero seriale, lo stato, l'indirizzo Bluetooth, il pin Bluetooth, l'organizzazione di appartenenza e la versione firmware.



26697 ALLARMI
0 CHAT
2 ATTIVITÀ

[DASHBOARD](#)
[HOME](#)
[ASSISTITI](#)
[OPERATORE](#)
[REFERTI](#)
[ADMIN](#)

GESTIONE DISPOSITIVI

ID DISPOSITIVO	NOME DISPOSITIVO	NUMERO SERIALE	STATO	INDIRIZZO BT	PIN BT	ORGANIZZAZIONE	KIT	ASSOCIATO A
Device 0011	STM ECG	000864-2012	Assegnato	e4 ee fd 00 0e 47	3450	H&S Telemonitoraggio		
Device 0021	HaS CallMe	HRMCM-20120330-374...	Assegnato	00 07 80 4A 53 78	1234	H&S Telemonitoraggio		
Device 0022	STM ECG	003173-2013	Assegnato	e4 ee fd 00 0e 64	7575	H&S Telemonitoraggio		
Device 0023	HaS CallMe	HRMCM-20120330-374...	Assegnato	00 07 80 4A 4A 30	1234	H&S Telemonitoraggio		
Device 0024	FORA HealthScale W310	2551213160001782	Assegnato	00 12 A1 B0 9B 84	111111	H&S Telemonitoraggio		
Device 0025	FORA Glucometer G31b	425621225000860B	Assegnato	00 12 3E FF 3B 9E	111111	H&S Telemonitoraggio		
Device 0026	Nonin 9560BT	501593655	Assegnato	00 1C 05 00 8B 71	593655	H&S Telemonitoraggio		
Device 0027	HaS CallMe	HRMCM-20120330-374...	Assegnato	00 07 80 4A 47 84	1234	H&S Telemonitoraggio		
Device 0028	AND Blood Pressure UA...	5100901128	Assegnato	00 AD 96 33 18 DF	39121440	H&S Telemonitoraggio		
Device 0029	FORA HealthScale W310	2551213160002073	Assegnato	00 12 A1 B0 9E C7	111111	H&S Telemonitoraggio		
Device 0030	FORA Glucometer G31b	425621133000186A	Assegnato	00 12 3E FF 2D EC	111111	H&S Telemonitoraggio		
Device 0031	Nonin 9560BT	501593459	Assegnato	00 1C 05 00 8B C6	593459	H&S Telemonitoraggio		
Device 0032	HaS CallMe	HRMCM-20120330-374...	Assegnato	00 07 80 4A 47 D1	1234	H&S Telemonitoraggio		
Device 0033	AND Blood Pressure UA...	5100603342	Assegnato	00 AD 96 31 C2 58	39121440	H&S Telemonitoraggio		
Device 0035	HaS SmartWalk	HSP-20130904-806-10130	Assegnato	00 80 a1 fe 58 a6	1234	H&S Telemonitoraggio		
Device 0036	HaS SmartWalk	HSP-20130904-806-10180	Assegnato	00 80 a1 fe 1b 37	1234	H&S Telemonitoraggio		
Device 0037	STM ECG	003173-2013	Assegnato	E4 EE FD 00 14 3E	9398	H&S Telemonitoraggio		
Device 0038	Tellanika TrackMe	352840022295635	Assegnato			H&S Telemonitoraggio		
Device 0039	HaS SmartWalk	HSP-20130904-806-10466	Assegnato	00 80 a1 fe 1a e3	1234	H&S Telemonitoraggio		
Device 0040	HaS CallMe IMG1	HRMCM-20120330-374...	Assegnato	00 07 80 4a 55 7c	1234	H&S Telemonitoraggio		

+

« < | Pagina 1 | > »
Mostrati 1 - 20 di 901

CGM CARE MAP
Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

Cliccando su un dispositivo è possibile modificarne i dati, cliccando sul + in basso a destra è possibile inserire un nuovo dispositivo compilando i campi obbligatori. Per la modifica e l'aggiunta di un dispositivo il pop-up che viene aperto è lo stesso.

DETTAGLIO DISPOSITIVO

Nome	EGG 828-03
Type dispositivo *	EGG 828-03
Stato dispositivo *	Assegnato
Numero seriale	H2013121042205330
Indirizzo BT *	EG301334D8DF
Pin BT	
Configurazione	
Organizzazione *	H&S Telemonitoraggio
Versione firmware	01.29083

Salva
Chiudi

Gestione Questionari

La maschera sotto riportata è a disposizione dell'amministratore del sistema e consente di gestire i questionari da compilare sul portale. Ogni questionario ha i campi nome, note, tipo e il tic su cancellato o meno.

Nome	Note	Tipo
ADRS	Aphasic Depression Rating Scale	Valutazione Infermieristica
Anamnesi	Raccolta informazioni anamnesi	Anamnesi
ASRA	Alodia Social Risk Assessment	Valutazione Infermieristica
BADL	Attività di base della vita quotidiana	Valutazione Infermieristica
BARTHEL	Valutazione della disabilità	Valutazione Infermieristica
BENDAGGIO	FERITE DIFFICILI	Valutazione Infermieristica
BIM	Barthel Index Modificato	Valutazione Infermieristica
BMI		Valutazione Infermieristica
BRADEN	Integrità cutanea	Valutazione Infermieristica
BRASS	Blaylock Risk Assessment Screening	Valutazione Infermieristica
CEI	CAREGIVER BURDEN INVENTORY	Valutazione Infermieristica
Charlson	Indice di comorbidità di Charlson	Valutazione Infermieristica
CIRS	Cumulative Illness Rating Scale	Valutazione Infermieristica
CONLEY	Valutazione del rischio di caduta del paziente	Valutazione Infermieristica
ESAS	Edmonton Symptom Assessment Scale	Valutazione Infermieristica
Flow chart g 140		Comunicazione
Flow chart g 78		Comunicazione
GAD-7 ANXIETY		Valutazione Infermieristica
GDS	Geriatric Depression Scale	Valutazione Infermieristica
GEFI	INDICE DI VALUTAZIONE GLOBALE	Valutazione Infermieristica

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

Cliccando su un questionario è possibile modificarne i dati, cliccando sul + in basso a destra è possibile inserire un nuovo questionario compilando i campi obbligatori.

Il campo Allegato permette di caricare un PDF che verrà concatenato al documento generato su singolo paziente una volta che il questionario o compilato, viene normalmente utilizzato per inserire una legenda o nota informativa relativa al questionario.

QuestionarioWeb

Nome *:

Note:

Tipo *:

Cancellato:

Allegato: + Scegli...

- Elimina Allegato
 Sezioni
Domande
Salva
Chiudi

Gestione Questionari App

La maschera sotto riportata è a disposizione dell'amministratore del sistema e consente di gestire i questionari da compilare sul telefono, all'interno dell'app. Ogni questionario ha i campi nome e note e le informazioni di creazione e modifica

CGM TELEMEDICINE

ALLARMI CHAT ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

GESTIONE QUESTIONARI APP

NOME	NOTE	CREATO DA	CREATO IL	MODIFICATO IL
Preparazione Videovista	Preparazione Videovista	Administrator General	13/10/2021	13/10/2021
Follow up ultimo controllo	Follow up ultimo controllo			
Sintomi pneumologici	Sintomi pneumologici			

+

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

Cliccando su un questionario è possibile modificarne i dati, cliccando sul + in basso a destra è possibile inserire un nuovo questionario compilando i campi obbligatori.

QUESTIONARIO APP

QUESTIONARIO APP DOMANDE ORGANIZZAZIONI

Nome * Hub_Survey_1

Note Salute rispetto ultimo controllo

Messaggio iniziale

Messaggio finale

Pubblico Se il questionario viene reso pubblico le organizzazioni associate saranno prese in considerazione. Altrimenti sarà visibile solo all'operatore che ha inserito il questionario

Genera misura da punteggio Tipologia misura clinica Nuova misura clinica

Salva Crea

Nel caso in cui sia stato abilitato il flag “Genera misura di punteggio” è possibile selezionare una misura per il calcolo del punteggio del questionario o definirne una nuova dando un click sul tasto “Nuova misura clinica” e compilando lo schema che appare:

Successivamente è possibile inserire le domande; queste possono prevedere una risposta numerica, a testo libero o selezionata da una lista.

ID	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	RISPOSTE POSSIBILI	PUNTO	AZIONI
1	Domanda 1	Domanda a scelta multipla	1, 2, 3, 4, 5	1	+
2	Domanda 2	Domanda a scelta multipla	1, 2, 3, 4, 5	1	+
3	Domanda 3	Domanda a scelta multipla	1, 2, 3, 4, 5	1	+

DESCRIZIONE	VALORE NUMERICO	RISPOSTA	PUNTO
1	1	1	1
2	2	2	1
3	3	3	1

Gestione Organizzazioni

La maschera sotto riportata è a disposizione dell'amministratore del sistema e consente di gestire le organizzazioni. Ogni organizzazione ha i campi nome, descrizione, organizzazione padre e tipo.

Nome	Descrizione	Organizzazione Padre	Tipo
ASS 1 - Cure Ambulatoriali e Domiciliari MUGGIA		ASS 1 - SS Anziani e residenzialità VALMAURA	ASL
ASS 1 - Cure Ambulatoriali e domiciliari OSPEDALE MAGGIORE		MEDICOPERTUTTI S.R.L.	ASL
ASS 1 - Cure Ambulatoriali e Domiciliari PUCCINI			ASL
ASS 1 - Cure Ambulatoriali e domiciliari SAN GIOVANNI			ASL
ASS 1 - Cure Ambulatoriali e domiciliari STOCK		Distretto Montale	ASL
ASS 1 - SS Anziani e residenzialità SAN GIOVANNI			ASL
ASS 1 - SS Anziani e residenzialità VALMAURA		Distretto Montale	ASL
ASS 5 - Cervignano Del Friuli			ASL
ASS 5 - Latisana			ASL
ASS 5 - Palmanova			ASL
ASS 5 - S. Giorgio di Nogaro		MEDICOPERTUTTI S.R.L.	Distretto
Chorafama			ASL
Cliente 1			ASL
Cliente 2			ASL
Distretto 1 dell'ASS3			Distretto
Distretto 2 Tolmezzo			Distretto
Distretto di Chiviale			Distretto
Distretto Montale			Distretto
Farmacia Passione			ASL
GIPO			ASL
Gruppo 1		Cliente 1	ASL
Gruppo 2			ASL
MEDICOPERTUTTI S.R.L.	Codice Fiscale e P. IVA: 15871761009		ASL

Cliccando su un'organizzazione è possibile vederne e modificarne i dettagli.

Dettaglio Organizzazione

Gestione Organizzazione | Gestione CDA | Configurazioni | Destinatari Notifiche Allarmi | Figure professionali | Referenti | Area di esclusione | Contratto | Prezzi attività

Nome * CGM - MALTA

Descrizione CGM - Country Malta

Padre

Tipo Organizzazione * ASL

Indirizzo

Telefono

Email

External ID

Condivisi assistiti

Note

Salva Chiudi

Il campo Padre permette di definire una gerarchia di organizzazioni a N livelli; l'organizzazione padre viene definita di tipo "ASL", le altre "Distretti"

“Gestione CDA” serve ad inserire i dati utili a livello di organizzazione per l’invio del CDA verso regione dove è previsto

Dettaglio Organizzazione

Gestione Organizzazione	Gestione CDA	Configurazioni	Destinatari Notifiche Allarmi	Figure professionali	Referenti	Area di esclusiva	Contratto	Prezzi attività
Codice ASL:								
Sigla ASL:								
Durata PAI cronici:								
Codifica CDA:								

“Configurazioni” permette di caricare un’immagine ed una descrizione visibile su App per l’Organizzazione e di definire titolo e testo di default per le mail che vengono generate relativamente agli eventi avversi

Dettaglio Organizzazione

Gestione Organizzazione	Gestione CDA	Configurazioni	Destinatari Notifiche Allarmi	Figure professionali	Referenti	Area di esclusiva	Contratto	Prezzi attività	
Immagine:	Immagine caricata						Scegli...	Vedi	Elimina immagine
Descrizione app:	Benvenuto!								
Mail Eventi Avversi									
Titolo default:									
Messaggio default:									

Configurazione automatica destinatari allarmi:

Per ogni organizzazione è possibile impostare dei destinatari automatici per gli allarmi che vengono generati da soglie, essi sono suddivisi da un ulteriore livello che è il tipo monitoraggio del paziente, un operatore può ricevere le notifiche di più tipi monitoraggio.

Cliccando sul pulsante “+” si apre la finestra di dettaglio per aggiungere una nuova configurazione per tipo di monitoraggio all’organizzazione corrente.

Aggiungi Configurazione

Tipo monitoraggio *:	
	Salva Chiudi

Nella lista di configurazioni per l’attuale organizzazione, cliccando su un elemento in essa è possibile visualizzare e modificare gli operatori attualmente associati e visionare lo storico delle modifiche che sono state apportate.

Aggiungi Configurazione

Organizzazione: Distretto Montale Tipo monitoraggio: Telemonitoraggio

Lista Destinatari | Storico

Codice	Nominativo	Organizzazioni	
00000003	Operatore4 Test	ASL Piacenza, Distretto Montale; ASS 5 - S. Giorgio di Nogaro; ASS 1 - Cure Ambulatoriali e domiciliari STOCK; ASS 1 - Cure Ambulatoriali e domiciliari OSPEDALE MAGGIORE; ASS 1 - SS Anziani e residenzialità VALMAURA; ASS 1 - Cure Ambulatoriali e Domiciliari MUGGIA; ZZZZ; OrganizzazioneCrestata nuova	<input checked="" type="checkbox"/>
00000004	Admin HP3	ASL Piacenza, Prova test 3; Passione; Org TEST	<input checked="" type="checkbox"/>

+
Applica Modifiche | Check

Aggiungi Configurazione

Organizzazione: Distretto Montale Tipo monitoraggio: Telemonitoraggio

Lista Destinatari | Storico

Codice	Nominativo	Data Modifica	Cancellato
00000004	Admin HP3	09/07/2020 09:59:46 am	<input type="checkbox"/>
00000010		09/07/2020 09:59:38 am	<input checked="" type="checkbox"/>
00000010		09/07/2020 09:57:22 am	<input type="checkbox"/>
00000004	Admin HP3	09/07/2020 04:34:52 pm	<input checked="" type="checkbox"/>
00000067	Operatore Telemonitoraggio	09/07/2020 04:34:50 pm	<input checked="" type="checkbox"/>
00000067	Operatore Telemonitoraggio	09/07/2020 04:32:19 pm	<input type="checkbox"/>
00000056	Medico test	09/07/2020 04:32:14 pm	<input checked="" type="checkbox"/>
00000046	Medico test	09/07/2020 04:28:04 pm	<input type="checkbox"/>
00000003	Operatore4 Test	18/05/2020 06:20:22 pm	<input type="checkbox"/>
00000004	Admin HP3	18/05/2020 06:20:22 pm	<input type="checkbox"/>

Applica Modifiche | Check

Cliccando sul pulsante “+” è possibile associare un nuovo operatore alla configurazione Organizzazione + Tipo Monitoraggio aperta, l’operatore deve far parte dell’organizzazione selezionata.

AGGIUNGI OPERATORE

Nominativo *:

Salva | Check

Gli altri Tab sono visibili in base alla configurazione dei permessi e sono relativi alla configurazione di aspetti specifici di alcune organizzazioni.

Configurazione Stati Allarme

La maschera sotto riportata è a disposizione dell'amministratore del sistema e consente di gestire alcuni parametri sugli stati allarme come la possibilità di cambiargli stato automaticamente o di generare una notifica automatica via E-mail, SMS o direttamente sull'APP dell'assistito.

Gli stati allarme sono caratterizzati da un titolo e una descrizione.

TITOLO	DESCRIZIONE
Da gestire	
Inviate mail in attesa di riscontro	
Contattato assistito in attesa di riscontro	
COSMA-contattato assistito in attesa di mis.	test COSMA
Inviate email in attesa di misurazione-pressione	test COSMA
Inviate email in attesa di misurazione-peso	test COSMA
Inviate email in attesa di misurazione-bianco	test COSMA
Inviate mail in attesa di misurazione	
Contattato assistito in attesa di misurazione	
Contattare da medico	
Contattare da CM	
misura da verificare	test COSMA
Falso allarme	Falso allarme
Nessuna risposta, ricontattare	
Chiuso valore rientrato	
Chiuso senza contatto	
Chiusura SI ricezione misura	
Chiusura NO ricezione misura	
Assegnato HD H&S	
Assegnato Unisalute	
Chiuso - Inviate Mail SI misurazione	
Chiuso	Chiuso
Chiuso - Contattato SI misurazione	
Chiuso - Inviate Mail NO misurazione	

Cliccando su uno stato allarme viene aperta una finestra di dettaglio dove si possono visualizzare le configurazioni già presenti e la possibilità di aggiungerne di nuove.

TIPO REGOLA	ORGANIZZAZIONE	TIPO ASSISTITO	PRODOTTO	TIPO MONITORAGGIO	ALLARME PRIORITÀ	TIPO MISURA
Notifica		Cronicità ATS Monza e Brianza				

Cliccando sul pulsante “+” è possibile aggiungere una nuova configurazione andando ad impostare questi campi:

- Assistito Organizzazione
- Assistito Tipo Assistito
- Assistito Prodotto
- Assistito Tipo Monitoraggio
- Allarme Priorità
- Allarme Tipo Misura
- Tipo Regola



AGGIUNGI CONFIGURAZIONE

Tipo regola #:

Organizzazione:

Tipo assistito:

Prodotto:

Tipo monitoraggio:

Priorità allarme:

Tipo misura:

Salva Chiudi

I possibili valori del campo “Tipo Regola” possono essere:

- Notifica
- Cambio stato allarme
- Genera Attività

Una volta inserita una nuova riga nella griglia delle configurazioni è possibile, cliccando sulla configurazione desiderata, entrare in un secondo livello di dettaglio in cui si possono completare le configurazioni.

Tipo regola “Notifica”

Nel dettaglio delle notifiche di Tipo Regola Notifica, al tipo evento, sono presenti i seguenti controlli:

- **Evento**

è possibile selezionare il tipo di evento tra i seguenti:

- Temporizzato con TIMER espresso in minuti
scegliendo questa opzione sarà anche possibile specificare:
 - una condizione di esecuzione, che può essere:
 - Da cambio stato allarme (default): significa che la logica del timer è valida dal momento dell'ultimo cambio stato allarme.
 - Da quando è scattato l'allarme: si intende che la logica del timer è valida dal momento in cui è stato creato l'allarme.
 - una condizione di annullamento automatico, che può essere:
 - Nessuna (default)
 - Annullamento su arrivo misure: significa che se nel frattempo arriva una misura il timer deve essere annullato
 - L'attesa in minuti dopo i quali il timer scatterà
- Ricezione di misura con valore sopra soglia: si intende che la misura conferma la soglia che ha fatto scattare l'allarme.
- Ricezione di misura con valore sotto soglia: si intende che la misura non conferma la soglia che ha fatto scattare l'allarme.

- **Opzioni d'invio:**

E' possibile specificare se inviare la notifica all'app, via SMS o per e-mail; negli ultimi due casi, oltre ai destinatari specificati nella sezione sottostante mediante il ruolo, è possibile indicare se includere anche il paziente.

DETTAGLIO CONFIGURAZIONE - DA GESTIRE - NOTIFICA

Evento *: Temporizzato con TIMER ✕

Opzioni di invio:

Invia su app:

Invia mail: Invia mail paziente:

Invia sms: Invia sms paziente:

APP EMAIL SMS

[Lista Marcatori](#)

Titolo:

Messaggio:

Ruoli destinatari:

Profili utenti:

Ora inizio notifiche *: 00:00

Ora fine notifiche *: 00:00

Condizione di esecuzione: Da cambio stato allarme ✕

Attesa minuti:

Condizione di annullamento: Nessuna ✕

[Salva](#) [Elimina](#) [Chiudi](#)

- **Sezione messaggistica**, differenziata per APP (titolo + contenuto), EMAL (titolo + contenuto), SMS (testo unico, max 160 caratteri), nei testi è possibile includere anche specifici marcatori.

CONFIGURA MARCATORI

Inserendo nel testo questi marcatori verranno automaticamente sostituiti con i relativi dati del paziente durante la generazione della notifica

- [PATIENT_NAME] - Nome paziente
- [PATIENT_SURNAME] - Cognome paziente
- [PATIENT_ID] - Codice paziente
- [PATIENT_EMAIL] - E-Mail paziente
- [PATIENT_TELCELL] - Cellulare paziente

Nella parte inferiore della schermata è possibile indicare i destinatari mediante una multiselezione dei possibili profili o dei ruoli dei contatti dell'assistito. Nel momento della generazione della notifica verranno ricercati tutti gli utenti dei profili selezionati che vedono il paziente e/o dei ruoli selezionati.

Tipo regola “Cambio stato allarme”

Il tipo regola “Cambio stato allarme”, oltre alla selezione di un tipo di evento dà la possibilità di selezionare lo stato allarme di destinazione per questa configurazione.

DETTAGLIO CONFIGURAZIONE - COSMA-INVIATA EMAIL IN ATTESA DI MIS-PRESSIONE - CAMBIO STATO ALLARME

Evento *: Ricezione di misura con valore sotto soglia

Stato successivo: COSMA-misura da verificare

- Chiuso - contattato da medico
- Chiuso - contattato da CM
- Chiuso - convocato in ambulatorio
- Chiuso - gestito da medico
- Chiuso - gestito da CM Cosma
- In carico a CM ambulatorio
- COSMA-inviata email in attesa di mis-peso
- COSMA-inviata email in attesa di mis-bianco
- COSMA-misura da verificare

Tipo regola “Genera attività”

Il tipo regola “Genera Attività” consente di generare un’attività; E possibile specificare se l’attività debba essere generata contestualmente alla generazione dell’allarme o quando avviene un cambio stato di quest’ultimo e di selezionare il tipo di attività da generare.

DETTAGLIO CONFIGURAZIONE - ALLARME GESTITO - GENERA ATTIVITÀ

Evento *: Temporizzato con TIMER

Ora inizio notifiche *: 00:00

Ora fine notifiche *: 00:00

Condizione di esecuzione: Da cambio stato allarme

Attesa minuti:

Condizione di annullamento: Nessuna

Tipo Attività: Rilevazione misura

Tipo Misura: Ossimetria

Descrizione:

Salva Elimina Chiudi

Gestione Gruppi Chat

La maschera sotto riportata è a disposizione dell'amministratore del sistema e consente di gestire i referenti (tipicamente i centri di contatto dei CED e i contatti via telefono) ed i gruppi di utenti da utilizzare per le chat.

Riferimenti Contatti		
Nome	Telefono	Organizzazione
CUP PARMA	0524	H&S Telemonitoraggio TEST
CUP Piacenza	0523	H&S Telemonitoraggio TEST

Mostrati 1 - 2 di 2

Gruppi Chat	
Nome	Organizzazione
gruppo di test	H&S Telemonitoraggio TEST
secondo gruppo	H&S Telemonitoraggio TEST
terzo test	H&S Telemonitoraggio TEST

Mostrati 1 - 3 di 3

I referenti possono essere inseriti premendo il tasto + del riquadro corrispondente o modificati dando un click sull'elemento della lista che si intende variare. Comparirà la seguente schermata:

Riferimento Contatto

Nome *:

Telefono *:

Organizzazione *:

Anche i gruppi di chat possono essere inseriti premendo il tasto + del riquadro corrispondente; comparirà la schermata:

Gruppo Chat

Nome *:

Organizzazione *:

Salva Chiudi

Una volta salvato, il nuovo gruppo può essere selezionato per la modifica; il sistema consente l'inserimento degli utenti che faranno parte del gruppo proponendo l'elenco degli operatori che fanno riferimento alla stessa organizzazione alla quale fa riferimento il gruppo

Gruppo Chat

Nome *: Gruppo cardiologico

Organizzazione *: H&S Telemonitoraggio

Contatti Gruppo

Nome	Telefono
Administrator	222
Operatore	1234

Salva Aggiungi contatto Chiudi

Contatti

Operatori

<input type="checkbox"/>	Nome	Telefono
<input type="checkbox"/>	Admin Operatori US	
<input type="checkbox"/>	Operatore Francia	
<input type="checkbox"/>	OPERATORE GRUPPO	
<input type="checkbox"/>	Operatore SIS	
<input type="checkbox"/>	Operatore US	
<input type="checkbox"/>	Refertatore Test	

Salva Chiudi

Gestione Caregivers

La maschera consente di visualizzare i caregiver censiti nel sistema ed il legame tra essi e gli assistiti associati.

The screenshot displays the 'GESTIONE CAREGIVER' page. At the top, there are navigation tabs for 'CHAT' (0) and 'ATTIVITÀ' (207). The main header includes 'CGM TELEMEDICINE' and a search bar for caregivers. Below the header, a table lists caregiver information:

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE	EMAIL	TELEFONO	PAZIENTI CONNESSI		
rafaele	rapelli	RPTRFL96X	rafaele.rapelli@cgm.com	*			
VEDI DETTAGLIO							
VEDI	CODICE ASSISTITO	NOME	COGNOME	CODICE FISCALE	STATO RICHIESTA	PREFERITO	ABILITA NOTIFICHE
VEDI	05000110	Rapella	Demo 1	D18FHT33H49501L	In attesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Caregiver		MMarco	MMRCOV92E240599	marco.magrini@cgm.com	3356912620	Demo MMarco	

At the bottom of the page, there is a footer with 'CGM CARE MAPedical' and a page indicator 'Mostrati 1 - 2 di 2'.

Per ciascun caregiver sono elencati i relativi assistiti con l'indicazione dello stato richiesta (ad esempio, In attesa se l'assistito deve ancora autorizzare il legame), del fatto che il caregiver è identificato come Preferito e se le notifiche sono abilitate.

Premendo il pulsante Vedi si apre la maschera di dettaglio dell'assistito in cui è possibile visualizzare tutte le relative informazioni (vedi cap. Dettagli assistito).

Gestione Attività

La maschera consente configurare le tipologie di attività che gli operatori possono inserire nella propria agenda. Sono presenti e configurabili solo le attività che hanno i sottotipi attività abilitati; ad esempio, l'attività "Rilevazione misura" non è configurabile in quanto non è possibile definire dei sottotipi.

The screenshot shows the 'GESTIONE ATTIVITÀ' (Activity Management) screen. At the top, there are navigation tabs for 'CHAT' and 'ATTIVITÀ', and a menu with 'DASHBOARD', 'HOME', 'ASSISTITI', 'OPERATORE', 'REFERTI', and 'ADMIN'. Below the title, there is a search bar. The main content is a table with the following columns: 'Nome', 'Descrizione', and 'Traduzioni'. The table lists various activity types such as 'Attività tecnica', 'Cronologia', 'PSP', 'LTC', 'Prestatori Domiciliari', 'Pulsionografia', 'Notifica', 'Non disponibile', 'Chiamata vocale', and 'Telecardiologia'. Each row has a 'Traduzioni' column with a 'Gestisci traduzioni' button. At the bottom right of the table area, there is a '+' button for adding new activities. The footer shows 'CGM CARE MAP' and the date 'Martedì 1 - 11:01'.

Per creare un nuovo tipo attività premere su '+':

The 'Dettaglio attività' form is used for configuring a new activity type. It features two text input fields: 'Nome default' and 'Descrizione default'. Below these are several checkboxes for configuration options:

- Abilita sottotipi:
- Abilita allarmi:
- Assegna operatori per distanza:
- Visibile su App:
- Inseribile da template:
- Visibile su Diario:
- Paziente obbligatorio:
- Disabilita inserimento:
- Esclusiva operatore:

 At the bottom right, there are 'Save' and 'Chiudi' buttons.

È necessario specificare un nome e una descrizione per il nuovo tipo attività ed è possibile configurare l'attività abilitando o meno i seguenti flags:

- Abilita sottotipi: sempre valorizzato e non modificabile, le attività gestibili devono avere sottotipi.
- Abilita allarmi: consente la generazione di allarmi relativi all'attività
- Assegna operatore per distanza
- Visibile su App: rende visibile il tipo attività sull'App
- Inseribile da template: consente di creare attività di questo tipo durante la generazione del calendario
- Visibile su Diario: l'attività sarà visibile nel diario del paziente
- Paziente obbligatorio: è necessario specificare un paziente durante la creazione di un'attività di questo tipo
- Disabilita inserimento: non sarà possibile creare un'attività di questo tipo nell'agenda, utile per evitare che un tipo attività sia utilizzato se la sua eliminazione non è possibile (perché già utilizzato in passato)
- Esclusiva operatore

Premere poi Salva per salvare il nuovo tipo attività.

Cliccando su un'attività esistente si apre la maschera in cui è possibile modificarne la configurazione:

Dettaglio attività

Nome default *: Prestazioni Domiciliar | Descrizione default *: Prestazioni Domiciliar

Tolleranza inizio *: 60 | Tolleranza fine *: 30 | Minuti reminder: [dropdown]

Abilita sottotipi: | Paziente coinvolto/visibile in APP: | Visibile su Diario: | Disabilita inserimento:

Abilita allarmi: | Inseribile da template: | Paziente obbligatorio: | Esclusiva operatore:

Assegna operatore per distanza: | Allegato obbligatorio per eseguire attività: | Conferma esecuzione: | Visibile nel PDTA:


Reminder ICS: | Invia notifica mail a nuovi operatori coinvolti: | Collegata a questionario web: | Attività con link cliccabile:

Sotto attività

Id Attività tipo	Nome	Codice esterno	Durata default	N° Operatori previsti	Abilita chiamata Voip	Disabilita inserimento	Traduzioni
16	Contattare assistito		0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gestisci traduzioni
16	Contattare fornitore		0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gestisci traduzioni
16	Contatto da assistito		0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gestisci traduzioni
16	Contatto da fornitore		0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gestisci traduzioni
16	Termine copertura		0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gestisci traduzioni

Salva | Aggiungi sottoattività | Note Operatore | Elimina | Chiudi

Se si vuole aggiungere un sottotipo all'attività premere 'Aggiungi sotto attività' e configurare la sotto attività nella maschera seguente:

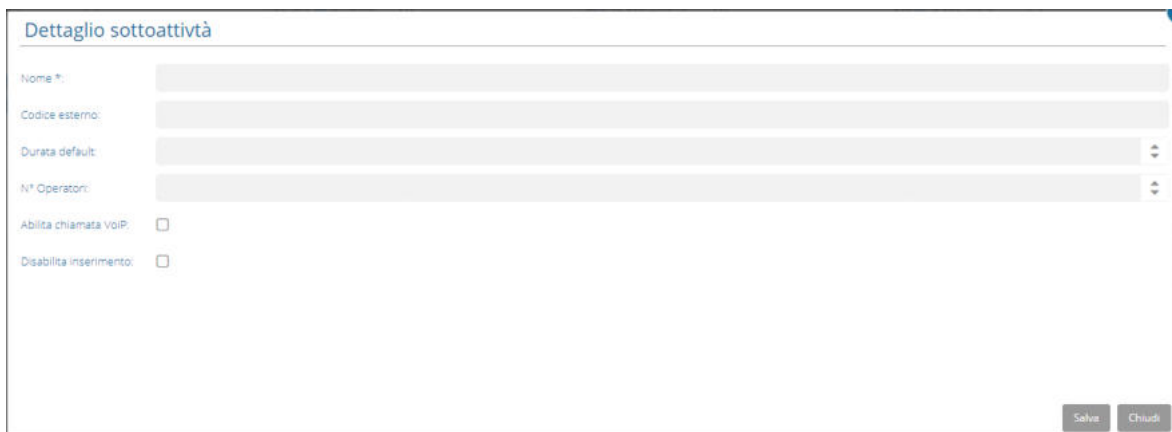

Dettaglio sottoattività

Nome #:

Codice esterno:

Durata default:

N° Operatori:

Abilita chiamata VoIP:

Disabilita inserimento:

Salva Chiudi

È necessario specificare un nome per la sottoattività e se si desidera è possibile valorizzare i rimanenti campi per configurarla:

- Codice esterno
- Durata default: è la durata normalmente utilizzata in fase di creazione di un'attività, espressa in minuti.
- N° operatori
- Abilita chiamata VoIP: la chiamata sarà abilitata in attività di questo tipo
- Disabilita inserimento: non sarà possibile utilizzare questa sottoattività in fase di creazione di un'attività nell'agenda, utile per evitare che sia utilizzato se la sua eliminazione non è possibile (perché già utilizzato in passato)

Premere 'Salva' per salvare la sottoattività.

Per tipi e sottotipi attività è possibile configurare le traduzioni nelle lingue disponibili tramite il pulsante 'Gestisci traduzioni' disponibile per ciascun tipo sulla destra della riga corrispondente:

Dettaglio attività traduzioni

Se si desidera, possono essere gestite le traduzioni per questa attività tipo

Lingua	Nome tradotto	Descrizione tradotto
Italiano	Polisonnografia	Polisonnografia Automatic
English	Polysomnography	Polysomnography Manual
Chinese	进行翻译	进行翻译
Español	PARA TRADUCIR	PARA TRADUCIR
Francais	TRADUIRE	TRADUIRE
Deutsch	ÜBERSETZT WERDEN	ÜBERSETZT WERDEN
Swedish	Polysomnografi	Polysomnografi

Salva Chiudi

Dettaglio sottoattività traduzioni

Se si desidera, possono essere gestite le traduzioni per questa attività sottotipo

Lingua	Nome tradotto
Italiano	Richiesta esame
English	Exam request
Chinese	进行翻译
Español	PARA TRADUCIR
Francais	TRADUIRE
Deutsch	ÜBERSETZT WERDEN
Swedish	Undersökningsförfrågan

Salva Chiudi

Gestione Prodotti

E' possibile gestire i prodotti che vengono assegnati ai pazienti in base alla loro tipologia e definire i pacchetti e le attività relative.

GESTIONE PRODOTTI

Cerca prodotto

Codice	Nome	Descrizione	Data inizio	Data fine	Listino/Organizzazione
00001	Service Demo 1	Test			
00002	Service Demo 2	Test			
00003	Service Demo 3	Test			
00004	Service Demo 4	Test			
40126	ATS DEMO	ATS DEMO			
9999	Telemonitoraggio paziente TEST	Telemonitoraggio paziente			
999AA	Telemonitoraggio paziente DEMO	Telemonitoraggio pazienti Bolzano			
12525	Telemonitoraggio	Telemonitoraggio Pilota Francia			
Telemonitoraggio Telelife	Telemonitoraggio Telelife	Telemonitoraggio Telelife			
GABCVM_TELEMONITORA...	GABCVM Telemonitoraggio	GABCVM Telemonitoraggio			
GABCVM_PRIMARYCARE	GABCVM Primarycare	GABCVM Primarycare			
PressaCarico	Pressa in Carico	Pressa in Carico - UniTo			
00245	Prova PRD 01	prodotto di prova 01			
2023-001	Macrolesioni 23		31/01/2023	31/01/2025	Demo Allianz
2023-002	Macrolesioni 23-3-Videac		01/04/2023	31/01/2024	Demo Allianz
2023-002	Macrolesioni 23-4		01/04/2023	31/01/2024	Demo Allianz
2023-002	Macrolesioni 23-5		01/04/2023	31/01/2024	Demo Allianz
	Prodotto A - Sinistri AV - TEST1				
AV-A-SAV-Test2	Prodotto A - Sinistri AV - TEST 2				
	READS				

Per aggiungere un nuovo prodotto premere su + e compilare i campi nella maschera di dettaglio, salvando al termine.

✕
Prodotto Nuovo

DETTAGLIO

<p>Nome * <input type="text"/></p> <p>Descrizione <input type="text"/></p> <p>N° prodotto * <input type="text"/></p> <p>Codice esterno cliente <input type="text"/></p> <p>Edizione <input type="text"/></p> <p>Data sottoscrizione: <input type="text"/></p> <p>Data inizio validità: <input type="text"/></p> <p>Data fine validità: <input type="text"/></p> <p>Data fine erogazione prestazioni: <input type="text"/></p> <p>Validità copertura (mesi): <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Possibilità di rinnovo per individuo (compatibilmente con data fine validità)</p> <p>Pubblica * <input type="text" value="No"/></p>	<p>Alarme eventi avversi * <input type="text" value="No"/></p> <p>Mali eventi avversi: <input type="text"/></p> <p>Abilita caregiver su app * <input type="text" value="No"/></p> <p>Listino/Organizzazione: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Filtra attività su paziente in base a pacchetti e att. pianificate</p> <p><input type="checkbox"/> Visibile in criteri ammortabilità</p>
--	--

Una volta salvato entrando in modifica è possibile specificare i pacchetti,

✕
Prodotto Macrolesioni 23-4


DETTAGLIO
PACCHETTI
ATT. PIANIFICATE
TIP. ASSISTITO

<p>Nome <input type="text"/></p> <p>Esami <input type="text"/></p> <p>Accessi <input type="text"/></p> <p>video <input type="text"/></p>	<p>Valido per <input type="text"/></p> <p>Titolare <input type="text"/></p> <p>Titolare <input type="text"/></p> <p>Titolare <input type="text"/></p>
--	---

Prodotto Macrolesioni 23-4			
DETTAGLIO	PACCHETTI	ATT. PIANIFICATE	TIP. ASSISTITO
Tipo attività	Sottotipo attività	Pianificazione	Valido per
DEM100-ML-ACCESSI INFERMERISTICI	DEM101-VISITA CONTROLLO	15 giorni da T0	Talora

Prodotto Telemonitoraggio paziente DEMO			
DETTAGLIO	PACCHETTI	ATT. PIANIFICATE	TIP. ASSISTITO
Nome	Descrizione	Codice	Traduzioni
Telemonitoraggio Covid-19 DEMO	Telemonitoraggio Covid-19 DEMO		Gestisci traduzioni

Impostazioni Generali

Nella sezione sotto l'icona  in alto a destra, sono presenti la pagina di Impostazioni Account, la pagina di Cambio Lingua, il Logout e, nel caso in cui l'operatore vi sia abilitato, la pagina di videochiamata.

Videochiamata

Se abilitata, consente di accedere alle funzionalità del videoconsulto. È possibile impostare l'utenza in modo che la finestra di videoconsulto si apra automaticamente al login dell'operatore.

Impostazioni Account

Le Impostazioni account permettono di modificare i Dati anagrafici e le informazioni di contatto dell'Operatore.

DATI UTENTE Ultimo accesso 13/08/2021 14:46, errori da ultimo accesso riuscito: 0

DATI ANAGRAFICI | INFORMAZIONI DI CONTATTO | ORGANIZZAZIONI | IMPOSTAZIONI

Nome *: Administrator

Cognome *: Generico

Sexo *: M

Codice Fiscale:

Tessera Sanitaria: 1

Codice regione medico:

Lingua: Italiano

Data di nascita *: 29/05/2014

Luogo di nascita: Piacenza

Nazionalità: Italiana

Nota:

Firma Salva Chiudi

DATI UTENTE Ultimo accesso 13/08/2021 14:46, errori da ultimo accesso riuscito: 0

DATI ANAGRAFICI | INFORMAZIONI DI CONTATTO | ORGANIZZAZIONI | IMPOSTAZIONI

Telefono: 111

Celulare: 222

E-Mail: 333

Nome Skype:

Notifiche Chat:

Firma Salva Chiudi

Il tab “Organizzazioni” mostra le varie organizzazioni a cui l’utente appartiene.

Nel tab “Impostazioni” è possibile selezionare una preferenza a livello di singolo utente sulle configurazioni internazionali come:

- Il tipo di unità di misura imperiale/internazionale che poi verrà visualizzata nella pagina dei parametri sulle misure corrispondenti
- Il formato orario 12h/24h in modo da poter visualizzare gli orari in 12h AM/PM oppure 24h su tutta la piattaforma

Tramite il pulsante “Firma” è possibile caricare il file della propria firma digitale certificata che verrà usata in automatico per firmare i referti degli esami.

Lingua

Utilizzando questa voce di menu è possibile utilizzare una lingua diversa da quella di default durante la sessione in corso. L'impostazione non verrà mantenuta nelle sessioni successive.



Informazioni generali e riferimenti

Destinazione d'uso

CGM CARE MAP è in grado di ricevere da dispositivi medici di misura le seguenti macrocategorie di parametri: Parametri vitali, Ematochimici, Cardiaci, Antropometrici, Spirometria, Urine, Indici di rischio, Attività fisica, Parametri ambientali. Questi dati in ingresso sono utilizzati per:

- creare grafici che mostrino l'andamento temporale dei parametri vitali monitorati, impostare da parte del medico numerose tipologie di soglie personalizzate e la conseguente prioritizzazione e gestione degli allarmi generati;
- visualizzare tracciati ECG, usare righelli per la misura del tracciato e applicare filtri (LowPass, HighPass);
- in caso di holter pressorio, calcolare valori medi e deviazione standard di pressione e frequenza cardiaca, intervallo sistolica/diastolica, confrontare con le soglie impostate per indicazione misure scartate e calcolare la percentuale sopra soglia
- in caso di spirometria, visualizzare le curve ricevute, calcolare il valore Teorico per diversi parametri (FVC, FEV1, etc.) e il rapporto tra valore reale e valore teorico (% Teorico).
- in caso di saturimetria in continuo, visualizzare il tracciato e calcolare minimo, massimo e media dei valori di saturazione e pulsazioni, oltre ad indicare gli intervalli temporali in cui il valore è stato inferiore ad una serie di valori di riferimento predefiniti (es. 90%, 88%, 80%, 70%, 60%).

Ciò consente di effettuare un telemonitoraggio dello stato di salute dei pazienti con lo scopo di fornire informazioni utilizzate dal medico per prendere decisioni a fini diagnostici e terapeutici. CGM CARE MAP non deve essere utilizzato in ambiti e su pazienti, ove la natura delle variazioni dei parametri vitali sia tale da poter creare un pericolo immediato per il paziente stesso (ad esempio, reparti di terapia intensiva o pazienti connessi a sistemi di supporto vitale).

Classificazione

Classificazione secondo Regolamento (UE) 2017/745 Articolo 51 - Allegato VIII regola 11 classe IIa.

Per la qualifica del prodotto come dispositivo medico si segue lo schema decisionale presente nella MDGC 2019-11, che permette di qualificare un SW come un DM software (MDSW).

Utilizzatori previsti

Ogni modulo del dispositivo è destinato all'utilizzo da parte di diversi utenti con ruoli diversi:

- CGM CARE MAP: utilizzato da operatori sanitari (medici, personale infermieristico)
- CGM CARE MAP Mobile: utilizzato dai pazienti stessi o con l'ausilio di caregiver
- CGM POINT OF CARE: utilizzato da operatori sanitari (medici, personale infermieristico, farmacisti)

Pazienti, indicazioni e controindicazioni

Il dispositivo è utilizzato per pazienti che necessitano un monitoraggio da remoto continuativo; solitamente si tratta di pazienti affetti da patologie croniche, per le quali risulta importante monitorare diversi parametri

clinici e tenere sotto controllo lo stato di salute. Si esclude l'utilizzo in ambiti e su pazienti, ove la natura delle variazioni dei parametri vitali sia tale da poter creare un pericolo immediato per il paziente stesso (ad esempio, reparti di terapia intensiva o pazienti connessi a sistemi di supporto vitale). Non si individuano ulteriori limitazioni d'uso/controindicazioni specifiche per l'utilizzo del SW, in termini di età o caratteristiche dei pazienti; è possibile l'utilizzo anche in caso di pazienti con ridotta capacità cognitiva e motoria, in quanto sono di norma assistiti da familiari o caregiver, che possono aiutarli nell'utilizzo del dispositivo.

Prestazioni essenziali

Dato che CGM CARE MAP è un dispositivo software di supporto al telemonitoraggio di ausilio alla terapia (vedi Destinazione d'uso) che consente la raccolta di dati clinici provenienti da vari dispositivi di misura, si ritiene di non identificare alcuna funzionalità come Prestazione Essenziale.

Non avendo il dispositivo alcuna funzionalità di:

- sostentamento alle funzioni vitali della persona
- erogazione di farmaci o altro che necessiti di un funzionamento garantito
- allarmi da cui possa dipendere nell'immediatezza lo stato di salute della persona
- principale fonte di informazioni per assumere decisioni fondamentali nel garantire la vita e lo stato di salute della persona

non si ritiene necessaria alcuna funzionalità del prodotto, dalla cui assenza possa derivare un rischio inaccettabile per la persona e quindi debba essere garantita nelle situazioni indicate dalla Norma, ovvero anche in presenza di anomalie e/o guasti.

Lo stesso invio delle misurazioni al sistema centrale, pur essendo previste misure per renderlo il più possibile affidabile e corretto, non deve essere necessariamente garantito, non essendo prese decisioni fondamentali in base a tali dati che possano arrecare danno alla persona.

Specifiche tecniche

Requisiti minimi hardware:

La configurazione varia sensibilmente in base al tipo di configurazione richiesta in termini di ridondanza e capacità elaborativa, anche in funzione dei carichi previsti. Di seguito la configurazione minima per poter avviare un servizio base comprendente una macchina per tipo (Web, Application e Database):

CPU: 20vCPU

Memoria RAM: 64 GB

Storage: 580 GB

Piattaforma operativa:

- Microsoft Windows Server 2019 o superiore

- Microsoft SQL Server 2019 o superiore
- Microsoft IIS 10 o superiore
- Opz. CardioCalm (AMPS CER-S v4.3) o superiore
- Browser: Microsoft Edge (v. 128, 131), Google Chrome (v. 131)

Caratteristiche delle reti informatiche:

È necessaria una connettività internet per permettere l'accesso degli utenti e l'invio/ricezione di comunicazioni automatiche (mail, sms, etc.).

La rete interna per il collegamento dei vari server è di tipo ad alta velocità e ridondata, nel dettaglio dipende dal tipo di installazione e dalle configurazioni adottate, oltre che dal data center utilizzato.

Misure di sicurezza informatica, compresa la protezione contro l'accesso non autorizzato:

I server sono dotati di antivirus/antimalware e le reti informatiche sono protette da sistemi di sicurezza perimetrale (c.d. *Firewall*) e da altre apparecchiature destinate allo scopo, come IDS (Intrusion Detection System), IPS (Intrusion Prevention system) e WAF (Web Application Firewall), mantenute aggiornate allo stato dell'arte.

I dati 'sensibili' sono protetti da cifratura e misure di anonimizzazione, mentre tutte le comunicazioni avvengono tramite protocolli sicuri (HTTPS, TLS 1.2).

L'accesso ai servizi avviene sempre tramite credenziali personali e la password è soggetta a criteri di complessità e policy di cambio periodico, gli utenti vengono sospesi dopo un periodo configurabile di inattività. Per aumentare la sicurezza è possibile attivare l'autenticazione a più fattori ove necessario.

Fabbricante

CGM CARE MAP è prodotto da:

CGM TELEMEDICINE S.R.L


Sede legale: Foro Buonaparte, 70 – 20121 Milano

Sede operativa: Via Emilia Parmense, 204 - 29122 Piacenza Tel. +39 0523 603311

Fax +39 0523 603364



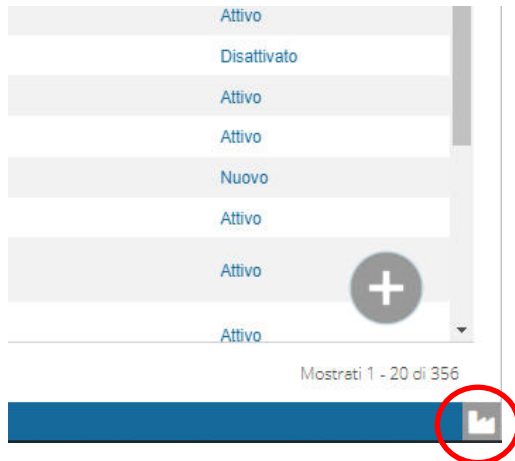

nella sede operativa di Piacenza.

Nell'angolo inferiore destro delle pagine è sempre disponibile un'icona a forma di fabbrichetta, cliccandola è possibile visualizzare la versione del software attualmente in uso e le informazioni del fabbricante:



	CGM TELEMEDICINE S.r.l. Sede legale: Foro Buonaparte, 70 – 20121 – Milano (MI) - Italia Sede operativa: Via Emilia Parmense, 204 – 29122 – Piacenza (PC) - Italia	
#	CGM CARE MAP	
CGM TELEMEDICINE		
Ver. 4.0.0.0		
Modulo Portale Web		
UDI	(01)00086000573683(8012)v.4.0.0.0	
	[aaaa/mm/gg]	
MD		CE 0051
	Le istruzioni per l'uso sono disponibili in formato elettronico PDF all'interno della sezione 'Manualistica' del menu Operatore. Per la visualizzazione è sufficiente un qualunque programma che supporti tale formato (Acrobat Reader o similari).E' possibile richiederne una copia cartacea inviando una mail all'indirizzo <mail configurata>, che sarà inviata gratuitamente entro 7 giorni.	

Spiegazione della simbologia:

	Identificazione del Fabbricante
#	Modello del dispositivo
	Data di rilascio
	Consultare il manuale d'uso
	Simbolo per indicare che le IFU sono disponibili in formato elettronico
UDI	Vettore UDI
MD	Dispositivo medico
CE 0051	Conforme al Regolamento (UE) 2017/745, DM Classe IIa. Il codice di 4 cifre indica l'ente certificatore del dispositivo.