


Material- und Hygieneverwaltung.

Maximale Sicherheit für Ihre Praxis.



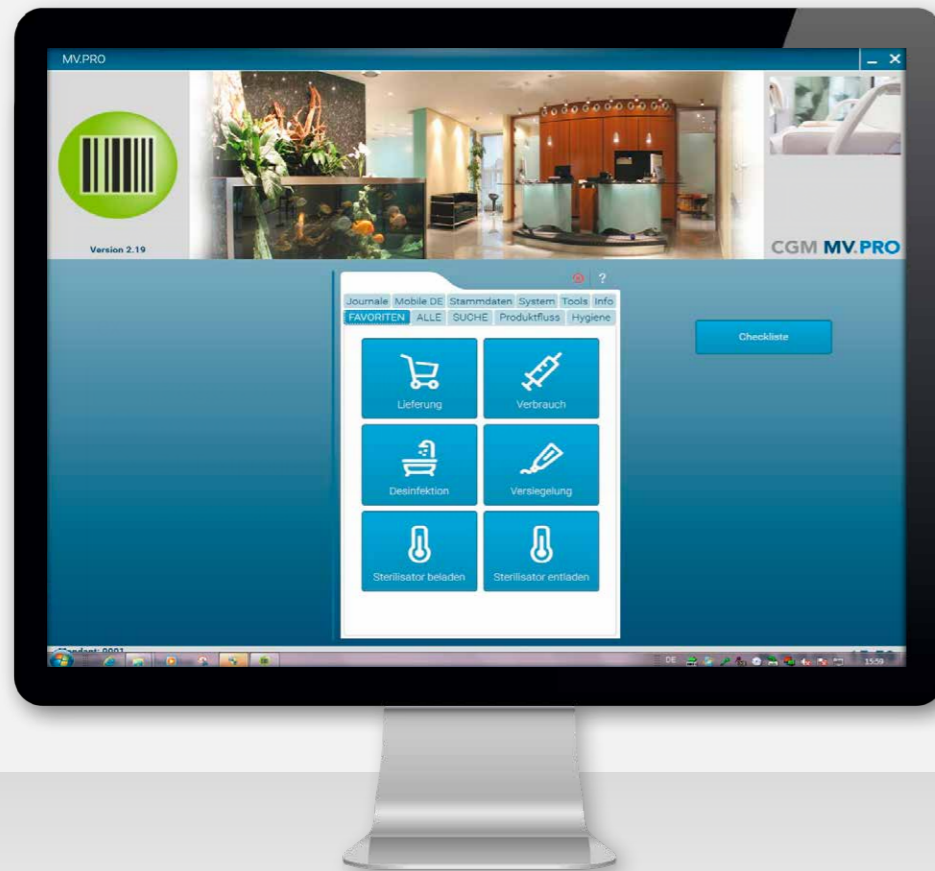

MATERIAL- UND HYGIENEVERWALTUNG.

Wer sich mit der Aufgabenstellung der lückenlosen und patientenbezogenen Material- und Hygieneverwaltung auseinandersetzt, erkennt schnell den deutlichen Mehraufwand, wenn die gesetzlichen Vorschriften manuell in der Praxis umgesetzt werden sollen. Weiterer Druck wird durch Praxisbegehungen und die ersten Urteile zum Thema Hygiene ausgeübt. CGM Dentalsysteme hat sich intensiv mit der organisatorischen Umsetzung befasst und bietet Ihnen eine praxiserprobte Lösung, die in den vorhandenen Praxisablauf integriert wurde und für den Benutzer eine deutliche Entlastung bedeutet.

Diese Lösung ist bereits an die Praxisverwaltungssysteme CHREMASOFT, CGM Z1, CGM Z1.PRO, CGM M1 PRO sowie CGM HIGHDENT PLUS der CGM angebunden. Sie kann aber auch an andere Systeme angebunden oder als Stand-Alone-Programm eingesetzt werden.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- **Umkehr der Beweislast** durch patientenbezogene sowie lückenlose Dokumentation des Materialverbrauchs und der verwendeten Instrumente
- **Bequeme Verbrauchsbuchung** während der Behandlung
- **Überwachung** von Verfallsdaten, Ist-Beständen, Tray- und Filterzyklen u.v.m.
- **Überwachung** von Materialbeständen und raumbezogenen Fehlmengen
- Bestell-, Lager- und Lieferlisten **auf Knopfdruck**
- **Automatische Archivierung** von Sterilisationsprotokollen

Hygienesdokumentation.

Die Praxisinstrumente und Trays werden in den Stammdaten zur Hygienesdokumentation klassifiziert.

Eine neue Technologie ist die Verwendung von UIM=The World Wide Unique Identification Mark. Ob als gelasertes Code auf Instrumenten oder auf Trayplaketten aufgebracht, mit CGM MV.PRO ist das Lesen und Verarbeiten möglich.

Vorteile:

- max. Aufbereitungs- und Filterzyklen werden überwacht
- schnelle Erfassung bei der Steri-Beladung und Verbrauchsbuchung



Vorreinigung & Desinfektion.

Über die Desinfektion wird die Instrumentenaufbereitung nach gültigen Verfahrensanweisungen dokumentiert. Dies gilt für die manuelle Reinigung und Desinfektion sowie die maschinelle Thermodesinfektion. Mit CGM MV.PRO lassen sich Geräte aller namhaften Hersteller anbinden.

Versiegelung.

Ein Großteil der Instrumentenverpackungen muss nach der Desinfektion versiegelt und sterilisiert werden. Diese Validierung des Verpackungsprozesses kann mit CGM MV.PRO durch Anbindung eines Siegelgerätes verwaltet werden.

Beladen und Entladen des Sterilisators.

Beim Beladen des Sterilisators werden die Instrumente und Trays von einer Scannervorlage oder der UIM-Marke gescannt.

Der Sterilisationsvorgang wird von dem zuständigen Mitarbeiter beurteilt. Zum Sterilisationsprozess wird das Protokoll mit Charge, Prozess-ID, Belader- und Freigeber mit Mitarbeiteridentifikation lückenlos archiviert. Bei z. B. einer Praxisbegehung stehen auf Knopfdruck alle Dokumentationen zur Verfügung.



Bestandsübersicht von Instrumenten und Materialien auf Knopfdruck mit der CGM MV.RPO

PRODUKTINHALTE.

Patientenbezogene Erfassung.

Nach Freigabe des Sterilisationsprozesses werden die Instrumente und Trays in der Praxis auf die dafür vorgesehenen Räume verteilt. Bei der Behandlung werden diese gescannt und dem Patienten direkt zugeordnet. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt – besonders für den Haftungsfall – ist die gesamte Prozesskette lückenlos dokumentiert.

NEU: Geräte-Direktanbindungen.

Neben der Anbindung an SegoSoft (für Siegelgeräte, Thermodesinfektoren, Sterilisatoren) bieten wir auch Geräte-Direktanbindungen an. Hierbei wird z. B. der Sterilisationsprozess im Hintergrund veränderungssicher aufgezeichnet und archiviert.

Folgende Anbindungen sind mit der CGM MV.PRO möglich:

- DÜRR-Direktanbindung
- MELAG-Direktanbindung
- MIELE-Direktanbindung
- SIRONA-Direktanbindung
- SegoSoft
- CGM PRAXISARCHIV
- CGM ORGANIZER

Materialdokumentation.

Die Materialien der Praxis werden einmal als Lieferung über den Packungscode oder die Paper-EDI per Scanner in den Produktstamm aufgenommen. Die Erfassung des Materialverbrauchs während der Behandlung gestaltet sich nun äußerst zeitsparend und sicher. Das Etikett wird bei Einsatz des Materials eingescannt und automatisch dem Patienten zugeordnet. Die aktuellen Materialbestän-

de sowie Anbruchs- und Verfallsdaten werden permanent überwacht und helfen Ihnen so Kosten einzusparen. Die Ist- und Sollbestände werden ausgewertet und Bestelllisten bzw. Fehlmengen je Zimmer automatisch vorgeschlagen. Auch hier ist der lückenlose Nachweis des verwendeten Materials mit Chargennummer beim Patienten jederzeit gegeben.



Spitze in Dokumentation und Sicherheit: die Material- und Hygieneverwaltung.

Erfolg durch **Kompetenz** und **Engagement.**



Dentalinformationssystem

Die **CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH** ist der Innovationsführer auf dem Sektor der Dentalinformationssysteme und der Anbieter, dem die meisten Zahnarztpraxen und Zahnkliniken in Deutschland vertrauen. CGM Dentalsysteme bietet Zahnärzten maximale Zukunftssicherheit – auch durch die Einbindung in das Netzwerk der börsennotierten CompuGroup Medical SE. Um eine schnelle und persönliche Betreuung von Praxen vor Ort zu gewährleisten, verfügt die CGM Dentalsysteme über ein deutschlandweites Servicenetz autorisierter Praxisberater und Vertriebspartner: Etwa 250 zertifizierte Spezialisten garantieren Kundennähe, eine optimale Betreuung an jedem Standort und einen schnellen Service vor Ort. Als Partner der Zahnärzte und Kieferorthopäden bieten die CGM Dentalsysteme Sicherheit in allen Bereichen der Praxis- und Klinikverwaltung unter Berücksichtigung der neuesten gesetzlichen Bestimmungen.

CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH

Maria Trost 25, 56070 Koblenz
info@cgm-dentalsysteme.de
T +49 (0) 261 8000-1900
F +49 (0) 261 8000-1922

cgm-dentalsysteme.de
cgm.com/de

Überreicht durch:

Synchronizing Healthcare



**CompuGroup
Medical**