

## Radiologihenvising

Administrer samhandlingspartnere

Lage og sende henvisning



Se våre nettsider [www.cgm.com/no](http://www.cgm.com/no) for flere veiledninger og annen nyttig informasjon.

## Lage radiologihenvising


Åpne en pasientjournal og start **Radiologihenvising** fra knapperaden eller ved å velge gruppen **Korrespondanse** i hovedmenyen øverst i venstre hjørne.

Du velger deretter mottager og angir hvilken undersøkelse som skal utføres fra listen under mottageren. Mottagerlisten og informasjon om hvilke undersøkelser som tilbys er basert på informasjon CGM har fått fra røntgenavdelingen, dersom en undersøkelse mangler anbefaler vi at dere kontakter mottageren og sender CGM oppdatert informasjon.



- **Velg avdeling** hos mottager
- **Velg undersøkelse**
- Du kan angi om pasienten skal dekke kostnadene selv under **Betaler**
- Angi **Hastegrad**
- Be om **Modalitetsendringer**
- **Velg Diagnoser**
- Legg til **CAVE**
- Beskriv **Aktuell problemstilling**
- Beskriv **Spesielle hensyn**

Husk at du må legge til en undersøkelse før du kan sende henvisningen. Dersom du ikke finner undersøkelsen i oversikten over undersøkelser kan du fylle ut **Ønsket undersøkelse i fritekst**.

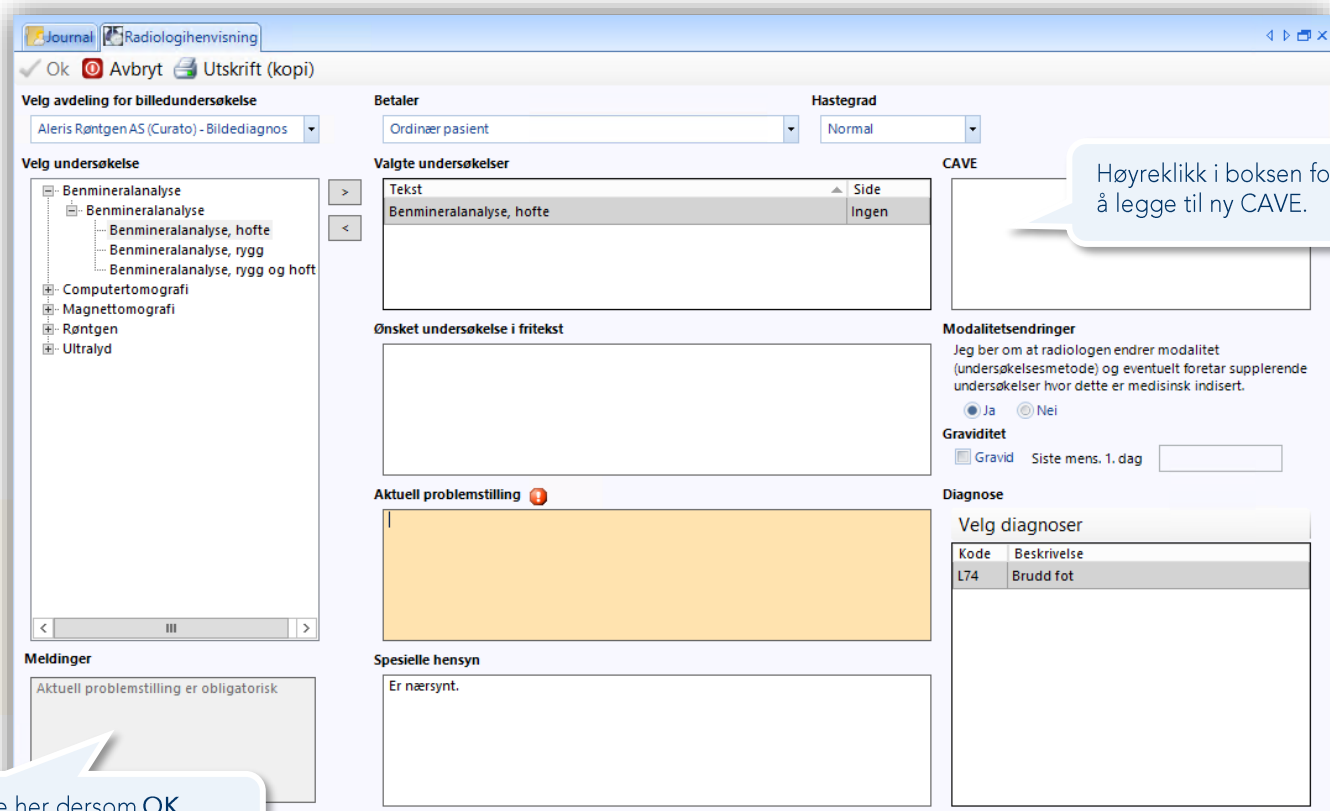

The screenshot shows the 'Radiologihenvising' form with the following sections:

- Journal** and **Radiologihenvising** tabs at the top.
- Buttons: **Ok**, **Avbryt**, **Utskrift (kopi)**.
- Velg avdeling for billedundersøkelse**: Aleris Røntgen AS (Curato) - Bildediagnos.
- Betaler**: Ordinær pasient.
- Hastegrad**: Normal.
- Velg undersøkelse**: A tree view showing 'Benmineralanalyse' and its sub-items.
- Valgte undersøkelser**: A table with 'Tekst' and 'Side' columns. The first row shows 'Benmineralanalyse, hofte' with 'Ingen' in the 'Side' column.
- Ønsket undersøkelse i fritekst**: A large text area for additional requests.
- Aktuell problemstilling**: A large text area for the current problem statement.
- Spesielle hensyn**: A large text area for special considerations.
- CAVE**: A section for Caveats.
- Modalitetsendringer**: A section for modality changes with radio buttons for 'Ja' and 'Nei'.
- Graviditet**: A section for pregnancy status with a 'Gravid' checkbox and a date field.
- Diagnose**: A section for diagnosis with a 'Velg diagnoser' table.

Kode	Beskrivelse
L74	Brudd fot

Høyreklikk i boksen for å legge til ny CAVE.



Se her dersom OK knappen ikke er aktiv.

## Administrasjon av radiologimodulen

Åpne *Administrasjon* og søk etter «radiologi». Velg *Radiologihenvising*.

Her kan du velge hvilke avdelinger som er synlige i nedtrekksmenyen når du velger mottager ved utfylling av henvisningen.

Du kan også oppdatere listen over mottagere ved å laste inn en fil du henter på våre nettsider. Vi får informasjon om hvilke undersøkelser og hvilke avdelinger som kan ta imot elektronisk henvising fra røntgensenterne, og legger ut nye filer fortløpende.

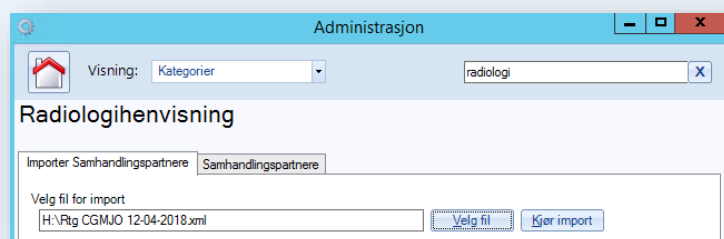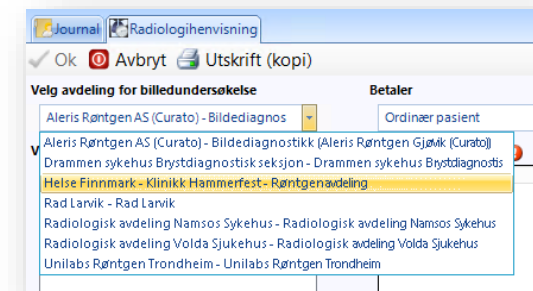

## Oppdatere mottagere og undersøkelser


CGM legger ut filer med oppdatert informasjon om mottagere og undersøkelser på våre nettsider, gå til brukerveiledninger for siste versjon. Last ned filen og lagre den lokalt på din maskin.

**Velg fil** og hent opp filen du lagret, den heter typisk «RTG CGMJO 23-06-2020.XML». Dersom du ser navnet på filen i feltet **Velg fil for import** kan du trykke **Kjør import**.

## Velge synlige mottagere i radiologimodulen

Åpne fanen *Samhandlingspartnere* og hak av i kolonnen for **Aktiv samhandlingspartner** for å angi hvilke mottagere som skal være synlige når du velger mottager ved utfylling av henvisningen i radiologimodulen.

Mangler det en samhandlingspartner eller undersøkelse hos en avdeling? Be mottager ta kontakt med CGM.

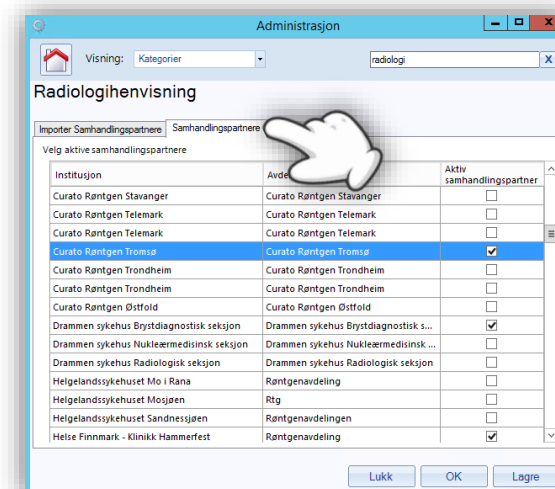



Synchronizing Healthcare

CompuGroup Medical Norway AS • [www.cgm.com/no](http://www.cgm.com/no)