

Doc rev: 02

Last update:20/12/2024

Manuale Utente CGM CARE MAP

Synchronizing Healthcare



CompuGroup
Medical

Contenuto

Introduzione	6
Dati identificativi	6
Precauzioni di utilizzo	6
Generali	6
Avvertenze.....	7
Login	8
Autenticazione a due fattori.....	9
Home	10
Dashboard	11
Assistiti	13
Nuovo Assistito	14
Esporta Excel/Esporta PDF	15
Dettagli assistito	17
DATI GENERALI	17
Dati anagrafici.....	17
Mappa	19
Prodotti.....	20
Kit.....	22
Arruolamento	23
SCHEDE PAZIENTE.....	25
Parametri	25
PAI.....	27
Calendario	30
Rilevazione Misura	31
Pro-Memoria terapeutico.....	31
Questionari	31
Questionari App.....	31
Videoconsulto.....	32
Soglie	33

ECG Giornalieri.....	35
ALLARMI	45
Esporta Excel/Esporta PDF	47
CARTELLA PERSONALE	48
Anamnesi	48
Terapia	50
Esporta Excel/Esporta PDF.....	51
Accessi.....	52
Diario	53
Esporta Excel/Esporta PDF	55
Eventi	56
Segnalazione Eventi	57
Valutazione Infermieristica	59
Esami	61
COMUNICAZIONE.....	67
Questionari	67
Questionari App.....	69
Chat	71
Formazione	73
Contatti Chat	74
Documenti Personali.....	76
COMPLIANCE	77
Impostazione Terapia	77
Vassoi Terapia.....	78
Misura Compliance	83
Operatore.....	86
Allarmi.....	86
Esporta Excel/Esporta PDF	88
Agenda	88
Attività	92

Esporta Excel/Esporta PDF	93
Chat	94
Formazione	96
News	98
Documenti	99
Report	100
Questionari	101
Statistiche	102
Referti	103
CER-S Gateway	104
Installazione di CER-S Gateway	104
Utilizzo di CER-S Gateway	107
Admin	121
Gestione Assistiti	121
Gestione Operatori	123
Gestione Profili	125
Gestione Kit	126
Visualizzazione password paziente	127
Gestione Dispositivi	128
Gestione PDTA	129
Gestione Questionari	130
Gestione Questionari App	132
Gestione Organizzazioni	135
Configurazione automatica destinatari allarmi:	136
Configurazione Stati Allarme	138
Tipo regola “Notifica”	140
Tipo regola “Cambio stato allarme”	142
Tipo regola “Genera attività”	142
Gestione Gruppi Chat	143
Gestione Caregivers	145
Gestione Attività	145
Impostazioni Generali	150
Videochiamata	150



Impostazioni Account	150
Lingua	151
Informazioni generali e riferimenti	152
Destinazione d'uso	152
Classificazione	152
Utilizzatori previsti	152
Pazienti, indicazioni e controindicazioni	152
Prestazioni essenziali	153
Specifiche tecniche	153
Fabbricante	154



Introduzione

Il presente documento descrive le funzionalità del portale web CGM CARE MAP, in modo da renderle utilizzabili in modo semplice da parte dell'utente.

Per rendere facilmente accessibile ed in modo contestuale tale supporto, le funzionalità sono state dettagliate mantenendo il legame con la maschera relativa.

Questo manuale descrive tutte le sezioni dell'applicativo web, ma ogni utente vedrà solo le sezioni abilitate in base alla configurazione del profilo a lui assegnato.

Al termine del documento sono riportate le principali evidenze di soddisfacimento del Regolamento (UE) 2017/745, quali l'indicazione del produttore, la classificazione del dispositivo (Classe IIa), la destinazione d'uso ed eventuali indicazioni ed avvertenze d'uso aggiuntive.

Il dispositivo è composto da diversi moduli, di cui solo alcuni rientrano nella definizione di dispositivo medico. I moduli con funzionalità mediche, soggetti alla valutazione dell'organismo notificato (IMQ) e che quindi presentano la marcatura CE con il codice 0051, sono i seguenti:

- **CGM CARE MAP:**
 - Refertazione
 - Allarmi
- **CGM CARE MAP Mobile:**
 - Acquisizione misure da dispositivo
- **CGM POINT OF CARE:**
 - Acquisizione misure da dispositivo

Tutti gli altri moduli risultano fondamentali per il corretto funzionamento del dispositivo, ma non contengono funzionalità mediche. Questi moduli non sono soggetti alla valutazione dell'organismo notificato.

Dati identificativi

Il modulo CGM CARE MAP è parte del dispositivo medico:

Nome commerciale	CGM CARE MAP
Modello	CGM CARE MAP
Marca	CGM TELEMEDICINE
Versione SW	4.0.0.0

Precauzioni di utilizzo

Il capitolo fornisce all'utente le informazioni necessarie al fine di utilizzare correttamente e con sicurezza l'applicativo CGM CARE MAP.

Generali

- Leggere attentamente il manuale utente in tutte le sue parti prima di utilizzare CGM CARE MAP.
- Il fabbricante garantisce la sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni di CGM CARE MAP solo se lo stesso è utilizzato conformemente alle istruzioni per l'uso contenute nel presente documento.
- Ogni responsabilità del fabbricante e la garanzia decadono nel caso di mancato rispetto da parte dell'utilizzatore di quanto contenuto nel presente documento.
- L'applicativo CGM CARE MAP necessita di una connessione internet per funzionare correttamente.
- Segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.
- L'installazione e la disinstallazione del prodotto sono effettuati dal Fabbricante o da persone appositamente autorizzate dallo stesso, contattare il Fabbricante per ulteriori dettagli.
- Contattare il Fabbricante ai contatti forniti al termine del documento per ottenere il documento di Technical Description del prodotto.

Avvertenze

- Utilizzare l'applicativo solamente con i dispositivi medici autorizzati dal Fabbricante.
- L'applicativo web è compatibile con le versioni recenti di tutti i browser di largo utilizzo, verificare i dettagli indicati nel capitolo "Specifiche tecniche" alla fine del documento.
- Consultare un medico o un altro operatore sanitario in caso di dubbi sulla validità delle misure effettuate o in generale su qualsiasi argomento di natura medica.
- Solo i dati derivanti da dispositivi medici di misura marcati CE vengono utilizzati dai moduli medici per le finalità mediche descritte nella destinazione d'uso. I dati derivanti da altre tipologie di dispositivi non medici (ad es. FitBit) non sono elaborati dai moduli medici e non vengono usati per finalità mediche e sono quindi esclusi dal perimetro di marcatura del dispositivo. Gli allarmi generati a partire da misure non provenienti da dispositivi medici non devono essere utilizzati per prendere decisioni di tipo diagnostico e/o terapeutico.

Login

La home Page della piattaforma è la maschera iniziale utilizzata per accedere al sistema. Consente agli operatori di accedere al sistema ma offre le seguenti funzioni:

- Accesso al sistema
- Cambia password
- Recupera password



La prima funzione obbligatoria per aver accesso alle diverse funzioni della piattaforma richiede un'autenticazione mediante username e password. L'accesso al sistema e di conseguenza le funzioni che vengono presentate all'operatore vengono modulate in base al profilo impostato sull'utente.

Per accedere al sistema è necessario inserire username e password e premere il tasto **[Accedi]**.

Se l'utente ha smarrito la password la piattaforma offre la possibilità di recuperare la password mediante la funzione **[Recupera Password]**.

Per recuperare la password l'operatore deve introdurre il proprio username e cliccare sul link [Recupera Password]. La piattaforma inoltra via SMS ed e-mail un codice di autenticazione da inserire nella schermata. Una volta inserito il codice la piattaforma offre la possibilità di ricevere la password attuale via e-mail o SMS (la disponibilità dei canali e-mail e SMS dipende dalla configurazione del sistema).

Alla prima login l'utente deve forzatamente cambiare la propria password.

Per accedere alla funzione di cambio password l'operatore deve cliccare sul tasto [Cambia password]. La piattaforma inoltra via SMS ed e-mail un codice di autenticazione da inserire nella schermata. Una volta inserito il codice vengono richiesti l'inserimento della password corrente e di

quella nuova, che deve rispettare i seguenti vincoli (i valori effettivi potrebbero essere differenti da quelli elencati in quanto dipendono da una configurazione):

- Lunghezza minima 10 caratteri
- Almeno un carattere numerico
- Almeno un carattere maiuscolo e uno minuscolo
- Almeno un carattere speciale

Le password hanno una durata di 90 giorni, dopo di che scadono e devono essere cambiate.

L'utente viene avvertito tramite e-mail dell'avvicinarsi del termine di validità.


Autenticazione a due fattori

La piattaforma permette di aumentare la sicurezza del prodotto abilitando l'autenticazione a due fattori (2FA), che richiede un'ulteriore fase di autenticazione mediante l'inserimento di un codice monouso generato dal sistema ed inviato all'utente durante la fase di login tramite SMS o e-mail (in base alle configurazioni).

L'abilitazione è possibile per ciascun profilo utente, in base alle proprie necessità (ad esempio, è possibile abilitarla solo per il profilo ADMIN).

Se l'autenticazione 2FA è abilitata, dopo aver immesso utente e password il sistema invia all'utente un codice temporaneo tramite email/SMS e viene presentata una maschera in cui inserirlo entro 5 minuti:

È sufficiente inserire il codice ricevuto nella maschera e premere [Accedi] per accedere al portale:

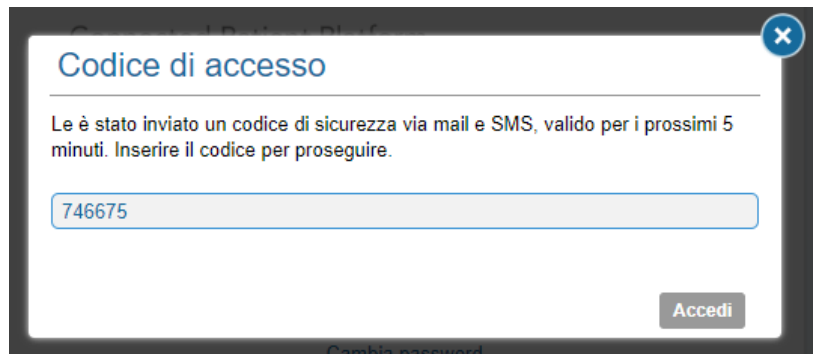

Home

La maschera che l'operatore utilizza per accedere alle diverse funzioni contiene un menu sempre a disposizione degli operatori in alto a sinistra così composto:

- Dashboard
- Home
- Assistiti
- Operatore (che contiene Allarmi, Agenda, Attività, PDTA e News)
- Admin (per gestire Assistiti, Operatori, Profili, Autorizzazioni, Kit, Dispositivi e Questionari)
- Referti
- Account (che permette di modificare le Impostazioni Account o di fare Logout)

Ogni voce di menu è composta da diverse funzioni che vengono proposte come sottomenu della voce selezionata.

La parte centrale della maschera è contestuale alla voce di menu selezionata.

Il primo menu che viene proposto dopo il login agli operatori è [Home] che contiene una visualizzazione con un insieme di indicatori utili ad aver una visione completa della situazione operativa propria e quella dei pazienti. Sono presenti 4 sezioni: Allarmi, Agenda, Nuovi pazienti e Attività.

CGM | TELEMEDICINE
Connected Patient Solutions

4919 ALLARMI | 8 CHAT | 385 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

0 ALLARMI VEDI TUTTI >

DATA/ORA	ASSISTITO	MESSAGGIO	STATO

125 NUOVI PAZIENTI VEDI TUTTI >

PRODOTTI	ASSISTITO	DATA NASCITA	NOTE
Prodotto 1: Prodotto 2: Prodotto 10: Prodotto 10	Diabete UC Paziente	22/08/2014	Prova
Prodotto 1: Prodotto 2: Prodotto 10: Prodotto 10	CAIO TIZIO	12/05/2016	
Prodotto 1: Prodotto 2: Prodotto 10: Prodotto 10	Rossi Mario 1	08/02/2019	
Prodotto 1	Rossi Mario 2	07/02/2019	

385 ATTIVITÀ VEDI TUTTI >


DATA/ORA	ASSISTITO	ATTIVITÀ	STATO	NOTE
01/07/2023 00:00:00	Test1 Marco	Da eseguire		Temperatura corporea
30/06/2023 21:00:00	PAZIENTE DEMO SUPPORT...	Da eseguire		Ossimetria
30/06/2023 20:45:00	PAZIENTE DEMO SUPPORT...	Da eseguire		Ossimetria
30/06/2023 20:30:00	SUPPORTO TEST	Da eseguire		Ossimetria
30/06/2023 20:15:00	PAZIENTE DEMO SUPPORT...	Da eseguire		Ossimetria
30/06/2023 20:00:00	Test1037 Test1037	Da eseguire		Ossimetria
30/06/2023 20:00:00	PAZIENTE DEMO SUPPORT...	Da eseguire		Ossimetria
30/06/2023 19:45:00	Prova Paziente Telemonitorag...	Da eseguire		Temperatura corporea
30/06/2023 19:45:00	TIZIO CAIO	Da eseguire		Ossimetria
30/06/2023 19:15:00	Prova Paziente Telemonitorag...	Da eseguire		Ossimetria
30/06/2023 19:15:00	PROVA TEST	Da eseguire		Ossimetria

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

Cliccando su un allarme, su un paziente o su un'attività si entra nel menù con il dettaglio del paziente.

Dashboard

Più a sinistra di Home è presente il menù Dashboard che comprende un altro tipo di visualizzazione degli stessi contenuti presenti in Home. È presente un grafico a torta che valuta lo stato dei vari pazienti e tre indicatori che selezionati portano alle Attività agli Allarmi ai Referti e all'Agenda. Questi indicatori mostrano il conto delle Attività e degli Allarmi dell'Operatore.

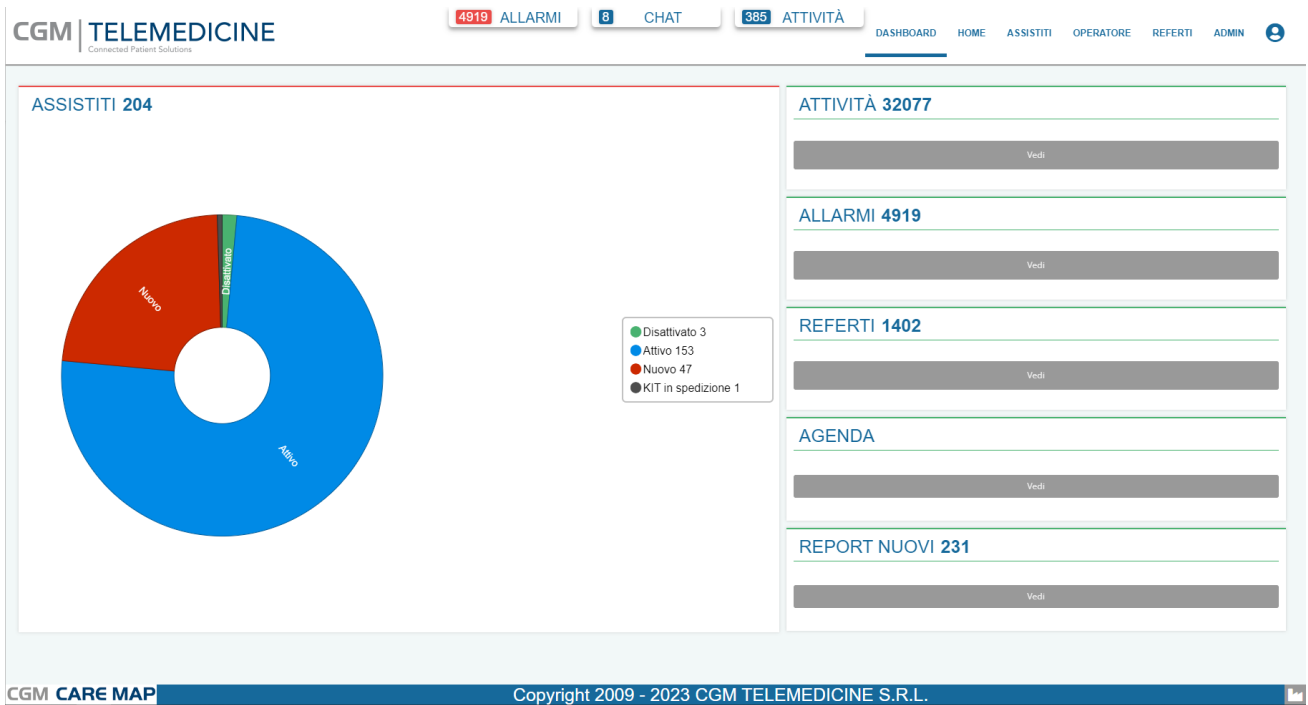

Cliccando sulla legenda del grafico a torta, per ogni tipo di paziente si passa alla visualizzazione dell'elenco degli assistiti selezionati nel menù Assistiti.

Cliccando sul pulsante Vedi della zona di Attività, Allarmi, Referti e di Agenda si passa alla visualizzazione delle attività, degli allarmi, dei referti e dell'agenda nelle rispettive sezioni sotto il menù Operatore.

Assistiti

La maschera assistiti è la prima che ci porta ad analizzare ed approfondire lo stato sociosanitario di ogni paziente.

La maschera contiene una griglia con l'elenco dei pazienti associati all'operatore loggato. È possibile visualizzare tutti i pazienti oppure solamente quelli nuovi.

Le colonne con i dati sui pazienti si distinguono in: Prodotto, Tipo Assistito, Codice, Assistito, Stato, Telefono, Mail, Patologie, Data di nascita e Note.

CGM | TELEMEDICINE
Connected Patient Solutions

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE ADMIN


ASSISTITI TUTTI NUOVI Cerca assistito

PRODOTTO	TIPO ASSISTITO	CODICE	ASSISTITO	DATA NASCITA	CODICE FISCALE	TEL.	MAIL	PATOLOGIE	NOTE	STATO
Telemonitoring		00000110	Demo 1 Paziente	21/06/1953	DMEPNT53H61H501L	1234567890	lpodesta@hes.it	Iperensione essenziale non specificata; Gastrite acuta senza menzione di emorragia; Artrosi generalizzata, sedi multiple; Anamnesi familiare di diabete mellito; Diabete mellito, Tipo II (non insulino-dipendente) (diabete dell'adulto) e non specificato, non definito se controllato, senza menzione di complicanze		Attivo
Service Demo 1	Telemonitoring	00000111	Demo 2 Paziente	16/12/1964	DMEPNT64T16D815L	1234567890		Iperensione essenziale non specificata; Ipercolesterolemia pura		Attivo
Telemonitoring		00000112	V A	07/03/1987		535G	3452457799	Iperensione essenziale non specificata		Attivo
Telemonitoring		00000113	C D	27/01/1961		264P	1234567890	Iperensione essenziale non specificata; Bronchite cronica ostruttiva, senza menzione di esacerbazione acuta		Attivo
Telemonitoring		00000114	Demo 5 Paziente	23/10/1968	DMEPNT68R23L026N	1234567890		Iperensione essenziale non specificata; Asma estrinseco senza menzione di stato asmatico; Ginocchio valgo (acquisito); Altri disordini specificati del metabolismo degli aminoacidi; Carenza non specificata di vitamina D; Ipercolesterolemia pura		Attivo
Telemonitoring		00000115	Z N	23/10/1964		717X	1234567890	Iperensione essenziale non specificata		Attivo
Telemonitoring		00000116	Demo 7 Paziente	30/05/1969	DMEPNT69E70E897Q	1234567890		Iperensione essenziale non specificata		Attivo
Telemonitoring		00000117	Demo 8 Paziente	26/01/1962	DMEPNT62A26D612L	1234567890		Iperensione essenziale non specificata		Attivo
Telemonitoring		00000118	Demo 9 Paziente	25/11/1970	DMEPNT70S25D643Z	1234567890		Iperensione essenziale non specificata		Attivo
Telemonitoring		00000119	Demo 10 Paziente	29/02/1964	DMEPNT64B69L219K	1234567890		Iperensione essenziale non specificata; Ipercolesterolemia pura		Attivo
Telemonitoring		00000120	Demo 11 Paziente	05/10/1963	DMEPNT63R05C195P	1234567890		Iperensione essenziale non specificata		Attivo
Telemonitoring		00000121	Demo 12 Paziente	11/06/1963	DMEPNT63H51H501M	1234567890		Iperensione essenziale non specificata		Disattivato
Telemonitoring		00000122	Demo 13 Paziente	04/06/1964	DMEPNT64H04A745F	1234567890		Iperensione essenziale non specificata		Attivo

« < | Pagina 1 di 2 | > » | Esporta in PDF | Mostrati: 1 - 20 di 37

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2020 H&S S.p.A.

Per ogni colonna è possibile accedere alle funzioni di ordinamento e per i campi Stato e Data di nascita è presente anche un filtro cliccabile sulla testata della colonna. È anche possibile filtrare con una ricerca testuale con il tool centrale in alto.

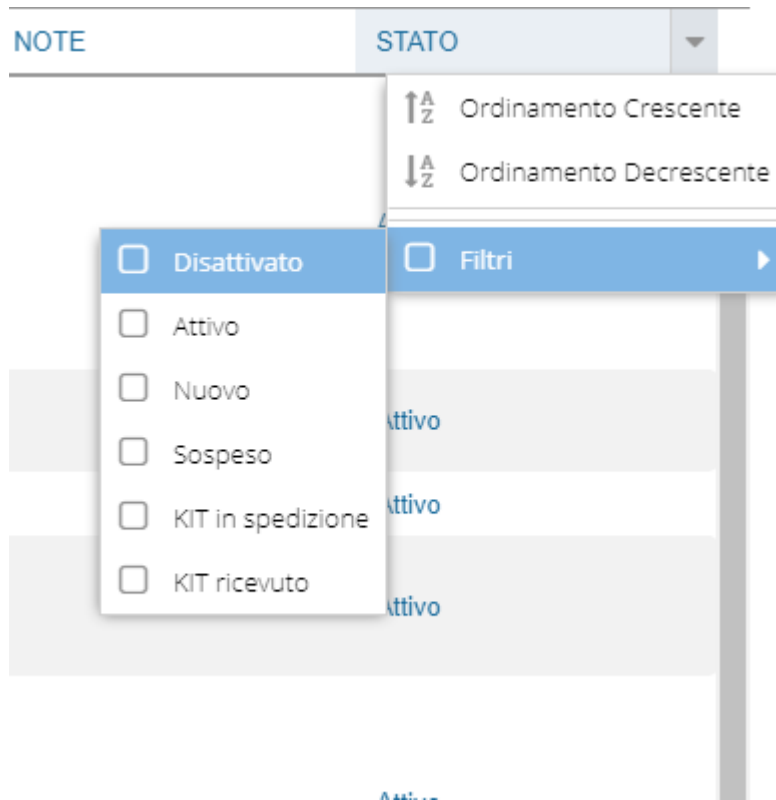

Cliccando su una riga della griglia si ha la possibilità di accedere al dettaglio dei dati dell'assistito.

Nuovo Assistito

Con il + in basso a destra nella schermata Assistiti è possibile inserire un nuovo assistito, compilando i campi necessari nella maschera. I campi sono divisi in 4 sezioni: Dati assistito, Informazioni di contatto, Ulteriori informazioni e Indirizzo. Al termine della compilazione di ogni pagina, è presente un tasto che manda alla pagina successiva. Nell'ultima pagina Indirizzo è presente il tasto Salva per inserire il nuovo paziente.

CGM | TELEMEDICINE Connected Patient Solutions 4919 ALLARMI 8 CHAT 385 ATTIVITÀ DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

AGGIUNGI ASSISTITO Compila tutti i campi con l'asterisco (*)

Dati assistito

Nome * Altezza: cm

Cognome * Lingua: Italiano

Codice Fiscale * Paziente straniero Nazionalità:

Tessera Sanitaria: Note:

Data di nascita *

Luogo di nascita:

Sesso *

[Vai a informazioni contatto](#)

Informazioni di contatto

Ulteriori informazioni

Indirizzo

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

CGM | TELEMEDICINE Connected Patient Solutions 4919 ALLARMI 8 CHAT 385 ATTIVITÀ DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

AGGIUNGI ASSISTITO Compila tutti i campi con l'asterisco (*)

Dati assistito

Informazioni di contatto

Ulteriori informazioni

Indirizzo

Provincia *

Comune:

Località:

Indirizzo *

Cap * [CAP info](#)

Telefono:

Note:

[Salva](#)

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

Esporta Excel/Esporta PDF

Synchronizing Healthcare



Tramite i pulsanti [Esporta in Excel] ed [Esporta in PDF] nel fondo della pagina, è possibile scaricare un file contenente la griglia visualizzata nell'istante del click sul pulsante. Nel documento sarà visualizzato un elenco con gli eventuali filtri applicati sulle colonne e nella ricerca global.


CGM | TELEMEDICINE 4919 ALLARMI | 8 CHAT | 385 ATTIVITÀ DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

ASSISTITI TUTTI NUOVI Cerca assistito

PRODOTTO	TIPO ASSISTITO	CODICE	ASSISTITO	DATA NASCITA	CODICE FISCALE	TEL.	MAIL	PATOLOGIE	NOTE	STATO
Prodotto 2; Prodotto 10; Prodotto 10	Telemonitoraggio	00001305	DemoDoc10 Paziente	23/08/1990	DMDPNT01A01A010		M118*@aaa.it*			Nuovo
Prodotto 2; Prodotto 10; Prodotto 10	Telemonitoraggio	00001309	DemoDoc14 Paziente	27/08/1990	DMDPNT01A01A014		M158*@aaa.it*			Nuovo
Prodotto 2; Prodotto 10; Prodotto 10	Telemonitoraggio	00001313	DemoDoc18 Paziente	31/08/1990	DMDPNT01A01A018		M198*@aaa.it*			Nuovo
Telemonito...		00002337	Bianchi Andrea	21/02/1967	BLLNDR67XXXXXX	348123456	andrea.belloni@cgm.com			Attivo
		00002338	Prova2 Prova	14/11/1965	CTTCLN65S54F456L	1234647866	clao@hs.it			Attivo
		00002340	Paziente Nuovo	01/01/1950	UTNASS50A01A001L	1234567890				Attivo
		00002341	Prova Seconda	01/01/1994	UTACCS50A01A001L	1234567894				Attivo
		00002342	Paziente Paziente	01/01/1970	ASDASS50A01A001L	1235468794				Attivo
Prodotto 2; Prodotto 10; Prodotto 10; Test Massimali 2; Test attività tempiate	Telemonitoraggio	00002343	Burlo Paziente	01/01/1990	RRNZRO80A01G535L	1235467894	carolina.cattivelli@cgm...			Attivo
Sperimenta... Burlo Nascita		00002344	Vinsmoke Burlo Sanji	02/01/1980	VNSSNJ80A42D150Q	9876543210	carolina.cattivelli@cgm...			Attivo
		00002346	Condiviso 2 Nuovo Paziente	02/01/1980	VNSSNJ80A42D123L	1324567894				Attivo
		00002349	Organizzazione Prova	14/11/1965	CTTCLN65S54F456L	1234567890				Attivo
		00002351	Test Luca	05/05/1925	Trmh425e05f666f	22222225555	a@a.it			Attivo

« < | Pagina 4 di 11 | > » Esporta in Excel Esporta PDF Mostrati 61 - 80 di 204

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

 [Esporta in Excel](#)

 [Esporta PDF](#)

Dettagli assistito

DATI GENERALI

Dati anagrafici

Selezionando un paziente dalla Lista Assistiti, si apre la schermata con il dettaglio delle informazioni su tale paziente. La maschera sotto riportata contiene i dati anagrafici del paziente sotto la voce Dati generali. I dati sono modificabili da parte dell'operatore.

La schermata è così suddivisa:

- A sinistra è presente il menù completo e l'indicazione di quale scheda stiamo esaminando;
- In alto sono presenti dei dati che rimangono fissi a nostra disposizione visuale come: il nome del paziente, il prodotto, il codice del paziente, lo stato di monitoraggio, i numeri di telefono, l'indirizzo e-mail, la data di nascita, le patologie e le note;
- Al centro a sinistra abbiamo i Dati assistito con i dati generali della persona. Il + in basso consente di aggiungere un nuovo indirizzo per il paziente;

Nuovo Indirizzo

Provincia:

Comune:

Località:

Indirizzo *:

Cap *:

Telefono:

Latitudine:

Longitudine:

Note:

imposta come prefisso

- Al centro a destra in alto abbiamo le Informazioni di contatto con le quali è possibile comunicare con il paziente. Il + serve per poter aggiungere un nuovo contatto. Nel caso in cui al paziente sia associato un CareGiver il contatto di quest'ultimo viene aggiunto automaticamente alla pagina. Sotto a queste, nella sezione "Ulteriori informazioni" vengono riportati dati relativi alla condizione dell'assistito, all'organizzazione di appartenenza, allo stato del monitoraggio e al fuso orario di riferimento per la programmazione degli eventi e la rilevazione delle misure.

Nuovo Contatto

Ruolo: Tipo contatto:

Nome *: Cognome *:

Data di nascita: Sesso:

Telefono: Cellulare:

Priorità: Scolarità:

Mai:

Occupazione:

C.F.: Indirizzo:

Comune: CAP:

Note:

Mappa

Sotto il menù dei Dati generali è presente anche la Mappa che indica dove sono gli ospedali e le farmacie.

The screenshot displays the CGM TELEMEDICINE web application interface. At the top, there are navigation tabs for 'ALLARMI' (4919), 'CHAT' (8), and 'ATTIVITÀ' (385). Below these are links for 'DASHBOARD', 'HOME', 'ASSISTITI', 'OPERATORE', 'REFERTI', and 'ADMIN'. The main header area shows patient information for 'Paziente Demo 2', including 'Prodotto: Telemonitoraggio', 'Codice: 00000290', 'Tel: 1234567890', 'Mail: bi@b', 'Data nascita: 18/08/2019', and 'Stato: Nuovo'. A dropdown menu for 'Patologie' is open, showing 'Diabete mellito Diabete mellito, condizione o complicazione antepartum; Ipertensione essenziale benigna'. A note indicates 'Note: Non risponde al telefono'. The central part of the interface is a map showing a geographical area with numerous green crosses representing pharmacies and blue 'H' icons representing hospitals. A sidebar on the left contains a menu with options like 'DATI GENERALI', 'Mappa', 'Prodotti', 'Kit', 'Arruolamento', 'SCHEDA PAZIENTE', 'ALLARMI', 'CARTELLA PERSONALE', 'COMUNICAZIONE', and 'COMPLIANCE'. The bottom of the map area includes the text 'CGM CARE MAP' and 'Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.'.

In alto sono sempre presenti i dati in perenne visualizzazione (ampliabili con la freccia verde) e a sinistra è visibile la voce del menù che stiamo esaminando.

Premendo il tasto a destra in alto sulla mappa è possibile visualizzare solamente le farmacie o solamente gli ospedali, oppure niente di tutto ciò.

In alto a destra è presente anche l'indirizzo visualizzato sulla mappa. È selezionabile un altro indirizzo se è presente nei dati del paziente.

Prodotti

Sotto il menù dei Dati generali sono presenti anche i Prodotti che indicano i prodotti e i tipi di monitoraggio del paziente.

The screenshot displays the CGM TELEMEDICINE interface for a patient named 'Demo 2'. The top navigation bar includes 'ALLARMI' (4674), 'CHAT' (4), and 'ATTIVITÀ' (433). The main content area is divided into two sections: 'Prodotti/Tipi assistito' and 'Tipi monitoraggio'. The 'Prodotti/Tipi assistito' section contains a table with the following data:

Data inizio	Data fine	Prodotto	Tipo assistito	Ruolo
19 Marzo 2019			UsualCare Chronic	

The 'Tipi monitoraggio' section lists 'Diabete' and 'Percorso nascita controllo'. At the bottom of each section, there are buttons for 'Genera attività' and 'Genera soglie'. A red '+' button is visible in the bottom right corner of the main content area.

Clickando sul pulsante “Genera attività” il sistema, sulla base del tipo monitoraggio selezionato per il paziente, genera le relative attività nel calendario.

Clickando sul pulsante “Genera Soglie” il sistema, sulla base del tipo monitoraggio selezionato per il paziente, genera le relative soglie.

Con i pulsanti “+” in basso a destra nelle due sezioni è possibile aggiungere un nuovo prodotto e un nuovo tipo di monitoraggio.

The 'Aggiungi prodotto/tipo assistito' form includes the following fields:

- Prodotto: [Dropdown menu]
- Tipo assistito: [Dropdown menu]
- Data inizio: [Date picker]
- Data fine: [Date picker]

Buttons for 'Salva' and 'Cancella' are located at the bottom right of the form.


The 'Aggiungi tipo monitoraggio' form includes the following field:

- Tipo monitoraggio: [Dropdown menu]

Buttons for 'Salva' and 'Cancella' are located at the bottom right of the form.

Cliccando sul pulsante “Invio credenziali app” si inviano al paziente tre mail che contengono il link al il sito dal quale scaricare l’app e le credenziali (una mail per l’utente ed un’altra per la password) che servono per il suo utilizzo.

Dalla pagina che si apre seguendo il link è possibile scegliere se scaricare l’app per Android o per iOS.

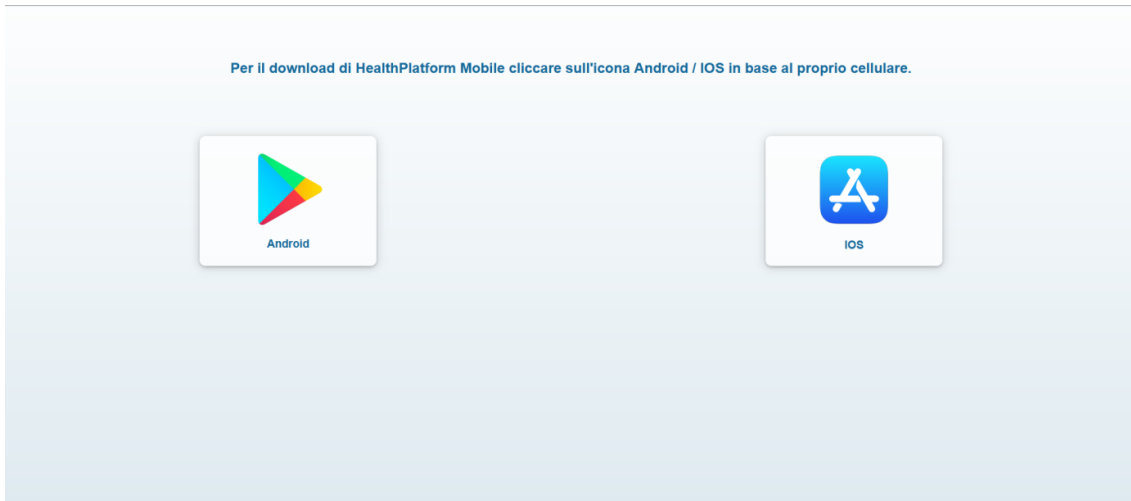

Kit

Aprendo il dettaglio paziente, nella maschera KIT è possibile visionare tutto l'elenco dei KIT e dei dispositivi di cui il paziente è in possesso.

The screenshot shows the CGM TELEMEDICINE interface for Patient Demo 2. The top navigation bar includes '4674 ALLARMI', '4 CHAT', and '433 ATTIVITÀ'. The patient information section displays fields for Prodotto, Codice (00000004), Tel (+39475; +359585;), Mail (supporto-hp@hes.it), Patologie, Note (note), Stato (Attivo), and Data nascita (29/05/2014). The left sidebar contains a menu with options like 'DATI GENERALI', 'SCHEDA PAZIENTE', 'ALLARMI', 'CARTELLA PERSONALE', 'COMUNICAZIONE', and 'COMPLIANCE'. The main area shows a table of KIT TLM with columns for CODICE KIT, SERIALE KIT, STATO, TIPO, and DISSOCIA. A single row is visible for Kit 3986 with serial number 465287d516e4199ace3a14b8a6c81e and status 'Assegnato'. Below this is a section for 'Altri dispositivi' with a table of columns: ID, NOME, TIPO, NUMERO SERIALE, STATO, CODICE PRODOTTO, LOTTO, SCADENZA, and DISSOCIA.

Nella parte superiore sono elencati i kit di Telemedicina; ogni riga comprende un Kit, caratterizzato da codice kit, seriale del kit, lo stato del kit. Inoltre, tramite il pulsante “x” c'è la possibilità di dissociare il kit.

Aprendo la riga del kit attraverso il + a sinistra di ogni riga, si accede al dettaglio dei dispositivi di cui è composto. Ogni dispositivo è caratterizzato da ID, nome, o stato, tipo.

Per ogni dispositivo è anche possibile sospendere (o riprendere) il suo utilizzo, oltre a poter visualizzare il PDM e le soglie del dispositivo.

The three screenshots show the detailed view of a device. The first, 'DETTAGLIO PDM', shows a table with columns for 'TIPO' and 'SOSPENSIONE'. The second, 'DETTAGLIO SOGLIE', shows a table with columns for 'TIPO SOGLIA', 'TIPO SOGLIA', 'VALORE ALLARME', 'MESSAGGIO', 'VALORE 1', 'VALORE 2', and 'VALORE 3'. The third, 'AGGIUNTA KIT', shows a table with columns for 'CODICE KIT', 'SERIALE KIT', 'TIPO', and 'STATO', listing various available kits.

Con il + in basso a destra è possibile assegnare al paziente un nuovo kit tra quelli disponibili.

Nella parte inferiore è visualizzata la lista “Altri dispositivi” in cui sono elencati i dispositivi assegnati all’assistito ma che non rientrano in un kit. Con il + in basso a destra è possibile assegnare al paziente un dispositivo già censito oppure inserirne uno nuovo.

Arruolamento

L’arruolamento contiene le caratteristiche del paziente raccolte durante l’intervista iniziale.

Per alcuni progetti, soprattutto in ambito cronicità, i criteri di arruolamento sono importanti per verificare se il paziente è in possesso delle caratteristiche per fare parte del piano di monitoraggio.

The screenshot displays the 'Arruolamento' (Enrollment) form for 'Patient Demo 2'. The interface includes a top navigation bar with 'ALLARMI' (4), 'CHAT', and 'ATTIVITÀ' (433) indicators. The patient information section shows: Prodotto, Codice: 00000004, Tel: +39475; +359585; Mail: supporto-hp@hes.it; Patologie, Note: note, Stato: Attivo, and Data nascita: 29/05/2014. The main form area is titled 'Verifica criteri di inclusione di un assistito' and contains:

- Consenso Privacy (Si/No):
- Consenso al Servizio (Si/No):
- Buttons: [Consensi App] [Consensi Dinamici]
- Data di inizio: 29/03/2019 (with calendar icon)
- Data di fine: (empty field with calendar icon)
- Stato: Arruolato (dropdown menu)
- Condizione: Nuovo (dropdown menu)
- Note: (text area)
- Save button: Salva

 Below the form is a 'Documenti' table with columns: Creato alle, Nome Documento, Creato da, Cancellata.

La schermata è divisa in due parti, in alto è presente la verifica criteri di inclusione di un assistito con il consenso alla privacy, il consenso al servizio, le date di inizio e fine, lo stato, la condizione e le note.

Dopo aver inserito tutti questi dati è possibile salvare l’arruolamento del paziente. I possibili stati di un assistito sono: Arruolabile, Arruolato, Uscito da arruolamento, Non arruolato, Stand by. Solamente se il paziente ha lo stato Arruolato è possibile attivare il suo PAI.

La data inizio e fine monitoraggio sono fondamentali per la creazione dell’agenda delle misure che il paziente deve eseguire.

Il pulsante [Consensi App] permette di visualizzare i consensi che il paziente ha espresso tramite l’utilizzo dell’App CGM CARE MAP Mobile, mentre il pulsante [Consensi Dinamici] permette di visualizzare e modificare i consensi espressi dal paziente tramite gli altri canali; in questo caso è possibile modificarne lo stato e la data per riflettere nel sistema lo stato corretto dei consensi.

Consensi App

Data	Stato	Descrizione
01/12/2022	Non Pervenuto	test
01/12/2022	Non Pervenuto	Termini e condizioni

« < | Pagina 1 di 1 | > » | ↻

Mostrati 1 - 2 di 2

Gestione consensi dinamici

Data	Descrizione	Stato
16/11/2022	GDPR	<input checked="" type="checkbox"/>
01/12/2022	MDS	<input type="checkbox"/>
01/12/2022	COUNSELLING	<input type="checkbox"/>
01/12/2022	TEST DBS	<input type="checkbox"/>
01/12/2022	Smaltimento	<input type="checkbox"/>

« < | Pagina 1 di 1 | > » | ↻

Mostrati 1 - 5 di 5

In basso è possibile caricare dei documenti (tramite pulsante “+” in basso a destra), su cui viene tracciata la data e ora di creazione, il nome del documento e l’utente che ha effettuato l’upload.

Aggiungi Documento

Nome Documento *:

Allegato: *:

Scegli...

Salva Chiudi

SCHEDA PAZIENTE

La seconda sezione del menù dopo Dati generali è Scheda paziente.

Parametri

Il primo sottomenù è quello che comprende i Parametri del paziente.


CGM TELEMEDICINE 4675 ALLARMI 4 CHAT 433 ATTIVITÀ DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERITI ADMIN

Patient Demo 2 Prodotto: Codice: 00000004 Tel: +39475; +399585; Mail: supporto-tp@hes.it; Patologie: Note: note
Stato Attivo Data nascita: 29/05/2014

DATI GENERALI Filtri 01/03/2021 01/12/2022 Griglia Grafico

Parametri

Data/Ora	Data/Ora ricezione	Valore	U.M.	Misura	Sorgente
17/02/2022 10:51:12 +01:00	17/02/2022 10:53:03 +01:00	111	mmHg	Pressione Sistolica	AND Blood Pressure UA651BLE
17/02/2022 10:51:12 +01:00	17/02/2022 10:53:03 +01:00	120	mmHg	Pressione Sistolica	AND Blood Pressure UA651BLE
17/02/2022 10:51:12 +01:00	17/02/2022 10:53:03 +01:00	78	mmHg	Pressione Sistolica	AND Blood Pressure UA651BLE
17/02/2022 10:51:12 +01:00	17/02/2022 10:53:13 +01:00	45	mmHg	Pressione Diastolica	AND Blood Pressure UA651BLE
17/02/2022 10:51:12 +01:00	17/02/2022 10:53:13 +01:00	64	mmHg	Pressione Diastolica	AND Blood Pressure UA651BLE
17/02/2022 10:51:12 +01:00	17/02/2022 10:53:13 +01:00	69	mmHg	Pressione Diastolica	AND Blood Pressure UA651BLE
17/02/2022 10:51:12 +01:00	17/02/2022 10:53:14 +01:00	72	bpm	Frequenza Cardiac	AND Blood Pressure UA651BLE
17/02/2022 10:51:12 +01:00	17/02/2022 10:53:14 +01:00	61	bpm	Frequenza Cardiac	AND Blood Pressure UA651BLE
17/02/2022 10:51:12 +01:00	17/02/2022 10:53:15 +01:00	66	bpm	Frequenza Cardiac	AND Blood Pressure UA651BLE
17/02/2022 10:51:12 +01:00	17/02/2022 10:53:16 +01:00	83	mmHg	MAP	AND Blood Pressure UA651BLE
17/02/2022 10:51:12 +01:00	17/02/2022 10:53:15 +01:00	96	mmHg	MAP	AND Blood Pressure UA651BLE
17/02/2022 10:51:12 +01:00	17/02/2022 10:53:15 +01:00	55	mmHg	MAP	AND Blood Pressure UA651BLE
03/01/2022 16:11:06 +01:00	03/01/2022 16:44:01 +01:00	35	bpm	Frequenza Cardiac	ECG B2BH4
10/09/2021 15:25:27 +02:00	10/09/2021 15:26:00 +02:00	50	Kg	Peso	Manuale - app
10/09/2021 15:25:27 +02:00	10/09/2021 15:26:01 +02:00	17.3	Kg/m2	Indice Massa Corporea	Manuale - app
10/09/2021 15:25:27 +02:00	10/09/2021 15:26:01 +02:00	20	%	Percentuale massa grassa	Manuale - app
10/09/2021 15:25:27 +02:00	10/09/2021 15:26:01 +02:00	55	%	Percentuale acqua corporea	Manuale - app
10/09/2021 15:25:27 +02:00	10/09/2021 15:26:01 +02:00	20	%	Percentuale massa muscolare	Manuale - app
10/09/2021 15:25:27 +02:00	10/09/2021 15:26:01 +02:00	5	%	Percentuale massa ossea	Manuale - app

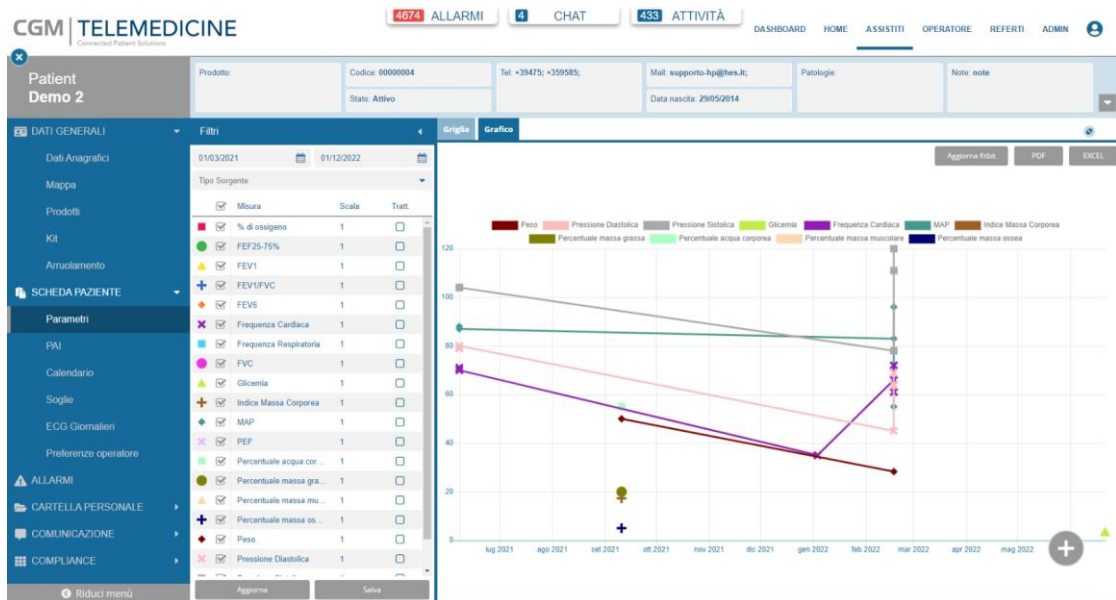


La schermata è divisa in due parti: a sinistra sono presenti i filtri applicabili come data di inizio e di fine, tipo sorgente e le varie tipologie di misure; a destra è presente la griglia o il grafico visualizzato seguendo i filtri applicati.

È possibile filtrare le tipologie di misure, come ad esempio: % di ossigeno, BADL, frequenza cardiaca, glicemia, glicemia test, indice massa corporea, MAP, peso, pressione diastolica, pressione sistolica.

Se al kit di telemonitoraggio è collegato anche il dispositivo fitbit, nella sezione parametri è possibile visualizzare le misure giornaliere registrate dal dispositivo, ad esempio distanza percorsa, calorie bruciate, ecc...

Le misure provenienti dal dispositivo FitBit sono riportate con un nome che inizia con 'FitBit' e fanno riferimento alle registrazioni del giorno precedente.

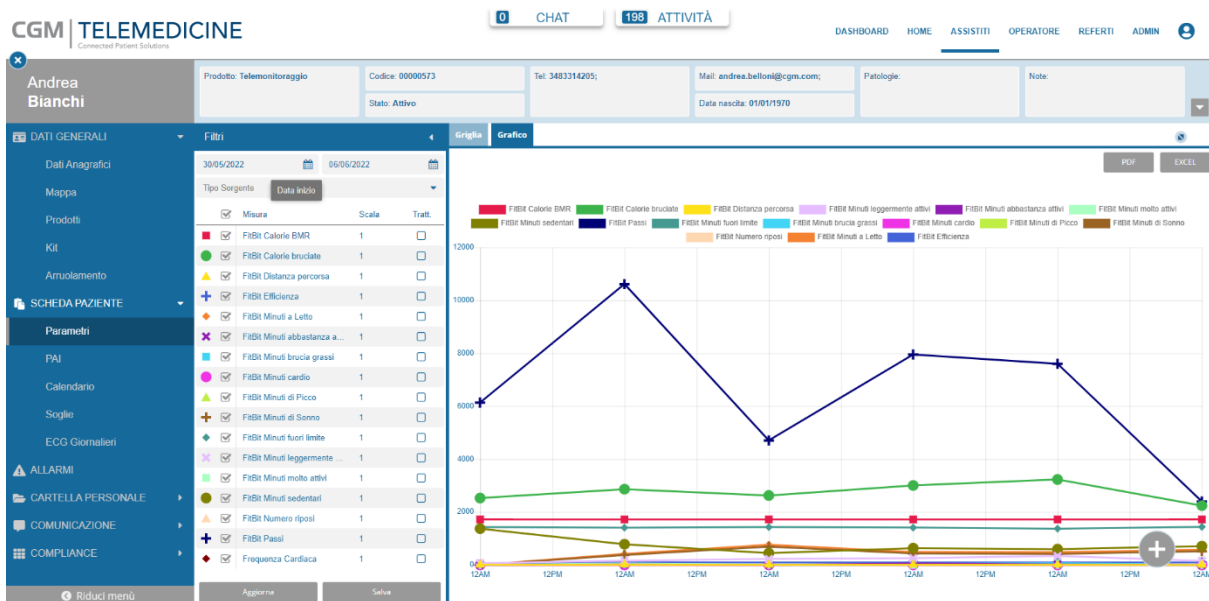

Nel caso in cui i parametri Fitbit non siano presenti, ad esempio per un problema nella fase di sincronizzazione con il server Fitbit, è possibile premere [Aggiorna fitbit] per richiedere al portale una nuova sincronizzazione, specificando la data e la tipologia di dati da richiedere:

Aggiorna fitbit

Seleziona la data di riferimento per la richiesta di aggiornamento dati al server Fitbit

01/12/2022

Seleziona la tipologia di dati da aggiornare

Sonno:

Attività:

Frequenza cardiaca:

Aggiorna
Chiudi

Selezionando un parametro dalla griglia o dal grafico è poi possibile visualizzare i suoi dettagli e, nel caso, eliminarlo. I parametri rossi o gialli (con allarme) hanno nel dettaglio anche una sezione Allarme che descrive il dettaglio dell'allarme riscontrato.

Con il pulsante in alto a sinistra si può allargare il grafico o la griglia a schermo intero e con i due pulsanti sotto è possibile salvare i dati caricati in un documento PDF o Excel.

DETTAGLIO MISURA

DETTAGLIO

Tipo Misura * Temperatura Corporea

Data Misura * 19/09/2022

Ora Misura * 04:30:00

Unità di Misura * °C

Valore 36

Elimina
Chiudi

DETTAGLIO MISURA

DETTAGLIO **ALLARME**

DATA/ORA	PRIORITÀ	STATO	TITOLO	MESAGGIO	TIPO ALLARME
04/12/2019 10:58:02	Alta	Ritmo allarme	Allarme da soglia Unita/ore	Misura Pulsazioni - valore maggiore di 99	Critico

Elimina
Chiudi

Con il + in basso a destra è possibile aggiungere una nuova misura alla griglia o al grafico.

PAI

Ogni operatore mediante la maschera PAI può impostare un Piano Assistenziale Individuale sul paziente, in base alle patologie del paziente potrà selezionare uno o più PDTA e pianificare le attività nel calendario.

CGM | TELEMEDICINE
Connected Patient Solutions

4675 ALLARMI | 4 CHAT | 433 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

Patient Demo 2

Prodotto: Codice: 00000004 Tel: +39475; +359585; Mail: supporto-hp@hes.it; Patologia: Note: note
Stato: Attivo Data nascita: 29/05/2014

DATI GENERALI

- Dati Anagrafici
- Mappa
- Prodotti
- Kit
- Arruolamento

SCHEDA PAZIENTE

- Parametri
- PAI**
- Calendario
- Soglie
- ECG Giornalieri
- Preferenze operatore

ALLARMI

- CARTELLA PERSONALE
- COMUNICAZIONE
- COMPLIANCE

Riduci menù

Dati PAI

Data inizio: 29/03/2019 Data fine:

Stato PAI: Attivo

Stampa Chiudi PAI Salva

PDTA

Lista PAI Crea nuova Bozza

2018 2019 2020

gennaio febbraio marzo

aprile maggio giugno

luglio agosto settembre

ottobre novembre dicembre

Glucosio Pressione arteriosa Ossimetria

La schermata è divisa in due parti, a sinistra sono presenti i dati PAI (ampliato sopra), il PDTA (ampliato sotto), le autorizzazioni e le misure. Nel PAI sono presenti i tasti Attiva PAI o Chiudi PAI, Lista PAI e crea nuova bozza con cui poter attivare un PAI, selezionare un nuovo PAI dalla lista e creare una bozza.

Cliccando sul triangolo in alto a destra è possibile passare dalla visualizzazione grafica a quella testuale delle attività.

Con questi dati è possibile compilare il calendario annuale a destra (trascinando dentro i dati), che mostra appunto tutti gli eventi avuti dal paziente durante l'anno selezionato.

Nella parte in basso a sinistra è possibile visualizzare le prestazioni (come sopra) oppure le misure (come sotto). Entrambe sono trascinabili nel Calendario a destra per inserire nel PAI del paziente.

PDTA Autorizzazioni Misure

PDTA IPERTENSIONE

BATTERI POTERE BATT...	Ogni 12	ALFA 2 ANTIPLASMINA	Ogni 12
ANTICORPI ANTI INSULI...	Ogni 12	FERRO [DUJ]	Ogni 12
MICETI ESAME COLTUR...	Ogni 12	RX POLSO DX - CONTR...	Ogni 36
IGG SOTTOCLASSE 3	Ogni 12	TEST DI KLEIHAUER (RI...	Ogni 12
ACTINOMICETI ESAME ...	Ogni 12	CAMPYLOBACTER ESA...	Ogni 12
C PEPTIDE: DOSAGGI S...	Ogni 12		

+

PDTA Autorizzazioni Misure

Glucosio

Pressione arteriosa

Ossimetria

Peso

Temperatura corporea

Freq. Resp. e Cardio

Spirometria

Cliccando sul tasto “+” nella scheda PDTA è possibile aggiungere un PDTA alla pianificazione impostando la data di inizio.

PDTA

Selezione PDTA *: PDTA BPCO

Data inizio *: 01/07/2020

Attività del PDTA

Inclusa	Tipo attività	Titolo	Frequenza
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestazione	FARMACI ANTIARITMICI - PROCAINAMIDE	Ogni 12
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestazione	FRATTURE, DISTORSIONI, STIRAMENTI E LUSSAZIONI DI AVAMBRACCIO, M...	Ogni 12
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestazione	FERRO [DU]	Ogni 12
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestazione	GALATTOSIO [S]	Ogni 12
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestazione	GASTRINA [S]	Ogni 6
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestazione	ESTRONE (E1)	Ogni 12
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestazione	ESTRIOLO NON CONIUGATO	Ogni 12
<input checked="" type="checkbox"/>	Prestazione	COLESTEROLO LDL	Ogni 12

Salva Chiudi

Cliccando sul pulsante a destra di ogni riga è possibile modificare la singola schedulazione di ogni attività

PDTA

Schedulazione

Tipo pianificazione *: Ricorrente

Tipo frequenza *: Mensile

Ogni N mesi *: 12

Salva Chiudi

Quando il PAI è in bozza le attività non sono visibili sul calendario fino a che non si viene attivato.

Calendario

In questa schermata è presente il calendario del paziente, compilato con le attività che ha svolto o dovrà svolgere. La visualizzazione può essere giornaliera, settimanale o mensile.

The screenshot displays the CGM TELEMEDICINE patient management interface. At the top, there are navigation buttons for 'ALLARMI' (4675), 'CHAT' (4), and 'ATTIVITÀ' (433). The patient profile for 'Demo 2' is shown with fields for Product, Code (00000004), Tel (+39475; +359585), Mail (supporto-tp@hes.it), Patologie, Note (note), and Date of Birth (29/05/2014). The calendar view is set to 'Giorno' (Daily) and shows a week from Sunday to Saturday. The calendar grid contains '16:00 Therapeutic reminder' events for most days, with a '15:15 Richiesta Videosconsiglio' event on Thursday. A '+ Add Event' button is located in the bottom right corner of the calendar grid.

Con il + in basso a destra è possibile aggiungere un evento al calendario inserendo l'attività, la pianificazione, il luogo e visualizzando lo storico, oltre a poter inserire le note operative e reminder da visualizzare su APP. Cliccando su un'attività è possibile modificarne i dati allo stesso modo.

This screenshot shows the 'Dettaglio attività ID 115637' form. The 'Attività' tab is selected, displaying the following information:

- Paziente: Andrea Bianchi
- Professione: Telemedicologo
- Tipo Attività: Visita medica
- Tipo: Visita
- Disponibile: []
- Orario: 12:45
- Durata attività (min): []
- Stato: SOSPESA
- Indica su tutti: []
- Notifica sulla prima: []
- Note: []

 Buttons for 'Elimina', 'Salva', and 'Chiudi' are at the bottom right.

This screenshot shows the 'Dettaglio attività ID 115637' form with the 'Pianificazione' tab selected. The scheduling details are:

- Tipo pianificazione: Ripetente
- Tipo ricorrenza: Giornaliera
- Ogni (giorni): 1
- Data inizio: 04/11/2022
- Data fine: 25/11/2022
- Ora: 12:45
- Durata: 00:30

 Buttons for 'Elimina', 'Salva', and 'Chiudi' are at the bottom right.

This screenshot shows the 'Dettaglio attività ID 115637' form with the 'Storico' tab selected. The activity history table is as follows:



DATA INIZIO	ORA INIZIO	TITOLO	DESCRIZIONE	Operatore	STATO	NOTE	DATA MODIFICA
29/11/2022	12:45	Visita	Procedo automatico	Stefania			29/11/2022 00:10
25/11/2022	12:45	Visita	Admin HDS	Da eseguire			04/11/2022 12:44

 Buttons for 'Elimina', 'Salva', and 'Chiudi' are at the bottom right.

This screenshot shows the 'Dettaglio attività ID 115637' form with the 'Note operative' tab selected. The table contains one entry:

Data	Titolo	Subtitolo	Note	Libera
29/11/2022	Monitoraggio parametri		Analisi glic. chiusa al riposo...	ADRIA

 A '+ Add Note' button is visible in the bottom right corner. Buttons for 'Elimina', 'Salva', and 'Chiudi' are at the bottom right.

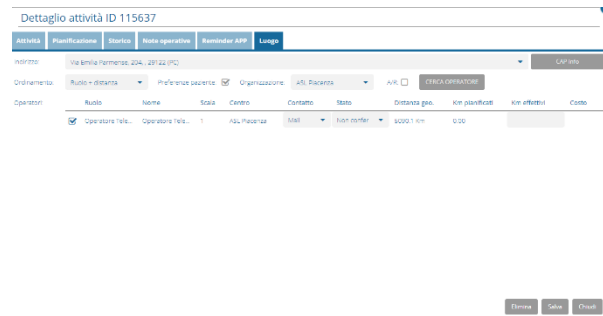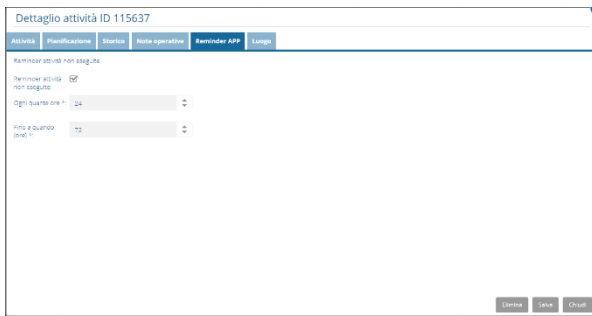

La pianificazione di un'attività può essere ricorrente giornalmente, settimanalmente o mensilmente. È possibile inviare una notifica al paziente per ogni ricorrenza dell'attività o solo in occasione della prima ricorrenza.

Tra le possibili attività vi sono:

- Rilevazione misura
- Promemoria terapeutico
- Questionario/Questionario App
- Videoconsulto
- Polisonnografia
- Visita medica

Rilevazione Misura

Tramite queste attività viene notificato al paziente quali misure rilevare (es. pressione, peso, ...) e in quali giorni ed orari; le notifiche sono visibili all'interno dell'app.

Queste attività sono generate automaticamente dal piano di monitoraggio definito per il paziente ma agendo sul calendario è possibile inserirne altre manualmente e modificare quelle esistenti.

Pro-Memoria terapeutico

Tramite queste attività vengono gestite le terapie sui vassoi contenenti i farmaci; la notifica generata dall'attività si traduce in un promemoria contenente la terapia che deve essere assunta.

Queste attività sono generate automaticamente dall'impostazione delle terapie e dalla preparazione dei vassoi ma agendo sul calendario è possibile inserirne altre manualmente e modificare quelle esistenti.

Questionari

Tramite queste attività viene programmata la compilazione periodica di questionari sul portale.

Questionari App

Tramite queste attività viene programmata la compilazione periodica di questionari all'interno dell'app.

Videoconsulto

Per gli utenti abilitati è possibile creare un'attività di tipo "Videoconsulto" con la quale è possibile programmare una videochiamata con un paziente.



Al paziente arriverà una notifica via mail/sms con il link per accedere alla videochiamata sul portale esterno CGM ELVI, mentre l'operatore potrà accedervi direttamente dal dettaglio dell'attività premendo il pulsante "Avvia video".

Dettaglio attività

Attività Pianificazione Storico

Tipo Attività: Videoconsulto

Operatore *: Operatore ELVI

Descrizione:

Orario *: 11:30


Stato: Da eseguire

Invia su Hub:

Note:

Avvia video Elimina Salva Chiudi

L'operatore, inoltre, tramite l'icona dell'utente può accedere direttamente al portale esterno per la videochiamata.

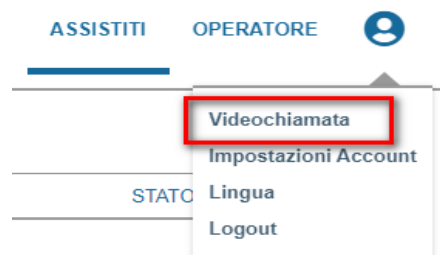

Al termine dell'attività verrà creato un esame di videoconsulto.

Soglie

Nella schermata soglie è presente l'elenco delle soglie del paziente. Per ogni soglia è presente il tipo di soglia, il tipo di misura, la priorità dell'allarme (quattro livelli: bassa, media, alta, altissima), il messaggio dell'allarme e i possibili valori 1, 2 e 3.

CGM | TELEMEDICINE 4675 ALLARMI 4 CHAT 433 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

Paziente **Diabete UC**

Prodotto: Prodotto 1; Prodotto 2; Prodotto 10; Prodotto 10
Codice: 00000018
Tel:
Mail: rrepetti@hes.it;
Patologie:
Note: Prova
Stato: KIT in spedizione
Data nascita: 22/08/2014

TIPO SOGLIA	TIPO MISURA	PRIORITÀ ALLA...	MESSAGGIO ALLARME	VALORE 1	VALORE 2	VALORE 3	SORGENTE
Valore maggiore di XX	Pressione Diastolica	Alta	Pressione Diastolica molto alta	80			Operatore
Valore maggiore di XX	Pressione Sistolica	Alta	Pressione Sistolica molto alta	130			Operatore
Valore inferiore di XX(%) rispetto a N°Misure precedenti	Peso	Alta	Decremento di peso anomalo		3		Operatore
Valore superiore di XX(%) rispetto a N°Misure precedenti	Peso	Alta	Incremento di peso anomalo		3		Operatore
Valore maggiore di XX	Glicemia	Alta	livello iperglicemico	7.78			Operatore
Valore minore di XX	Glicemia	Alta	Livello ipoglicemico	3.61			Operatore
Il N° Valori è minore di XX negli ultimi YY gg	Pressione Diastolica	Bassa	Compliance Misura pressione non rispettata				Operatore
Il N° Valori è minore di XX negli ultimi YY gg	Peso	Bassa	Compliance Misura peso non rispettata				Operatore
Il N° Valori è minore di XX negli ultimi YY gg	Glicemia	Bassa	Compliance Misura glicemia non rispettata				Operatore

Mostrati 1 - 9 di 9

Premendo ogni soglia è possibile vederne i dettagli e i dettagli dell'allarme. Premendo il + in basso a destra è possibile inserire una nuova soglia inserendo i dettagli della soglia, degli allarmi e visualizzando lo storico e la validità.

La validità della soglia permette di definire i giorni della settimana e le fasce orarie per cui la soglia è valida.

Quindi, se specificata, gli allarmi scatteranno solo per le misure prese nei giorni e nelle fasce orarie indicate. In alternativa, attivando il flag "Utilizza schedulazione calendario come validità", è possibile far scattare gli allarmi solo se per il giorno in cui è stata presa la misura esiste in calendario un'attività di rilevazione relativa alla stessa tipologia (ad esempio Ossimetria).

È possibile definire le soglie per ciascuna di queste tipologie:

- Valore minore di XX
- Valore maggiore di XX
- N°Valori consecutivi maggiori di XX
- N°Valori consecutivi minori di XX
- N°Valori non consecutivi in XX gg. maggiori di XX
- N°Valori non consecutivi in XX gg. minori di XX
- Valore compreso fra XX e YY
- N°Valori consecutivi compresi fra XX e YY
- N°Valori non consecutive in XX gg. comprese fra XX e YY
- Il N° Valori è minore di XX negli ultimi YY gg.
- N°Valori consecutivi in XX gg. compresi fra XX e YY
- N° Valori consecutivi in XX gg. minori di XX
- N° Valori consecutivi in XX gg. maggiori di XX
- Valore inferiore di XX(%) rispetto al precedente
- Valore superiore di XX(%) rispetto al precedente
- Il numero di Valori è maggiore di XX negli ultimi YY gg.
- Valore superiore di XX(%) rispetto a YY gg fa

- Valore superiore di XX rispetto a YY gg fa
- Variazione tra N°Misure compresa tra Valore1 e Valore2
- Variazione tra N°Misure maggiore di Valore1
- Valore medio maggiore di Valore1 ogni XX minuti
- Valore medio minore di Valore1 ogni XX minuti
- Valore medio compreso tra Valore1 e Valore2 ogni XX minuti
- Valore inferiore di XX(%) rispetto a YY gg fa
- Valore inferiore di XX rispetto a YY gg fa
- Media YY gg fa minore di Valore1
- Media YY gg fa maggiore di Valore1
- Media YY gg fa compresa tra Valore1 e Valore2
- Giornate con allarme consecutive entro YY gg da Soglie di riferimento maggiori di Valore1
- Più di <Valore1> giornate, con allarmi consecutivi da una o più Soglie di riferimento (in OR) entro <YY> gg
- Più di <Valore1> giornate, con allarmi consecutivi da tutte le Soglie di riferimento (in AND) entro <YY> gg
- Soglie combinate in AND
- Soglie combinate in OR

ECG Giornalieri

Nella schermata ECG Giornalieri sono presenti inizialmente 3 tab

1. **TAB ECG:** Appena aperto è presente la lista dei giorni in cui sono presenti eventi e tra parentesi il numero degli eventi inseriti nel report.

The screenshot shows the CGM TELEMEDICINE interface. At the top, there are navigation tabs for ALLARMI (4675), CHAT (4), and ATTIVITÀ (433). Below this is a patient profile section for 'Patient Demo 2' with fields for Product, Code, Tel, Mail, Patologie, Note, State, and Date nascita. The main content area is divided into three tabs: ECG, ARCHIVIO, and REPORT. The ECG tab is active, showing a table of 'Data Eventi' with columns for 'Data' and 'Numero Eventi'. The table contains one entry for the date 07/08/2020 with 13 events. A 'Genera esame holder' button is visible above the table. The bottom of the interface shows a pagination bar with 'Pagina 1 di 1' and 'Mostrati 1 - 1 di 1'.

Data	Numero Eventi
07/08/2020	13 (2)

Selezionando una o più giornate e dando un click sul tasto “Genera file holter” viene generato un esame di Holter ECG che viene messo a disposizione nella sezione “Cartella personale / esami”


NOTA: gli ECG vengono archiviati dopo 30 giorni (60 se contengono eventi non programmati).

Se per il paziente che si sta visualizzando esistono ECG archiviati viene visualizzato il tab Archivio accedendo al quale si possono ripristinare gli ECG, che vengono resi disponibili il giorno successivo alla richiesta di ripristino. Gli ECG ripristinati rimarranno disponibili per almeno una settimana prima di essere archiviati di nuovo.

The screenshot displays the 'CGM TELEMEDICINE' interface for a patient named 'Demo 2'. The top navigation bar includes 'ALLARMI' (4675), 'CHAT' (4), and 'ATTIVITÀ' (433). The patient's profile information is visible, including 'Codice: 00000004', 'Tel: +39475; +359585;', 'Mail: supporto-hp@hes.it', 'Data nascita: 29/05/2014', and 'Stato: Attivo'. The main content area is titled 'Archivio' and contains a table of archived ECG data. The table has columns for 'Data', 'Tipo archiviazione', 'Stato archiviazione', and 'Note'. The data rows show dates from 2020 to 2022, all with 'Totale' as the type and 'Archiviato' as the status. There are 'Ripristina' and 'Annulla ripristina' buttons at the top right of the table. The left sidebar shows various menu items like 'DATI GENERALI', 'SCHEDE PAZIENTE', and 'ALLARMI'. The bottom of the page shows a pagination bar indicating 'Pagina 1 di 1' and 'Mostrati 1 - 6 di 6'.

Data	Tipo archiviazione	Stato archiviazione	Note
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> 15/02/2022	Totale	Archiviato	
<input type="checkbox"/> 03/01/2022	Totale	Archiviato	
<input type="checkbox"/> 01/02/2021	Totale	Archiviato	
<input type="checkbox"/> 19/08/2020	Totale	Archiviato	
<input type="checkbox"/> 07/08/2020	Totale	Archiviato	
<input type="checkbox"/> 06/08/2020	Totale	Archiviato	

Cliccando su un giorno si apre il dettaglio di esso che visualizza in un grafico diviso per ore del giorno partendo dalle 00 e finendo alle 24 del giorno successivo l'andamento della frequenza cardiaca e il livello di attività, nella griglia sotto sono presenti tutti gli eventi trovati suddivisi per ora. Nel caso in cui sia stata abilitata l'esportazione dei dati in formato ISHNE nella sezione di configurazione ECG HI, in questa schermata compaiono i pulsanti che servono a preparare il file e a scaricarlo.

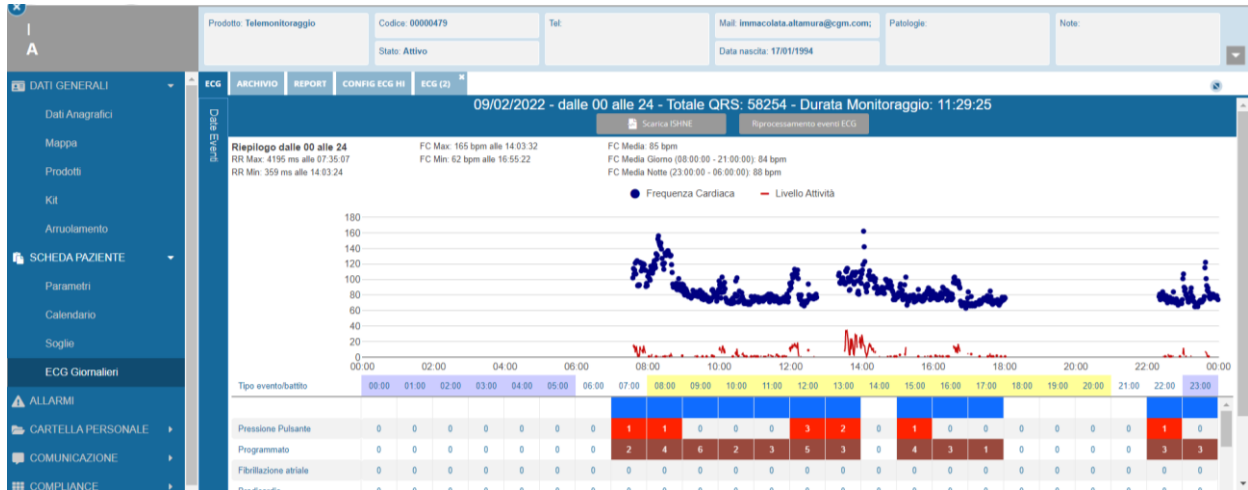

Espandendo il pannello "Eventi" è possibile vedere una lista degli eventi giornalieri che può essere filtrata utilizzando i flag mostrati sopra.

Data	Ora	Durata	Tipo	Seriale	Note
09/02/2022	23:45:44	09:59:990	Programmato		
09/02/2022	23:40:50	00:00:500	Battito ventricolare isolato		
09/02/2022	23:40:07	00:02:640	Rumore		
09/02/2022	23:38:46	00:01:913	Rumore		
09/02/2022	23:37:14	00:02:226	Rumore		
09/02/2022	23:36:59	00:02:900	Rumore		
09/02/2022	23:35:44	09:59:990	Programmato		
09/02/2022	23:06:25	00:12:726	Run sopravventricolare		

Cliccando su un determinato evento è possibile aprire il dettaglio di esso con la visualizzazione delle 3 derivazioni nell'arco temporale di 20 secondi. Partendo da sinistra, i pulsanti che appaiono sopra il grafico

consentono di visualizzare i righelli orizzontali e verticali, di aggiungere un nuovo evento, di passare all'evento precedente, di spostare la visualizzazione del grafico indietro o avanti di 5/10 secondi, di passare all'evento successivo, di visualizzare altre misure o di aggiornare la visualizzazione dei grafici.



Dando un click su uno dei pallini neri (o grigi, se l'evento è stato contrassegnato come errore) è possibile marcare l'evento come errore, contrassegnarlo per l'inclusione nel report, cambiare la tipologia di evento o aggiungere una descrizione.

Dettagli evento - Battito ventricolare isolato

Ora inizio *: 12:32:34


Ora fine *: 12:32:35

Descrizione:

Informazioni da algoritmo:

Utilizza per il report
 Imposta come errore

È possibile anche visualizzare un riepilogo degli eventi visualizzati dando un click sull'icona con il cerchio azzurro rappresentativo degli eventi dell'intera ora oppure dell'intera giornata.

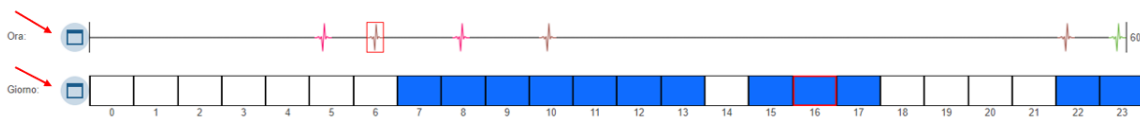

Cliccando sulla vista "ora" è possibile vedere la lista di tutti gli eventi dell'ora e le relative preview.

The screenshot shows the software interface with a 'SELEZIONA UN EVENTO' dialog box open. The dialog contains a table with the following data:

ORA EVENTO	TIPO EVENTO	Anteprima	REPORT	ERRORE	DETTAGLIO
<input type="checkbox"/> 12:30:00	Programmato		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedi
<input type="checkbox"/> 12:30:59	Rumore		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedi
<input type="checkbox"/> 12:31:59	Rumore		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedi
<input checked="" type="checkbox"/> 12:32:35	Battito ventricolare isolato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedi

At the bottom of the dialog, there are controls for 'Derivazione III', 'Carica anteprima', 'Cambia tipo evento', 'Utilizza per il report', and 'Imposta come errore'.

Da questa schermata è possibile cambiare la derivazione da visualizzare, caricare le anteprime di tutti gli eventi o solo di alcuni di essi, filtrare per tipologia di eventi, cambiare la tipologia di evento o impostare un evento come errore, inserire gli eventi di interesse nel report.

L'aggiunta di un nuovo evento si effettua dando un click sul terzo pulsante da sinistra nella pagina di visualizzazione del grafico, poi dandone un altro nel punto del grafico in cui si intende inserire il nuovo evento; si aprirà il seguente pannello:

Aggiungi nuovo evento

Wed, 03 Jun 2020 16:39:56.648

Descrizione *:

Salva Chiudi

Gli eventi inseriti manualmente vengono di default marcati per l'utilizzo nel report.

2. **TAB Report:** In questo tab è possibile vedere la lista di eventi marcati come "Usa nel Report" e selezionare quelli da inserire nel report corrente, una volta selezionati è possibile generare il documento cliccando sul pulsante "Genera Report" in alto a destra, una volta generato sarà creato automaticamente un nuovo esame di tipo ECG 1-3 Derivazioni visualizzabile in Cartella Personale > Esami

The screenshot shows the 'REPORT' tab in the software interface. The patient information at the top includes 'Paziente Gorizia 001', 'Prodotto: Service Demo 1', 'Codice: 00000508', 'Tel.', 'Mail: supporto-hp@hes.it', 'Patologie', 'Note', 'Stato: Nuovo', and 'Data nascita: 09/07/2019'. The main area displays a table of events:

Data	Ora	Tipo	Note
<input type="checkbox"/>	02/09/2021	07:58:2...	Battito ventricolare isolato
<input type="checkbox"/>	02/09/2021	07:58:2...	Battito ventricolare isolato

At the bottom of the interface, there is a footer with 'HEALTH PLATFORM', 'Copyright 2009 - 2021 H&S S.p.A. - Hello everybody!', and 'Mostrati 1 - 2 di 2'.


3. **TAB Config ECG HI:** In questo tab è possibile configurare le impostazioni generali del dispositivo, la tipologia di monitoraggio da applicare e i parametri da utilizzare per l'analisi dell'ECG. È anche possibile definire la durata della sessione di monitoraggio e la modalità di processamento del dato.

Inizialmente è necessario scegliere il tipo di monitoraggio che si desidera effettuare per il paziente, scegliendo tra 4 tipologie: Teleholter, Telemonitoring, Tele ECG e Configurazione libera.


Per farlo è sufficiente dare un click sul pulsante “Cambia tipo monitoraggio”, si aprirà una maschera di selezione con l’elenco dei tipi disponibili:



Scegliere il tipo desiderato e premere “Salva”, viene visualizzata una maschera di conferma in cui si avverte che il cambio di tipo monitoraggio provoca anche un cambio delle configurazioni e pertanto nel caso sia in corso una sessione è consigliabile interromperla ed avviarne una nuova, per essere sicuri che la nuova recepisca la nuova impostazione:

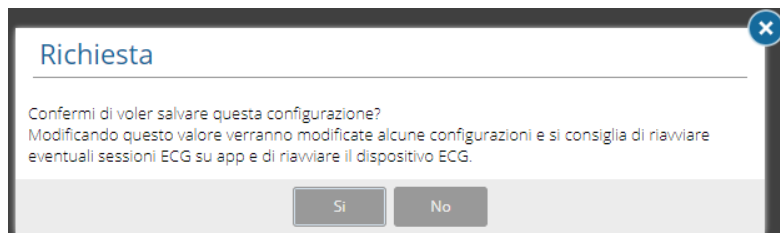

E premendo “OK” la modifica viene salvata nel sistema:

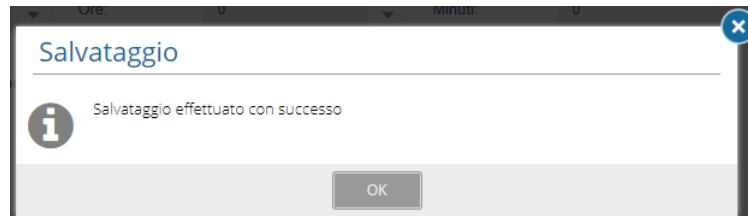

Di seguito sono riportati i dettagli delle configurazioni disponibili per i vari tipi di monitoraggio.

Teleholter

Holter da remoto fino a 30 giorni con trasmissione del dato in piattaforma web based e avanzato software di analisi Holter dedicato, utilizzando l’applicativo dedicato di analisi CER-S (tramite CER-S Gateway).

ECG ARCHIVIO REPORT **CONFIG ECG HI**

Monitoraggio ECG: Teleholter Cambia tipo monitoraggio

Visualizzare tutti i battiti:

Recupero dati dopo spegnimento:

Freq. camp. ECG: 128 Hz

Durata sessione: Giorni: 1 Ore: 0 Minuti: 0

La durata della sessione può essere tra un minimo di 10 minuti ed un massimo di 30 giorni.

È possibile specificare se visualizzare nel tracciato tutti i battiti, abilitare il recupero dei dati presenti nella memoria del dispositivo una volta che questo viene spento e riacceso, scegliere la frequenza di campionamento del segnale (se abilitato lo specifico permesso, altrimenti la frequenza è fissa) e definire la durata della sessione, che deve essere compresa fra 10 minuti e 30 giorni.

Telemonitoring

Monitoraggio da remoto fino a 7 giorni con trasmissione online e analisi del dato in piattaforma, utilizzando la visualizzazione dei tracciati descritta nei paragrafi precedenti.

ECG ARCHIVIO REPORT **CONFIG ECG HI**

Parametri generali

Monitoraggio ECG: Telemonitoring Cambia tipo monitoraggio

Visualizzare tutti i battiti:

Recupero dati dopo spegnimento:

Freq. camp. ECG: 128 Hz

Durata sessione: Giorni: 0 Ore: Freq. camp. ECG Minuti: 0

Analisi ECG: Disattivo

La durata della sessione può essere tra un minimo di 10 minuti ed un massimo di 7 giorni.

È possibile specificare se visualizzare nel tracciato tutti i battiti, abilitare il recupero dei dati presenti nella memoria del dispositivo una volta che questo viene spento e riacceso, scegliere la frequenza di campionamento del segnale (se abilitato lo specifico permesso, altrimenti la frequenza è fissa) e definire la durata della sessione, che deve essere compresa fra 10 minuti e 7 giorni.

È possibile inoltre specificare se abilitare il software di analisi interno del portale e quando deve essere eseguito, in base alle esigenze; ogni 10 minuti se è necessario monitorare in tempo quasi reale il paziente, ogni 60 minuti, a fine sessione oppure giornalmente se l'analisi non ha tempistiche ristrette:

Disattivo

Disattivo

Ogni 10 minuti di traccia trasmessa

Fine sessione

Giornaliero

Ogni 60 minuti di traccia trasmessa

Analisi ECG

TeleECG

Esame ECG a riposo da remoto al manifestarsi di sintomi o su sessioni programmate, con trasmissione online e analisi del dato in piattaforma.

È possibile scegliere la frequenza di campionamento del segnale (se abilitato lo specifico permesso, altrimenti la frequenza è fissa) e definire la durata della sessione, che deve essere compresa fra 10 secondi e un minuto, con i secondi che devono essere multiplo di 10.

Configurazione libera

Consente di definire liberamente le caratteristiche del monitoraggio e personalizzare quindi la sessione in base alle specifiche necessità del paziente.

Selezionando nella lista in alto a sinistra “Parametri generali” è possibile accedere alla maschera di configurazione della sessione.

Oltre ai parametri visti per le altre modalità, è possibile scegliere il formato di visualizzazione dell’orario e la modalità di acquisizione a scelta tra continua e programmata.

Nel primo caso il tracciato è acquisito in modo continuo durante tutta la durata della sessione, mentre nel secondo caso il tracciato verrà acquisito solamente per 10 minuti ogni 30, 60 o 120 minuti a seconda di quanto selezionato nel campo “Freq. Scaricamento”. Ad esempio, utilizzando 60 minuti si otterrà un tracciato di 10 minuti ogni ora.

ECG ARCHIVIO REPORT CONFIG ECG HI

Parametri generali Salva

Monitoraggio ECG: Configurazione libera Cambia tipo monitoraggio

Formato orario visualizzazione: 24 ore

Visualizzare tutti i battiti:

Recupero dati dopo spegnimento:

Freq. camp. ECG: 128 Hz

Modalità: Modalità programmata

Freq. scaricamento: 30 Min

Durata sessione: Giorni: 0 Ore: 0 Minuti: 0

Analisi ECG: Disattivo Analisi ECG

I dati registrati nella modalità programmata avranno una durata predefinita di 10 minuti.
La durata della sessione può essere tra un minimo di 10 secondi ed un massimo di 1 minuto con i secondi che devono essere multiplo di 10.

Selezionando nella lista in alto a sinistra “Algoritmo analisi ECG” è possibile accedere alla maschera di configurazione degli algoritmi di analisi del tracciato ECG, oltre a poter selezionare su quali derivazioni è abilitata l’analisi effettuata lato server.

ECG ARCHIVIO REPORT CONFIG ECG HI 0 CHAT 100 ATTIVITÀ

Algoritmo analisi ECG Salva

Leads selezionati

Derivazione I:

Derivazione II:

Derivazione III:

Canale II abilitato per analisi cardiocast

Parametri algoritmo

Finestra RRP*: 8

RRR (Tir prolungato (rapporto RR/RRp) (%)*: 200

Pausa soglia (ms)*: 2500

Lunghezza minima della fibrillazione atriale (s)*: 0

Indice prematuro (%)*: 75

Bradycardia

Soglia (bpm)*: 45

Lunghezza minima (s)*: 10

Tachicardia

Soglia ventricolare (bpm)*: 150

Soglia ventricolare superiore (bpm)*: 150

Lunghezza minima LIM: batti

Lunghezza minima (s)*: 5

Lunghezza minima (battiti)*: 5

Le voci successive sono specifiche per l’algoritmo di analisi direttamente a bordo del dispositivo Hi.

ALLARMI

La maschera Allarmi consente all'operatore di verificare gli allarmi scattati per il paziente in analisi. Ogni allarme è caratterizzato dalla criticità che incide sul colore del bollino e da altre informazioni importanti come data/ora, priorità, stato, titolo, messaggio, tipo allarme per verificare lo stato del paziente.

The screenshot shows the 'ALLARMI' (Alarms) section of the CGM TELEMEDICINE interface. At the top, there are navigation buttons for 'ALLARMI' (4677), 'CHAT', and 'ATTIVITÀ' (438). The patient information section includes 'Patient Demo 2', 'Codice: 00000004', 'Tel: +39475; +359585', 'Mail: supporto-hp@hes.it', 'Patologie:', and 'Note: note'. The main table lists alarms with columns for 'DATA-ORA', 'STATO', 'TITOLO', 'MESSAGGIO', and 'TIPO ALLARME'. The status 'Da gestire' is indicated by a red dot. The table shows multiple instances of 'Mancata medicazione' (Missed medication) alarms.

DATA-ORA	STATO	TITOLO	MESSAGGIO	TIPO ALLARME
01/12/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
30/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
29/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
28/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
27/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
26/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
25/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
24/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
23/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
22/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
21/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
20/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
19/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
18/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
17/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
16/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
15/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
14/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
13/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
12/11/2022 16:20:00	Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita

Una volta verificato l'allarme l'operatore può inserire note o cambiare lo stato dello stesso cliccando sulla riga dell'allarme. Qui l'operatore può modificare i campi del dettaglio, visualizzare le misure puntuali del paziente e lo storico delle modifiche, note o cambiamenti di stato che sono stati apportati all'allarme e le notifiche inviate cioè mail/sms inviati agli operatori sulla generazione dell'allarme.

The screenshot shows the 'DETTAGLIO ALLARME' (Alarm Detail) interface for Patient Demo 2. It includes a 'Salva' (Save) button and tabs for 'Dettaglio', 'Misure', 'Storico', and 'Notifiche inviate'. The details are as follows:

- ID AVVISO: 143216
- TIPOLOGIA: Clinico
- DATA: 04/12/2019
- TIPO MISURA: Frequenza Cardiaca
- VALORE LETTO: 120 (04/12/2019 10:32:24 (+01:00))
- VALORE SOGLIA: 99
- TITOLO: Allarme da soglia Unisalute
- MESSAGGIO: Misura: Pulsazioni - Valore maggiore di 99
- STATO: Falso allarme
- NOTE:

DETTAGLIO ALLARME

● Demo 2 Paziente Salva

Dettaglio
Misure
Storico
Notifiche inviate

Misurazione	Valore	Data
Frequenza Cardiaca	120	04/12/2019 10:34:01
Frequenza Cardiaca	120	04/12/2019 10:24:01
Frequenza Cardiaca	115	04/12/2019 10:16:09
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 09:34:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 09:24:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 09:14:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 09:04:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 08:54:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 08:44:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 08:34:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 08:24:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 08:14:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 08:04:00
Frequenza Cardiaca	60	01/12/2019 07:54:00

DETTAGLIO ALLARME

● Demo 2 Paziente Salva

Dettaglio
Misure
Storico
Notifiche inviate

Modificato il	Modificato da	Stato	Note
04/12/2019 10:34:02		Da gestire	

DETTAGLIO ALLARME

● TIZIO CAIO Salva

Dettaglio
Misure
Storico
Notifiche inviate

Data invio	Destinatario	Indirizzi	Stato invio	Messaggio
19/05/2020 16:40:33	Operatore4 Test	mmarina@hes.it	Inviato	Allarme soglia - CAIO TIZIO
19/05/2020 16:40:33	Admin HP3	matteo.marina@cgmm.com	Inviato	Allarme soglia - CAIO TIZIO

Esporta Excel/Esporta PDF

Tramite i pulsanti Esporta in Excel ed Esporta in PDF nel fondo della pagina, è possibile scaricare un file contenente la griglia visualizzata nell'istante del click sul pulsante. Nel documento sarà visualizzato un elenco con gli eventuali filtri applicati sulle colonne.

CGM | TELEMEDICINE 4677 ALLARMI 4 CHAT 438 ATTIVITÀ DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

Patient Demo 2

Prodotto: Codice: 00000004 Tel: +39475; +359585; Mail: supporto-hp@hes.it; Patologie: Note: note
 Stato: Attivo Data nascita: 29/05/2014

DATI GENERALI	DATA-ORA	STATO	TITOLO	MESSAGGIO	TIPO ALLARME
Dati Anagrafici	01/12/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
Mappa	30/11/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
Prodotti	29/11/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
Kit	28/11/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
Arnuolamento	27/11/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
	26/11/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
	25/11/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
	24/11/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
	23/11/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
	22/11/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
	21/11/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
	20/11/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
	19/11/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
	18/11/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
	17/11/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
	16/11/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
	15/11/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
	14/11/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
	13/11/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita
	12/11/2022 16:20:00	● Da gestire	Mancata medicazione	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio p...	Attività non eseguita

Esporta in Excel Esporta PDF

Mostrati 1 - 20 di 140

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2022 H&S S.p.A. - News di prova



Esporta in Excel



Esporta in PDF



CARTELLA PERSONALE

Anamnesi

La prima voce del menù Cartella personale è Anamnesi. Questa voce comprende due sezioni: le survey di anamnesi in alto e le patologie in basso.

Nella sezione survey di anamnesi è possibile per ogni survey copiarla, eliminarla, creare un PDF (se è compilata), visualizzare la data di compilazione, la fine dell'inserimento, la tipologia, se è compilata e chi l'ha compilata.

Con il pulsante + in basso a destra è possibile compilare una nuova survey, selezionando inizialmente il tipo di survey. Cliccando su una survey è possibile rivedere ogni risposta data dall'assistito.

SELEZIONE

Seleziona questionario *:

Anamnesi

Salva
Annulla

The screenshot displays the CGM Telemedicine interface. At the top, there are status indicators for 'ALLARMI' (4677), 'CHAT' (4), and 'ATTIVITÀ' (438). The main header includes 'CGM TELEMEDICINE' and navigation links like 'DASHBOARD', 'HOME', 'ASSISTITI', 'OPERATORE', 'REFERITI', and 'ADMIN'. The patient profile for 'Patient Demo 2' is visible, showing fields for 'Prodotto', 'Codice', 'Tel.', 'Mail', 'Patologie', and 'Note'. The left sidebar contains a menu with options like 'SCHEDA PAZIENTE', 'Parametri', 'PAI', 'Calendario', 'Soglie', 'ECG Giornalieri', 'Preferenze operatore', 'ALLARMI', and 'CARTELLA PERSONALE'. The 'CARTELLA PERSONALE' section is expanded to show 'Anamnesi', 'Terapia', 'Accessi', 'Diario', 'Eventi', 'Segnalazione Eventi', 'Valutazione Infermerist...', and 'Esami'. The main content area shows a list of sections for anamnesis, with '1. Anamnesi personale fisiologica' and '2. Anamnesi patologica remota' visible. The '1.02.02 Parto cesareo' section is expanded, showing radio buttons for 'SI' and 'NO'.

Nella sezione Patologie è possibile per ogni patologia visualizzare la data di inizio, la data di fine, il nome della patologia e le note.

Cliccando su una patologia è possibile vederne i dettagli e modificarli, con il + in basso a destra è possibile inserire una nuova patologia per il paziente.

The screenshot shows the 'DETTAGLIO PATOLOGIA' (Pathology Detail) form. The form includes the following fields and controls:

- Patologia *:** (2720) Ipercolesterolemia pura
- Data inizio *:** 01/01/2016
- Data fine:**
- Note:**

At the bottom right, there are three buttons: 'Salva', 'Elimina', and 'Chiudi'.

Terapia

Nel menù Cartella personale è presente l'elenco delle terapie del paziente. Per ogni terapia è presente la data di inizio, la data di fine, il nome della terapia e le note. Nella parte bassa dello schermo è presente l'elenco delle terapie erogate tramite i vassoi terapia, che sono in sola lettura (vedi sezione Compliance).

The screenshot displays the CGM TELEMEDICINE interface for a patient named 'Demo 2'. The top navigation bar includes 'ALLARMI' (4577), 'CHAT', and 'ATTIVITÀ' (438). The patient's profile shows contact information and medical history. The main section is titled 'Terapie' and contains a table of active therapies:

DATA INIZIO	DATA FINE	TERAPIA	POSOLOGIA	ORARIO	NOTE
05/09/2022		NEBIVOLOLO	5.0		
02/05/2022		ARGIPRESSINA (VASOPRESSINA)	10		

Below this, there is a section for 'Terapie Pill Dispenser' with a table of historical therapy events:

DATA INIZIO	DATA FINE	TERAPIA	POSOLOGIA	ORARIO	NOTE
03/10/2022	03/10/2022	TANTUM VERDE GOLA	1 volta al di		Terapia Pill Dispenser
03/10/2022	31/10/2022	MOMENT	1 cp al di	16.15	Terapia Pill Dispenser
03/10/2022	31/10/2022	MOMENT	1 cp al di	16.15	Terapia Pill Dispenser
15/07/2022		PARACETAMOLO	1 day	16.0	Medication therapy
07/05/2021	03/10/2022	ASPIRINA	1 al di	14.45	Terapia Pill Dispenser
17/03/2021	31/10/2022	RAVICTI	10	16.15	Terapia Pill Dispenser

Cliccando su una terapia è possibile vederne i dettagli e lo storico, con la possibilità di modificare i dati, con il + in basso a destra compare lo stesso pop-up ed è possibile inserire una nuova terapia per il paziente.

DETTAGLIO TERAPIA

DETTAGLIO
STORICO

Patologia: (53500) Gastrite acute senza menzione di emorragia

Farmaco ATC:

Farmaco AIC:

Nome farmaco *: lansoprazolo

N° volte: Ogni: GG/SS/MM:

Posologia: Orario:

Inizio terapia *:

Fine terapia:

Note:



Esporta Excel/Esporta PDF

Tramite i pulsanti Esporta in Excel ed Esporta in PDF nel fondo della pagina, è possibile scaricare un file contenente la griglia visualizzata nell'istante del click sul pulsante. Nel documento sarà visualizzato un elenco con gli eventuali filtri applicati sulle colonne.

H&S HEALTH PLATFORM

Dashboard HOME ASSISTITI OPERATORE ADMIN

Paziente Demo 2

Prodotto: Codice: 00000111 Tel: 1234567890; Mail: Patologia: Iperensione essenziale non specificata; Note:
 Stato: Attivo Data nascita: 16/12/1964 Ipercolesterolemia pura

DATA INIZIO	DATA FINE	TERAPIA	POSOLOGIA	ORARIO	NOTE
01/01/2016		nibivolol	5.0		
01/01/2016		ambipnea	5.0		
01/01/2016		ezetrol	10.0		
01/01/2016		olevia	1000.0		
01/01/2016		cardiolipid	10.0		

Esporta in Excel Esporta in PDF

Copyright 2009 - 2020 H&S S.p.A.

 Esporta in Excel

 Esporta in PDF

Accessi

Nel menù Cartella personale dopo Terapia è presente anche Accessi, con l'elenco degli accessi fatti a domicilio del paziente. Per ogni accesso l'operatore deve indicare la data e ora, il fornitore, la durata, lo stato, l'assegnamento o meno, la figura professionale, il tipo di accesso, il numero di intervento e l'autorizzazione. È possibile visualizzarli, modificarli ed aggiungerne di nuovi.

DATA E ORA	FORNITORE	DURATA	STATO	ASSEGNATO	FIGURA PROFESSIONALE	TIPO ACCESSO	N° INTERVENTO
19/10/2020 08:00	HES	01:00:00	Pianificato	<input type="checkbox"/>	Dottore	Accesso std OSS	1

Cliccando su un accesso è possibile vederne i dettagli e modificarli (a parte la figura professionale e l'autorizzazione), con il + in basso a destra è possibile inserire un nuovo accesso per il paziente.

MODIFICA ACCESSO

Fornitore:

Data *:

Ora *:

Durata:

Stato *:

Assegnato:

Tipo accesso *:

Figura professionale *:

Note:

INSERIMENTO ACCESSO

Fornitore:

Data *: 24/06/2020

Ora *:

Durata:

Stato *: Pianificato

Assegnato:

Tipo accesso *:

Figura professionale *:

Note:

Diario

La pagina Diario comprende l'elenco di tutto quello che è successo al paziente (Attività, Eventi clinici, Note operative, Allarmi, esami, ecc...), con i dati non modificabili ma solo in visualizzazione. Le uniche categorie modificabili sono gli Eventi e le Note operative. In alto a destra sono presenti dei filtri per visualizzare solo i tipi di eventi desiderati.

CGM | TELEMEDICINE 4678 ALLARMI 4 CHAT 438 ATTIVITÀ DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

Patient Demo 2

Prodotto: Codice: 00000004 Tel: +39475; +359585; Mail supporto-hp@hes.it; Patologia: Iperensione essenziale non specificata; Ipercolesterolemia pura Note: note

Stato: Attivo Data nascita: 29/05/2014

Data inizio: Data fine: Eventi Clinici, Note

Data	Categoria	Titolo	Sottotitolo	Nota	Utente
22/11/2022 16.2..	Nota Operativa	Inviata comunicazione		Generata automaticamente su invio email, messaggio: Prova Patient	
21/11/2022 16.2..	Nota Operativa	Inviata comunicazione		Generata automaticamente su invio email, messaggio: Prova Patient	
20/11/2022 16.2..	Nota Operativa	Inviata comunicazione		Generata automaticamente su invio email, messaggio: Prova Patient	
19/11/2022 16.2..	Nota Operativa	Inviata comunicazione		Generata automaticamente su invio email, messaggio: Prova Patient	
18/11/2022 16.2..	Nota Operativa	Inviata comunicazione		Generata automaticamente su invio email, messaggio: Prova Patient	
18/11/2022 13.1..	Esame	Videoconsulto			HP3 Admin
17/11/2022 16.2..	Nota Operativa	Inviata comunicazione		Generata automaticamente su invio email, messaggio: Prova Patient	
17/11/2022 15.4..	Esame	Ritiro holter cardiaco			
17/11/2022 15.3..	Evento Clinico	Diario paziente			Test Referatore
17/11/2022 15.3..	Esame	Holter ECG			
17/11/2022 15.2..	Esame	Ritiro holter cardiaco			
16/11/2022 16.2..	Nota Operativa	Inviata comunicazione		Generata automaticamente su invio email, messaggio: Prova Patient	
15/11/2022 16.2..	Nota Operativa	Inviata comunicazione		Generata automaticamente su invio email, messaggio: Prova Patient	
15/11/2022 15.4..	Esame	Ritiro holter cardiaco			
15/11/2022 13.1..	Esame	Ritiro holter cardiaco			
15/11/2022 13.0..	Esame	Ritiro holter cardiaco			
14/11/2022 18.4..	Esame	Ritiro holter cardiaco			
14/11/2022 17.4..	Esame	Ritiro holter cardiaco			
14/11/2022 17.4..	Esame	Ritiro holter cardiaco			
14/11/2022 17.1..	Esame	Ritiro holter cardiaco			


Per ogni evento è presente la data, la categoria, il titolo, il sottotitolo, l'utente e le note. Per alcuni eventi è disponibile anche un allegato, cliccando sul simbolo della graffetta è possibile visualizzarlo.

DETTAGLIO EVENTO

Titolo *: Appuntamento personale



Sottotitolo: TEST Appuntamento

Data Comp. *: 20/12/2018

File: Survey_ASRA_new.pdf  Scegli...

Validita *: Globale

Note:

MODIFICA NOTA OPERATIVA

Dettaglio **Storico**

Titolo *: Monitoraggio parametri

Sottotitolo *: Avviso rosso-chiusura NO ripetizione

Data nota operativa *: 02/02/2019

Carica allegato:  Scegli...


Note: perennite diverse misurazioni ultimi parametri ok...

MODIFICA NOTA OPERATIVA

Dettaglio **Storico**

DATA	TITOLO	SOTTOTITOLO	NOTE	MODIFICATO...

Con il + in basso a destra è possibile inserire solamente una nuova Nota operativa sul Diario.

MODIFICA NOTA OPERATIVA

Dettaglio

Titolo *:

Sottotitolo *:

Data nota operativa: 02/12/2022 16:09

Carica allegato:  Scegli...

Note:

Esporta Excel/Esporta PDF

Tramite i pulsanti Esporta in Excel ed Esporta in PDF nella parte superiore della pagina, è possibile scaricare un file contenente la griglia visualizzata nell'istante del click sul pulsante. Nel documento sarà visualizzato un elenco con gli eventuali filtri applicati sulle colonne.

The screenshot displays the H&S Health Platform interface for a patient named 'Demo 2'. The top navigation bar includes 'DASHBOARD', 'HOME', 'ASSISTITI', 'OPERATORE', and 'ADMIN'. The patient information section shows details such as 'Codice: 00000111', 'Tel: 1234567890', 'Mail', 'Data nascita: 16/12/1964', and 'Stato: Attivo'. Below this, there are buttons for 'Esporta in Excel' and 'Esporta in PDF'. The main area contains a table of medical events with columns for 'Data', 'Categoria', 'Titolo', 'Sottotitolo', 'Note', and 'Utente'. The table lists various events including appointments, monitoring, and alarms. At the bottom of the interface, there is a copyright notice: 'Copyright 2009 - 2020 H&S S.p.A.'.

Data	Categoria	Titolo	Sottotitolo	Note	Utente
21/01/2020 17:47:00	Attività	Appuntamento personale	Appuntamento Mediconer		
21/01/2020 14:58:00	Attività	Appuntamento personale	Appuntamento Mediconer		
21/01/2020 14:32:00	Attività	Appuntamento personale	Appuntamento Mediconer		
27/03/2019 16:45:00	Attività	Cronicità	Attivazione kit	Contatto effettuata att	Demo Case Manager
05/03/2019 09:40:58	Nota Operativa	Monitoraggio parametri	Avviso rosso- chiusura NO ripetizione	pervenute diverse misurazione , cmq i valori tendono al basso ma sono buoni.	
05/03/2019 08:40:22	Allarme rosso	Misura: Pressione Diastolica - Valore minore...	Chiuso senza contatto	pervenute troppe misurazioni dello stesso cliente, forse va spiegato meglio il funzionamento.	
04/03/2019 08:35:54	Nota Operativa	Monitoraggio parametri	Avviso giallo- chiusura SI ripetizione	cliente ripete misurazione dopo invio mail valori nella norma chiudo avviso	
04/03/2019 08:26:15	Nota Operativa	Monitoraggio parametri	Avviso rosso- chiusura NO ripetizione	Diastolica ancora nei limiti Non si contatta cli	
03/03/2019 19:35:07	Allarme giallo	Misura: Pressione Sistolica - Valore minore...	Chiuso	vedi nota diario	
03/03/2019 14:16:32	Allarme rosso	Misura: Pressione Diastolica - Valore minore...	Chiuso	vedi nota diario	
03/03/2019 14:16:32	Allarme rosso	Misura: Pressione Diastolica - Valore minore...	Chiuso	vedi nota diario	
03/03/2019 14:16:31	Allarme giallo	Misura: Pressione Sistolica - Valore minore...	Chiuso	vedi nota diario	
03/03/2019 14:16:31	Allarme giallo	Misura: Pressione Sistolica - Valore minore...	Chiuso	vedi nota diario	
01/03/2019 08:03:04	Nota Operativa	Monitoraggio parametri	Avviso giallo -mail ripetizione misura	valore rilevato inferiore alla soglia. invio mail con richiesta ripetizione misura	
01/03/2019 07:53:53	Allarme giallo	Misura: Pressione Sistolica - Valore minore...	Inviata mail in attesa di misurazione		
01/03/2019 07:53:53	Allarme giallo	Misura: Pressione Sistolica - Valore minore...	Chiuso - Inviata Mail SI misurazione		
28/02/2019 08:12:21	Nota Operativa	Monitoraggio parametri	Avviso giallo- chiusura SI ripetizione	il cliente esegue più misurazioni, di cui l'ultima con valori entro soglia. non ritengo necessario contatto	
28/02/2019 07:34:04	Allarme giallo	aumento del 5% in due settimane	Chiuso valore rientrato		
28/02/2019 07:26:56	Allarme giallo	aumento del 5% in due settimane	Chiuso valore rientrato		
28/02/2019 07:26:56	Allarme giallo	aumento del 5% in due settimane	Chiuso valore rientrato		
22/02/2019 08:19:11	Nota Operativa	Monitoraggio parametri			

Esporta in Excel

Esporta in PDF

Eventi

La pagina Eventi comprende l'elenco degli eventi della storia socio-sanitaria del paziente, ma stavolta modificabili. Ogni evento ha come parametri data, titolo, sottotitolo, utente, visibilità e note.

La visibilità dell'evento è un'informazione importante per garantire una maggiore privacy e una corretta gestione delle informazioni.

The screenshot shows the CGM TELEMEDICINE interface. At the top, there are navigation buttons for 'ALLARMI' (4678), 'CHAT' (4), and 'ATTIVITÀ' (438). Below these are links for 'DASHBOARD', 'HOME', 'ASSISTITI', 'OPERATORE', 'REFERTI', and 'ADMIN'. The main content area displays a patient profile for 'Demo 2' with various fields: Prodotto, Codice (0000004), Tel (+39475; +359585), Mail (supporto-hj@hes.it), Patologie (Ipertensione essenziale non specificata; Ipercolesterolemia pura), Note, and note (note). Below the profile is a table of events with columns: DATA, TITOLO, SOTTOTITOLO, UTENTE, VISIBILITÀ, and NOTE.

DATA	TITOLO	SOTTOTITOLO	UTENTE	VISIBILITÀ	NOTE
17/11/2022	Diario paziente		Referatore Test	Globale	
04/11/2022	Appuntamento personale	65651	Operatore4 Test	Globale	
22/07/2022	Diario paziente		Referatore Test	Globale	
22/07/2022	Diario paziente		Referatore Test	Globale	
22/07/2022	Diario paziente		Referatore Test	Globale	
22/07/2022	Diario paziente		Referatore Test	Globale	
10/09/2020	Visita medica		Demo 2 Patient	Globale	Visita medica
10/09/2020	Appuntamento personale		Demo 2 Patient	Globale	Test appuntamento personale
04/08/2020	Appuntamento personale	Promemoria Assistito	Demo 2 Patient	Globale	test

At the bottom right of the table, there is a '+' icon for adding a new event. The footer of the interface includes 'CGM CARE MAP' and 'Copyright 2009'.

Cliccando su un evento è possibile visualizzarne i dettagli e modificarli. Cliccando sul + in basso a destra è possibile inserire un nuovo evento.

The screenshot shows the 'DETTAGLIO EVENTO' form. It contains the following fields:

- Titolo ***: Appuntamento personale
- Sottotitolo**: Promemoria Assistito
- Data Comp. ***: 04/05/2020
- Sfoggia**: [Empty field with a 'Scegli...' button]
- Visibilità ***: Globale
- Note**: prova

At the bottom right of the form, there are three buttons: 'Salva', 'Elimina', and 'Chiedi'.

Segnalazione Eventi

La pagina Segnalazione Eventi sotto il menù Cartella Personale comprende l'elenco delle segnalazioni di eventi avversi avvenute sul paziente. Ogni evento avverso ha come parametri data e ora, descrizione evento, farmaco e utente. Per ogni segnalazione è anche possibile inviare una mail in base al prodotto selezionato (se fatto, la segnalazione diventa in sola lettura) e fare il download i dati (con la graffetta).

Per ogni giorno in cui vengono segnalati uno o più eventi avversi il sistema genera un report che può essere scaricato nella relativa sezione del portale.

CGM TELEMEDICINE Connected Patient Solutions

4678 ALLARMI | 4 CHAT | 438 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

Patient Demo 2

Prodotto: [] Codice: 00000004 Tel: +39475; +359585; Mail: supporto-hp@hes.it; Patologie: Iperensione essenziale non specificata; Ipercolesterolemia pura; Note: note

Stato: Attivo Data nascita: 29/05/2014

CODICE EVENTO	DATA E ORA	INVIO MAIL	DESCRIZIONE EVENTO	FARMACO	UTENTE	INVIATO
1034	02/08/2022 00:00:00	✉	Test	cli	Admin HP3	<input type="checkbox"/>
1032	30/06/2021 00:00:00	✉	test	test	Operatore4 Test	<input checked="" type="checkbox"/>
1024	12/06/2019 00:00:00	✉	test riconciliazione	gfoh	Operatore4 Test	<input type="checkbox"/>
18	27/03/2019 00:00:00	✉	prova riconciliazione	test	Operatore4 Test	<input type="checkbox"/>

CGM CARE MAP p.A. - News di prova

Con il pulsante + in basso a destra è possibile inserire una nuova segnalazione, inserendo il prodotto, la data di segnalazione, la descrizione dell'evento, il farmaco ed eventuali altre informazioni.

INSERISCI EVENTO AVVERSO

Prodotto *:

Data segnalazione *:

Data di insorgenza evento:

Data di inizio trattamento:

Descrizione evento *:

Farmaco *:

Azienda farmaceutica:

Posologia: Specificare

Frequenza:

Correlazione: Esito:

Gravità:

Se la segnalazione è relativa ad un paziente con prodotto Sanofi le informazioni richieste sono diverse:

INSERISCI EVENTO AVVERSO

Prodotto *: Sanofi

Data segnalazione *: 16/08/2021

Data di insorgenza evento:

Data di inizio trattamento:

Data di fine trattamento:

Descrizione evento *:

Farmaco *:

Azienda farmaceutica:

Posologia: Specificare:

Frequenza:

Correlazione: Esito:

INSERISCI EVENTO AVVERSO

Prodotto *: Sanofi

Gravità:

Ritorno:

Continuo:

Segnale:

Esito dell'evento:

Relativo al prodotto aziendale:

Data di morte:

Causa di morte:

Persona che completa questo modulo **Medico Curante** **Corrispondente**

Nome, titolo:

Persona che completa questo modulo **Medico Curante** **Corrispondente**

Nome, titolo:

Telefono:

Persona che completa questo modulo **Medico Curante** **Corrispondente**

Nome medico curante:

Indirizzo medico curante:

Telefono medico curante:

Email medico curante:

Persona che completa questo modulo **Medico Curante** **Corrispondente**

Nome corrispondente:

Indirizzo corrispondente:

Operatore sanitario:

Telefono corrispondente:

Email corrispondente:

Valutazione Infermieristica

La pagina di Valutazione infermieristica comprende tre sezioni.

In alto ci sono le scale di valutazione, ognuna con la possibilità di copiarla, eliminarla e crearne un PDF (se compilata). Oltre a questa possibilità, per ogni scala sono presenti vari dati come la data di compilazione, la fine dell'inserimento dei dati, la tipologia, la compilazione o meno e il nome del compilatore. La compilazione di una scala può generare un indice che è poi visualizzabile nella pagina Parametri in base al tipo di misura selezionato. Quando una scala ha il campo compilato flaggato, diventa di sola lettura (non modificabile).

The screenshot displays the 'Patient Demo 2' interface. At the top, there are navigation buttons for 'ALLARMI' (4678), 'CHAT', and 'ATTIVITÀ' (438). The main content area is divided into three sections:

- SCALE DI VALUTAZIONE:** A table with columns: DATA COMP., INVIA, FINE INS., TIPOLOGIA, Punteggio, COMPILATO, and COMPILATORE. A single row is visible with data: 15/07/2022 13:00, a copy icon, SF-12, and Operator4 Test.
- AREE DI INTERVENTO:** A table with columns: DATA, AREA DI INTERVENTO, VALUTAZIONE PROBLEMA, OBIETTIVO, INTERVENTO, and COMPILATORE. A single row is visible with data: 06/09/2022, Nutrizione e metabolismo, Riduzione peso, Modifica dieta, and Admin HP3.
- NOTE OPERATIVE:** A table with columns: DATA, TITOLO, SOTTOTITOLO, NOTE, and UTENTE. Multiple rows are visible, all with the note 'Generata automaticamente su invio email, messaggio: Prova Patient'.

Each section has a '+' button in the bottom right corner for adding new entries.

Con il + in basso a destra è anche possibile scegliere una nuova scala di valutazione.

A modal dialog titled 'SELEZIONE' is shown. It contains a label 'Selezione questionario *:' followed by a dropdown menu.

Al centro ci sono le Aree di intervento, ognuno con la data e il nome del compilatore. Premendo su una riga è possibile visualizzare il dettaglio del problema. Anche in questo caso è possibile inserire una nuova area con il pulsante + in basso a destra.

In basso sono presenti le eventuali note operative. Premendo su una riga è possibile visualizzare il dettaglio e lo storico della nota operativa.

Con i rispettivi + in basso a destra è possibile:

- Per le scale di valutazione: scegliere una nuova scala di valutazione e visualizzarne il contenuto;

The screenshot displays the 'CGM TELEMEDICINE' interface for a patient named 'Demo 2'. The top navigation bar includes 'ALLARMI' (4678), 'CHAT' (4), and 'ATTIVITÀ' (438). The patient's profile information is shown at the top, including product code (09000004), contact details, and medical notes. The main content area is titled 'Sezioni' and lists various assessment scales (01-04) with their respective descriptions and radio button options for selection. The scales include: 01. PERCEZIONE SENSORIALE, 02. UMDITA' CUTANEA, 03. ATTIVITA', and 04. MOBILITA'.

- Per le Aree di intervento: inserire un nuovo problema;

The screenshot shows the 'MODIFICA PROBLEMA' form. It contains the following fields:

- Area di intervento *: Nutrizione e metabolismo
- Valutazione problema: (empty text field)
- Obiettivo *: Test
- Intervento *: Demo
- Data problema *: 24/06/2020

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'ELIMINA' and 'SALVA'.

- Per le note operative: inserire una nuova nota operativa.

MODIFICA NOTA OPERATIVA

Dettaglio **Storico**

Titolo *: Monitoraggio parametri

SottoTitolo *: Avviso giallo- chiusura SI ripetizione

Data nota operativa: 04/03/2019 08:35:54

Carica allegato: Scegli...

Note:

cliente ripete misurazione dopo invio mail valori nella norma
chiudo avviso

MODIFICA NOTA OPERATIVA

Dettaglio **Storico**

DATA	TITOLO	SOTTOTITOLO	NOTE	MODIFICATO DA

Esami



La pagina “Esami” mostra tutti i referti dell’assistito filtrabili per data e tipo di esame.

The screenshot displays the CGM TELEMEDICINE interface for a patient named "Patient Demo 2". The top navigation bar includes "ALLARMI" (4678), "CHAT" (4), and "ATTIVITÀ" (438). The patient's profile information is shown at the top, including contact details and medical conditions like "Ipertensione essenziale non specificata" and "Ipercolesterolemia pura".

The main content area is divided into two sections:

- Elenco referti (Exam List):** A table with columns for ID, DATA ESAME, DATA REFERITO, and TIPO. The table lists various exams, with the most recent one (ID 7006) highlighted in blue. Below the table are "Aggiorna" and "Nuovo" buttons.
- Dettaglio esame (Exam Detail):** A form showing details for exam ID 7006, including the type (Holler ECG), date (22/07/2022), time (10:50), status (Non refertato), reason (Test), risk factors (Obesità, Dislipidemia), and pathology (Cardiopatico grave).

At the bottom of the interface, there are buttons for "Apri dettagli", "Apri diario", "Salva", and "Elimina".

CGM CARE MAPs di prova

A sinistra abbiamo l’elenco dei referti, il pulsante “Aggiorna” che ricarica la lista di referti fatti dal paziente e il pulsante “Nuovo” che permette di aggiungere un nuovo referto. Cliccando su un esame oppure sul pulsante “Nuovo” aggiorna la schermata al centro a destra.

Nel caso di esami di tipo Holter ECG e Holter Pressorio, sulla destra sono presenti dei campi aggiuntivi: fattori di rischio, motivo esame e patologie, che vengono inseriti dall’applicativo CGM POINT OF CARE in fase di esame.

Dettaglio esame

ID Esame:	7191	
Tipo:	Holter ECG	
Data *:	30/11/2022	
Ora *:	16:00	
Stato:	Non refertato	
Sostituisci allegato:		<input type="button" value="Scegli..."/>
Motivo esame:	Controllo periodico	
Fattori di rischio:	<input type="text" value="Motivo esame"/>	
Patologie:		
Note:	29/11/2021 - 29/11/2021	

Cliccando un referto di tipo:

- **“Spirometria”**, nella schermata a destra si visualizza i dettagli dell’esame con tipo, data, ora, stato, sostituisci allegato, quesito diagnostico, motivo esame, note. In basso si hanno quattro pulsanti: [Apri allegato], [Referta], [Salva], [Elimina].

Cliccando [Apri allegato] si potranno visualizzare il grafico e il dettaglio degli esami. Cliccando [Referta], in seguito alla conferma di presa in carico, visualizza il grafico e il dettaglio degli esami.

Refertazione esame

Riferimento esame: 65.4.20200121145818

Esame Spirometria	
Nome:	Paziente Demo 2
Sesso:	M
Data di nascita:	16/12/1964
Data:	21/01/2020
Codice Fiscale:	DMEPNT64T16D815L

Altezza:	185cm					
		Parametro	Valore	Teoric. - ERS_93	U.M.	% Teor.
		TEMP	27	-	°C	-

Testo referto:


Se si clicca il pulsante [Salva] il testo referto verrà salvato. Cliccando [Chiudi] la refertazione non terminerà e, nel caso la si voglia terminare, è presente un pulsante [Termina refertazione].

Cliccando il pulsante [Salva e termina refertazione] invece richiederà la firma e la refertazione verrà salvata in pdf e non si potrà più modificare.

Dopo aver terminato la refertazione, premendo il pulsante “Visualizza referta” sarà disponibile un’anteprima del referto, dove si disporrà delle funzioni di stampa e scaricamento.

- **“ECG 12 derivazioni”**, nella schermata a destra si visualizza i dettagli dell’esame con tipo, data, ora, stato, in carico a, motivo esame, conclusioni diagnostiche, fattori di rischio, patologie, note, testo referto. In basso, vi sono quattro pulsanti: [Apri allegato], [Apri dettagli], [Referta], [Annulla refertazione], [Salva].

Cliccando [Apri allegato] si potranno visualizzare il grafico e il dettaglio degli esami. Cliccando [Apri dettagli], in seguito alla conferma di presa in carico, verranno visualizzati il grafico e il dettaglio dell’esame.

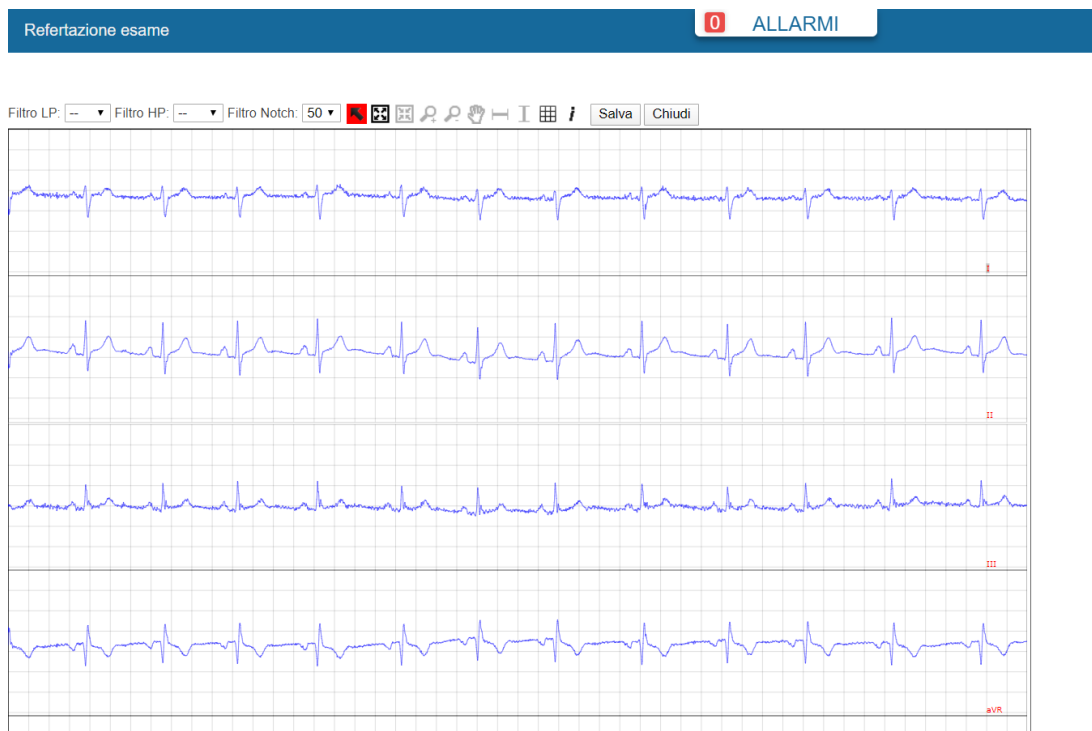


I due pulsanti accanto alla freccia rossa permettono di ingrandire o rimpicciolire la parte selezionata dal mouse.

Cliccando il pulsante [Referta], in seguito alla conferma di presa in carico, verrà visualizzata la refertazione dell’esame e di fianco lo spazio per impostare il testo del referto.

Tramite il pulsante “Template referti” è possibile scegliere un template precedentemente salvato, così da velocizzare l’operazione di refertazione. Viene visualizzata una maschera in cui sono presentati i template disponibili e cliccando “Seleziona” il testo del template viene riportato nel campo “Testo referto:” presente nella maschera di refertazione. Sempre dalla stessa maschera è possibile aggiungere, modificare e cancellare i

template. I template sono personali dell'operatore e distinti per tipologia di esame, e sono disponibili per tutte le tipologie di esame refertabile.

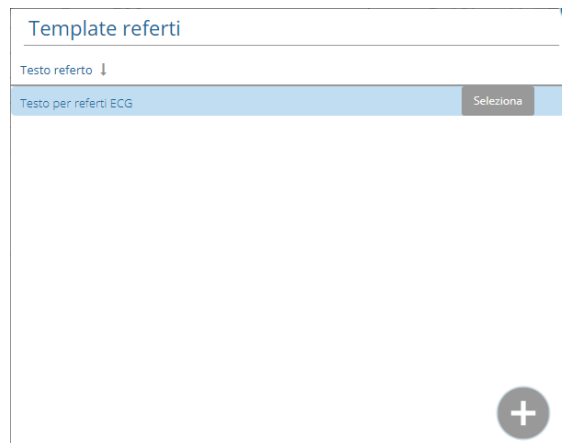

Se si clicca il pulsante [Salva] il testo referto verrà salvato.

Cliccando il pulsante [Chiudi], la refertazione non viene terminata; mentre, nel caso si volesse terminare, è presente un pulsante [Termina refertazione].

Cliccando il pulsante [Salva e termina refertazione] invece richiederà la firma, la refertazione verrà salvata in pdf e non si potrà più modificare.

Dopo aver terminato la refertazione, premendo il pulsante [Visualizza referta] sarà disponibile un'anteprima del referto, il quale disporrà delle funzioni di stampa e scaricamento.

Se l'esame è già stato refertato, cliccando [Annulla refertazione] è possibile riportare l'esame in stato da refertare e quindi disponibile per una nuova refertazione.

- **“Checkup”**, nella schermata a destra vengono visualizzati i dettagli dell'esame con tipo, data, ora, stato, sostituisci allegato, motivo esame e note


In basso, sono presenti quattro pulsanti: [Apri allegato], [Referta], [Salva] ed [Elimina].

Dettaglio esame

Riferimento esame: 65.8.20200122103003

Esame Checkup	
Nome:	Paziente Demo 1
Sesso:	F
Data di nascita:	21/06/1953
Data:	22/01/2020 10:32
Codice Fiscale:	DMEPNT53H61H501L

Misura	Valore	Unità di misura	Valore di riferimento
Pressione diastolica	94 *	mmHg	60 - 90
Pressione sistolica	150 *	mmHg	100 - 130
Pulsazioni	99 *	bpm	< 80
MAP	110	mmHg	
Peso	71.8	Kg	



Cliccando [Apri allegato], sarà possibile visualizzare il dettaglio degli esami.

Cliccando il pulsante [Referta], in seguito alla conferma di presa in carico, verrà

visualizzata la refertazione dell'esame e, di fianco, lo spazio per scrivere il testo del referto. Se si clicca il pulsante [Salva] il testo referto verrà salvato. Cliccando il pulsante [Chiudi], la refertazione non viene terminata; mentre, nel caso si volesse terminare, è presente un pulsante [Termina refertazione].

Cliccando il pulsante [Salva e termina refertazione] ci sono due possibilità:

- Il profilo dell'utente è abilitato alla firma "semplice" e quindi verrà richiesta la firma
- Il profilo dell'utente è abilitato alla firma certificata e ne è stata caricata una, verrà inviato un codice di sicurezza alla casella di posta elettronica del refertatore con cui proseguire con il referto dell'esame.

Dopo il passaggio di firma il documento di refertazione verrà salvato in pdf e non sarà più modificabile.

Al termine della refertazione, premendo il pulsante [Visualizza referto], sarà disponibile un'anteprima del referto stampabile e scaricabile.

Se si clicca il pulsante [Nuovo] nella schermata al centro a destra è presente una scheda da compilare per inserire un esame nuovo. Richiede i seguenti dati: tipo, data, ora, stato, documento allegato, quesito diagnostico, note. Alla fine della schermata si ha un pulsante che permette di salvare il nuovo esame.

Il referto di un esame può essere scaricato dal sito e consegnato al paziente o visualizzato direttamente online da quest'ultimo, se lo ha richiesto. In questo caso al termine della refertazione dell'esame il paziente riceve una e-mail che gli comunica le credenziali con le quali potersi connettere al portale per la visualizzazione del referto.

COMUNICAZIONE

Questionari

L'ultima voce del menù è Comunicazione e il primo sottomenù che comprende è quello dei Questionari.

The screenshot displays the CGM TELEMEDICINE web application interface. At the top, there are navigation tabs for 'ALLARMI' (4678), 'CHAT' (4), and 'ATTIVITÀ' (438). Below these are menu items: DASHBOARD, HOME, ASSISTITI, OPERATORE, REFERTI, and ADMIN. The main content area shows a patient profile for 'Patient Demo 2' with various fields for product, code, phone, email, birth date, and medical notes. A table below lists questionnaire entries, with the first entry being 'Questionario UNISALUTE v1' from 15/07/2022. On the left, a sidebar menu is open, showing 'COMUNICAZIONE' expanded to 'Questionari'. The bottom of the interface includes a 'CGM CARE MAP' logo and a footer with 'Copyright 2009 - 2021'.

DATA COMP.	FINE INS.	INVIATA	TIPOLOGIA	COMPILATO	COMPILATORE	REPARTO	NOTE
15/07/2022			Questionario UNISALUTE v1	<input type="checkbox"/>	OPERATORE	Cardiologia	

In questa pagina sono appunto presenti tutti i questionari compilati dal paziente, ognuno con la possibilità da parte dell'operatore di rivedere le risposte, la data di compilazione, la fine dell'inserimento dei dati (se presente), la tipologia di questionario, la conferma di compilazione o meno, il compilatore, il reparto e le note.

Cliccando su ogni riga è possibile, se il questionario non è stato compilato fino alla fine, modificare i dati del questionario selezionato, con la possibilità di vederlo, copiarlo e crearne un PDF. Se il questionario è stato compilato fino alla fine, non è modificabile. Cliccando sul pulsante + in basso a destra è possibile inserire un nuovo questionario.

Cliccando su Compila nel Dettaglio Questionario non compilato è possibile compilare i vari quesiti del questionario. Se è stato già compilato, il tasto sarà Vedi. Oltre a questo tasto sono presenti anche un Copia questionario e un PDF (se compilato) per esportare un documento.

È possibile programmare periodicamente la compilazione di questionari, sia pianificandoli direttamente nel calendario che inserendoli nel piano di monitoraggio e facendoli poi generare come accade per le altre attività.

The screenshot shows a patient's profile and a calendar view. The patient's name is "Paziente Demo 2". The calendar displays a grid of days from May 22 to June 3, 2021. A yellow highlight is on Wednesday, May 26, and a blue bar labeled "09:00 BADL" is on Thursday, May 27. The left sidebar contains menu items: DATI GENERALI, SCHEDA PAZIENTE, and ALLARMI.

Dettaglio attività

Attività Pianificazione Storico

Tipo Attività:

Questionario *:

Descrizione:

Orario *:

Stato:

Note:

Dettaglio attività

Attività Pianificazione Storico

Tipo pianificazione *:

Tipo frequenza *:

Ogni N mesi *:

Giorno del mese *:

Data inizio *:

Data fine:

Ora *:

Questionari App

QUESTIONARIO	DESCRIZIONE	DATA RICEZIONE	DATA COMPLETAMENTO	PUNTEGGIO	COMPLETATO
Hub_Survey_1	Salute rispetto ultimo controllo	15/04/2020 12:08:34	08/04/2020 09:56:41		<input checked="" type="checkbox"/>
Hub_Survey_1	Salute rispetto ultimo controllo	08/04/2020 17:27:20	06/04/2020 09:59:40		<input checked="" type="checkbox"/>
Hub_Survey_2	Stato di salute giornaliero				<input type="checkbox"/>
Hub_Survey_1	Salute rispetto ultimo controllo	08/04/2020 08:45:10			<input type="checkbox"/>
Hub_Survey_1	Salute rispetto ultimo controllo	06/04/2020 09:59:02			<input type="checkbox"/>

In questa pagina sono presenti tutti i questionari assegnati al paziente che può compilare direttamente dall'APP HP Mobile ognuno di essi ha la possibilità di vedere le risposte date cliccando sul singolo questionario

DOMANDE/RISPOSTE	
DOMANDA	RISPOSTA
Come giudica oggi il suo stato di salute?	Cattivo
Come si sente oggi rispetto all'ultimo controllo?	Invariato
Dall'ultimo controllo sono emersi nuovi problemi?	Sì, ho eseguito nuovi esami di controllo; Sì, sono andato in PS
Ha eventuali note o segnalazioni da fare?	testo

Chat

La pagina della chat permette di comunicare rapidamente con gli utenti che sono stati inseriti nella sezione Contatti Chat . È possibile inviare e ricevere sia messaggi che eventuali allegati.

The screenshot shows a web application interface. On the left is a dark blue sidebar menu with the following items: DATI GENERALI (expanded), Dati Anagrafici, Mappa, Prodotti, Kit, Arruolamento, SCHEDA PAZIENTE, ALLARMI, CARTELLA PERSONALE, COMUNICAZIONE (expanded), Questionari, Chat (highlighted), Formazione, and Contatti Chat. At the bottom of the sidebar is a 'Riduci menù' button. The main area displays three chat messages from 'cibo' with timestamps: 6/30/2021 12:13, 6/30/2021 12:14, and 6/30/2021 12:14. At the bottom of the chat area is a text input field, an 'INVA' button, and a paperclip icon for attachments.

Cliccando sull'icona della graffetta in basso a destra è possibile inviare un allegato come messaggio, sono supportati solo PDF e immagini e devono avere dimensione inferiore ai 5 MB.

Nel caso di un allegato PDF viene mostrata un'anteprima della prima pagina e sotto l'indicazione del numero di pagine del documento

Farmacista: Operatore Pill Dispenser
 Paziente: Compliance Demo 1
 Data riempimento: 08/04/2020 - 09:34

	06 APR LUN • A	07 APR MAR • B	08 APR MER • C	09 APR GIO • D	10 APR VEN • E	11 APR SAB • F	12 APR DOM • G
ORE 09:45			MAALOX 5 al di	MAALOX 5 al di	MAALOX 5 al di	MAALOX 5 al di	MAALOX 5 al di
ORE 09:45			ASPARAGINASE 1		ASPARAGINASE 1		ASPARAGINASE 1

1 Pagina/e

Messaggio INVA

Se invece si tratta di un'immagine ne viene mostrata l'anteprima.

Messaggio INVA

Una volta selezionato l'allegato o scritto il messaggio cliccare il tasto "Invia" per inviarlo.

I messaggi ricevuti vengono visualizzati con eventuale allegato, testo e la data.



Formazione

Si tratta di una pagina che comprende i documenti associati al paziente dall'operatore e anche gli altri documenti a disposizione dell'operatore, che potrebbe decidere di associare al paziente in seguito. Per associare un documento a un paziente, da questa pagina l'operatore può trascinare un documento presente nella colonna di sinistra (quelli associabili) nella colonna di destra (quelli associati a questo paziente specifico).

Premendo la x a destra della riga del documento associato nella colonna di destra, un operatore può decidere di disassociare tale documento dal paziente.

In ogni colonna è anche presente un filtro testuale per cercare i documenti desiderati.

CGM | TELEMEDICINE
Connected Patient Solutions

4679 ALLARMI | 4 CHAT | 438 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

Patient Demo 2

Prodotto: Codice: 00000004 Tel: +39475; +359585; Mail: supporto-hp@hes.it; Patologie: Iperensione essenziale non specificata; Ipercolesterolemia pura Note: note

Stato: Attivo Data nascita: 29/05/2014

ASSOCIABILI

PUBBLICATO IL	NOME	DESCRIZIONE	SCADENZA
09/04/2021	Prova privato	Prova privato	
28/07/2020	Bilancia Nome	Bilancia descrizione	

ASSOCIATI

VISIBILE DAL	NOME	DESCRIZIONE	SCADENZA
13/04/2021	TestUri	TestUri	
14/03/2021	caso	caso in formato descr...	31/07/2022
12/07/2020	Esempio test	TEST ESEMPIO	
10/04/2019	Nome Esempio Prova N...	Link Prova	
07/03/2019	WebMail	WebMail Roundcube	14/05/2022
	Prova	Prova	12/07/2021

Menu: CARTELLA PERSONALE (Anamnesi, Terapia, Accessi, Diario, Eventi, Segnalazione Eventi, Valutazione Infermista..., Esami), COMUNICAZIONE (Questionari, Questionari App, Chat, Formazione, Contatti Chat, Documenti Personali), COMPLIANCE. Riduci menù

Questo materiale sarà poi accessibile dall'APP nella sezione empowerment.

Contatti Chat

In questa pagina è possibile gestire i contatti dell'assistito aperto nel dettaglio paziente, i contatti possono essere di tipo "Operatore", "Infermiere", "Gruppo" o "Call Center"

CONTATTI

Cerca contatti

TIPO	NOMINATIVO
Infermiere	Admin HP3
Call Center	CLIP PARMA
Utente	Jimmy Connors
Infermiere	Operatore4 Test
Utente	Roger Federer
Gruppo	secondo gruppo

Menu: DATI GENERALI (Dati Anagrafici, Mappa, Prodotti, K4, Annuoamento), SCHEDA PAZIENTE, ALLARMI, CARTELLA PERSONALE, COMUNICAZIONE (Questionari, Questionari Hub, Formazione, Contatti Chat), COMPLIANCE. Riduci menù

Cliccando il pulsante "+" si apre la finestra di dettaglio dove è possibile inserire un nuovo contatto, in base alla tipologia viene mostrata la relativa lista di possibilità:

- Gruppo, viene mostrata la lista dei gruppi a cui può essere associato l'assistito
- Operatore/Infermiere, vengono mostrati gli operatori a cui può essere associato l'assistito

- Call Center, vengono mostrati i riferimenti a cui può essere associato l'assistito con il numero di telefono in modalità di sola lettura

Inserimento nuovo contatto

Tipo contatto:

Riferimento:

Numero di telefono:

Documenti Personali

In questa pagina sono presenti i documenti personali e i referti degli esami fatti. Se la colonna “Sorgente” è vuota il documento è stato inserito dal paziente, altrimenti c'è il nome dell'operatore che lo ha caricato.

The screenshot shows the CGM TELEMEDICINE interface for a patient named "Patient Demo 2". The top navigation bar includes "ALLARMI" (4679), "CHAT" (4), and "ATTIVITÀ" (438). The patient's details are as follows:

Prodotto:	Codice: 00000004	Tel: +39475; +359585;	Mail: supporto.hp@hes.it;	Patologie: Ipertensione essenziale non specificata; Ipercolesterolemia pura	Note note
	Stato: Attivo		Data nascita: 29/05/2014		

Below the details is a table of documents:

DATA	ALLEGATO	NOME	TIPOLOGIA	NOTE	SORGENTE	FEEDBACK LETTURA
18/11/2022 13:15:50		Videoconsulto	Referto		Admin HP3	
06/10/2020 09:43:36		Spirmetria	Referto		Operatore4 Test	

A sidebar on the left contains navigation options: CARTELLA PERSONALE (Anamnesi, Terapia, Accessi, Diario, Eventi, Segnalazione Eventi, Valutazione Infermierist...), COMUNICAZIONE (Questionari, Questionari App, Chat, Formazione, Contatti Chat), and DOCUMENTI PERSONALI. A plus sign (+) button is visible in the bottom right corner of the document list area.

Per inserire un nuovo documento occorre dare un click sul tasto +; si aprirà la seguente schermata:

The screenshot shows the "DETTAGLIO DOCUMENTO PERSONALE" form with the following fields:

- Nome documento *:
- Tipologia *:
- Note:
- Visibile al paziente:
- Allegato:

At the bottom right of the form are two buttons: "Salva" and "Chiudi".

Al termine del salvataggio e nel caso in cui si sia contrassegnato il flag “Visibile al paziente” quest’ultimo verrà avvertito via e-mail della presenza del nuovo documento.

COMPLIANCE

Impostazione Terapia

In questa pagina è possibile impostare le schedulazioni delle terapie che vanno assunte tramite vassoio monouso. Nel calendario è possibile selezionare la riga su cui si vuole aggiungere la terapia farmacologica e la relativa pianificazione e visualizzare i blister che hanno già una pianificazione grazie alla presenza del cerchietto blu sul loro angolo superiore destro.

The screenshot displays the 'COMPLIANCE' section of the CGM Telemedicine system. At the top, there's a navigation bar with '26303 ALLARMI', '0 CHAT', and '10 ATTIVITÀ'. Below this, a patient profile for 'Andrea Bianchi' is shown with various identifiers and contact information. The main area features a calendar from 19/06/2023 to 25/06/2023. The calendar grid consists of 5 rows (A1 to A5) and 7 columns (LUN-A to DOM-G). Each cell contains a letter and a number (e.g., A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1). A red box highlights the A2 cell. To the right of the calendar, a detailed view for 'A2' is shown, including a 'THERAPIA' section with '(H02AB10) CORTISONE +/- 37.5 mg O.P. +/- 12,85 1 cps di' and an 'AGGIUNGI TERAPIA' button. Below this, there are fields for 'ORA *', 'PIANIFICAZIONE *', 'FREQUENZA *', 'RICORRENZA (Giorni):', 'DATA INIZIO *', and 'DATA FINE'. At the bottom of the detailed view, there are 'ELIMINA' and 'SALVA' buttons.

Le prime 5 righe da A1 fino a A5 permettono di inserire e gestire le terapie dentro al vassoio; l'ultima riga, contraddistinta da 3 puntini (...), invece consente la gestione delle terapie fuori vassoio, ad esempio farmaci in forma liquida che non possono essere inseriti nel blister.

Nelle pianificazioni della terapia è possibile impostare l'orario, il tipo di pianificazione (una volta/ricorrente), la frequenza (Giornaliera/Settimanale/Mensile), la ricorrenza (ogni quanti giorni/settimane/mesi), una data di inizio e una di fine.

Sulla stessa riga di blister (ad esempio A2 ...G2) è possibile inserire terapie diverse a scadenza settimanale facendole partire da blister diversi: ad esempio cliccando sul blister A2 ed inserendo una terapia a ricorrenza settimanale selezionando i giorni dal lunedì al venerdì e poi, cliccando su F2, inserirne un'altra, sempre a ricorrenza settimanale ma selezionando i giorni di sabato e domenica.

Cliccando sul pulsante "Aggiungi terapia" si apre un dettaglio in cui scegliere il farmaco ATC/AIC, specificare la posologia ed inserire una descrizione relativa alla forma della pillola per un rapido riconoscimento da parte dell'utente:

MODIFICA TERAPIA - 27/06/2023 - B1

Principio attivo-ATC:	(R06AA02) DIFENDRAMINA +/- 0.2 g O.R (cloride) +/- 12.75012.83R
Nome commerciale-AIC:	
Posologia *:	1 cps dl
Descrizione farmaco:	pillola tonda di colore bianco

Salva Chiudi

Per i fuori vassoio la finestra del dettaglio prevede anche la pianificazione della terapia

MODIFICA TERAPIA - 26/06/2023 - A ...

Principio attivo-ATC:	
Nome commerciale-AIC:	(029666017) CORTISONE ACETATO
Posologia *:	1 cps dl
Descrizione farmaco:	bustina di colore blu

ORA *:	17:30
PIANIFICAZIONE *:	Ricorrente
FREQUENZA *:	Settimanale
RICORRENZA (Settimanale):	1
GIORNO *:	lunedì, mercoledì, venerdì
DATA INIZIO *:	19/06/2023
DATA FINE:	30/06/2023

Salva Chiudi

Vassoi Terapia

In questa pagina è possibile vedere una lista di vassoi creati, ogni vassoio fa riferimento ad una settimana di terapia. Per ciascun vassoio è possibile vedere il codice, la data, l'operatore che lo ha riempito (se riempito), la data di riempimento (se riempito), l'operatore che lo ha controllato (se controllato), la data di consegna (se consegnato), visualizzare la compliance e stampare il report.

CGM TELEMEDICINE
Connected Patient Solutions

20303 ALLARMI 0 CHAT 10 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

Andrea Bianchi

Prodotto: Telemonitoraggio; Service Demo 1
Codice: 9000573
Tel: 11223364654;
Mail: test@es.com;
Stato: Attivo
Data nascita: 01/01/1970
Patologie:
Note:

DISPENSER Cerca vassoio

CODICE	DATA VASSOID	TIPO	RIEMPTO DA	DATA RIEMPIMENTO	CONTROLLO	CONSEGNA	COMPLIANCE	PUNTEGGIO	REPORT
A000001084230619	19/06/2023 - 25/06/2023	Analogico	Administrator General	19/06/2023	CONTROLLA	CONSEGNA	APRI	100%	REPORT

+

⊖ Riduci menu

Cliccando sul pulsante “+” si apre una nuova finestra che mostra la prima settimana disponibile da cui iniziare a creare un vassoio con relativa lista di farmaci presenti in quella settimana e la loro quantità totale.

ELENCO FARMACI

dal 19/06/2023 al 25/06/2023

FARMACO	POSOLOGIA	DOSAGGIO	QUANTITÀ
(029666017) CORTISONE ACETATO	1 cps di	20 COMPRESSE 25 MG	3
(R06AA02) DIFENDRAMINA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75012,83R	1 cps di		7
(H02AB10) CORTISONE -/- 37.5 mg O.P -/- 12,85	1 cps di		8

INIZIA RIEMPIMENTO

Proseguendo cliccando su “Inizia Riempimento” si passa automaticamente allo step successivo di riempimento del vassoio, dove, grazie ad una procedura guidata, è possibile riempire ogni singolo blister inserendo codice a barre, lotto e scadenza dei farmaci presenti nelle terapie.

CGM | TELEMEDICINE 26303 ALLARMI 0 CHAT 10 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

Andrea Bianchi

Prodotto: Telemonitoraggio; Service Demo 1 Codice: 00000573 Tel: 112233654654; Mail: test@tes.com; Patologie: Note:

Stato: Attivo Data nascita: 01/01/1970

dal 19/06/2023 al 25/06/2023

19 GIU LUN · A	20 GIU MAR · B	21 GIU MER · C	22 GIU GIO · D	23 GIU VEN · E	24 GIU SAB · F	25 GIU DOM · G
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1
A2	B2	C2	D2	E2	F2	G2
A3	B3	C3	D3	E3	F3	G3
A4	B4	C4	D4	E4	F4	G4
A5	B5	C5	D5	E5	F5	G5

Riempì Blister A1 - 16:30

Step 1 di 15
Procedura di riempimento:
1) Identificare il blister indicato in figura
2) Verificare che il blister sia correttamente sanificato
3) Inserire al suo interno la seguente terapia:

1 cps di, DIFENDRAMINA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75012,83R

Codice a barre: 756947549478
Lotto: L05453
Scadenza: 19/03/2024
Terapia inserita:

AVANTI

Dopo aver flaggato “Terapia Inserita” si può andare avanti, per il riempimento dei blister successivi: i campi Codice a barre, Lotto e scadenza saranno precompilati sarà sufficiente flaggare “Terapia inserita” per poter proseguire. Dopo aver riempito tutti i blister il Pulsante “Avanti” verrà sostituito da “Report” **REPORT** cliccando il quale si completerà il riempimento del vassoio e si potrà stampare il report di lavorazione del vassoio.

Dati Generali		MDS
Farmacista	Administrator General	A0000001084230619
Paziente	Bianchi Andrea	
Data riempimento	19/06/2023 16:31	

	19 GIU LUN • A	20 GIU MAR • B	21 GIU MER • C	22 GIU GIO • D	23 GIU VEN • E	24 GIU SAB • F	25 GIU DOM • G
ORE 16:30	DIFENIDRAMI NA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75O12,83R 1 cps di	DIFENIDRAMI NA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75O12,83R 1 cps di	DIFENIDRAMI NA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75O12,83R 1 cps di	DIFENIDRA MINA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75O12,83 R 1 cps di	DIFENIDRAM INA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75O12,83 R 1 cps di	DIFENIDRA MINA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75O12,83 R 1 cps di	DIFENIDRAMI NA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75O12,83R 1 cps di
ORE 16:30	CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85 1 cps di	CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85 1 cps di	CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85 1 cps di	CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85 1 cps di	CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85 1 cps di		

	17:30 CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85 1 cps di Antiinfiammato rio		17:30 CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85 1 cps di Antiinfiammato rio		17:30 CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85 1 cps di Antiinfiammat orio		

Scatole utilizzate				
Farmaco	Barcode	Lotto	Scadenza	Totale
DIFENIDRAMINA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75O12,83R	756947549478	L05453	19/03/2024	7
CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85	8799354353	L34276	19/12/2023	5
CORTISONE ACETATO 20 COMPRESSE 25 MG	029666017			1
CORTISONE ACETATO 20 COMPRESSE 25 MG	029666017	L12287	20/09/2023	2
Totale:				15

Firma Operatore Preparazione

Firma Operatore Controllo

Il pulsante **REPORT** è presente anche nella schermata dell'elenco dei vassoi e consente, oltre alla stampa del report di controllo, anche quella dell'etichetta da utilizzare sul vassoio.

PAZIENTE: BIANCHI ANDREA
DAL 19/06/2023 AL 25/06/2023

Per qualsiasi problema o dubbio riguardante l'assunzione dei farmaci contattare:
H&S Telemonitoraggio
H&S Telemonitoraggio descrizione

Paziente		MDS	
Nome	Andrea	A0000001084230619	
Cognome	Bianchi		
Data di nascita	01/01/1970		
Codice fiscale	ANDBNC87D22G535F		
Data inizio	19/06/2023		
Data fine	25/06/2023	Data riempimento	19/06/2023 16:31
Farmaci In Blister	Descrizione Farmaco	Posologia	Quantità
(R06AA02) DIFENIDRAMINA -/- 0.2 g O,R (chloride) -/- 12,75O12,83R		1 cps di	7
(H02AB10) CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85		1 cps di	5
Farmaci Fuori Blister	Descrizione Farmaco	Posologia	Quantità
(029666017) CORTISONE ACETATO 20 COMPRESSE 25 MG	Antiinfiammatorio	1 cps di	3
(H02AB10) CORTISONE -/- 37.5 mg O,P -/- 12,85		1 cps di	3

L'etichetta riporta le indicazioni terapeutiche che il paziente deve seguire nella settimana di terapia a cui fa riferimento il blister.

Tornati alla lista di vassoi nella riga che indica quello appena riempito sarà possibile tramite il pulsante “Controlla” effettuare una verifica delle terapie inserite nel vassoio per intercettare eventuali errori di riempimento. Quindi l’operatore adibito al controllo del blister dovrà effettuare accesso in piattaforma con le credenziali ricevute e verificare che il vassoio sia stato correttamente riempito.

The screenshot displays the CGM Telemedicine interface. At the top, there are navigation tabs for ALLARMI (26303), CHAT (0), and ATTIVITÀ (10). The patient profile for Andrea Bianchi is shown, including contact information and a status of 'Attivo'. The main area features a calendar grid for the period from 19/06/2023 to 25/06/2023. The grid is organized by day and blister type (A-G). Blister A1 is highlighted with a red border. To the right, a detailed view for 'Controlla Blister A1 - 16:30' is open, showing medication details, barcode, lot number, and expiration date. At the bottom of this view are buttons for 'SALVA', 'ESCI', and 'CONFERMA'.

Per ogni blister saranno visualizzate le terapie inserite con la possibilità di cambiarle nel caso ci siano errori. Premendo il pulsante “Salva” vengono apportate eventuali modifiche al blister corrente, con il pulsante “Esci” si torna alla lista di vassoi e con “Conferma” si dichiara che il vassoio è valido finendo l’operazione di controllo.


Dopo aver terminato questa operazione sarà possibile effettuare la consegna del vassoio tramite l’apposito pulsante “Consegna” che aprirà un dettaglio dove sarà possibile indicare data e ora di consegna (Precompilati con data e ora attuali).

The screenshot shows the 'CONSEGNA VASSOIO' form. It has a clean, modern design with a light blue header. The form contains three main input areas: 'Data *:' with the value '19/06/2023', 'Ora *:' with the value '16:41', and a 'Note:' field with a large text area. At the bottom right, there are two buttons: 'Salva' and 'Chiudi'.

Misura Compliance

Finite le operazioni sul vassoio ed effettuata la consegna sarà possibile visualizzare e modificare la compliance tramite la sezione dedicata. I feedback sui blister nei vassoi monouso saranno di default in stato “preso” e per l’operatore sarà possibile modificare manualmente la compliance se il vassoio risulta non completamente vuoto al momento della riconsegna. Le icone di compliance saranno verdi se la terapia risulta correttamente assunta, gialle se risulta assunta in ritardo, rosso se non risulta assunta.

Grazie al grafico superiore si può vedere l’andamento nella settimana, mentre in quello inferiore si ha una percentuale degli stati tramite un grafico a torta.

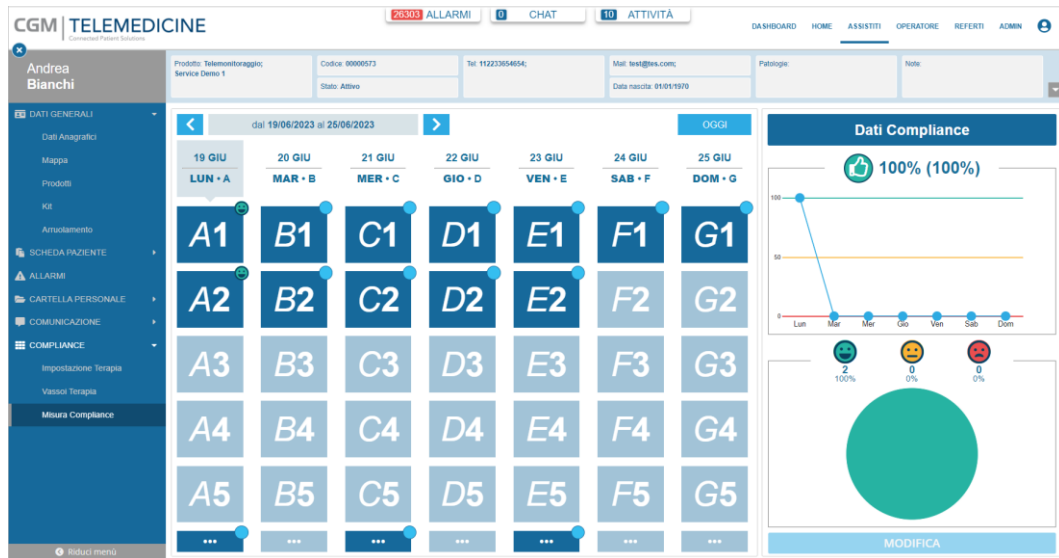

Cliccando su “Modifica” è possibile modificare lo stato del blister selezionato (verde se assunta, rosso se non assunta).

The modal dialog shows the selected blister 'C1' at the top. Below it, there are two circular icons: a green smiley face (representing 'assunta') and a red frowny face (representing 'non assunta'). At the bottom, there are two buttons: 'ANNULLA' and 'SALVA'.

Ogni attività legata alla Compliance terapeutica sarà visualizzata in calendario come “Pro-Memoria terapeutico” in modalità sola lettura.

Dettaglio attività ID 285520

- Attività
- Pianificazione
- Operatori
- Terapie
- Storico
- Reminder
- Note operative

Peziene:

Prodotto:

Tipo Attività:

Titolo *:

Descrizione:

Orario: Durata effettiva (min):

Stato:

Note:

Chiudi

Nella pagina “Cartella personale - Terapia” sarà visibile una seconda lista contenente tutte le terapie legate alla Compliance terapeutica.

The screenshot displays the 'CGM TELEMEDICINE' interface for Patient Demo 2. The top navigation bar includes buttons for 'ALLARMI' (4677), 'CHAT' (4), and 'ATTIVITÀ' (438), along with menu items for 'DASHBOARD', 'HOME', 'ASSISTITI', 'OPERATORE', 'REFERTI', and 'ADMIN'. The main content area is divided into two sections:

Terapia

DATA INIZIO	DATA FINE	TERAPIA	POSOLOGIA	ORARIO	NOTE
05/09/2022		NEBIVOLOLO	5.0		
02/05/2022		ARGIPRESSINA (VASOPRESSINA)	10		

Terapie Pill Dispenser

DATA INIZIO	DATA FINE	TERAPIA	POSOLOGIA	ORARIO	NOTE
03/10/2022	03/10/2022	TANTUM VERDE GOLA	1 volta al dì		Terapia Pill Dispenser
03/10/2022	31/10/2022	MOMENT	1 cp al dì	16.15	Terapia Pill Dispenser
03/10/2022	31/10/2022	MOMENT	1 cp al dì	16.15	Terapia Pill Dispenser
15/07/2022		PARACETAMOLO	1 day	16.0	Medication therapy
07/05/2021	03/10/2022	ASPIRINA	1 al dì	14.45	Terapia Pill Dispenser
17/03/2021	31/10/2022	RAVICTI	10	16.15	Terapia Pill Dispenser

Operatore

Allarmi

La maschera Allarmi si trova sotto il menù Operatore e consente all'operatore di verificare gli allarmi scattati per i propri pazienti. Ogni allarme è caratterizzato dalla Criticità che incide sul colore della seconda colonna e da altre informazioni importanti per verificare lo stato del paziente come Data e ora, Stato, Nome assistito, Titolo, Messaggio, Tipo allarme.

In alto a destra è presente un pulsante Aggiorna per aggiornare la pagina con gli allarmi più recenti.

È possibile visualizzare tutti gli allarmi o solamente quelli aperti. Sono presenti anche filtri di ordinamento su ogni colonna, filtri specifici per le colonne stato, titolo, messaggio, tipo allarme e un filtro testuale con la ricerca al centro delle pagine in alto.



ALLARMI

TUTTI

APERTI

Cerca allarmi



Ultima Sincronizzazione: 16:44:21

AGGIORNA

DATA/ORA	STATO	ASSISTITO	TIPO ASSISTITO	TIPO ALLARME	MESSAGGIO	MODIFICATO DA
14/11/2022 15:50:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
15/11/2022 15:50:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
16/11/2022 15:50:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
17/11/2022 15:50:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
18/11/2022 15:50:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
19/11/2022 15:50:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
20/11/2022 15:50:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
21/11/2022 15:50:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
22/11/2022 15:50:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
23/11/2022 15:50:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
24/11/2022 15:50:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
25/11/2022 15:50:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
26/11/2022 15:50:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
27/11/2022 15:50:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
28/11/2022 15:50:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
29/11/2022 15:50:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
30/11/2022 15:50:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
29/11/2022 12:35:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
27/11/2022 12:35:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	
28/11/2022 12:35:00	● Da gestire	PAZIENTE DEMO SUPPOR...		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser	

Cliccando su un allarme si apre la schermata con il dettaglio del paziente nella sezione allarmi.

La maschera Dettaglio Allarmi va ad analizzare l'allarme direttamente sulla corrispettiva pagina nel menù dell'assistito e consente all'operatore di visualizzare i dettagli dell'allarme, di cambiarne lo stato, inserire note e visualizzare lo storico degli allarmi di quello specifico utente.

DETTAGLIO ALLARME		DETTAGLIO ALLARME			DETTAGLIO ALLARME				
● ROSSI		● ROSI			● ROS				
Dettaglio	Misure	Storico	Dettaglio	Misure	Storico	Dettaglio	Misure	Storico	
ID AVVISO:	42761		Misurazione	Valore	Data	Modificato il	Modificato da	Stato	Note
TIPOLOGIA:	Clinico		Pressione Sistolica	130	08/03/2019	20/12/2018	Maddalena Vigg	Chiusura NO ricezion...	contattata di sta bene...
DATA:	18/12/2018		Pressione Sistolica	144	08/03/2019	19/12/2018	Maddalena Vigg	Nessuna risposta, ric...	tentato contatto per a...
TIPO MISURA:	Pressione Sistolica		Pressione Sistolica	123	05/03/2019				
VALORE LETTO:	156 (18/12/2018 13:05:51 (+01:00))		Pressione Sistolica	126	01/03/2019				
VALORE SOGLIA:	145		Pressione Sistolica	130	27/02/2019				
TITOLO:	Allarme da soglia Unisalute		Pressione Sistolica	140	21/02/2019				
MESSAGGIO:	Misura: Pressione Sistolica - Valore compreso tra 145 e 180		Pressione Sistolica	136	19/02/2019				
STATO:	Chiusura NO ricezione misura		Pressione Sistolica	149	16/02/2019				
NOTE:	contattata di sta bene. Non può procedere oltre nella conversazione.		Pressione Sistolica	143	15/02/2019				
			Pressione Sistolica	157	15/02/2019				
			Pressione Sistolica	148	15/02/2019				
			Pressione Sistolica	134	14/02/2019				
			Pressione Sistolica	139	14/02/2019				
			Pressione Sistolica	155	14/02/2019				
			Pressione Sistolica	129	12/02/2019				
			Pressione Sistolica	132	08/03/2019				

Esporta Excel/Esporta PDF

Tramite i pulsanti Esporta in Excel ed Esporta in PDF nel fondo della pagina, è possibile scaricare un file contenente la griglia visualizzata nell'istante del click sul pulsante. Nel documento sarà visualizzato un elenco con gli eventuali filtri applicati sulle colonne e nella ricerca globale.

ALLARMI							TUTTI	APERTI	Cerca allarmi	Ultima Sincronizzazione: 15:22:06
DATA/ORA	STATO	ASSISTITO	TIPO ASSISTITO	TIPO ALLARME	MESSAGGIO	Modificato da				
21/01/2020 14:41:00	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misura: Pulsazioni - Valore maggiore di 99	Case Manager Demo				
22/01/2020 09:40:01	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misura: Pressione Diastolica - Valore maggiore di 100					
22/01/2020 09:42:00	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misura: Pulsazioni - Valore maggiore di 99					
29/01/2020 20:09:01	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misura: Pulsazioni - Valore maggiore di 99					
29/01/2020 20:26:00	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misura: Pulsazioni - Valore maggiore di 99					
29/01/2020 20:36:01	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misura: Pulsazioni - Valore maggiore di 99					
29/01/2020 21:21:06	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misura: Pulsazioni - Valore maggiore di 99					
29/01/2020 21:22:01	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misura: Pulsazioni - Valore maggiore di 99					
29/01/2020 21:28:01	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misura: Pulsazioni - Valore maggiore di 99					
30/01/2020 07:54:01	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misura: Pulsazioni - Valore maggiore di 99					
30/01/2020 08:05:01	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misura: Pulsazioni - Valore maggiore di 99					
31/01/2020 10:06:00	Da gestire	Compliance Demo 1		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser					
04/02/2020 18:14:00	Da gestire	Compliance Demo 1		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser					
05/02/2020 08:20:00	Da gestire	Compliance Demo 1		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser					
05/02/2020 08:20:00	Da gestire	Compliance Demo 1		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser					
05/02/2020 09:53:00	Da gestire	Compliance Demo 1		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser					
05/02/2020 11:05:00	Da gestire	Compliance Demo 1		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser					
05/02/2020 12:07:00	Da gestire	V A	Telemonitoring	Clinico	Misura: Pulsazioni - Valore maggiore di 99					
05/02/2020 18:14:00	Da gestire	Compliance Demo 1		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser					
06/02/2020 08:20:00	Da gestire	Compliance Demo 1		Attività non eseguita	Il paziente non ha assunto il farmaco dal proprio pill dispenser					

« < | Pagina 1 di 31 | > » | Esporta in Excel | Esporta in PDF | Mostrati 1 - 20 di 609



Esporta in Excel



Esporta in PDF

Agenda

Synchronizing Healthcare




CompuGroup
Medical

La pagina sotto riportata è l'agenda dell'operatore e si trova sotto il menù Operatore. Ogni operatore ha una propria agenda, dove ogni casella indica un giorno del mese o della settimana, dipende dalla visualizzazione scelta. La visualizzazione dell'agenda può essere giornaliera, settimanale o mensile. Ad ogni modifica del mese l'agenda si aggiorna automaticamente.

L'agenda dell'operatore rappresenta lo scadenziario delle proprie attività, dove è possibile riscontrare:

- Appuntamenti propri
- Appuntamenti sociosanitari dei propri pazienti dove l'operatore è coinvolto

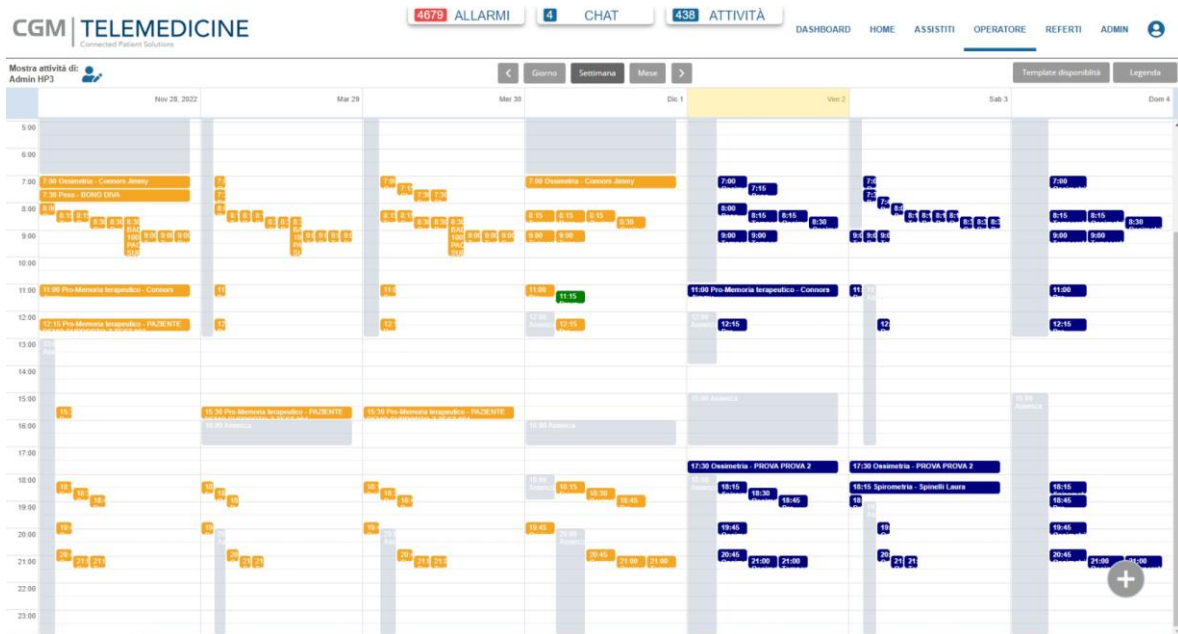

È possibile visualizzare la legenda dei colori utilizzati nell'agenda con il tasto in alto a destra.

Legenda	
●	Da eseguire
●	Eseguita
●	Annullata
●	Scaduta
●	In sospeso
●	Non eseguita
●	Da riprogrammare
●	Preso in carico
●	Eseguita con difformità
●	Annullata in pagamento
●	In triage
●	In attesa

Agenda – Nuova attività

È possibile inserire una nuova attività in agenda con il pulsante + in basso a destra. Nella schermata sono presenti le aree “Attività” e “Pianificazione” con i soliti parametri, oltre a “Reminder APP”.

Cliccando su un evento in agenda, si passa direttamente alla pagina Calendario sotto Scheda Paziente nel menù dell’assistito, e viene aperto lo stesso pop-up a centro pagina con la possibilità di rivedere ed eventualmente modificare i dati dell’evento.

The screenshots show the following details for activity ID 121023:

- Attività Tab:**
 - Paziente: Digita nome e/o cognome per cercare...
 - Tipo Attività: Appuntamento personale
 - Titolo *: Farmacia
 - Descrizione: Acquisto farmaci
 - Orario: 17:00 (D Durata effettiva (min):)
 - Stato: Da eseguire
 - Invia su Hub:
 - Notifica solo la prima:
 - Note:
- Pianificazione Tab:**
 - Tipo pianificazione *: Una volta
 - Data *: 02/12/2022 (Ora *: 17:00)
 - Fine *: 02/12/2022 (Ora *: 17:30)
- Reminder APP Tab:**
 - Reminder attività non eseguite
 - Reminder attività non eseguite:
 - Ogni quante ore *: 24
 - Fino a quando (ore) *: 72
- Storico Tab:**

DATA INIZIO	ORA INIZIO	TL...	D...	Operatore	STATO	N...	DATA MODIFICA
02/12/2022	17:00	Fa...	Ac...	Admin HP3	Da eseguire		02/12/2022 16:52

The 'Note operative' tab shows a table with columns: Data, Titolo, Sottotitolo, Note, and Uten... A plus sign (+) button is visible at the bottom center of the table area.

È possibile aggiungere note operative sull’attività tramite il tasto +

La pianificazione dell'attività può essere una volta o ricorrente e la ricorrenza può essere giornaliera, settimanale o mensile.



Attività

Sotto il menù Operatore è presente anche la schermata Attività, che visualizza le attività di tutti i pazienti in cura dall'operatore. Ogni attività ha la data di inizio, il nome del paziente, il tipo di attività, il titolo, la descrizione, le note e lo stato.

Sono presenti filtri di ordinamento e specifici su ogni colonna e un filtro testuale con la ricerca al centro della pagina in alto.

DATA INIZIO	PAZIENTE	TIPO ATTIVITÀ	TITOLO	DESCRIZIONE	ASSEGNATO A	NOTE	STATO	MODIFICATO DA
30/11/2022 16:45	Quinto Patient...	Rilevazione ml...	ECG HR		Operatore Burlò		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 16:00	Demo 2 Patient	Pro-Memoria t...	Therapeutic reminder	1	Operatore4 Test, Operatore No Last Change Test		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 16:00	Quinto Patient...	Rilevazione ml...	Pressione arteriosa		Operatore Burlò		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 16:00	Diabete+ LTC ...	Pro-Memoria t...	Pro-Memoria terapeutico	100	Samuele Losi		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 15:45	Quinto Patient...	Rilevazione ml...	Glucosio		Operatore Burlò		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 15:30	Nascita Prova ...	Rilevazione ml...	Glucosio		Operatore Burlò		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 15:30	PAZIENTE DE...	Pro-Memoria t...	Pro-Memoria terapeutico	1	Admin HP3		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 13:15	Nascita Prova ...	Formazione	Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova	Formazione da template			Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 13:00	Nascita Prova ...	Formazione	Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova	Formazione da template			Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 12:45	Nascita Prova ...	Formazione	Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova	Formazione da template			Scaduta	Processo automatico

Cliccando su un'attività è possibile rivederne i dettagli e modificarli allo stesso modo dell'Agenda.

Dettaglio attività ID 109914

Attività | Pianificazione | Storia | Reminder APP | Note operative

Nome:

Prodotto:

Tip. attività:

Tip. misura:

Sezione:

Orario: Durata effettiva (min):

Stato:

Nota:

Dettaglio attività ID 109914

Attività | Pianificazione | Storia | Reminder APP | Note operative

Tip. pianificazione:

Tip. frequenza:

Ogni N settimane:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Data inizio:

Data fine:

Orario:

Durata:

Dettaglio attività ID 109914

Attività | Pianificazione | Storia | Reminder APP | Note operative

DATA INIZIO	ORA INIZIO	DESCRIZIONE	OPERATORE	STATO	DATA MODIFICA
30/11/2022	16:00	Processo automatico	CGM	Scaduta	01/12/2022 09:10
30/11/2022	16:00	Processo automatico	CGM	Scaduta	30/09/2022 10:01


Dettaglio attività ID 109914

Attività | Pianificazione | Storia | Reminder APP | Note operative

Reminder app di non essere

Reminder attività:

Note operative:

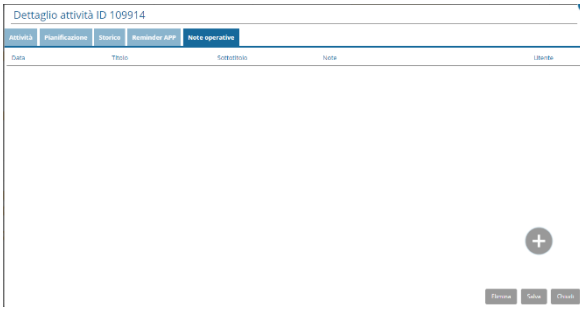

Esporta Excel/Esporta PDF

Tramite i pulsanti Esporta in Excel ed Esporta in PDF nel fondo della pagina, è possibile scaricare un file contenente la griglia visualizzata nell'istante del click sul pulsante. Nel documento sarà visualizzato un elenco con gli eventuali filtri applicati sulle colonne.

CGM | TELEMEDICINE 4079 ALLARMI 4 CHAT 439 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

ATTIVITÀ

Cerca attività

02/11/2022 02/12/2022 Aggiorna

DATA INIZIO	PAZIENTE	TIPO ATTIVITÀ	TITOLO	DESCRIZIONE	ASSEGNATO A	NOTE	STATO	MODIFICATO DA
30/11/2022 16:45	Quinto Pazient...	Rilevazione mi...	ECG HI		Operatore Burlo		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 16:00	Demo 2 Patient	Pro-Memoria t...	Therapeutic reminder	1	Operatore4 Test, Operatore No Last Change Test		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 16:00	Quinto Pazient...	Rilevazione mi...	Pressione arteriosa		Operatore Burlo		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 16:00	Diabete+ LTC ...	Pro-Memoria t...	Pro-Memoria terapeutico	100	Samuele Losi		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 15:45	Quinto Pazient...	Rilevazione mi...	Glucosio		Operatore Burlo		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 15:30	Nascita Prova ...	Rilevazione mi...	Glucosio		Operatore Burlo		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 15:30	PAZIENTE DE...	Pro-Memoria t...	Pro-Memoria terapeutico	1	Admin HP3		Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 13:15	Nascita Prova ...	Formazione	Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova	Formazione da template			Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 13:00	Nascita Prova ...	Formazione	Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova	Formazione da template			Scaduta	Processo automatico
30/11/2022 12:45	Nascita Prova ...	Formazione	Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova Nome Esempio Prova	Formazione da template			Scaduta	Processo automatico

Esporta in Excel Esporta PDF

Modello 121 - 140 © 1887



Esporta in Excel



Esporta in PDF

Chat

La pagina della chat permette di comunicare rapidamente con i pazienti provvisti di app o di accesso al portale web, con altri operatori o con gruppi.

Cliccando sull'icona della graffetta in basso a destra è possibile inviare un allegato come messaggio, sono supportati solo PDF e immagini e devono avere dimensione inferiore ai 5 MB.

Nel caso di un allegato PDF viene mostrata un'anteprima della prima pagina e sotto l'indicazione del numero di pagine del documento

	06 APR LUN • A	07 APR MAR • B	08 APR MER • C	09 APR GIO • D	10 APR VEN • E	11 APR SAB • F	12 APR DOM • G
ORE 09:45			MAALOX 5 al di	MAALOX 5 al di	MAALOX 5 al di	MAALOX 5 al di	MAALOX 5 al di
ORE 09:45			ASPARAGINASE 1		ASPARAGINASE 1		ASPARAGINASE 1

Nel caso di un'immagine viene mostrata l'anteprima di essa.



Una volta selezionato l'allegato o scritto il messaggio cliccare il tasto "Invia" per inviarlo.

I messaggi ricevuti vengono visualizzati con eventuale allegato, testo e la data.

Formazione

La pagina Formazione mostra tutti i file di formazione che l'operatore può condividere con i suoi pazienti. Questi file possono essere documenti, video o link (indicato dall'icona a sinistra).

Tra i dati associati ad ogni file vi sono le date di pubblicazione e di scadenza, nome e descrizione, due flag che indicano se il documento sia stato pubblicato e se venga messo a disposizione dei pazienti automaticamente o su richiesta, il flag che contrassegna il documento come privato, cioè visibile solo all'operatore che l'ha caricato, l'eventuale riferimento alle patologie trattate, l'indicazione della sezione alla quale il documento appartiene e l'ordine di visualizzazione del documento all'interno di una sezione.

CGM | TELEMEDICINE Connected Patient Solutions 4679 ALLARMI 4 CHAT 439 ATTIVITÀ DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

FORMAZIONE

Cerca formazione

PUBBLICATO IL ↓	SCADENZA	NOME	DESCRIZIONE	PUBBLICATO	INSERIMENTO AUTOM...	PRIVATO	PATOLOGIE	SEZIONE	ORDINAMENTO
14/09/2021		Corriere	test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Informazioni generali	10
26/05/2021		Nome Esempio Prova No...	Link Prova	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Documenti cardiologici	2
14/05/2021	31/05/2022	Prova Burlo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Prova Burlo	1
14/04/2021		TestUrl	TestUrl	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Test	4
09/04/2021		Prova privato	Prova privato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Test	3
28/07/2020		Bilancia Nome	Bilancia descrizione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Prova1	1
13/07/2020		Esempio test	TEST ESEMPIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Test	2
14/03/2019	01/08/2020	Nome	Descrizione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sadismo sessuale		0
14/03/2019	31/07/2022	caso	caso in formato descri...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Documenti cardiologici	2
07/03/2019	14/05/2022	WebMail	WebMail Roundcube	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Shigella dysenteriae, Kwashiorkor	Test	1
06/03/2019	08/03/2019	YouTube	Pagina iniziale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sadismo sessuale		0
06/03/2019	08/03/2019	FontAwsome	Pagina documento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0
06/03/2019	14/03/2022	Ext.Net	Drag&Drop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Documento it	1
	01/08/2020	Noma	Descrizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Visita di controllo succas...	Documenti cardiologici	1
		asdasasd	asdasdas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			10
		dasdasdasdasasd	dasdasdasdsvdfdsdfs...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			12
	17/06/2021	Prova_1	Prova_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Documento it	1
		Repubblica	test	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Informazioni generali	11
		Il Fatto	test	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Informazioni generali	12
		Gazetta		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Informazioni generali	14

« < | Pagina 1 di 2 | > » Mostrati 1 - 20 di 21

Cliccando su un file di formazione è possibile visualizzare i suoi dettagli, modificarli o eliminare il file.

Cliccando il + (in basso a destra) sulla pagina principale è possibile inserire un nuovo file di formazione, visualizzando solamente la schermata di Dettaglio Formazione.

Con il + nelle pagine di Patologia e Visibilità è possibile aggiungere una patologia o modificare la visibilità al documento di formazione, questa configurazione permetterà di selezionare il contenuto specifico nella scheda paziente sotto Comunicazione>Formazione.

News

La maschera News offre la possibilità agli operatori di poter visionare, modificare ed eliminare le news cliccando su di essa.

Ogni news è caratterizzata da:

- Data inizio
- Data fine
- Testo
- Creato da
- Modificato da

CGM | **TELEMEDICINE**
Connected Patient Solutions

4679 ALLARMI | 4 CHAT | 439 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

NEWS

Cerca news

DATA INIZIO	DATA FINE	TESTO	CREATO DA	MODIFICATO DA	VISIBILITÀ
22/09/2022		News di prova	Admin HP3	Admin HP3	Visibile a tutti
08/09/2021	10/09/2021	News Operatore Burlo	Operatore Burlo	Operatore Burlo	Condiviso tra organizzazioni
01/09/2021	04/09/2021	News Operatore	Operatore4 Test	Operatore4 Test	Condiviso tra organizzazioni
27/05/2021	28/05/2021	Test1	Admin HP3	Admin HP3	Visibile a tutti
01/03/2019	09/09/2021	Test_2	Operatore4 Test	Admin HP3	Visibile a tutti
01/03/2019	09/09/2021	Test_3	Operatore4 Test	Admin HP3	Visibile a tutti
01/03/2019	09/09/2021	Test_4	Operatore4 Test	Admin HP3	Visibile a tutti
16/01/2019	09/09/2021	Test_1	Operatore4 Test	Admin HP3	Visibile a tutti

Mostrati 1 - 8 di 8

CGM CARE MAP Copyright

Il testo è quello che appare nel banner a scorrimento per il periodo di validità definito nei campi data Inizio e data Fine. La visibilità di ogni news inserita è definita dall'operatore che lo ha generata.

Ogni news può avere diversi ambiti di visibilità in base al tipo di news/comunicazione, per operatori, per distretto, per azienda ecc.

Con il + in basso a destra è possibile inserire una nuova news.

DETTAGLIO NEWS

DETTAGLIO

Testo * News di prova

Data inizio * 22/09/2022

Data fine *

Visibilità * visibile a tutti

Salva Elimina Chiudi

Documenti

La schermata Documenti contiene i vari documenti associati all'operatore. Ogni documento ha una data, un nome, una descrizione e una visibilità ed è possibile allegare un file o inserire un link.

CGM | TELEMEDICINE
Connected Patient Solutions

4679 ALLARMI | 4 CHAT | 439 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

DOCUMENTI

DATA DOCUMENTO	NOME	DESCRIZIONE	VISIBILITÀ
19/07/2022	htrtrt	rthjtrrt	Condiviso
11/03/2022	Prova Referto	Prova Referto	Personale
24/02/2022	Test1 1	Test1 1	Personale
23/02/2022	prova insert	descr	Condiviso
20/01/2022	Test	Test-Tk	Visibile a tutti
21/01/2022	ProvaLit1	ProvaLit1	Visibile a tutti
05/08/2021	Test0508	Prova	Condiviso
04/08/2021	Prova visibile a tutti	Prova visibile a tutti	Visibile a tutti
04/08/2021	Prova condiviso fratello	Prova condiviso fratello	Condiviso
04/08/2021	Prova condiviso figlio	Prova condiviso figlio	Condiviso
04/08/2021	Prova condiviso padre	Prova condiviso padre	Condiviso
01/07/2020	test	desc	Visibile a tutti
03/10/2014	aaaa	aaaa	Condiviso
02/09/2014	Prova Personale	asd	Condiviso

Mostrati 1 - 14 di 14

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2022 H&M

Cliccando su ogni documento è possibile vedere i dettagli, modificarli o eliminare il documento.

Cliccando il + in basso a destra si apre lo stesso pop-up ed è possibile inserire un nuovo documento.

DETTAGLIO DOCUMENTO

DETTAGLIO

Nome *: Brochure APP Paziente

Descrizione *: Scheda cartacea inviata al paziente in merito all'uso dello smartphone



Visibilità *: Visibile a tutti

Link:

Documento: Scegli...


Salva Elimina Chiudi

Selezionando il box 'Link' è possibile inserire un link web (Url) invece di un documento, in questo caso l'icona del documento nella lista dei documenti apparirà con un differente formato per indicarne la tipologia:

14/12/2018	 Brochure Bilancia	Scheda cartacea inviata al paziente in merito all'uso della bilancia	Visibile a tutti
14/12/2018	 Link APP Paziente	Scheda cartacea inviata al paziente in merito all'uso dello smartphone	Visibile a tutti

Report

La schermata Report visualizza l'elenco dei report generati dal sistema e disponibili all'utente.



TELEMEDICINE
Connected Patient Solutions





















4679 ALLARMI

4 CHAT

439 ATTIVITÀ

[DASHBOARD](#)
[HOME](#)
[ASSISTITI](#)
[OPERATORE](#)
[REFERTI](#)
[ADMIN](#)

REPORT

DATA ↓	TIPO REPORT	NOME	DESCRIZIONE	VISUALIZZATO
01/12/2022	 Riconciliazione eventi avversi	Riconciliazione eventi avversi - Prodotto 1 - 01/12/2022		<input type="checkbox"/>
01/12/2022	 Riconciliazione eventi avversi	Riconciliazione eventi avversi - Prodotto 2 - 01/12/2022		<input type="checkbox"/>
01/12/2022	 Riconciliazione eventi avversi	Riconciliazione eventi avversi - Test Massimali 1 - 01/12/2022		<input type="checkbox"/>
01/12/2022	 Riconciliazione eventi avversi	Riconciliazione eventi avversi - Prodotto 5 - 01/12/2022		<input type="checkbox"/>
01/12/2022	 Cosma report mensile	Cosma report mensile - 01/12/2022		<input type="checkbox"/>
01/12/2022	 ECG Giomalleri nell'arco dell'associazione	ECG Giomalleri nell'arco temporale dell'associazione - Farmacia ...		<input type="checkbox"/>
28/11/2022	 Stato telemonitoraggio pazienti	Stato telemonitoraggio pazienti - Distretto Montale - 28-11-2022		<input type="checkbox"/>
24/11/2022	 ECG Giomalleri nell'arco dell'associazione	ECG Giomalleri nell'arco temporale dell'associazione - Farmacia ...		<input type="checkbox"/>
21/11/2022	 Stato telemonitoraggio pazienti	Stato telemonitoraggio pazienti - Distretto Montale - 21-11-2022		<input type="checkbox"/>
17/11/2022	 ECG Giomalleri nell'arco dell'associazione	ECG Giomalleri nell'arco temporale dell'associazione - Farmacia ...		<input type="checkbox"/>
14/11/2022	 Stato telemonitoraggio pazienti	Stato telemonitoraggio pazienti - Distretto Montale - 14-11-2022		<input type="checkbox"/>
10/11/2022	 ECG Giomalleri nell'arco dell'associazione	ECG Giomalleri nell'arco temporale dell'associazione - Farmacia ...		<input type="checkbox"/>
07/11/2022	 Stato telemonitoraggio pazienti	Stato telemonitoraggio pazienti - Distretto Montale - 07-11-2022		<input type="checkbox"/>
03/11/2022	 ECG Giomalleri nell'arco dell'associazione	ECG Giomalleri nell'arco temporale dell'associazione - Farmacia ...		<input type="checkbox"/>
01/11/2022	 Riconciliazione eventi avversi	Riconciliazione eventi avversi - Prodotto 1 - 01/11/2022		<input type="checkbox"/>
01/11/2022	 Riconciliazione eventi avversi	Riconciliazione eventi avversi - Prodotto 2 - 01/11/2022		<input type="checkbox"/>
01/11/2022	 Riconciliazione eventi avversi	Riconciliazione eventi avversi - Test Massimali 1 - 01/11/2022		<input type="checkbox"/>
01/11/2022	 Cosma report mensile	Cosma report mensile - 01/11/2022		<input type="checkbox"/>
31/10/2022	 Stato telemonitoraggio pazienti	Stato telemonitoraggio pazienti - Distretto Montale - 31-10-2022		<input type="checkbox"/>
27/10/2022	 ECG Giomalleri nell'arco dell'associazione	ECG Giomalleri nell'arco temporale dell'associazione - Farmacia ...		<input type="checkbox"/>


<< < | Pagina 1 di 12 | >> >> | 🔄

Mostrati 1 - 20 di 229

Questionari

In questa pagina è possibile visualizzare le statistiche relative alle risposte ricevute alle domande di un questionario e scaricarle in formato Excel.

La parte superiore della pagina consente di selezionare un questionario e di effettuare poi altri filtri sulle risposte in base al periodo di compilazione del questionario ed al sesso ed all'età dei compilatori. Una volta premuto il pulsante Aggiorna vengono visualizzate le statistiche richieste.

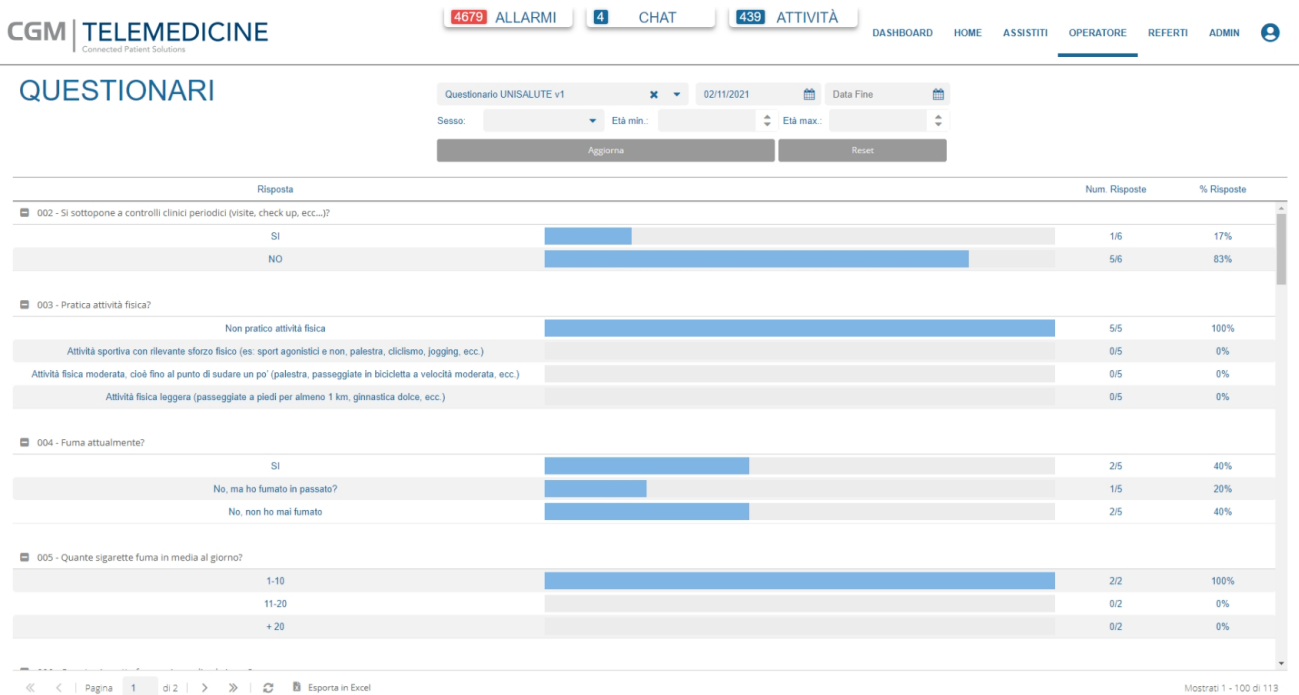

Cliccando su una risposta viene visualizzato il dettaglio delle risposte, con l'elenco degli assistiti che hanno risposto e per ciascun assistito è possibile visualizzare le singole risposte premendo su "VISUALIZZA RISPOSTE QUESTIONARIO", che apre la maschera di dettaglio relativa al questionario:

DETTAGLIO RISPOSTE		
ASSISTITO	DATA RISPOSTE	DETTAGLIO
Paziente Demo 9	17/01/2019	VISUALIZZA RISPOSTE QUESTIONARIO
Paziente Demo 11	09/02/2019	VISUALIZZA RISPOSTE QUESTIONARIO
Paziente Demo 12	16/02/2019	VISUALIZZA RISPOSTE QUESTIONARIO
Paziente Demo 13	29/12/2018	VISUALIZZA RISPOSTE QUESTIONARIO

The screenshot displays the 'Paziente Demo 9' interface. At the top, there are navigation tabs for 'CHAT' and 'ATTIVITÀ'. The main header includes 'CGM TELEMEDICINA' and a navigation menu with options like 'DASHBOARD', 'HOME', 'ASSISTITI', 'OPERATORE', 'REFERTI', and 'ADMIN'. The patient information section shows 'Paziente Demo 9' with fields for 'Prodotto', 'Codice', 'Tel.', 'Mail', 'Data nascita', 'Patologia', and 'Note'. A sidebar on the left contains a menu with categories: 'DATI GENERALI', 'SCHEDE PAZIENTE', 'ALLARMI', 'CARTELLA PERSONALE', 'Valutazione infermieristica', 'COMUNICAZIONE', and 'COMPLIANCE'. The main content area displays a 'Questionario sullo stato di salute' with several questions (Q2-Q7) and radio button options for different response levels.

Statistiche

In questa pagina è possibile generare un report contenente informazioni sui pazienti e scaricarlo in formato Excel.

Nella parte superiore della pagina è possibile selezionare uno tra i tipi di report disponibili: Dettaglio stato assistiti, dettaglio allarmi e dettaglio attività. Nella parte inferiore della pagina è possibile poi effettuare dei filtri in modo da selezionare solo un sottoinsieme delle informazioni disponibili, in base al nome e cognome del paziente, dell'organizzazione di appartenenza, prodotto e tipologia, oltre che dell'intervallo temporale.

Una volta premuto il pulsante 'Genera Excel' viene prodotto il report ed effettuato il download.

The screenshot shows the 'STATISTICHE' (Statistics) page. At the top, there are navigation tabs for 'CHAT' and 'ATTIVITÀ'. The main header includes 'CGM TELEMEDICINA' and a navigation menu with options like 'DASHBOARD', 'HOME', 'ASSISTITI', 'OPERATORE', 'REFERTI', and 'ADMIN'. The page title is 'STATISTICHE'. Below the title, there is a dropdown menu for 'Dettaglio stato assistiti'. A 'FILTRI' (Filters) section contains several input fields: 'Paziente' (with a search prompt), 'Organizzazione', 'Prodotto' (set to 'Telemonitoraggio'), 'Tipo assistito', 'Data inizio' (set to '07/05/2022'), and 'Data fine' (set to '06/05/2022'). At the bottom of the page, there is a 'Genera Excel' button.

Referti

La pagina REFERTI contiene un elenco di esami descritti da data esame, assistito, tipo, stato, data refezione, in carico a, note, farmacia, telefono farmacia, per una visione più rapida della lista essa è filtrata in automatico per gli esami in stato NON refertato, è possibile vederli tutti togliendo l'apposito filtro sulla colonna "Stato".

REFERTI

Cerca in referti



DATA ESAME	CODICE	ASSISTITO	TIPO	STATO	DATA REFERTAZIONE	IN CARICO A	NOTE	FARMACIA	TELEFONO FARMACIA
21/11/2022 13:02:54	00005508	ATTRIB ERRATA 001 PAZIE...	Spirometria	Non refertato				Test assegnazione esami	
17/11/2022 15:48:52	00000004	Patient Demo 2	Ritiro holter cardiaco	Non refertato				ASL Piacenza	12136548
17/11/2022 15:33:25	00000004	Patient Demo 2	Holter ECG	Non refertato				ASL Piacenza	12136548
17/11/2022 15:29:03	00000004	Patient Demo 2	Ritiro holter cardiaco	Non refertato				ASL Piacenza	12136548
17/11/2022 15:24:36	00002337	Andrea Bianchi	ECG 12 derivazioni	Non refertato				ASL Piacenza	12136548
17/11/2022 15:02:00	00002337	Andrea Bianchi	ECG 12 derivazioni	Non refertato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 17:03:55	00002337	Andrea Bianchi	Checkup	Non refertato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 16:59:54	00000005	Jimmy Connors	Ritiro holter cardiaco	Non refertato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 16:59:41	00000005	Jimmy Connors	Ritiro holter cardiaco	Non refertato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 16:37:40	00004491	Z-TEST 007 PAZIENTE DE...	Ritiro holter cardiaco	Non refertato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 16:14:54	00002337	Andrea Bianchi	Bilancia diagnostica	Non refertato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 15:49:52	00000005	Jimmy Connors	Ritiro holter cardiaco	Non refertato				Artù	+123456789
15/11/2022 15:46:56	00000005	Jimmy Connors	Ritiro holter cardiaco	Non refertato				Artù	+123456789
15/11/2022 15:46:15	00000005	Jimmy Connors	Ritiro holter cardiaco	Non refertato				Artù	+123456789
15/11/2022 15:44:55	00000004	Patient Demo 2	Ritiro holter cardiaco	Non refertato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 15:17:36	00000018	Paziente Diabete UC	Ritiro holter cardiaco	Non refertato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 15:14:56	00000018	Paziente Diabete UC	Ritiro holter cardiaco	Non refertato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 13:18:27	00000004	Patient Demo 2	Ritiro holter cardiaco	Non refertato				ASL Piacenza	12136548
15/11/2022 13:04:15	00000004	Patient Demo 2	Ritiro holter cardiaco	Non refertato				ASL Piacenza	12136548
14/11/2022 18:40:19	00000004	Patient Demo 2	Ritiro holter cardiaco	Non refertato				ASL Piacenza	12136548



CER-S Gateway

CER-S Gateway è un applicativo che consente di far comunicare CGM CARE MAP e il software di refertazione CER-S di CardioCalm, automatizzando le fasi di scaricamento dei tracciati ECG e di successivo caricamento sul portale dei risultati delle elaborazioni effettuate con CER-S.

Installazione di CER-S Gateway


CER-S Gateway deve essere installato sul PC dell'operatore su cui è presente il software CER-S, il pacchetto di installazione è disponibile per il download dalla maschera di Elenco referti tramite il pulsante "Scarica HP3 CER-S Gateway" posto in basso a destra quando è selezionato un esame di tipo "Holter ECG HI":

The screenshot shows two panels. The left panel, titled 'Elenco referti', contains a table with columns: ID, DATA ESAME, DATA REFERTO, and TIPO. The right panel, titled 'Dettaglio esame', shows details for exam ID 1921, including Type (Holter ECG HI), Date (14/04/2022), Time (16:27), Status (Non referato), and a Note (13/04/2022 - 13/04/2022). At the bottom right, a button labeled 'Scarica HP3 CER-S Gateway' is circled in red.


ID	DATA ESAME	DATA REFERTO	TIPO
1921	14/04/2022		Holter ECG HI
1919	14/04/2022	14/04/2022	Holter ECG HI
1918	14/04/2022		Holter ECG HI
1917	14/04/2022	14/04/2022	Holter ECG HI
1916	14/04/2022		Holter ECG HI
1909	08/04/2022		Holter ECG HI
1908	08/04/2022		Holter ECG HI
1907	08/04/2022		Holter ECG HI
1906	08/04/2022	08/04/2022	Holter ECG HI
1905	08/04/2022	08/04/2022	Holter ECG HI
1885	30/03/2022	30/03/2022	Holter ECG HI
1884	30/03/2022	30/03/2022	Holter ECG HI
1857	28/02/2022		ECG 1-3 derivazioni
1856	28/02/2022		ECG 1-3 derivazioni
1853	25/02/2022		Holter ECG HI
1852	25/02/2022		ECG 1-3 derivazioni
1851	25/02/2022		ECG 1-3 derivazioni
1840	18/02/2022		ECG 1-3 derivazioni
1839	18/02/2022		ECG 1-3 derivazioni

Viene scaricato un pacchetto "HP3CersGateway_Installer_v.x.y.z.zip" in cui sono contenuti i file di installazione, salvare il pacchetto sul PC ed avviare il file eseguibile presente all'interno. In fase di installazione è possibile scegliere la lingua preferita (Inglese o Italiano).


Terminata l'installazione, viene presentata una finestra in cui deve essere inserito il percorso in cui è installato l'applicativo CER-S, cercare il file eseguibile di CER-S tramite il pulsante cerca e confermare:

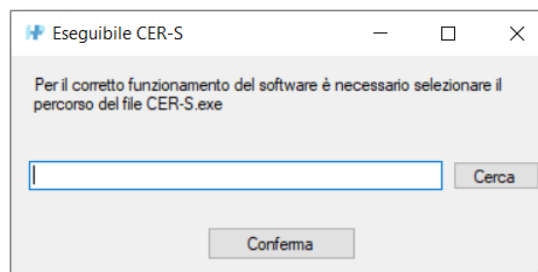

Una volta installato, l'icona di CER-S Gateway è presente in basso a destra nella barra delle applicazioni, se non fosse visibile cliccare sul simbolo ^:

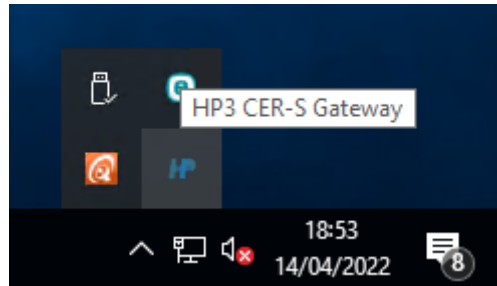

Cliccando col tasto destro sull'icona viene visualizzato un menù contestuale:

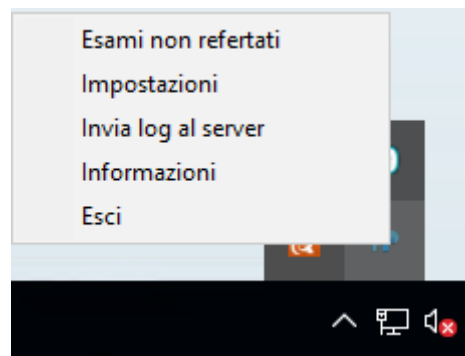


“Esami non refertati” apre la finestra principale con l'elenco degli esami presenti sul PC e non ancora refertati:

ID Esame	Codice Assistito	Stato	
1753	00000479	Da refertare	Apri in CER-S

Aggiorna


Per ogni riga viene riportato l'ID dell'esame, il codice paziente, lo stato dell'esame ed un link per aprire l'esame in CER-S. Con il tasto Aggiorna presente in basso è possibile aggiornare la lista.

"Impostazioni" apre la finestra in cui è possibile visualizzare e modificare le impostazioni della lingua e del percorso del file eseguibile di CER-S:

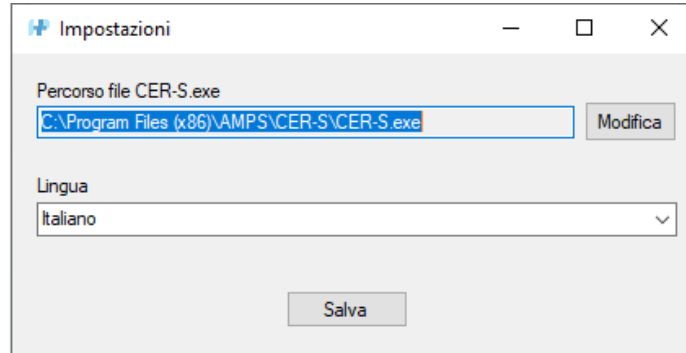

"Invia log al server" consente di inviare i log dell'applicativo al server, nel caso fosse richiesto dal personale di supporto in caso di problemi.

"Informazioni" visualizza la schermata con le informazioni su versione del programma e produttore:

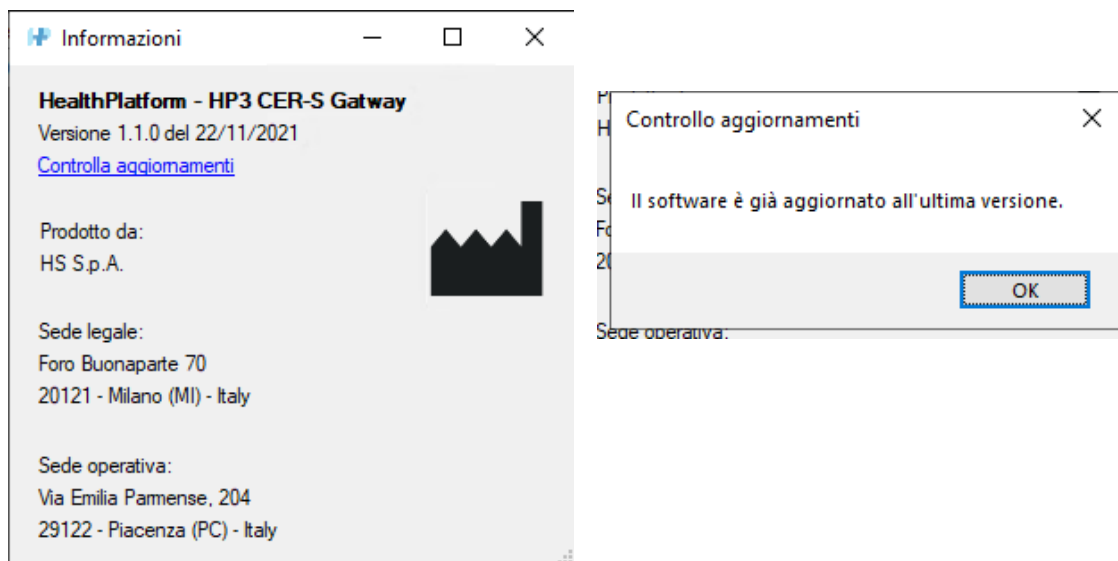


Cliccando "Controlla aggiornamenti" viene verificata la presenza di versioni più recenti del software e viene offerta la possibilità di installarle, nel caso la versione presente sul PC sia l'ultima viene visualizzato un messaggio di conferma.

"Esci" permette di terminare il programma.

Utilizzo di CER-S Gateway

Viene descritto nel seguito il processo di refertazione dei tracciati Holter ECG acquisiti dai pazienti tramite il dispositivo Hi.

Dalla “SCHEDA PAZIENTE – ECG Giornalieri” è possibile visualizzare le giornate per cui sono presenti tracciati ECG e generare un esame specifico a partire dai dati raccolti premendo il tasto “Genera file holter”, selezionando opportunamente anche l’intervallo temporale desiderato:

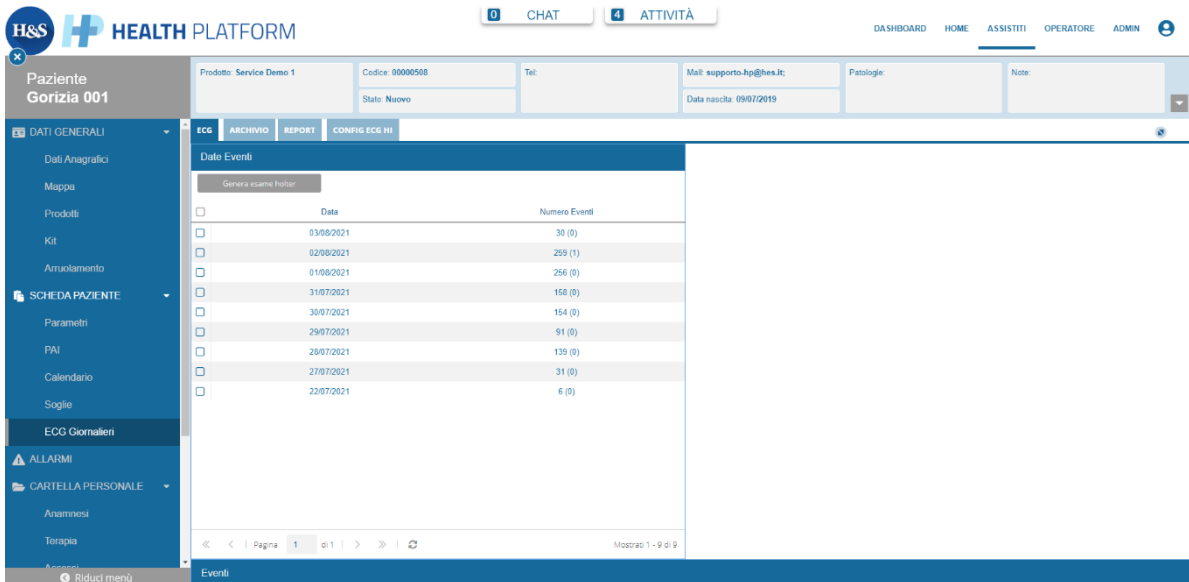

Data	Numero Eventi
03/08/2021	30 (0)
02/08/2021	259 (1)
01/08/2021	256 (0)
31/07/2021	158 (0)
30/07/2021	154 (0)
29/07/2021	91 (0)
28/07/2021	139 (0)
27/07/2021	31 (0)
22/07/2021	6 (0)

Nella finestra “Esame Holter” che viene visualizzata è possibile modificare l’intervallo temporale per cui si vuole generare l’esame:




NOTA: I dati di tutte le giornate incluse nel periodo indicato verranno utilizzati per la generazione del file

Da: 13/04/2022 0 0


A: 13/04/2022 23 59

Conferma generazione esame

Una volta premuto “Conferma generazione esame”, viene generato un esame di Holter ECG e viene inviata una mail all’operatore quando l’esame sarà effettivamente disponibile nella sezione “Cartella personale / Esami” del paziente:

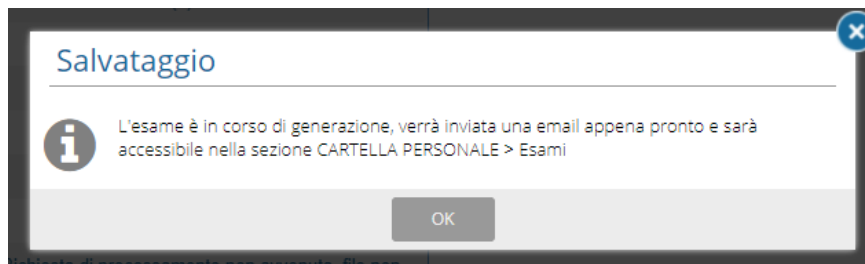

Nel caso in cui fosse già stato generato un esame per lo stesso intervallo temporale, l’esame non viene generato e viene visualizzato un messaggio di errore:

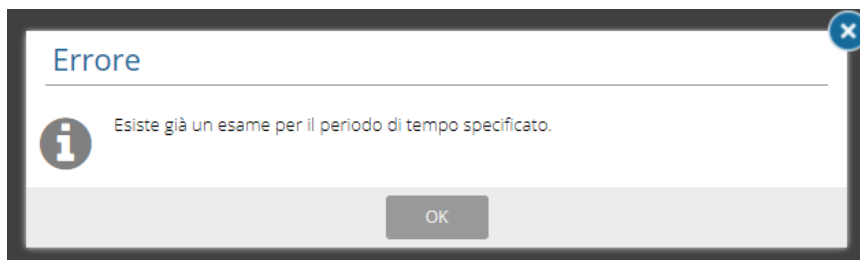


Verificare l’effettiva necessità di creare un ulteriore esame ed in tal caso è necessario modificare l’intervallo temporale prima di poter generare un nuovo esame.


Una volta che l’esame è stato generato, è possibile visualizzarlo nella cartella Esami del paziente. In alternativa, l’esame è visibile nell’elenco degli esami della pagina REFERTI ed una volta selezionato viene aperta la cartella Esami del paziente:

Elenco referiti				Dettaglio esame	
Data inizio		Data fine		ID Esame:	1921
Tipo esame				Tipo:	Holter ECG HI
ID	DATA ESAME	DATA REFERTO	TIPO	Data ^:	14/04/2022
1921	14/04/2022	14/04/2022	Holter ECG HI	Ora ^:	16:27
1919	14/04/2022	14/04/2022	Holter ECG HI	Stato:	Non referato
1918	14/04/2022	14/04/2022	Holter ECG HI	Motivo esame:	
1917	14/04/2022	14/04/2022	Holter ECG HI	Note:	13/04/2022 - 13/04/2022
1916	14/04/2022	14/04/2022	Holter ECG HI		
1909	08/04/2022		Holter ECG HI		
1908	08/04/2022		Holter ECG HI		
1907	08/04/2022		Holter ECG HI		
1906	08/04/2022	08/04/2022	Holter ECG HI		
1905	08/04/2022	08/04/2022	Holter ECG HI		
1885	30/03/2022	30/03/2022	Holter ECG HI		
1884	30/03/2022	30/03/2022	Holter ECG HI		
1857	28/02/2022		ECG 1-3 derivazioni		
1856	28/02/2022		ECG 1-3 derivazioni		
1853	25/02/2022		Holter ECG HI		
1852	25/02/2022		ECG 1-3 derivazioni		
1851	25/02/2022		ECG 1-3 derivazioni		
1840	18/02/2022		ECG 1-3 derivazioni		
1839	18/02/2022		ECG 1-3 derivazioni		
Aggiorna Nuovo				Scarica HP9 CER-5 Gateway Prendi in carico Elimina	


Per poter refertare l'esame è necessario prima prenderlo in carico tramite il pulsante "Prendi in carico" presente in basso a destra, si apre una finestra di conferma:

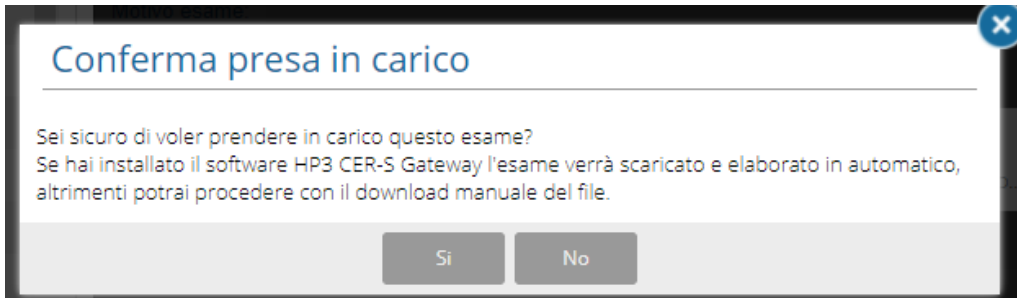


e premendo Sì viene avviato lo scaricamento dell'esame sul proprio PC ed avviato il CER-S Gateway, nel caso in cui venisse visualizzato un messaggio di conferma premere su Yes/Sì:

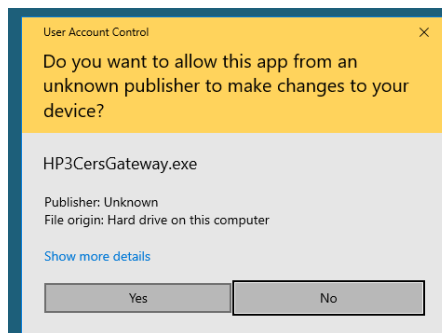

Lo scaricamento dell'esame potrebbe richiedere qualche minuto anche in funzione della connessione e dell'ampiezza dell'intervallo temporale, durante questa fase viene visualizzato un messaggio temporaneo nella parte in basso a destra dello schermo:

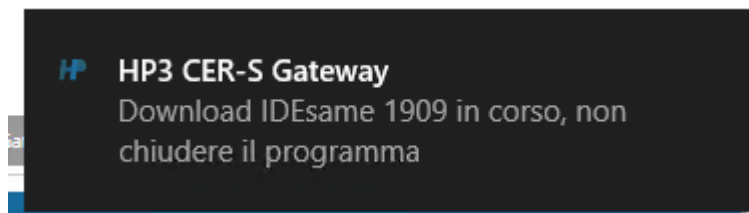

ed una volta completato lo scaricamento viene mostrato un messaggio di conferma:

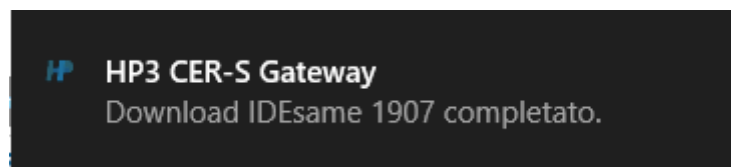


In ogni caso è sempre possibile visualizzare lo stato degli esami nella finestra principale di CER-S Gateway:


ID Esame	Codice Assistito	Stato	
1753	00000479	Da refertare	Apri in CER-S
1909	00000479	Da refertare	Apri in CER-S

Aggiorna



Una volta scaricato l'esame viene avviato automaticamente il programma CER-S con già caricato il tracciato dell'esame. In caso contrario, è possibile avviare il CER-S cliccando sul link "Apri in CER-S" presente sulla destra della riga corrispondente all'esame.

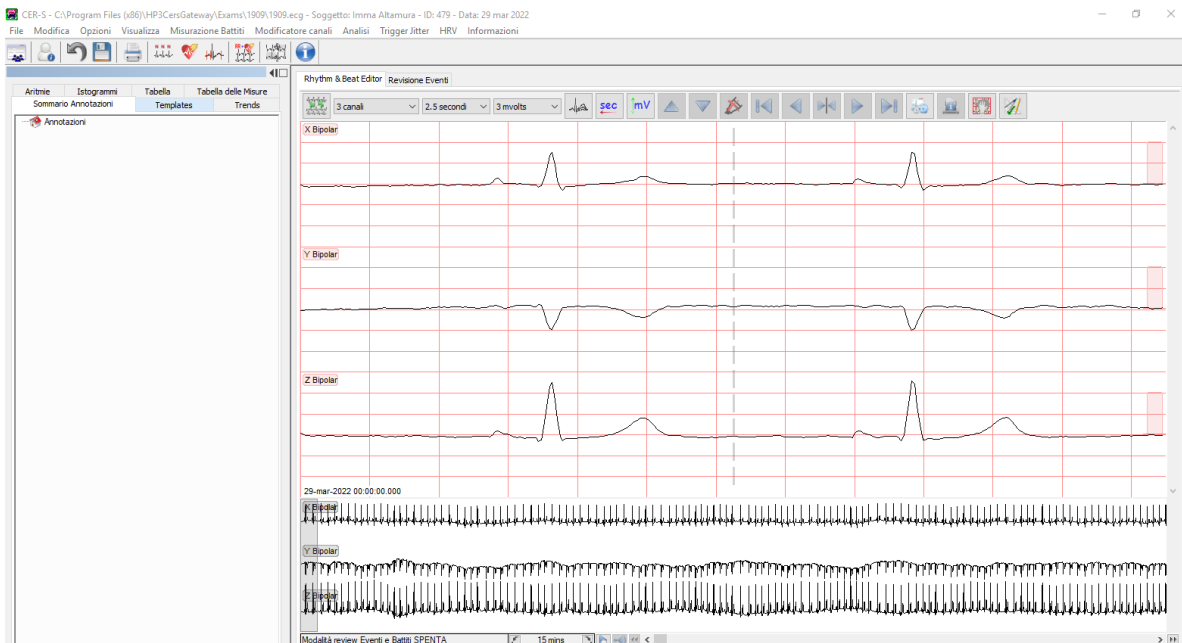

Una volta avviato CER-S, è possibile effettuare l'analisi del tracciato avviando in sequenza l'Analisi dei Battiti e l'Analisi del Ritmo tramite i due pulsanti nella barra superiore dell'applicativo:

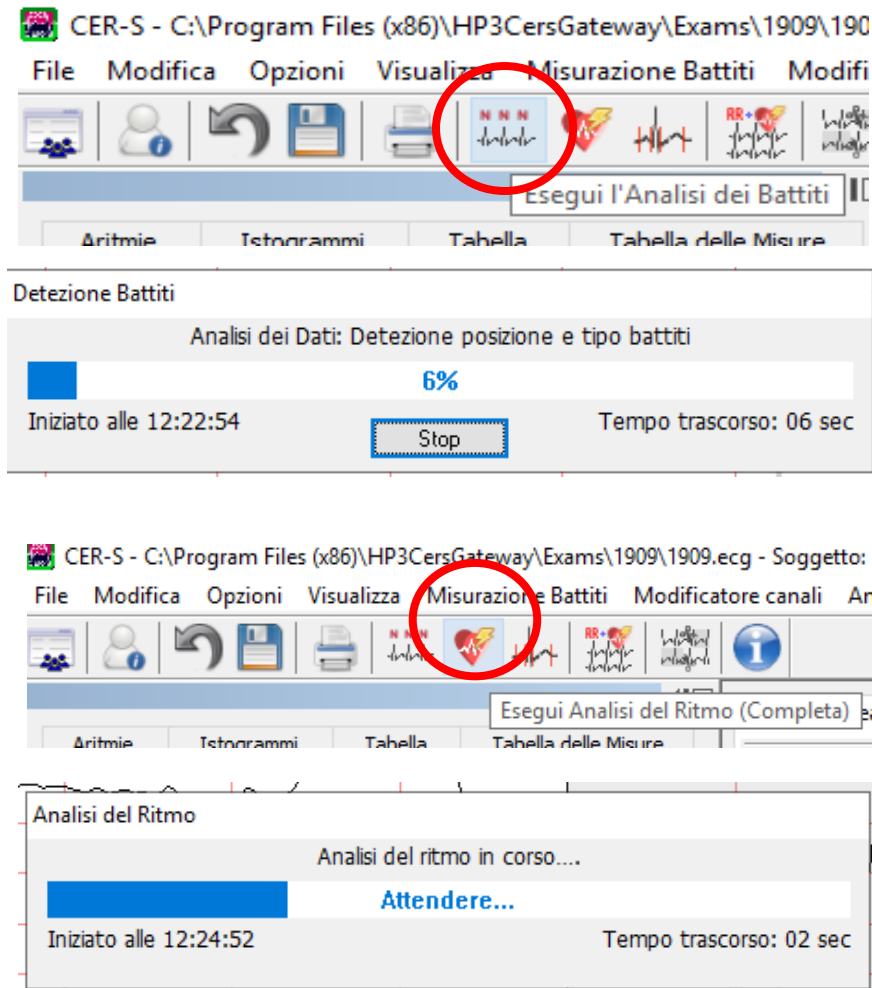

Una volta completata l'analisi, nel riquadro a sinistra saranno presenti tutte le annotazioni rilevate da CER-S raggruppate per tipologia:

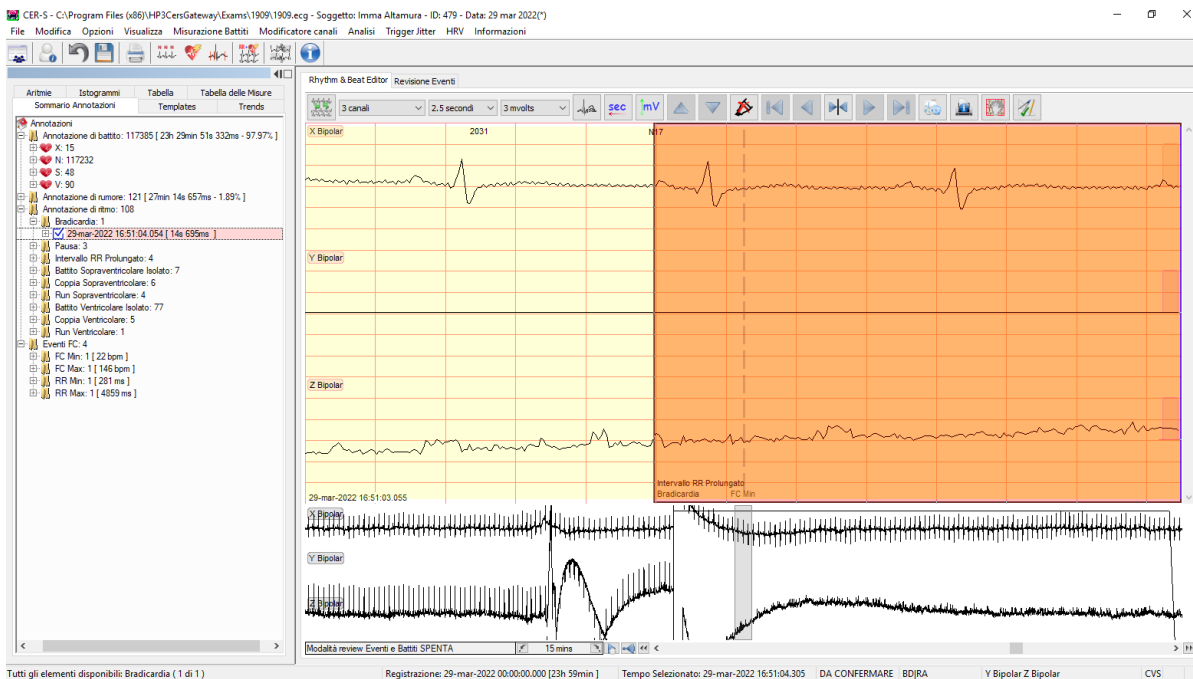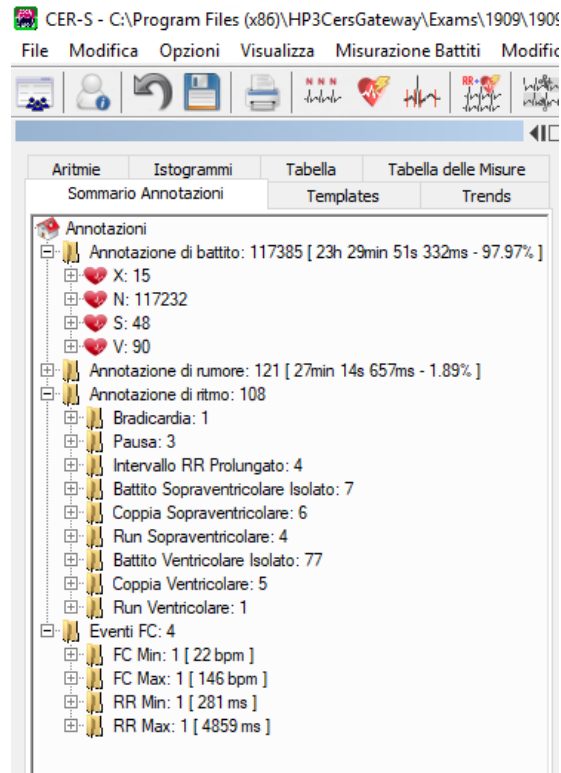


Nella parte sinistra, è visibile il tab Templates dove tutti i battiti vengono suddivisi in famiglie sulla base dei template di famiglie di battiti individuati a valle dell'analisi ECG.


Nella parte destra dello schermo è possibile visualizzare due tab:

- Rhythm&Beat Editor dove è visibile l'intera traccia ECG. Selezionando uno degli eventi della lista a sinistra "Sommaro Annotazioni", il relativo tracciato ECG viene evidenziato in arancio.
- Revisione Eventi: nella quale è possibile visualizzare tutti i battiti che sono ricaduti all'interno di una tipologia di evento-


È possibile selezionare gli eventi errati o gli artefatti, al fine di 'pulire' il tracciato e renderlo disponibile per successive fasi di analisi che permettano di concentrarsi sugli eventi significativi:

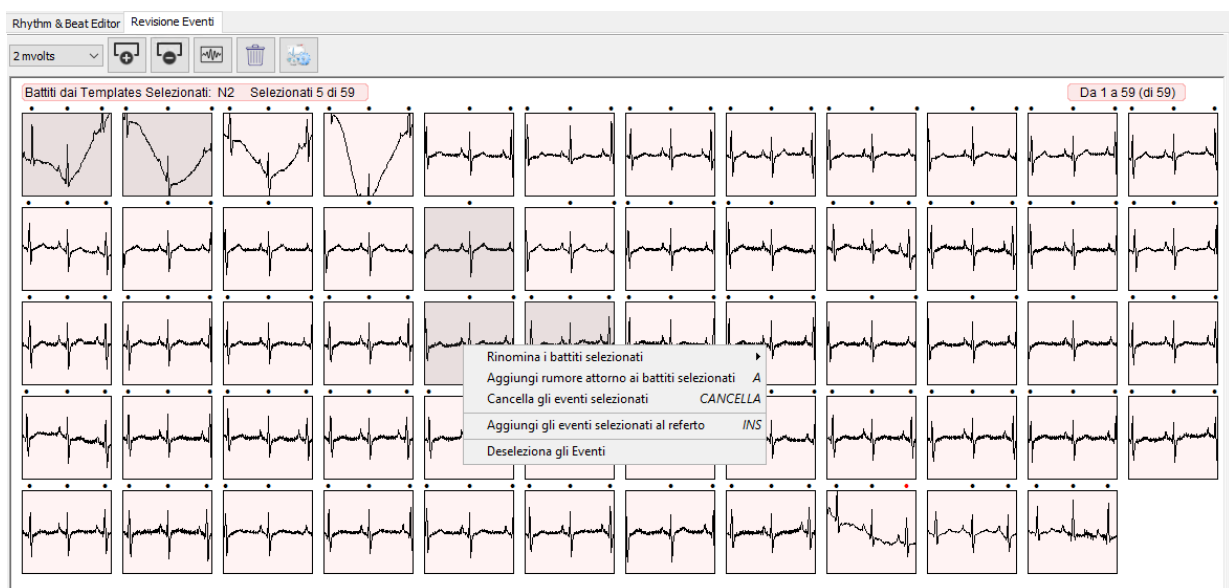


Una volta terminata questa fase è necessario salvare l'esame con il pulsante con l'icona associata

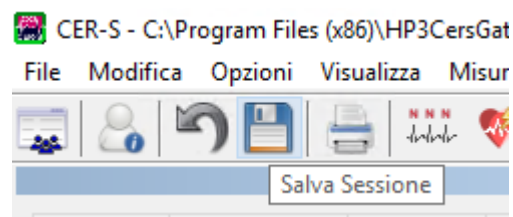

e poi selezionare dal menù “Stampa referto” per poter inserire le informazioni all’interno del report:

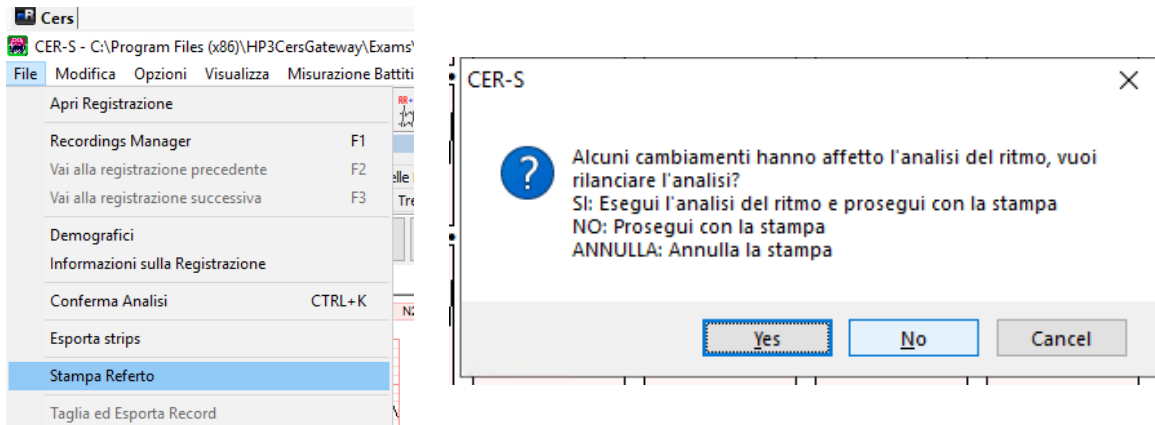

Se viene visualizzata la finestra di conferma, selezionare No, viene visualizzata la maschera di “Opzioni del Referto” in cui cliccando su “Modifica Commenti & Demografici”:

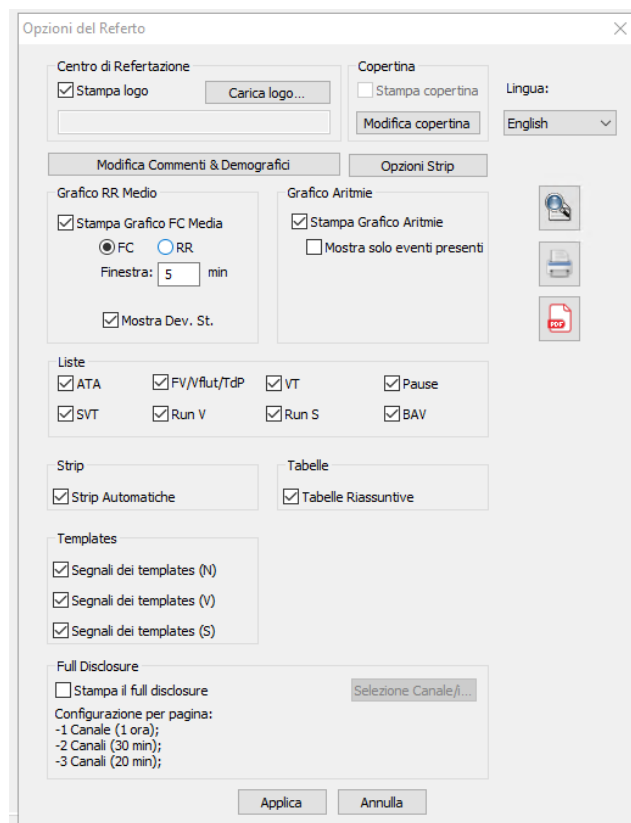

Nel tab “Paziente e Esame” è possibile verificare le informazioni del paziente ed inserire informazioni sull’esame:

mentre nel tab “Commenti” è presente un riepilogo dell’analisi ed è possibile inserire commenti sull’esame:

Dati Analisi

Total QRS: 117365 - N: 117227 V: 90 S: 48
 Analyzed Data: 23h 29min 51s - Noise: 27min 14s (1.9%)

RR Min 281 ms at 15:24:31
 RR Max 4859 ms at 16:51:06
 RR Avr 722 ms
 HR Min 22 bpm at 16:51:02
 HR Max 146 bpm at 08:49:47
 HR Avr 86 bpm


Ventricular Events
 V Total Number: 90 C.I. Min: 305 ms - C.P. Max: 2031 ms
 V Isolated: 77
 V Couplets: 5
 V Run: 1
 Longest at 21:45:52 - 3 beats - HR 85 bpm
 Fastest at 21:45:52 - 3 beats - HR 85 bpm

V Bigeminy 0
 V Trigeminy 0
 V Tachycardia: 0

Supraventricular Events
 SV Total Number: 48 (0.04%)
 SV Isolated: 7
 SV Couplets: 6
 SV Run: 4
 Longest at 02:43:35 - 19 beats - HR 100 bpm
 Fastest at 23:06:03 - 3 beats - HR 124 bpm
 SV Bigeminy 0

Premere “Salva & Chiudi” e poi “Applica” e poi “Annulla” nella finestra Opzioni.


Per completare l’analisi è necessario prima salvare l’esame e poi selezionare “Conferma Analisi” nel menù File, in seguito non sarà possibile effettuare altre modifiche.

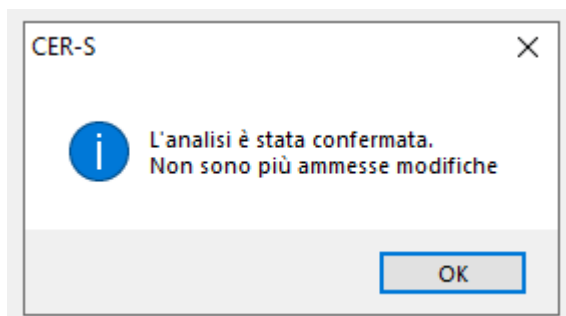


Chiudere infine il programma CER-S.

CER-S Gateway inizia automaticamente a processare l’esame appena confermato e ad inviarlo al server, è possibile seguire l’avanzamento delle azioni nella finestra principale di CER-S Gateway.

Compare una notifica nello schermo in basso per informare che è stato creato correttamente il report ed è iniziato il processo di invio al server:

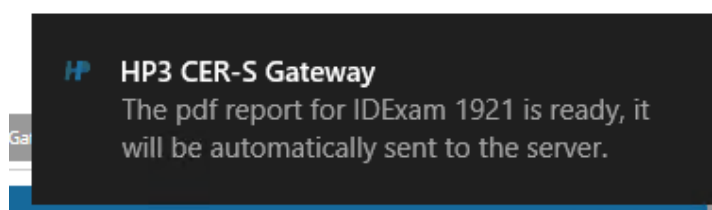

Se CER-S non viene chiuso immediatamente dopo la conferma del referto, è possibile che CER-S Gateway trovi il file non disponibile e visualizzi un errore:

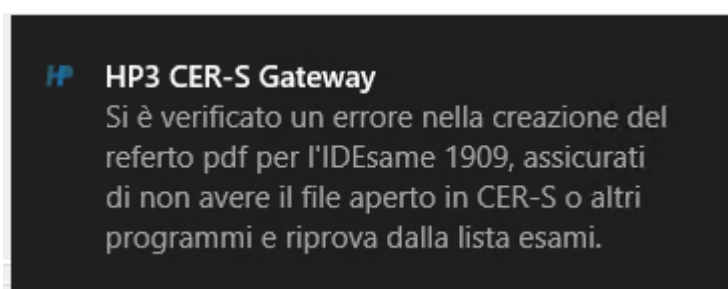

Nella finestra principale è presente l'errore per l'esame, verificare che il CER-S sia chiuso e cliccare su "Crea report pdf", il programma procede con la creazione del report e con il caricamento sul server:

ID Esame	Codice Assistito	Stato	
1753	00000479	Da refertare	Apri in CER-S
1907	00000479	Da refertare	Apri in CER-S
1909	00000479	Errore nella creazione del referto	Crea report pdf


Aggiorna

ID Esame	Codice Assistito	Stato	
1753	00000479	Da refertare	Apri in CER-S
1907	00000479	Da refertare	Apri in CER-S
1909	00000479	Referto in attesa di invio al server	

Operazione completata ×

Il referto pdf per l'IDEsame 1909 è pronto, verrà automaticamente inviato al server.

Aggiorna

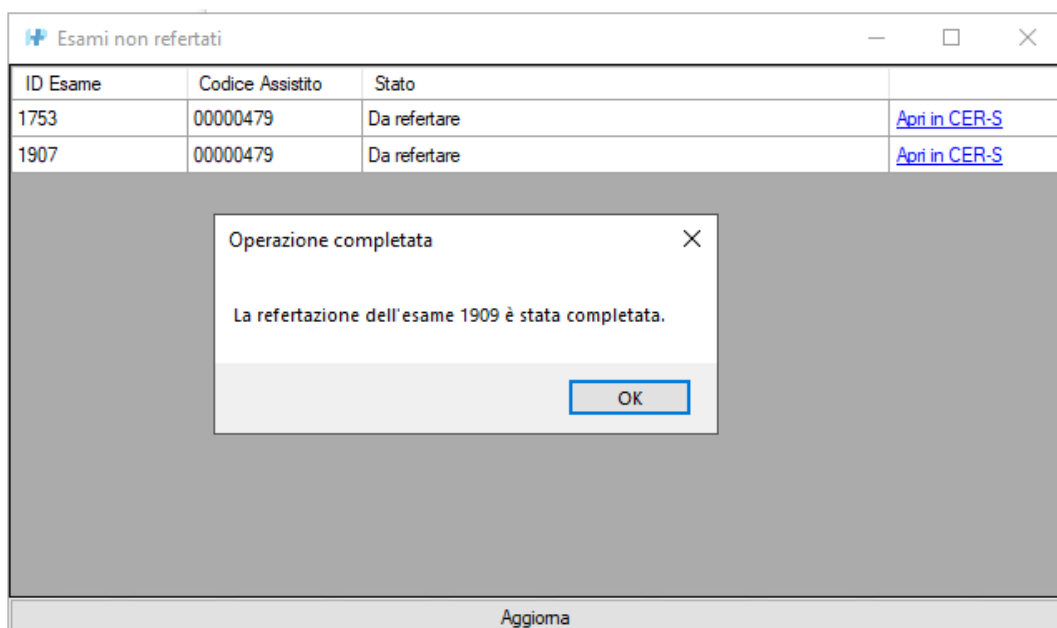

Nel caso in cui compaia una richiesta di autenticazione, inserire nome utente e password nella finestra per confermare la propria identità:

The screenshot shows an authentication dialog box titled "Autenticazione richiesta". It contains two input fields: "Nome utente" and "Password". Below the input fields are two buttons: "Autenticazione" and "Cancel".

Una volta completate le operazioni sul PC ed inviato il report al server, l'esame compare come Refertato nell'elenco degli esami ed è valorizzata la "DATA REFERTO" nella lista:

Elenco referti

Data inizio Data fine

Tipo esame

ID	DATA ESAME	DATA REFERTO	TIPO
1921	14/04/2022	14/04/2022	Holter ECG HI
1919	14/04/2022	14/04/2022	Holter ECG HI
1918	14/04/2022		Holter ECG HI
1917	14/04/2022	14/04/2022	Holter ECG HI
1916	14/04/2022		Holter ECG HI
1909	08/04/2022	15/04/2022	Holter ECG HI
1908	08/04/2022		Holter ECG HI
1907	08/04/2022		Holter ECG HI
1906	08/04/2022	08/04/2022	Holter ECG HI
1905	08/04/2022	08/04/2022	Holter ECG HI
1885	30/03/2022	30/03/2022	Holter ECG HI
1884	30/03/2022	30/03/2022	Holter ECG HI
1857	28/02/2022		ECG 1-3 derivazioni
1856	28/02/2022		ECG 1-3 derivazioni
1853	25/02/2022		Holter ECG HI
1852	25/02/2022		ECG 1-3 derivazioni
1851	25/02/2022		ECG 1-3 derivazioni
1840	18/02/2022		ECG 1-3 derivazioni
1839	18/02/2022		ECG 1-3 derivazioni

Aggiorna Nuovo

Dettaglio esame

ID Esame: 1921

Tipo: Holter ECG HI

Data: 14/04/2022

Ora: 16.27

Stato: Refertato

In carico a: Refertatore Test

Motivo esame:

Note: 13/04/2022 - 13/04/2022

Testo referto:

Scarica HP3 CER-S Gateway Visualizza referto Download File Esame Salva

Premendo “Visualizza referto” viene aperta una maschera in cui è presente il referto:

store.ashx
1 / 13 | 75% | [Icona]

1

2

3

479
Imma Altamura
13-Apr-2022 00:00:25

Patient		Recording Data	
ID: 479	Name: Imma Altamura	Date & Time: 13-Apr-2022 00:00:25	
Date of Birth: 17-Jan-1994	Age: 28 Years	Duration: 10:58:34	N. Leads: 3
Gender: Female	Race:	Recorder:	Serial N.:
Treatment:			
Indications:			
Ordered by:			

Report Summary			
Total QRS: 47684	N: 47250 V: 153 S: 291	Min:	Max:
Analyzed Data: 10:51:07	Noise: 00:06:38 (1.0%)	RR (ms) at 08:22:30: 414	1852 at 08:10:00: 823
		HR (bpm) at 00:02:34: 47	143 at 08:22:26: 78


Ventricular Events		Supraventricular Events	
Total Number: 153 (0.32%)	C.I. Min: 352 ms - C.P. Max: 538 ms	Total Number: 291 (0.61%)	
Isolated: 135		Isolated: 3	
Complex: 9		Complex: 8	
Run: 0		Run: 16	
Bigeminy: 0		Longest: at 03:02:23 - 34 beats - HR: 99 bpm	
Trigeminy: 0		Fastest: at 07:35:54 - 21 beats - HR: 159 bpm	
Tachycardia: 0		Signeminy: 0	
		Tachycardia: 0	

Arrhythmias		
Atrial Fibrillation: 0		
Pauses: 0	Prolonged RR Interval: 2	Longest (1.85s) at 08:10:00

HRV	
PRMSD: 34.41%	
SDNN: 207.65 ms	
RMSSD: 77.55 ms	


Comments

Ritornando nella sezione “SCHEMA PAZIENTE – ECG Giornalieri” è possibile verificare che gli eventi rilevati da CER-S e caricati sul server tramite il CER-S Gateway sono elencati nella griglia degli eventi giornalieri e nel tab Eventi.

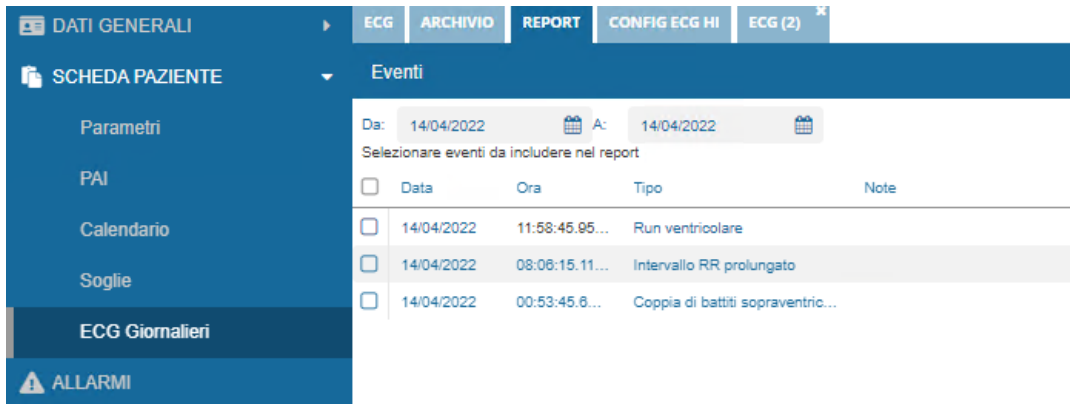

The screenshot shows a software interface for patient ECG data. On the left is a navigation menu with options: DATI GENERALI, SCHEMA PAZIENTE (expanded), Parametri, PAI, Calendario, Soglie, ECG Giornalieri (selected), and ALLARMI. The main area is titled 'Eventi' and includes date filters (Da: 14/04/2022, A: 14/04/2022) and a selection prompt 'Selezionare eventi da includere nel report'. Below is a table of events:

<input type="checkbox"/>	Data	Ora	Tipo	Note
<input type="checkbox"/>	14/04/2022	11:58:45.95...	Run ventricolare	
<input type="checkbox"/>	14/04/2022	08:06:15.11...	Intervallo RR prolungato	
<input type="checkbox"/>	14/04/2022	00:53:45.6...	Coppia di battiti sopraventric...	

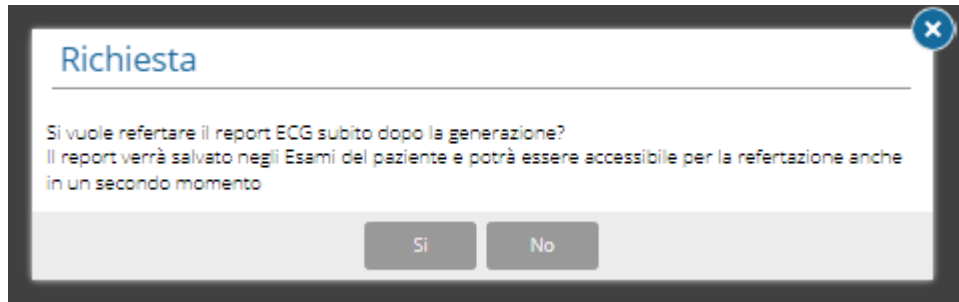

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Richiesta'. The text inside asks: 'Si vuole refertare il report ECG subito dopo la generazione? Il report verrà salvato negli Esami del paziente e potrà essere accessibile per la refertazione anche in un secondo momento'. At the bottom are two buttons: 'Si' and 'No'.

Admin

Gestione Assistiti

Tramite questa funzione l'amministratore di sistema può gestire gli assistiti. Al centro in alto è presente un filtro testuale per cercare l'assistito desiderato.

Per ogni assistito sono presenti i campi stato, codice, nome, cognome, codice fiscale, organizzazione e note.

TELEMEDICINE
Connected Patient Solutions

4923 ALLARMI

8 CHAT

390 ATTIVITÀ

[DASHBOARD](#)
[HOME](#)
[ASSISTITI](#)
[OPERATORE](#)
[REFERTI](#)
[ADMIN](#)

GESTIONE ASSISTITI

🔍

Importa da file

STATO	CODICE	NOME	COGNOME	CODICE FISCALE	ORGANIZZAZIONE	NOTE
Cancellato	00000160	NomeWS	CognomeWS	XXXXYYA99B88C770F	MEDICOPERTUTTI S.R.L.	
Attivo	00000161	NomeWS2	CognomeWS2	XXXXYYA99B88C770G	MEDICOPERTUTTI S.R.L.	
Cancellato	00000162	NomeWS3	CognomeWS3	XXXXYYA99B88C770H		
Cancellato	00000167	NomeWS4	CognomeWS4	XXXXYY99B12C770I	MEDICOPERTUTTI S.R.L.	
Cancellato	00000183	Vito	Abrescia	TSTPNT90A01A662S	ASL Bari	
Cancellato	00000184	VITTORINO	BAJO	TSTPNT92C03A662F	ASL Bari	
Cancellato	00000185	VITTORINO	BAJO	TSTPNT95H46A662G	ASL Bari	
Cancellato	00000186	Paziente	Test08	TSTPNT97M48A662N	ASL Bari	
Cancellato	00000187	Paziente	Test 10	TSTPNT99R50A662O	ASL Bari	
Cancellato	00000189	Paziente	Test09	TSTPNT98P49A662B	ASL Bari	
Cancellato	00000190	Paziente	Test02	TSTPNT91B02A662X	ASL Bari	
Cancellato	00000191	Paziente	Test05	TSTPNT94E05A662R	ASL Bari	
Cancellato	00000202	Paziente	Test01	BBTNTN27D04A662F	ASL Bari	
Cancellato	00000203	Paziente	Test02	BBTNTN87M21A225R	ASL Bari	
Cancellato	00000205	Paziente	Test04	BCCRRA48E55C070H	ASL Bari	
Cancellato	00000206	Paziente	Test05	BCCTRS27S50A662E	ASL Bari	
Cancellato	00000207	Paziente	Test04	TSTPNT93D04A662K	ASL Bari	
Cancellato	00000208	Xxxxx	Yyyyyy	ABCDEF12G34H567I	MEDICOPERTUTTI S.R.L.	
Cancellato	00000215	Garga	Mella	MLLGRG	Organizzazione condivisione 1	
Cancellato	00000216	ANNA	BOCCAFORNO	BCCNNA58E59F220F	ASL Bari	

« < | Pagina 5 di 21 | > »
Mostrati 81 - 100 di 418

+

CGM CARE MAP
Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

Per modificare un assistito è sufficiente cliccare su di esso. Facendolo si apre la schermata con i dati modificabili di tale assistito. Sono presenti 6 tab per inserire i vari tipi di dati diversi (Dati assistito, Informazioni di contatto, Dettaglio sociale, Dettaglio account, Operatori associati, Prodotti). Col + in basso a destra è possibile creare un nuovo assistito, si apre la stessa schermata della modifica e si devono inserire i nuovi dati.

CGM | TELEMEDICINE Connected Patient Solutions 4923 ALLARMI 8 CHAT 390 ATTIVITÀ DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

Paziente
Diabete UC

Dati assistito | Informazioni di contatto | Dettaglio sociale | Dettaglio account | Operatori associati | Prodotti

Nome *: Paziente
 Cognome *: Diabete UC
 Cod. fiscale *: AAAAAAAAAA Paziente straniero:
 Tessera sanitaria: 12345
 Data di nascita *: 22/08/2014
 Luogo di nascita: Piacenza
 Sesso *: M
 Lingua *: Italiano
 Nazionalità: Italiana
 Note: Prova

Salva | Elimina | Chiudi

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

Dando un click sul pulsante “Importa da file” presente sull’elenco dei pazienti è possibile effettuare importazioni massive di anagrafiche facendo caricare i dati da un apposito template in Excel.

Nella fase di importazione è possibile specificare l’organizzazione da attribuire ai nuovi pazienti. Il prodotto può essere letto dal file di importazione o assegnato di default a tutti i pazienti importati.

Nel caso i cui il prodotto sia “Polisonnografia” i pazienti vengono creati in stato “Attivo”, altrimenti in stato “Nuovo”.

Importa da file

Organizzazione *:

Tipo assistito *:

Leggi prodotto da file:

Prodotto *:

File *: Scegli...

Importa | Chiudi

Gestione Operatori

Tramite questa funzione l'amministratore di sistema può gestire gli operatori.

CODICE OPERAT...	NOME	COGNOME	CODICE FISCALE	USERNAME	PROFILO UTENTE	NOTE
00000003	Operatore	Demo	TSTPTR14E29G535H	OPERATORE	Telemonitoraggio H...	
00000004	Administrator	General	TSTPTR14E29G535Z	ADMIN	Admin_HP	
00000055	Operatore SIS	Unisalute	SISUNI14E29G535H	OPERATORESIS	Operatore SIS	
00000056	Medico US	Unisalute	MDCUNI14E29G535H	OPERATOREMUS	Medico US	
00000057	Operatore US	Unisalute	OUSUNI14E29G536H	OPERATOREUS	Operatore US	
00000146	Marco	Magistrali	MGSRC78E24G545D	MMARCO	Case Manager	
00000152	Operatore	Almirall	LMRPT80A01A944U	ALMIRALLOP	Operatore Almirall	
00000153	DEMO	FORNITORE	FRNDME80A01A944Z	FORNITORE	Fornitore	CENTRI MEDICI UNISALUTE
00000154	Admin	Operatori US	PRTDMN80A01F205H	ADMINUS	Admin US	
00000164	Refertatore	Test	TSTPTR14E29G535K	REFERTATORE	Refertatore	
00000167	Operatore	Pill Dispenser	PLLPT80A01G535P	OPDISPENSER	Operatore Complia...	
00000168	DEMO OPERATOR	CGM ROMANIA	DMOCMR20B21G535A	OPCGMROM	Case Manager	
00000169	Better At	Home	HMOBTR80A01F205L	BEHOME	Telemedicina LITE	DEMO
00000170	BelHome	CaseManager	CSMBHM80A01F205K	BEHOMECS	COS Case Manager	DEMO
00000171	Operatore	Covid-19	CVDPT80A01F205S	OPCOVID	Operatore Telemoni...	
00000172	Operatore Bolzano	Covid-19	PRTTMM80A01G535J	OPBOLZANO	Operatore TLM Co...	
00000173	Operator	France	PRTFRC	OP_FRA	Operatore TLM Co...	
00000174	MALTA	PILOT 1	OPHOLLAND	OP_HOLLAND	Telemedicina LITE	
00000175	OPERATORE	FRANCE	TRLSJWS7892OMBL	OPERATORE_FR	Case Manager	
00000176	Operatore	Holland	TCPNASCBA837MDB	OPERATORE_HL	Case Manager	

Per modificare un operatore è sufficiente cliccare su di esso. Facendolo si apre la schermata con i dati modificabili di tale operatore.

Col + in basso a destra è possibile creare un nuovo operatore, si apre la stessa schermata della modifica con i campi vuoti.

Le informazioni sono suddivise in tre sezioni:

- Dettaglio: Comprende:
 - I dati anagrafici
 - Le informazioni di contatto
 - Le informazioni relative allo stato ed al ruolo dell'operatore. In particolare, il profilo utente stabilisce a quali sezioni del portale l'utente abbia accesso, mentre l'organizzazione e, nel caso in cui l'operatore faccia riferimento ad un fornitore, la specifica di quest'ultimo consentono di limitare la visibilità dell'utente ai pazienti che si riferiscono alla stessa organizzazione ed alle attività consentite a quel fornitore.

- **Assistiti Associati:** questa sezione permette di dare visibilità per singolo paziente nel caso in cui il profilo dell'utente non permetta di vedere tutti gli assistiti delle organizzazioni associate all'utente.
- **Esami associati:** nel caso in cui l'operatore sia un refertatore in questa sezione è possibile specificare quali tipologie di esame possa refertare.

CGM | TELEMEDICINE Connected Patient Solutions

26697 ALLARMI 0 CHAT 2 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

Operatore Demo

DETTAGLIO ASSISTITI ASSOCIATI ESAMI ASSOCIATI DISPONIBILITÀ FORMAZIONE TARIFFE DOCUMENTI CONTATTI ALTRI DATI OPERATORE

Dati operatore

Nome *: Operatore
 Cognome *: Demo **Nome**
 Codice fiscale *: TSPTTR14E29G539H
 Tessera sanitaria: 1
 Codice regionale medico:
 Data di nascita *: 29/05/1980
 Luogo di nascita: Piacenza
 Sesso *: M
 Lingua *: Italiano
 Nazionalità: Italiana
 Note:

Informazioni di contatto

Telefono: Cellulare:
 E-Mail: danilo.cristaldi@cgm.com Codice V01speed:

Dettaglio account

Nome utente: OPERATORE
 Stato Utente *: Attivo
 Profilo utente *: Telemonitoraggio HI CER-S
 Tipo operatore *: Infermiere
 Organizzazione *: H&S Telemonitoraggio, MAUGERI DI LUMEZZANE, EsaOte, Farmacia Rossi, H&S Telemonitoraggio 2 (senza Abile), COSMOFARMA, EXPOSANITA
 Fomitore:
 Fuso orario *: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
 Integrazione cartella clinica:

Salva Elimina Account ClickDoc Reset password Configura scadenza Chiudi

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

I pulsanti definiscono le azioni che si possono eseguire sull'operatore, in particolare:

- **Account ClickDoc:** se il profilo al quale è associato l'utente prevede il videoconsulto, tramite questo pulsante è possibile gestire l'associazione dell'operatore ad un account ClickDoc, che è il portale utilizzato per il videoconsulto
- **Reset Password:** Consente di resettare la password dell'operatore al quale verrà inviata una password temporanea tramite SMS e/o e-mail. Al primo accesso verrà chiesto all'operatore di cambiare la password.
- **Configura scadenza:** consente di stabilire una data di scadenza per l'account dell'operatore e di definire quale stato utente e quale profilo verranno assegnati all'utente dopo la scadenza.

Gestione Profili

Un profilo definisce le funzioni del portale alle quali l'utente ha accesso in base al ruolo: ad esempio un utente refertatore avrà accesso alla gestione degli esami effettuati dai pazienti ma non a quella delle terapie, che sarà invece affidata agli operatori che si occupano della compliance. Ogni paziente ed ogni operatore inserito nel sistema è associato ad un profilo utente.

Ogni profilo ha i campi descrizione, note e autorizzazioni. Le autorizzazioni definiscono le sezioni applicative abilitate e le funzionalità (sola lettura o modifica) che gli utenti del profilo hanno.

DESCRIZIONE	NOTE	AUTORIZZAZIONI
Admin US	Amministratori Unisalute	74/282
Admin_HP	Amministratori di sistema	135/282
Care Giver		34/282
Case Manager		101/282
Case Manager Televita		99/282
COS Admin		59/282
COS Case Manager		53/282
COS Medico		46/282
Farmacista	Profilo Farmacia Rossi Cosmofarma	21/282
Farmacista_Cosmofarma		43/282
Farmacista_PresainCarico	Farmacista_PresainCarico - UniTo	35/282
Fornitore		13/282
GVM Amministrativo	Utente amministrativo GVM	38/282
GVM Clinico	Utente GVM Clinico	63/282
GVM Operatore	Utenti operatori GVM	14/282
Infermieri demo Allianz		78/282
Medico US		65/282
OP Televita Esteso		74/282
Opérateur de télésurveillance		34/282
Operatore Almiral	Profilo per Almiral	34/282

Selezionando un profilo si apre un popup dove sono presenti i dettagli, i prodotti associati e gli stati degli allarmi da gestire del profilo selezionato.

Gestione Kit

La maschera sotto riportata è a disposizione dell'amministratore del sistema e consente la gestione dei vari kit.

GESTIONE KIT

KIT	TIPO	STATO	SERIALE KIT	SERIALE SIM	IMEI	ORGANIZZAZIONE	ASSOCIATO A
Kit 0058	Smartphone	Assegnato	KJUS000001	89390100002302897503	353747085900180	H&S Compliance	Compliance Dem...
Kit 0064	KIT Unisalute 3 (...)	Dissociato	KJUS000005	89390100002268071150	353747085916004	H&S Telemontoraggio	
Kit 0066	Smartphone	Dissociato	KJUS000016			H&S Telemontoraggio	
Kit 0068	KIT Unisalute 4 (...)	Dissociato	KJUS000014	89390100002268071168	353747085915204	H&S Telemontoraggio	
Kit 0073	KIT Unisalute 4 (...)	Assegnato	KJUS000009	89390100002302897537	353747085916228	H&S Telemontoraggio	Assistito DEMO
Kit 0074	KIT Unisalute 4 (...)	Assegnato	KJUS000008	89390100002302897529	353747085905064	H&S Telemontoraggio	Marco Magistrali
Kit 0076	KIT Unisalute 4 (...)	Dissociato	KJUS000006	89390100002302897594	353747085916020	H&S Telemontoraggio	
Kit 0078	KIT Unisalute 8 (...)	Assegnato	KJUS000040	89390100002268068008	353747085948387	H&S Telemontoraggio	Demo 9 Paziente
Kit 0080	KIT Unisalute 8 (...)	Assegnato	KJUS000038	89390100002268068016	353747085941481	H&S Telemontoraggio	Vananzoni Igor
Kit 0086	KIT Unisalute 8 (...)	Assegnato	KJUS000032	89390100002268068594	353747085940988	H&S Telemontoraggio	Demo 13 Paziente
Kit 0089	KIT Unisalute 4 (...)	Assegnato	KJUS000023	89390100002268068628	353747085951100	H&S Telemontoraggio	Demo 8 Paiente
Kit 0091	KIT Unisalute 4 (...)	Dissociato	KJUS000021	89390100002268071176	353747085915824	H&S Telemontoraggio	
Kit 0092	KIT Unisalute 4 (...)	Assegnato	KJUS000020	89390100002268071184	353747085904422	H&S Telemontoraggio	Demo 12 Paziente
Kit 0093	KIT Unisalute 4 (...)	Assegnato	KJUS000019	89390100002268071192	353747085916426	H&S Telemontoraggio	Demo 10 Paziente
Kit 0096	KIT Unisalute 4 (...)	Assegnato	KJUS000029	89390100002268068602	353747085951126	H&S Telemontoraggio	Demo 15 Paziente
Kit 0097	KIT Unisalute 4 (...)	Assegnato	KJUS000028	89390100002268068578	353747085951043	H&S Telemontoraggio	Demo 11 Paziente
Kit 0235	KIT Unisalute 8 (...)	Dissociato	KJUS000135	8939010002332773492		H&S Telemontoraggio	
Kit 0256	Smartphone	Assegnato	TestECGH3		353747085946282	H&S Telemontoraggio	Vananzoni Igor
Kit 0259	Smartphone	Dissociato	TestECGH3	357956070836962	357956070836962	H&S Telemontoraggio	
Kit 0261	Smartphone	Dissociato	Hi_test		353747085949229	H&S Telemontoraggio	



Per ogni riga è evidenziato il kit, il seriale del kit, il seriale della sim, l'IMEI, l'organizzazione e il paziente al quale il kit è associato.

Cliccando su un kit è possibile modificarne i dati, rimuovere dispositivi presenti nel kit o aggiungerne di nuovi da quelli a disposizione con il pulsante Aggiungi dispositivo.

DETTAGLIO KIT

Seriale kit: H&S 10106
 Seriale sim: 10101000000000000000
 Imei kit: 353747085916004
 Tipo kit: KIT Unisalute 4 (...)
 Stato: Assegnato
 Organizzazione: H&S Telemontoraggio TEST
 Test: H&S 10106
 Note:

Dispositivi

ID	IMEI	SERIALE KIT	SERIALE SIM	STATO
001	353747085916004	111111111111	89390100002302897503	Assegnato
002	353747085916004	111111111111	89390100002302897503	Assegnato
003	353747085916004	111111111111	89390100002302897503	Assegnato
004	353747085916004	111111111111	89390100002302897503	Assegnato
005	353747085916004	111111111111	89390100002302897503	Assegnato

AGGIUNGI DISPOSITIVO

ID	IMEI	SERIALE KIT	SERIALE SIM	STATO	NUMERO VERBALE	NUMERO BT	NUM. BT	ORGANIZZAZIONE
01	353747085916004	111111111111	89390100002302897503	Assegnato				H&S Compliance
02	353747085916004	111111111111	89390100002302897503	Assegnato				H&S Compliance
03	353747085916004	111111111111	89390100002302897503	Assegnato				H&S Compliance
04	353747085916004	111111111111	89390100002302897503	Assegnato				H&S Compliance
05	353747085916004	111111111111	89390100002302897503	Assegnato				H&S Compliance

Cliccando sul + in basso a destra è possibile inserire un nuovo kit compilando i campi obbligatori.



Visualizzazione password paziente

In caso il paziente abbia impostato una password personale sull'APP del KIT, nel dettaglio KIT è presente un pulsante che permette di visualizzarla.

In questo modo, se il paziente dimenticasse la password, l'operatore può visualizzarla e comunicarla

DETTAGLIO KIT

Seriale kit #: HESTEST006 Tipo kit #: Standard
 Seriale Hub #: 7CF31BEEC48E Cod. Prod. Hub: 358854103719010
 Seriale sim: IMEI: 358854103719010
 Lingua #: Italiano Num. Tel. Hub: Organizzazione #: H&S Telemonitoraggio TEST
 Stato kit #: Assegnato Assistito: Paziente Demo 2
 Note:

ID	NOME	SERIALE	INDIRIZZO BT	STATO
600	XXXXXXXXXX	111111111111	0000000000	Assegnato
609	AND UA-767BT - Sfigmomanometro	5100900775	00A096331097	Assegnato
725	GIMA OXY-10	XBA00QC00622	88:1b:99:2f:99:3c	Assegnato
901	Pulsossimetro POD-1W	XCK001QE023356	78:DB:2F:B812:4A	Assegnato

Mostra la pwd impostata sul kit
Mostra password Salva Aggiungi dispositivo Chiudi

Dettaglio password

Password: pwdadgQE6

Chiudi

Gestione Dispositivi

In questa maschera è possibile gestire un singolo dispositivo anche non facente parte di un kit. Ogni dispositivo ha come campi l'ID del dispositivo, il nome del dispositivo, il numero seriale, lo stato, l'indirizzo Bluetooth, il pin Bluetooth, l'organizzazione di appartenenza e la versione firmware.

ID DISPOSITIVO	NOME DISPOSITIVO	NUMERO SERIALE	STATO	INDIRIZZO BT	PIN BT	ORGANIZZAZIONE	KIT	ASSOCIATO A
Device 0011	STM ECG	000864-2012	Assegnato	e4-ee fd 00 0e 47	3450	H&S Telemonitoraggio		
Device 0021	HeS CallMe	HRMCM-20120330-374...	Assegnato	00 07 80 4A 53 78	1234	H&S Telemonitoraggio		
Device 0022	STM ECG	003173-2013	Assegnato	e4-ee fd 00 0e 64	7575	H&S Telemonitoraggio		
Device 0023	HeS CallMe	HRMCM-20120330-374...	Assegnato	00 07 80 4A 4A 30	1234	H&S Telemonitoraggio		
Device 0024	FORA HealthScale W310	2551213160001702	Assegnato	00 12 A1 B0 9B 84	111111	H&S Telemonitoraggio		
Device 0025	FORA Glucometer G31b	425621225000860B	Assegnato	00 12 3E FF 3B 9E	111111	H&S Telemonitoraggio		
Device 0026	Nonin 9560BT	501593655	Assegnato	00 1C 05 00 B8 71	593655	H&S Telemonitoraggio		
Device 0027	HeS CallMe	HRMCM-20120330-374...	Assegnato	00 07 80 4A 47 84	1234	H&S Telemonitoraggio		
Device 0028	AND Blood Pressure UA...	5100901128	Assegnato	00 AD 96 33 18 DF	39121440	H&S Telemonitoraggio		
Device 0029	FORA HealthScale W310	2551213160002073	Assegnato	00 12 A1 B0 9E C7	111111	H&S Telemonitoraggio		
Device 0030	FORA Glucometer G31b	425621133000186A	Assegnato	00 12 3E FF 2D EC	111111	H&S Telemonitoraggio		
Device 0031	Nonin 9560BT	501593459	Assegnato	00 1C 05 00 B8 C6	593459	H&S Telemonitoraggio		
Device 0032	HeS CallMe	HRMCM-20120330-374...	Assegnato	00 07 80 4A 47 D1	1234	H&S Telemonitoraggio		
Device 0033	AND Blood Pressure UA...	5100603342	Assegnato	00 AD 96 31 C2 58	39121440	H&S Telemonitoraggio		
Device 0035	HeS SmartWalk	HSP-20130904-806-10130	Assegnato	00 80 e1 fe 58 a6	1234	H&S Telemonitoraggio		
Device 0036	HeS SmartWalk	HSP-20130904-806-10180	Assegnato	00 80 e1 fd 1b 37	1234	H&S Telemonitoraggio		
Device 0037	STM ECG	003173-2013	Assegnato	E4 EE FD 00 14 3E	9398	H&S Telemonitoraggio		
Device 0038	Teltonika TrackMe	352848022295535	Assegnato			H&S Telemonitoraggio		
Device 0039	HeS SmartWalk	HSP-20130904-806-10466	Assegnato	00 80 e1 fd 1a e3	1234	H&S Telemonitoraggio		
Device 0040	HeS CallMe IMQ1	HRMCM-20120330-374...	Assegnato	00 07 80 4a 55 7c	1234	H&S Telemonitoraggio		



<< < | Pagina 1 di 46 | >> >

Mostrati 1 - 20 di 901

CGM CARE MAP

Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

Cliccando su un dispositivo è possibile modificarne i dati, cliccando sul + in basso a destra è possibile inserire un nuovo dispositivo compilando i campi obbligatori. Per la modifica e l'aggiunta di un dispositivo il pop-up che viene aperto è lo stesso.

DETTAGLIO DISPOSITIVO

Nome:

Tipo dispositivo *:

Stato dispositivo *:

Numero seriale:

Indirizzo BT *:

Pin BT:

Configurazione:

Organizzazione *:

Versione Firmware:

Gestione PDTA

In questa maschera è possibile gestire un singolo PDTA. Ogni PDTA ha i campi nome, descrizione, organizzazioni, prodotti, patologie, creato da, creato il, modificato da, modificato il.

CGM TELEMEDICINE		26697 ALLARMI	0 CHAT	2 ATTIVITÀ	DASHBOARD	HOME	ASSISTITI	OPERATORE	REFERTI	ADMIN
GESTIONE PDTA										
NOME	DESCRIZIONE	ORGANIZZAZIONI	PRODOTTI	PATOLOGIE	CREATO DA	CREATO IL	MODIFICATO DA	MODIFICATO IL		
prova	prova				Administrator General	09/03/2023	Administrator General	09/03/2023		
test 99					Administrator General	27/01/2021	Administrator General	27/01/2021		
test	test				Operatore Demo	23/05/2019	Operatore Demo	23/05/2019		
PDTA IPERTENSIONE	PDTA IPERTENSIONE			(25002) Diabete mellito, tipo II (non insulinodipendente) (diabete dell'adulto) o non specificato, scompensato, senza menzione di complicanze; (4019) Ipertensione essenziale non specificata;	Operatore Demo	14/02/2019	Operatore Demo	14/02/2019		
PDTA DIABETE	PDTA DIABETE			(25000) Diabete mellito, tipo II (non insulinodipendente) (diabete dell'adulto) o non specificato, non definito se controllato, senza menzione di complicanze; (25002) Diabete mellito, tipo II (non insulinodipendente) (diabete dell'adulto) o non specificato, scompensato, senza menzione di complicanze;	Operatore Demo	14/02/2019	Operatore Demo	14/02/2019		
PDTA BPCO	PDTA BPCO			(25002) Diabete mellito, tipo II (non insulinodipendente) (diabete dell'adulto) o non specificato, scompensato, senza menzione di complicanze; (49120) Bronchite cronica ostruttiva, senza menzione di esacerbazione acuta;	Operatore Demo	14/02/2019	Operatore Demo	14/02/2019		
PDT Diabete Tipo 2 Non complicato compensato	PDTA Care Puglia			(25000) Diabete mellito, tipo II (non insulinodipendente) (diabete dell'adulto) o non specificato, non definito se						

CGM CARE MAP

Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

Cliccando su un PDTA si apre un popup con i campi dettaglio, patologie, prodotti e organizzazioni riferite a quel PDTA.

PDTA

Nome: PDTA IPERTENSIONE

Descrizione: PDTA IPERTENSIONE

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE	SECURITÄT	CONFESSIONE
ALCO-ALCO-LANOLINA	Previsione	Digi 12 max
GLIETTEROLO-CALCIOLIO-ROBETTO	Previsione	Digi 12 max
PROPRINA	Previsione	Digi 12 max
ELETTROCARDIOGRAMMA	Previsione	Digi 12 max
BICORDIO-COMPLETO-CON-RONCALI	Previsione	Digi 12 max
BIACORIO-ROBETTO-ESG	Previsione	Digi 12 max
ALCOLO-ALCO-LANOLINA	Previsione	Digi 12 max
ESGOLIO-ALCOLO-ALCO-LANOLINA	Previsione	Digi 12 max
ASTAGIO	Previsione	Digi 12 max
SPRUBERON-CHINOLONE-PROLID-ACID-ACID-ACID-ACID	Previsione	Digi 12 max
SPRUBERON-CHINOLONE-PROLID-ACID-ACID-ACID-ACID	Previsione	Digi 12 max

PDTA

DETTAGLIO PATOLOGIE PRODOTTI ORGANIZZAZIONI

PATOLOGIA

(25002) Diabete mellito, tipo II (non insulinodipendente) (diabete dell'adulto) o non specificato, scompensato, senza menzione di complicanze

(4019) Ipertensione essenziale non specificata

PDTA

DETTAGLIO PATOLOGIE PRODOTTI ORGANIZZAZIONI

PRODOTTO

PDTA

DETTAGLIO PATOLOGIE PRODOTTI ORGANIZZAZIONI

ORGANIZZAZIONE

Gestione Questionari

La maschera sotto riportata è a disposizione dell'amministratore del sistema e consente di gestire i questionari da compilare sul portale. Ogni questionario ha i campi nome, note, tipo e il tic su cancellato o meno.

Nome	Note	Tipo
ADRS	Aphasic Depression Rating Scale	Valutazione Infermieristica
Anamnesi	Raccolta informazioni anamnesi	Anamnesi
ASRA	Alodia Social Risk Assesment	Valutazione Infermieristica
BADL	Attività di base della vita quotidiana	Valutazione Infermieristica
BARTHEL	Valutazione della disabilità	Valutazione Infermieristica
BENDAGGIO	FERITE DIFFICILI	Valutazione Infermieristica
BIM	Barthel Index Modificato	Valutazione Infermieristica
BMI		Valutazione Infermieristica
BRADEN	Integrità cutanea	Valutazione Infermieristica
BRASS	Blaylock Risk Assessment Screening	Valutazione Infermieristica
CBI	CAREGIVER BURDEN INVENTORY	Valutazione Infermieristica
Charlson	Indice di comorbidità di Charlson	Valutazione Infermieristica
CIRS	Cumulative Illness Rating Scale	Valutazione Infermieristica
CONLEY	Valutazione del rischio di caduta del paziente	Valutazione Infermieristica
ESAS	Edmonton Symptom Assessment Scale	Valutazione Infermieristica
Flow chart g 140		Comunicazione
Flow chart g 70		Comunicazione
GAD-7 ANXIETY		Valutazione Infermieristica
GDS	Geriatric Depression Scale	Valutazione Infermieristica
GEFI	INDICE DI VALUTAZIONE GLOBALE	Valutazione Infermieristica



<< < | Pagina 1 di 3 | > >>

Mostrati 1 - 20 di 44

CGM CARE MAP

Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

Cliccando su un questionario è possibile modificarne i dati, cliccando sul + in basso a destra è possibile inserire un nuovo questionario compilando i campi obbligatori.

Il campo Allegato permette di caricare un PDF che verrà concatenato al documento generato su singolo paziente una volta che il questionario o compilato, viene normalmente utilizzato per inserire una legenda o nota informativa relativa al questionario.

QuestionarioWeb

Nome *:


Note:

Tipo *:

Cancellato:


Allegato:

Da questo pop-up è possibile modificare o eliminare le sezioni e le domande del questionario selezionato.

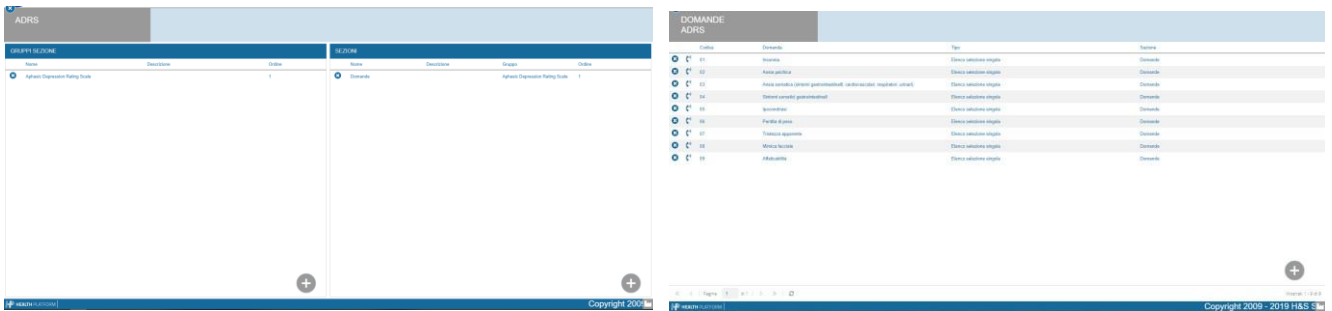

Le sezioni permettono di raggruppare le domande e generano una vista ad albero gerarchica in fase di compilazione su singolo paziente.

Il dettaglio di una singola domanda permette definire un codice, un testo, il tipo di domanda, la sezione in cui deve essere visualizzata, l'eventuale domanda successiva e precedente a quella aperta e il flag che definisce se è obbligatorio rispondere.

Se una domanda è a risposta chiusa è necessario definire le possibili risposte utilizzando l'icona , che apre la lista delle possibili risposte. Per ogni risposta è possibile definire un testo, l'ordine di visualizzazione, il peso (quest'ultimo utilizzato per le scale di valutazione) e l'eventuale domanda successiva nel caso l'utente scelga quella risposta.

Dettaglio Domanda

Codice * 1.01

Sezione * Schema psicologico

Domanda * Come procede lo schema psicologico dei primi 14gg?

Domanda ID:

Nome

Domanda Successiva 1.02. Si ricorda che lo stesso consulto che il suo medico può indicare diverse possibilità di assicurazione del Termino in modo da poter permettere al suo organismo di affidarsi con conseguenza economica dell'art.14.02?

Domanda Precedente

Tipo * Altro (seleziona singola) Domanda Precedente

Necessario:

Domanda iniziale:

Salva Cancella

Dettaglio Risposte

Seleziona una risposta

Punti: Ordine:

Testo	Punti	Ordine	Domanda Successiva
01	1	1	0.03 - Informazioni sulla patologia
02	2	2	0.03 - Informazioni sulla patologia

Nuova Elimina

Gestione Questionari App

La maschera sotto riportata è a disposizione dell'amministratore del sistema e consente di gestire i questionari da compilare sul telefono, all'interno dell'app. Ogni questionario ha i campi nome e note e le informazioni di creazione e modifica

CGM TELEMEDICINE

26997 ALLARMI 0 CHAT 2 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

GESTIONE QUESTIONARI APP

NOME	NOTE	CREATO DA	CREATO IL	MODIFICATO IL
Preparazione Videovista Follow up ultimo controllo Sintomi pneumologici	Preparazione Videovista Follow up ultimo controllo Sintomi pneumologici	Administrator General	13/10/2021	13/10/2021

+

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

Cliccando su un questionario è possibile modificarne i dati, cliccando sul + in basso a destra è possibile inserire un nuovo questionario compilando i campi obbligatori.

QUESTIONARIO APP

QUESTIONARIO APP
DOMANDE
ORGANIZZAZIONI

Nome *:

Note:

Messaggio iniziale:

Messaggio finale:

Pubblico: Se il questionario viene reso pubblico le organizzazioni associate saranno prese in considerazione. Altrimenti sarà visibile solo all'operatore che ha inserito il questionario

Genera misura da punteggio: Tipologia misura clinica:



Gestione Organizzazioni

La maschera sotto riportata è a disposizione dell'amministratore del sistema e consente di gestire le organizzazioni. Ogni organizzazione ha i campi nome, descrizione, organizzazione padre e tipo.

CGM | TELEMEDICINE 4923 ALLARMI 8 CHAT 390 ATTIVITÀ DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

GESTIONE ORGANIZZAZIONI

Nome	Descrizione	Organizzazione Padre	Tipo
ASS 1 - Cure Ambulatoriali e Domiciliari MUGGIA		ASS 1 - SS Anziani e residenzialità VALMAURA	ASL
ASS 1 - Cure Ambulatoriali e domiciliari OSPEDALE MAGGIORE		MEDICOPERTUTTI S.R.L.	ASL
ASS 1 - Cure Ambulatoriali e Domiciliari PUCCINI			ASL
ASS 1 - Cure Ambulatoriali e domiciliari SAN GIOVANNI			ASL
ASS 1 - Cure Ambulatoriali e domiciliari STOCK		Distretto Montale	ASL
ASS 1 - SS Anziani e residenzialità SAN GIOVANNI			ASL
ASS 1 - SS Anziani e residenzialità VALMAURA		Distretto Montale	ASL
ASS 5 - Cervignano Del Friuli			ASL
ASS 5 - Latisana			ASL
ASS 5 - Palmanova			ASL
ASS 5 - S. Giorgio di Nogaro		MEDICOPERTUTTI S.R.L.	Distretto
Chorafarma			ASL
Cliente 1			ASL
Cliente 2			ASL
Distretto 1 dell'ASS3			Distretto
Distretto 2 Tolmezzo			Distretto
Distretto di Chiviale			Distretto
Distretto Montale			Distretto
Farmacia Passione			ASL
GIPO			ASL
Gruppo 1		Cliente 1	ASL
Gruppo 2			ASL
MEDICOPERTUTTI S.R.L.	Codice Fiscale e P. IVA: 16871761009		ASL

CGM CARE MAP Copyright 2009 - 2023 CGM TELEMEDICINE S.R.L.

Cliccando su un'organizzazione è possibile vederne e modificarne i dettagli.

Dettaglio Organizzazione

- Gestione Organizzazione
- Gestione CDA
- Configurazioni
- Destinatari Notifiche Allarmi
- Figure professionali
- Referenti
- Area di esclusiva
- Contratto
- Prezzi attività

Nome *: CGM - MALTA

Descrizione: CGM - Country Malta

Padre:

Tipo Organizzazione *: ASL

Indirizzo:

Telefono:

Email:

External ID:

Condivisi assistiti:

Note:

Il campo Padre permette di definire una gerarchia di organizzazioni a N livelli; l'organizzazione padre viene definita di tipo "ASL", le altre "Distretti"

“Gestione CDA” serve ad inserire i dati utili a livello di organizzazione per l’invio del CDA verso regione dove è previsto

Dettaglio Organizzazione

Gestione Organizzazione	Gestione CDA	Configurazioni	Destinatari Notifiche Allarmi	Figure professionali	Referenti	Area di esclusiva	Contratto	Prezzi attività
Codice ASL:								
Sigla ASL:								
Durata PAI cronici:								
Codifica CDA:								

“Configurazioni” permette di caricare un’immagine ed una descrizione visibile su App per l’Organizzazione e di definire titolo e testo di default per le mail che vengono generate relativamente agli eventi avversi

Dettaglio Organizzazione

Gestione Organizzazione	Gestione CDA	Configurazioni	Destinatari Notifiche Allarmi	Figure professionali	Referenti	Area di esclusiva	Contratto	Prezzi attività	
Immagine:	Immagine caricata						Scegli...	Vedi	Elimina immagine
Descrizione app:	Benvenuto!								
Mail Eventi Avversi									
Titolo default:									
Messaggio default:									

Configurazione automatica destinatari allarmi:

Per ogni organizzazione è possibile impostare dei destinatari automatici per gli allarmi che vengono generati da soglie, essi sono suddivisi da un ulteriore livello che è il tipo monitoraggio del paziente, un operatore può ricevere le notifiche di più tipi monitoraggio.

Cliccando sul pulsante “+” si apre la finestra di dettaglio per aggiungere una nuova configurazione per tipo di monitoraggio all’organizzazione corrente.

Aggiungi Configurazione

Tipo monitoraggio *:	
	Salva Chiudi

Nella lista di configurazioni per l’attuale organizzazione, cliccando su un elemento in essa è possibile visualizzare e modificare gli operatori attualmente associati e visionare lo storico delle modifiche che sono state apportate.

Aggiungi Configurazione

Organizzazione: Tipo monitoraggio:

Lista Destinatari | **Storico**

Codice	Nominativo	Organizzazioni	
00000003	Operatore4 Test	ASL Piacenza, Distretto Montale; ASS 5 - S. Giorgio di Nogaro; ASS 1 - Cure Ambulatoriali e domiciliari STOCK; ASS 1 - Cure Ambulatoriali e domiciliari OSPEDALE MAGGIORE; ASS 1 - SS Anziani e residenzialita VALMAURA; ASS 1 - Cure Ambulatoriali e Domiciliari MUGGIA; ZZZZ; OrganizzazioneCrea nuova	<input checked="" type="checkbox"/>
00000004	Admin HP3	ASL Piacenza, Prova test 3; Passione; Org TEST	<input checked="" type="checkbox"/>

+

Aggiungi Configurazione

Organizzazione: Tipo monitoraggio:

Lista Destinatari | **Storico**

Codice	Nominativo	Data Modifica	Cancellato
00000004	Admin HP3	09/07/2020 09:59:46 am	<input type="checkbox"/>
00000010		09/07/2020 09:59:38 am	<input checked="" type="checkbox"/>
00000010		08/07/2020 09:57:22 am	<input type="checkbox"/>
00000004	Admin HP3	06/07/2020 04:34:52 pm	<input checked="" type="checkbox"/>
00000067	Operatore Telemonitoraggio	06/07/2020 04:34:50 pm	<input checked="" type="checkbox"/>
00000067	Operatore Telemonitoraggio	06/07/2020 04:32:19 pm	<input type="checkbox"/>
00000066	Medico test	06/07/2020 04:32:14 pm	<input checked="" type="checkbox"/>
00000066	Medico test	06/07/2020 04:28:04 pm	<input type="checkbox"/>
00000003	Operatore4 Test	18/05/2020 06:20:22 pm	<input type="checkbox"/>
00000004	Admin HP3	18/05/2020 06:20:22 pm	<input type="checkbox"/>

Cliccando sul pulsante “+” è possibile associare un nuovo operatore alla configurazione Organizzazione + Tipo Monitoraggio aperta, l’operatore deve far parte dell’organizzazione selezionata.

AGGIUNGI OPERATORE

Nominativo *:

Gli altri Tab sono visibili in base alla configurazione dei permessi e sono relativi alla configurazione di aspetti specifici di alcune organizzazioni.

Configurazione Stati Allarme

La maschera sotto riportata è a disposizione dell'amministratore del sistema e consente di gestire alcuni parametri sugli stati allarme come la possibilità di cambiargli stato automaticamente o di generare una notifica automatica via E-mail, SMS o direttamente sull'APP dell'assistito.

Gli stati allarme sono caratterizzati da un titolo e una descrizione.

TITOLO	DESCRIZIONE
Da gestire	
Inviata mail in attesa di riscontro	
Contattato assistito in attesa di riscontro	
COSMA-contattato assistito in attesa di mis.	test COSMA
Inviata email in attesa di misurazione-pressione	test COSMA
Inviata email in attesa di misurazione-peso	test COSMA
Inviata email in attesa di misurazione-bianco	test COSMA
Inviata mail in attesa di misurazione	
Contattato assistito in attesa di misurazione	
Contattare da medico	
Contattare da CM	
misura da verificare	test COSMA
Falso allarme	Falso allarme
Nessuna risposta, ricontattare	
Chiuso valore rientrato	
Chiuso senza contatto	
Chiusura SI ricezione misura	
Chiusura NO ricezione misura	
Assegnato HD H&S	
Assegnato Unisalute	
Chiuso - Inviata Mail SI misurazione	
Chiuso	Chiuso
Chiuso - Contattato SI misurazione	
Chiuso - Inviata Mail NO misurazione	

Cliccando su uno stato allarme viene aperta una finestra di dettaglio dove si possono visualizzare le configurazioni già presenti e la possibilità di aggiungerne di nuove.

TIPO REGOLA	ORGANIZZAZIONE	TIPO ASSISTITO	PRODOTTO	TIPO MONITORAGGIO	ALLARME PRIORITÀ	TIPO MISURA
Notifica		Cronicità ATS Monza e Brianza				

Cliccando sul pulsante “+” è possibile aggiungere una nuova configurazione andando ad impostare questi campi:

- Assistito Organizzazione
- Assistito Tipo Assistito
- Assistito Prodotto
- Assistito Tipo Monitoraggio
- Allarme Priorità
- Allarme Tipo Misura
- Tipo Regola



AGGIUNGI CONFIGURAZIONE

Tipo regola *:

Organizzazione:

Tipo assistito:

Prodotto:

Tipo monitoraggio:

Priorità allarme:

Tipo misura:

Salva Chiudi

I possibili valori del campo “Tipo Regola” possono essere:

- Notifica
- Cambio stato allarme
- Genera Attività

Una volta inserita una nuova riga nella griglia delle configurazioni è possibile, cliccando sulla configurazione desiderata, entrare in un secondo livello di dettaglio in cui si possono completare le configurazioni.

Tipo regola “Notifica”

Nel dettaglio delle notifiche di Tipo Regola Notifica, al tipo evento, sono presenti i seguenti controlli:

- **Evento**

è possibile selezionare il tipo di evento tra i seguenti:

- Temporizzato con TIMER espresso in minuti
scegliendo questa opzione sarà anche possibile specificare:
 - una condizione di esecuzione, che può essere:
 - Da cambio stato allarme (default): significa che la logica del timer è valida dal momento dell'ultimo cambio stato allarme.
 - Da quando è scattato l'allarme: si intende che la logica del timer è valida dal momento in cui è stato creato l'allarme.
 - una condizione di annullamento automatico, che può essere:
 - Nessuna (default)
 - Annullamento su arrivo misure: significa che se nel frattempo arriva una misura il timer deve essere annullato
 - L'attesa in minuti dopo i quali il timer scatterà
- Ricezione di misura con valore sopra soglia: si intende che la misura conferma la soglia che ha fatto scattare l'allarme.
- Ricezione di misura con valore sotto soglia: si intende che la misura non conferma la soglia che ha fatto scattare l'allarme.

- **Opzioni d'invio:**

E' possibile specificare se inviare la notifica all'app, via SMS o per e-mail; negli ultimi due casi, oltre ai destinatari specificati nella sezione sottostante mediante il ruolo, è possibile indicare se includere anche il paziente.

DETTAGLIO CONFIGURAZIONE - DA GESTIRE - NOTIFICA

Evento *: Temporizzato con TIMER ✕

Opzioni di invio:

Invia su app:

Invia mail: Invia mail paziente:

Invia sms: Invia sms paziente:

APP EMAIL SMS

Lista Marcatori

Titolo:

Messaggio:

Ruoli destinatari:

Profili utente:

Ora inizio notifiche *: 00:00

Ora fine notifiche *: 00:00

Condizione di esecuzione: Da cambio stato allarme ✕

Attesa minuti: 1

Condizione di annullamento: Nessuna ✕

Salva Elimina Chiudi

- **Sezione messaggistica**, differenziata per APP (titolo + contenuto), EMAL (titolo + contenuto), SMS (testo unico, max 160 caratteri), nei testi è possibile includere anche specifici marcatori.

CONFIGURA MARCATORI

Inserendo nel testo questi marcatori verranno automaticamente sostituiti con i relativi dati del paziente durante la generazione della notifica

- [PATIENT_NAME] - Nome paziente
- [PATIENT_SURNAME] - Cognome paziente
- [PATIENT_ID] - Codice paziente
- [PATIENT_EMAIL] - E-Mail paziente
- [PATIENT_TELCELL] - Cellulare paziente

Nella parte inferiore della schermata è possibile indicare i destinatari mediante una multiselezione dei possibili profili o dei ruoli dei contatti dell'assistito. Nel momento della generazione della notifica verranno ricercati tutti gli utenti dei profili selezionati che vedono il paziente e/o dei ruoli selezionati.

Tipo regola “Cambio stato allarme”

Il tipo regola “Cambio stato allarme”, oltre alla selezione di un tipo di evento dà la possibilità di selezionare lo stato allarme di destinazione per questa configurazione.

DETTAGLIO CONFIGURAZIONE - COSMA-INVIATA EMAIL IN ATTESA DI MIS-PRESSIONE - CAMBIO STATO ALLARME

Evento *: ricezione di misura con valore sotto soglia

Stato successivo:

- COSMA-misura da verificare
- Chiuso - contattato da medico
- Chiuso - contattato da CM
- Chiuso - convocato in ambulatorio
- Chiuso - gestito da medico
- Chiuso - gestito da CM Cosma
- In carico a CM ambulatorio
- COSMA-inviata email in attesa di mis-peso
- COSMA-inviata email in attesa di mis-bianco
- COSMA-misura da verificare

Tipo regola “Genera attività”

Il tipo regola “Genera Attività” consente di generare un’attività; E possibile specificare se l’attività debba essere generata contestualmente alla generazione dell’allarme o quando avviene un cambio stato di quest’ultimo e di selezionare il tipo di attività da generare.

DETTAGLIO CONFIGURAZIONE - ALLARME GESTITO - GENERA ATTIVITÀ

Evento *: Temporizzato con TIMER

Ora inizio notifiche *: 00:00

Ora fine notifiche *: 00:00

Condizione di esecuzione: Da cambio stato allarme

Attesa minuti:

Condizione di annullamento: Nessuna

Tipo Attività: Rilevazione misura



Tipo Misura: Ossimetria


Descrizione:




Salva Elimina Chiudi


Gestione Gruppi Chat

La maschera sotto riportata è a disposizione dell'amministratore del sistema e consente di gestire i referenti (tipicamente i centri di contatto dei CED e i contatti via telefono) ed i gruppi di utenti da utilizzare per le chat.

Riferimenti Contatti		
Nome	Telefono	Organizzazione
 CUP PARMA	0524	H&S Telemonitoraggio TEST
 CUP Piacenza	0523	H&S Telemonitoraggio TEST

 Mostrati 1 - 2 di 2

Gruppi Chat	
Nome	Organizzazione
 gruppo di test	H&S Telemonitoraggio TEST
 secondo gruppo	H&S Telemonitoraggio TEST
 terzo test	H&S Telemonitoraggio TEST

 Mostrati 1 - 3 di 3

I referenti possono essere inseriti premendo il tasto + del riquadro corrispondente o modificati dando un click sull'elemento della lista che si intende variare. Comparirà la seguente schermata:

Riferimento Contatto

Nome *:

Telefono *:

Organizzazione *:

Anche i gruppi di chat possono essere inseriti premendo il tasto + del riquadro corrispondente; comparirà la schermata:

Gruppo Chat

Nome *:

Organizzazione *:

Una volta salvato, il nuovo gruppo può essere selezionato per la modifica; il sistema consente l'inserimento degli utenti che faranno parte del gruppo proponendo l'elenco degli operatori che fanno riferimento alla stessa organizzazione alla quale fa riferimento il gruppo

Gruppo Chat

Nome *:

Organizzazione *:

Contatti Gruppo

	Nome	Telefono
<input checked="" type="checkbox"/>	Administrator	222
<input checked="" type="checkbox"/>	Operatore	1234

Contatti

Operatori

	Nome	Telefono
<input type="checkbox"/>	Admin Operatori US	
<input type="checkbox"/>	Operatore Francia	
<input type="checkbox"/>	OPERATORE GRUPPO	
<input type="checkbox"/>	Operatore SIS	
<input type="checkbox"/>	Operatore US	
<input type="checkbox"/>	Refertatore Test	

Gestione Caregivers

La maschera consente di visualizzare i caregiver censiti nel sistema ed il legame tra essi e gli assistiti associati.

The screenshot displays the 'GESTIONE CAREGIVER' interface. At the top, there are navigation tabs for 'CHAT' (0) and 'ATTIVITÀ' (207). The main header includes 'CGM TELEMEDICINE' and a search bar labeled 'Cerca Caregiver'. Below the header, there is a table listing caregivers. The table has columns for 'NOME', 'COGNOME', 'CODICE FISCALE', 'EMAIL', 'TELEFONO', and 'PAZIENTI CONNESSI'. A 'VEDI' button is present next to the first caregiver entry. Below the table, there is a pagination bar showing 'Pagina 1 di 1' and 'Mostrati 1 - 2 di 2'.

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE	EMAIL	TELEFONO	PAZIENTI CONNESSI		
raffaele	repetti	RPTRFLSX	raffaele.repetti@cgm.com	x			
VEDI DETTAGLIO							
VEDI	CODICE ASSISTITO	NOME	COGNOME	CODICE FISCALE	STATO RICHIESTA	PREFERITO	ABILITA NOTIFICHE
	0000110	Pazienta	Demo 1	DAIEPH1TES3H51H501L	In attesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Caregiver	MMarco	MMRCOV82E240535I	marco.magistrali@cgm.com	3355912628	Demo MMarco		

Per ciascun caregiver sono elencati i relativi assistiti con l'indicazione dello stato richiesta (ad esempio, In attesa se l'assistito deve ancora autorizzare il legame), del fatto che il caregiver è identificato come Preferito e se le notifiche sono abilitate.

Premendo il pulsante Vedi si apre la maschera di dettaglio dell'assistito in cui è possibile visualizzare tutte le relative informazioni (vedi cap. Dettagli assistito).

Gestione Attività

La maschera consente configurare le tipologie di attività che gli operatori possono inserire nella propria agenda. Sono presenti e configurabili solo le attività che hanno i sottotipi attività abilitati; ad esempio, l'attività "Rilevazione misura" non è configurabile in quanto non è possibile definire dei sottotipi.

CGM | TELEMEDICINE
Connected Patient Solutions

CHAT 207 ATTIVITÀ

DASHBOARD HOME ASSISTITI OPERATORE REFERTI ADMIN

GESTIONE ATTIVITA

Cerca

Nome	Descrizione	Traduzioni
Attività tecnica	Malfunzionamento e kit	Gestisci traduzioni
Cronicità	Cronicità	Gestisci traduzioni
PSP	PSP	Gestisci traduzioni
LTC	LTC	Gestisci traduzioni
Prestazioni Domiciliari	Prestazioni Domiciliari	Gestisci traduzioni
Polisonnografia	Polisonnografia Automatic	Gestisci traduzioni
Polisonnografia	Polisonnografia	Gestisci traduzioni
Notifica	Notifica	Gestisci traduzioni
Non disponibile	Non disponibile	Gestisci traduzioni
Chiamata vocale	Chiamata vocale	Gestisci traduzioni
Telecardiologia	Telecardiologia	Gestisci traduzioni

CGM CARE MAP

Per creare un nuovo tipo attività premere su '+':

Dettaglio attività

Nome default *: Descrizione default *:

Abilita sottotipi: Visibile su App: Visibile su Diario: Disabilita inserimento:

Abilita allarmi: Inseribile da template: Paziente obbligatorio: Esclusiva operatore:

Assegna operatore per distanza:

Salva Chiudi

È necessario specificare un nome e una descrizione per il nuovo tipo attività ed è possibile configurare l'attività abilitando o meno i seguenti flags:

- **Abilita sottotipi:** sempre valorizzato e non modificabile, le attività gestibili devono avere sottotipi.
- **Abilita allarmi:** consente la generazione di allarmi relativi all'attività
- **Assegna operatore per distanza**
- **Visibile su App:** rende visibile il tipo attività sull'App
- **Inseribile da template:** consente di creare attività di questo tipo durante la generazione del calendario
- **Visibile su Diario:** l'attività sarà visibile nel diario del paziente
- **Paziente obbligatorio:** è necessario specificare un paziente durante la creazione di un'attività di questo tipo
- **Disabilita inserimento:** non sarà possibile creare un'attività di questo tipo nell'agenda, utile per evitare che un tipo attività sia utilizzato se la sua eliminazione non è possibile (perché già utilizzato in passato)
- **Esclusiva operatore**

Premere poi Salva per salvare il nuovo tipo attività.

Cliccando su un'attività esistente si apre la maschera in cui è possibile modificarne la configurazione:

Dettaglio attività

Nome default *: Prestazioni Domicilian Descrizione default *: Prestazioni Domicilian

Abilita sottotipi: Visibile su App: Visibile su Diario: Disabilita inserimento:

Abilita allarmi: Inseribile da template: Paziente obbligatorio: Esclusiva operatore:

Assegna operatore per distanza:

Sotto attività

Id Attività tipo	Nome	Codice esterno	Durata default	N° Operatori previsti	Abilita chiamata Voip	Disabilita inserimento	Traduzioni
16	US-contattare assistito		0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gestisci traduzioni
16	US-contattare fornitore		0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gestisci traduzioni
16	Contatto da assistito		0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gestisci traduzioni
16	Contatto da fornitore		0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gestisci traduzioni
16	Termine copertura		0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gestisci traduzioni

Salva Aggiungi sottoattività Elimina Chiudi

Se si vuole aggiungere un sottotipo all'attività premere 'Aggiungi sotto attività' e configurare la sotto attività nella maschera seguente:

Dettaglio sottoattività

Nome *:

Codice esterno:

Durata default:

N° Operatori:

Abilita chiamata VoIP:

Disabilita inserimento:

Salva Chiudi

È necessario specificare un nome per la sottoattività e se si desidera è possibile valorizzare i rimanenti campi per configurarla:

- Codice esterno
- Durata default: è la durata normalmente utilizzata in fase di creazione di un'attività, espressa in minuti.
- N° operatori
- Abilita chiamata VoIP: la chiamata sarà abilitata in attività di questo tipo
- Disabilita inserimento: non sarà possibile utilizzare questa sottoattività in fase di creazione di un'attività nell'agenda, utile per evitare che sia utilizzato se la sua eliminazione non è possibile (perché già utilizzato in passato)

Premere 'Salva' per salvare la sottoattività.

Per tipi e sottotipi attività è possibile configurare le traduzioni nelle lingue disponibili tramite il pulsante 'Gestisci traduzioni' disponibile per ciascun tipo sulla destra della riga corrispondente:

Dettaglio attività traduzioni

Se si desidera, possono essere gestite le traduzioni per questa attività tipo

Lingua	Nome tradotto	Descrizione tradotto	
Italiano	Polisonnografia	Polisonnografia Automatic	Descrizione tradotto
English	Polysomnography	Polysomnography Manual	
Chinese	进行翻译	进行翻译	
Español	PARA TRADUCIR	PARA TRADUCIR	
Français	TRADUIRE	TRADUIRE	
Deutsch	ÜBERSETZT WERDEN	ÜBERSETZT WERDEN	
Swedish	Polysomnografi	Polysomnografi	

Salva Chiudi


Dettaglio sottoattività traduzioni

Se si desidera, possono essere gestite le traduzioni per questa attività sottotipo

Lingua	Nome tradotto
Italiano	Richiesta esame
English	Exam request
Chinese	进行翻译
Español	PARA TRADUCIR
Français	TRADUIRE
Deutsch	ÜBERSETZT WERDEN
Swedish	Undersökningsfrågan

Salva Chiudi

Impostazioni Generali


Nella sezione sotto l'icona  in alto a destra, sono presenti la pagina di Impostazioni Account, la pagina di Cambio Lingua, il Logout e, nel caso in cui l'operatore vi sia abilitato, la pagina di videochiamata.

Videochiamata

Se abilitata, consente di accedere alle funzionalità del videoconsulto. È possibile impostare l'utenza in modo che la finestra di videoconsulto si apra automaticamente al login dell'operatore.

Impostazioni Account

Le Impostazioni account permettono di modificare i Dati anagrafici e le informazioni di contatto dell'Operatore.

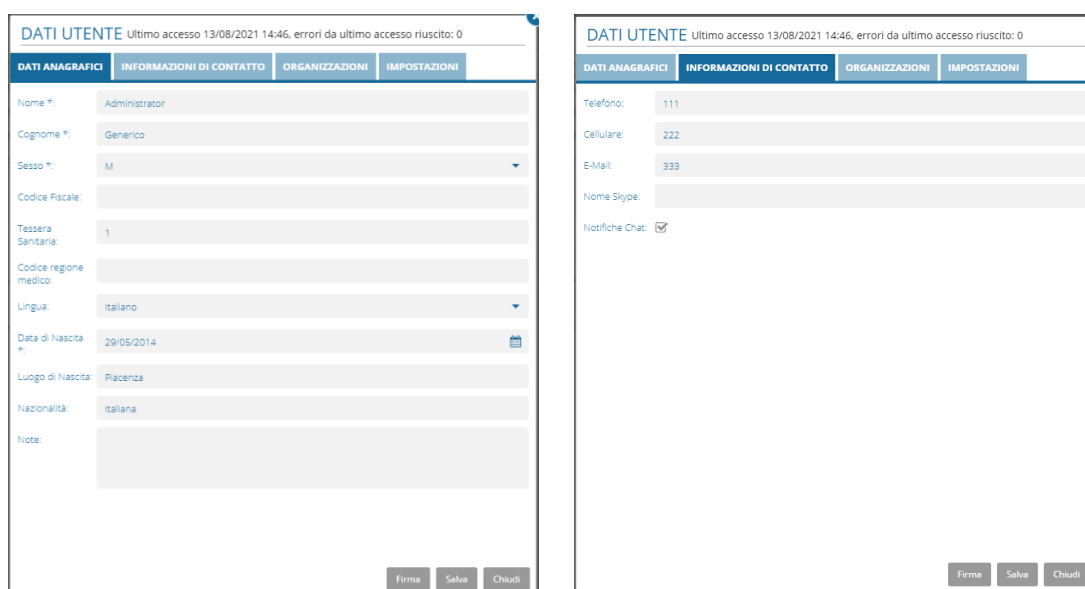

DATI UTENTE Ultimo accesso 13/08/2021 14:46, errori da ultimo accesso riuscito: 0

DATI ANAGRAFICI | INFORMAZIONI DI CONTATTO | ORGANIZZAZIONI | IMPOSTAZIONI

Nome *: Administrator
 Cognome *: Generico
 Sesso *: M
 Codice Fiscale:
 Tessera Sanitaria: 1
 Codice regione medico:
 Lingua: Italiano
 Data di Nascita *: 29/05/2014
 Luogo di Nascita: Piacenza
 Nazionalità: Italiana
 Note:

Firma Salva Chiudi

DATI UTENTE Ultimo accesso 13/08/2021 14:46, errori da ultimo accesso riuscito: 0

DATI ANAGRAFICI | INFORMAZIONI DI CONTATTO | ORGANIZZAZIONI | IMPOSTAZIONI

Telefono: 111
 Cellulare: 222
 E-Mail: 333
 Nome Skype:
 Notifiche Chat:

Firma Salva Chiudi

Il tab “Organizzazioni” mostra le varie organizzazioni a cui l’utente appartiene.

Nel tab “Impostazioni” è possibile selezionare una preferenza a livello di singolo utente sulle configurazioni internazionali come:

- Il tipo di unità di misura imperiale/internazionale che poi verrà visualizzata nella pagina dei parametri sulle misure corrispondenti
- Il formato orario 12h/24h in modo da poter visualizzare gli orari in 12h AM/PM oppure 24h su tutta la piattaforma

Tramite il pulsante “Firma” è possibile caricare il file della propria firma digitale certificata che verrà usata in automatico per firmare i referti degli esami.

Lingua

Utilizzando questa voce di menu è possibile utilizzare una lingua diversa da quella di default durante la sessione in corso. L’impostazione non verrà mantenuta nelle sessioni successive.

Informazioni generali e riferimenti

Destinazione d'uso

CGM CARE MAP è in grado di ricevere da dispositivi medici di misura le seguenti macrocategorie di parametri: Parametri vitali, Ematochimici, Cardiaci, Antropometrici, Spirometria, Urine, Indici di rischio, Attività fisica, Parametri ambientali. Questi dati in ingresso sono utilizzati per:

- creare grafici che mostrino l'andamento temporale dei parametri vitali monitorati, impostare da parte del medico numerose tipologie di soglie personalizzate e la conseguente prioritizzazione e gestione degli allarmi generati;
- visualizzare tracciati ECG, usare righelli per la misura del tracciato e applicare filtri (LowPass, HighPass);
- in caso di holter pressorio, calcolare valori medi e deviazione standard di pressione e frequenza cardiaca, intervallo sistolica/diastolica, confrontare con le soglie impostate per indicazione misure scartate e calcolare la percentuale sopra soglia
- in caso di spirometria, visualizzare le curve ricevute, calcolare il valore Teorico per diversi parametri (FVC, FEV1, etc.) e il rapporto tra valore reale e valore teorico (% Teorico).
- in caso di saturimetria in continuo, visualizzare il tracciato e calcolare minimo, massimo e media dei valori di saturazione e pulsazioni, oltre ad indicare gli intervalli temporali in cui il valore è stato inferiore ad una serie di valori di riferimento predefiniti (es. 90%, 88%, 80%, 70%, 60%).

Ciò consente di effettuare un telemonitoraggio dello stato di salute dei pazienti con lo scopo di fornire informazioni utilizzate dal medico per prendere decisioni a fini diagnostici e terapeutici. CGM CARE MAP non deve essere utilizzato in ambiti e su pazienti, ove la natura delle variazioni dei parametri vitali sia tale da poter creare un pericolo immediato per il paziente stesso (ad esempio, reparti di terapia intensiva o pazienti connessi a sistemi di supporto vitale).

Classificazione

Classificazione secondo Regolamento (UE) 2017/745 Articolo 51 - Allegato VIII regola 11 classe IIa.

Per la qualifica del prodotto come dispositivo medico si segue lo schema decisionale presente nella MDGC 2019-11, che permette di qualificare un SW come un DM software (MDSW).

Utilizzatori previsti

Ogni modulo del dispositivo è destinato all'utilizzo da parte di diversi utenti con ruoli diversi:

- CGM CARE MAP: utilizzato da operatori sanitari (medici, personale infermieristico)
- CGM CARE MAP Mobile: utilizzato dai pazienti stessi o con l'ausilio di caregiver
- CGM POINT OF CARE: utilizzato da operatori sanitari (medici, personale infermieristico, farmacisti)

Pazienti, indicazioni e controindicazioni

Il dispositivo è utilizzato per pazienti che necessitano un monitoraggio da remoto continuativo; solitamente si tratta di pazienti affetti da patologie croniche, per le quali risulta importante monitorare diversi parametri

clinici e tenere sotto controllo lo stato di salute. Si esclude l'utilizzo in ambiti e su pazienti, ove la natura delle variazioni dei parametri vitali sia tale da poter creare un pericolo immediato per il paziente stesso (ad esempio, reparti di terapia intensiva o pazienti connessi a sistemi di supporto vitale). Non si individuano ulteriori limitazioni d'uso/controindicazioni specifiche per l'utilizzo del SW, in termini di età o caratteristiche dei pazienti; è possibile l'utilizzo anche in caso di pazienti con ridotta capacità cognitiva e motoria, in quanto sono di norma assistiti da familiari o caregiver, che possono aiutarli nell'utilizzo del dispositivo.

Prestazioni essenziali

Dato che CGM CARE MAP è un dispositivo software di supporto al telemonitoraggio di ausilio alla terapia (vedi Destinazione d'uso) che consente la raccolta di dati clinici provenienti da vari dispositivi di misura, si ritiene di non identificare alcuna funzionalità come Prestazione Essenziale.

Non avendo il dispositivo alcuna funzionalità di:

- sostentamento alle funzioni vitali della persona
- erogazione di farmaci o altro che necessiti di un funzionamento garantito
- allarmi da cui possa dipendere nell'immediatezza lo stato di salute della persona
- principale fonte di informazioni per assumere decisioni fondamentali nel garantire la vita e lo stato di salute della persona

non si ritiene necessaria alcuna funzionalità del prodotto, dalla cui assenza possa derivare un rischio inaccettabile per la persona e quindi debba essere garantita nelle situazioni indicate dalla Norma, ovvero anche in presenza di anomalie e/o guasti.

Lo stesso invio delle misurazioni al sistema centrale, pur essendo previste misure per renderlo il più possibile affidabile e corretto, non deve essere necessariamente garantito, non essendo prese decisioni fondamentali in base a tali dati che possano arrecare danno alla persona.

Specifiche tecniche

Requisiti minimi hardware:

La configurazione varia sensibilmente in base al tipo di configurazione richiesta in termini di ridondanza e capacità elaborativa, anche in funzione dei carichi previsti. Di seguito la configurazione minima per poter avviare un servizio base comprendente una macchina per tipo (Web, Application e Database):

CPU: 20vCPU

Memoria RAM: 64 GB

Storage: 580 GB

Piattaforma operativa:

- Microsoft Windows Server 2019 o superiore

- Microsoft SQL Server 2019 o superiore
- Microsoft IIS 10 o superiore
- Opz. CardioCalm (AMPS CER-S v4.3) o superiore
- Browser: Microsoft Edge (v. 128, 131), Google Chrome (v. 131)

Caratteristiche delle reti informatiche:

È necessaria una connettività internet per permettere l'accesso degli utenti e l'invio/ricezione di comunicazioni automatiche (mail, sms, etc.).

La rete interna per il collegamento dei vari server è di tipo ad alta velocità e ridondata, nel dettaglio dipende dal tipo di installazione e dalle configurazioni adottate, oltre che dal data center utilizzato.

Misure di sicurezza informatica, compresa la protezione contro l'accesso non autorizzato:

I server sono dotati di antivirus/antimalware e le reti informatiche sono protette da sistemi di sicurezza perimetrale (c.d. *Firewall*) e da altre apparecchiature destinate allo scopo, come IDS (Intrusion Detection System), IPS (Intrusion Prevention system) e WAF (Web Application Firewall), mantenute aggiornate allo stato dell'arte.

I dati 'sensibili' sono protetti da cifratura e misure di anonimizzazione, mentre tutte le comunicazioni avvengono tramite protocolli sicuri (HTTPS, TLS 1.2).

L'accesso ai servizi avviene sempre tramite credenziali personali e la password è soggetta a criteri di complessità e policy di cambio periodico, gli utenti vengono sospesi dopo un periodo configurabile di inattività. Per aumentare la sicurezza è possibile attivare l'autenticazione a più fattori ove necessario.

Fabbricante

CGM CARE MAP è prodotto da:

CGM TELEMEDICINE S.R.L


Sede legale: Foro Buonaparte, 70 – 20121 Milano

Sede operativa: Via Emilia Parmense, 204 - 29122 Piacenza Tel. +39 0523 603311

Fax +39 0523 603364



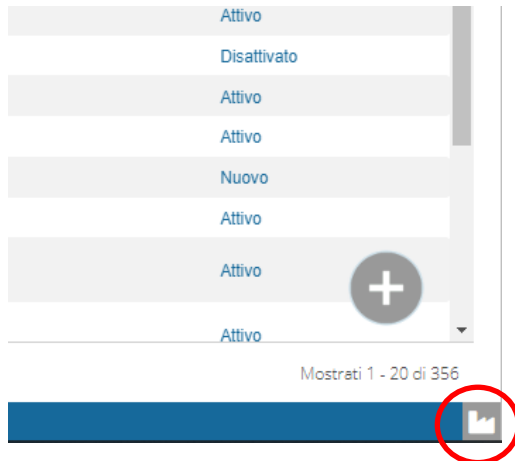

nella sede operativa di Piacenza.

Nell'angolo inferiore destro delle pagine è sempre disponibile un'icona a forma di fabbrichetta, cliccandola è possibile visualizzare la versione del software attualmente in uso e le informazioni del fabbricante:



	CGM TELEMEDICINE S.r.l. Sede legale: Foro Buonaparte, 70 – 20121 – Milano (MI) - Italia Sede operativa: Via Emilia Parmense, 204 – 29122 – Piacenza (PC) - Italia	
#	CGM CARE MAP	
CGM TELEMEDICINE		
Ver. 4.0.0.0		
Modulo Portale Web		
UDI	(01)00086000573683(8012)v.4.0.0.0	
	[aaaa/mm/gg]	
MD		CE 0051
	Le istruzioni per l'uso sono disponibili in formato elettronico PDF all'interno della sezione 'Manualistica' del menu Operatore. Per la visualizzazione è sufficiente un qualunque programma che supporti tale formato (Acrobat Reader o similari). E' possibile richiederne una copia cartacea inviando una mail all'indirizzo <mail configurata>, che sarà inviata gratuitamente entro 7 giorni.	

Spiegazione della simbologia:

	Identificazione del Fabbricante
#	Modello del dispositivo
	Data di rilascio
	Consultare il manuale d'uso
	Simbolo per indicare che le IFU sono disponibili in formato elettronico
UDI	Vettore UDI
MD	Dispositivo medico
CE 0051	Conforme al Regolamento (UE) 2017/745, DM Classe IIa. Il codice di 4 cifre indica l'ente certificatore del dispositivo.