



In CGM MEDXPRT kann je Arbeitsplatz ein Standard e-card Kartenleser definiert werden. Ist an einem Arbeitsplatz ein e-card Kartenleser als Standard festgelegt, so wird dieser automatisch bei jedem e-card Dialogaufbau vom System verwendet.

### STANDARD E-CARD KARTENLESER FESTLEGEN

Starten Sie den „e-card Browser“ über die „CGM MEDXPRT Toolbar“ → „e-card“ → „Browserfenster der eCard öffnen“.



Abbildung 1: e-card in der CGM MEDXPRT Toolbar

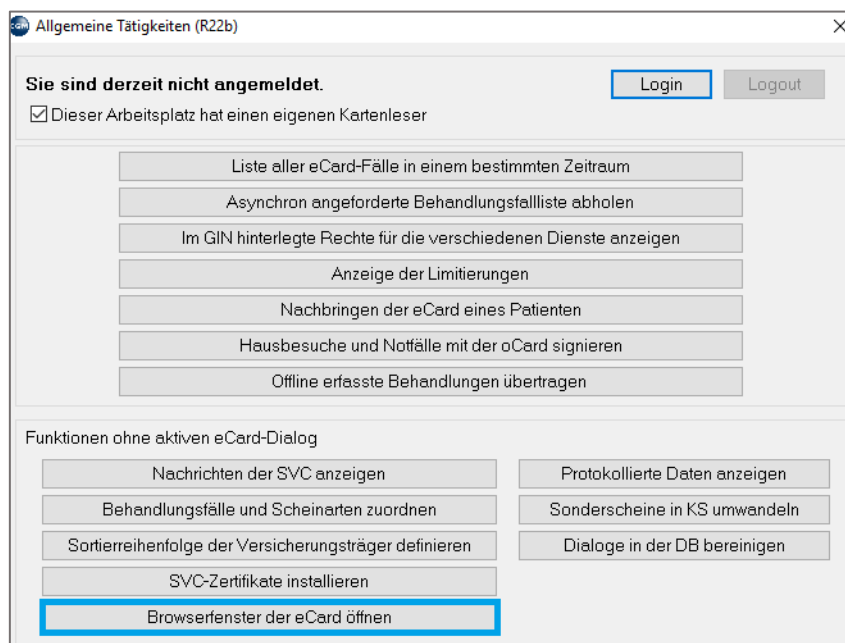


Abbildung 2: Aufruf des e-card Browsers in der CGM MEDXPRT e-card Verwaltung

Klicken Sie auf „(V)erfügbare Kartenlesegeräte anzeigen“ und notieren Sie sich die vollständige **Kartenlesegerät-ID** des e-card Kartenlesers, der als Standard definiert werden soll und schließen Sie den e-card Browser.

V23.1.2.0Z / 10.226.0.33 / Testsystem eCard (301)

30.03.2023 [\(H\)ilfe](#)

**Verfügbare Kartenlesegeräte anzeigen**

Konfigurierte Gruppe	Kartenlesegerät-ID	Verbindungsoptione(n)	FW-Version
Keine Gruppe	AST_G2_1 (ff:01:48)	10.196.0.35	1264
	AST_G2_2	192.168.68.134	01.02.14
	AST_G2_3 (02:18:95)	10.196.0.35	1264

Abbildung 3: : Kartenlesegerät-ID „AST\_G2\_1 (ff:01:48)“



Wechseln Sie in das „**CGM MEDXPRT Hauptmenü**“ und öffnen Sie die e-card Einstellungen des Arbeitsplatzes für den ein Standard e-card Kartenleser hinterlegt werden soll, unter „**2 Stammdaten**“ → „**4 Organisation**“ → „**4 e-card Verwaltung**“ → „**2 Konfiguration**“.

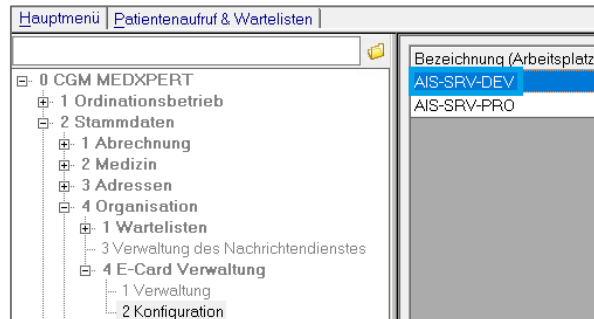


Abbildung 4: e-card Einstellungen des Arbeitsplatzes



**HINWEIS:** Die Bezeichnung des Arbeitsplatzes, auf dem Sie sich gerade befinden, wird Ihnen im „**CGM MEDXPRT Hauptmenü**“ im linken unteren Bildschirmrand angezeigt.

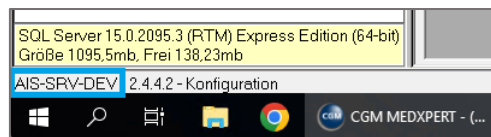


Abbildung 5: Bezeichnung des aktuellen Arbeitsplatzes

Deaktivieren Sie die Checkbox „**Standardeinstellungen verwenden**“, tragen Sie die vollständige **Kartenlesegerät-ID** des e-card Kartenlesers, der als Standard verwendet werden soll, im Feld „**Bevorzugter Kartenleser**“ ein und klicken Sie auf „**Speichern**“.

<input checked="" type="checkbox"/>	Standardeinstellungen verwenden
Standardeinstellungen laut Parameterstamm	
Es wird kein bestimmter Kartenleser bevorzugt, immer alle vorschlagen	
URL der C-Box	<input type="text" value="http://localhost:60140/"/>
Spezifische Einstellungen für diesen Arbeitsplatz	
Bevorzugter Kartenleser	<input type="text" value="AST_G2_1 (#01:48)"/>
URL der C-Box	<input type="text"/>

Beim e-card Dialogaufbau wird nun keine e-card Kartenleser Auswahl mehr angezeigt, sondern vom System direkt der für den Arbeitsplatz hinterlegte Standard e-card Kartenleser verwendet.

## ÄNDERN DES STANDARD E-CARD KARTENLESERS

Soll der für einen Arbeitsplatz hinterlegte Standard e-card Kartenleser geändert werden, passen Sie den Eintrag unter „**Bevorzugter Kartenleser**“ an.

Eine Liste aller im System vorhanden e-card Kartenlesegeräte und deren vollständige **Kartenlesegerät-ID** können Sie über den e-card Browser abrufen.