



**HINWEIS:** Die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) informiert, dass die aktuellen RKS-Signaturkarten vom Typ ACOS-ID 2.1 ab dem **7. Juni 2025** nicht mehr verwendet werden dürfen, da ihre Zertifikate auslaufen und sie den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Aus diesem Grund müssen betroffene Registrierkassenbetreiber rechtzeitig neue, zertifizierte Signaturkarten beziehen und diese über FinanzOnline registrieren sowie die alten Karten außer Betrieb nehmen.

Aufgrund der knappen Verfügbarkeit der neuen Signaturkarten wurde zugelassen, dass bestehende Karten des Typs **ACOS-ID 2.1** über ihre technische Gültigkeit hinaus genutzt werden dürfen.

Weitere Informationen zur Vorgehensweise beim Tausch der Signaturkarte finden Sie unter:

<https://www.wko.at/steuern/vorgehensweise-tausch-rksv-signaturkarte>

Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Verbindlichkeit dieser Informationen übernehmen können.

Ob diese Schritte für Ihren konkreten Anwendungsfall ausreichend sind, ist von Ihrer individuellen Situation abhängig und sollte im Zweifel mit Ihrem Steuerberater abgestimmt werden.

Um die in Ihrer Registrierkasse für die Signatur von Belegen verwendete Signatureinheit zu wechseln, gehen Sie bitte wie folgt vor:

## NEUE SIGNATUREINHEIT ANSCHLIESSEN

- Ermitteln Sie zunächst, an welchem PC (Server oder Client) die bisherige Signatureinheit angeschlossen ist.
- Entfernen Sie die alte Signatureinheit, sofern diese nicht mehr benötigt wird.
- Schließen Sie die neue Signatureinheit genau an diesen PC an einem freien USB-Anschluss an.



**HINWEIS:** Schließen Sie die neue Signatureinheit ausschließlich an dem PC (Server oder Arbeitsplatz) an, an dem auch die bisherige Signatureinheit betrieben wurde, da die Registrierkasse nur so ordnungsgemäß funktioniert.


## SIGNATUREINHEIT IN DER REGISTRIERKASSE WECHSELN

- Öffnen Sie die Registrierkassenverwaltung ("CGM MEDXPRT Hauptmenü" → "4 Abrechnung" → "7 – Buchhaltung" → "4 - Registrierkasse" → "1 - Registrierkassenverwaltung").


Kassen-ID	Bezeichnung	Status	SE
40000003	Ordination Dr. Wilma Musterärztin	In Betrieb	✓

1/3

- Öffnen Sie das Kontextmenü der betreffenden Registrierkasse und wählen Sie: "**Sicherheitseinrichtung (SE)**" → "**Sicherheitseinrichtung wechseln**".

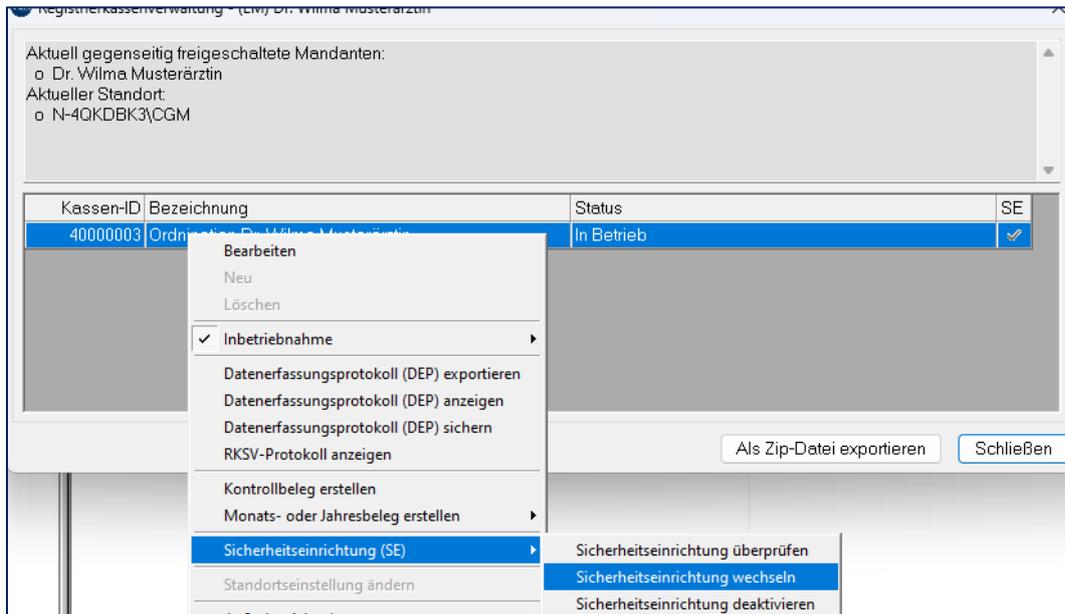

- Wählen Sie die entsprechende Signatureinheit aus der angezeigten Liste und klicken Sie auf "**Auswählen**".
  - o Falls die Signatureinheit nicht erscheint, überprüfen Sie die Verbindung und klicken Sie auf "Liste aktualisieren".

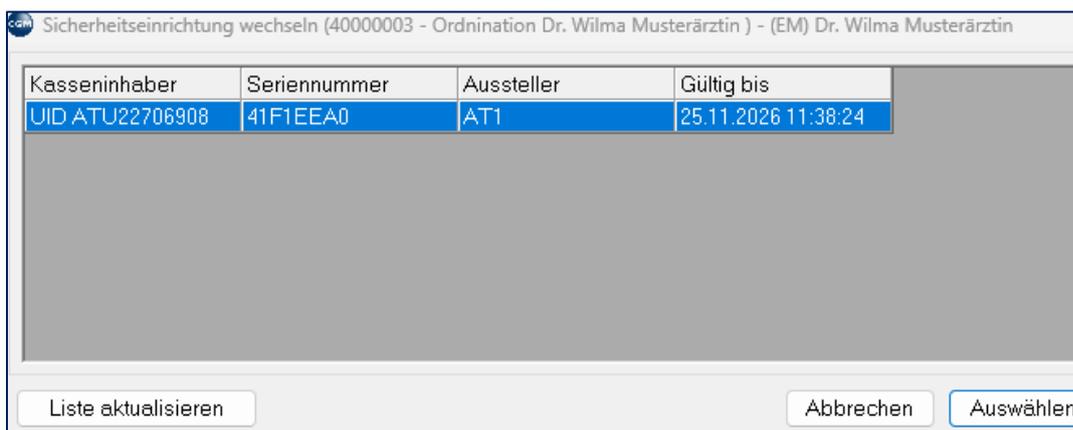

- Nach der Auswahl werden Ihnen die Registrierkassendaten für die Registrierung der Signatureinheit in FinanzOnline angezeigt.
  - Drucken Sie diese Daten bei Bedarf aus und klicken Sie auf „Schließen“.

Anmeldungsdaten für FinanzOnline anzeigen (40000003 - Ordination Dr. Wilma Musterärztin) - (Dr.) Dr. Wilma Musterärztin

Um die Anmeldung Ihrer Registrierkasse bzw. Sicherheitseinrichtung bei FinanzOnline durchführen zu können, benötigen Sie oder Ihr Steuerberater folgende Daten. Bei Fragen zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Dr. Wilma Musterärztin

**Registrierkassendaten für FinanzOnline**

<b>Meldungsart</b>	Meldung zur 'Inbetriebnahme' einer Registrierkasse
<b>Seriennummer des Zertifikats</b>	41F1EEA0
<b>Zertifizierungsdiensteanbieter</b>	AT1
<b>Kassenidentifikationsnummer (Kassen-ID)</b>	40000003
<b>AES-Schlüssel des Umsatzzählers</b>	s2wwquZYSFIS3HLSEHety8T1EyadHv175023w4JfITc=
<b>Steuernummer</b>	
<b>UID-Nummer</b>	ATU22706908

Drucken Schließen Anmeldung annullieren

- Diese Informationen können auch nachträglich jederzeit über den Menüpunkt "Inbetriebnahme" → "Daten für Anmeldung bei FinanzOnline anzeigen" aufgerufen werden.

Aktuell gegenseitig freigeschaltete Mandanten:

- Dr. Wilma Musterärztin

Aktueller Standort:

- N-4QKDBK3\CGM

Kassen-ID	Bezeichnung	Status
40000003	Ordination Dr. Wilma Musterärztin	In Betrieb

Bearbeiten

Neu

Löschen

**Inbetriebnahme**

Datenerfassungsprotokoll (DEP) exportieren

Datenerfassungsprotokoll (DEP) anzeigen

Datenerfassungsprotokoll (DEP) sichern

RKSV-Protokoll anzeigen

Registrierkasse bei FinanzOnline anmelden

Startbeleg erstellen

Registrierkasse in Betrieb nehmen

Daten für Anmeldung bei FinanzOnline anzeigen

Startbeleg der Registrierkasse anzeigen

## REGISTRIERUNG DER SIGNATUREINHEIT IN FINANZONLINE



**HINWEIS:** Neue Signatureinheiten, die bisher noch nicht mit der Registrierkasse verwendet wurden, müssen in FinanzOnline registriert werden.

Nähere Informationen hierzu erhalten Sie direkt über <https://finanzonline.bmf.gv.at>