



Um die in Ihrer Registrierkasse für die Signatur von Belegen verwendete Signatureinheit zu wechseln, gehen Sie bitte wie folgt vor:

NEUE SIGNATUREINHEIT ANSCHLIESSEN


- Ermitteln Sie zunächst, an welchem PC (Server oder Client) die bisherige Signatureinheit angeschlossen ist.
- Entfernen Sie die alte Signatureinheit, sofern diese nicht mehr benötigt wird.
- Schließen Sie die neue Signatureinheit genau an diesen PC an einem freien USB-Anschluss an.



HINWEIS: Schließen Sie die neue Signatureinheit ausschließlich an dem PC (Server oder Arbeitsplatz) an, an dem auch die bisherige Signatureinheit betrieben wurde, da die Registrierkasse nur so ordnungsgemäß funktioniert.

SIGNATUREINHEIT IN DER REGISTRIERKASSE WECHSELN

- Öffnen Sie die Registrierkassenverwaltung ("**Verwaltung**" → "**Registrierkassen**").

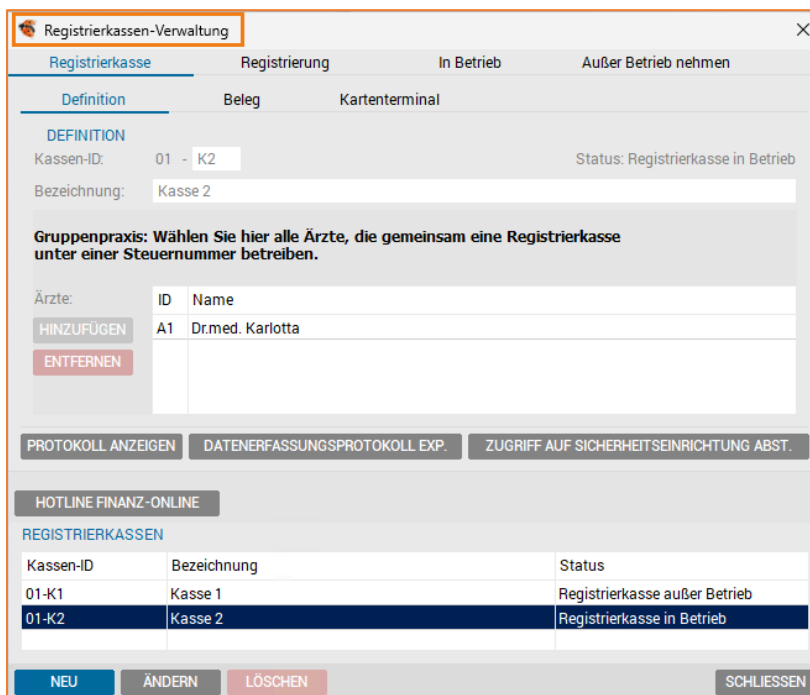

Registrierkassen-Verwaltung

Registrierkasse Registrierung In Betrieb Außer Betrieb nehmen

Definition Beleg Kartenterminal

DEFINITION

Kassen-ID: 01 - K2 Status: Registrierkasse in Betrieb

Bezeichnung: Kasse 2

Gruppenpraxis: Wählen Sie hier alle Ärzte, die gemeinsam eine Registrierkasse unter einer Steuernummer betreiben.

Ärzte:

ID	Name
A1	Dr.med. Karlotta

HINZUFÜGEN ENTFERNEN

PROTOKOLL ANZEIGEN DATENERFASSUNGSPROTOKOLL EXP. ZUGRIFF AUF SICHERHEITSEINRICHTUNG ABST.


HOTLINE FINANZ-ONLINE

REGISTRIERKASSEN

Kassen-ID	Bezeichnung	Status
01-K1	Kasse 1	Registrierkasse außer Betrieb
01-K2	Kasse 2	Registrierkasse in Betrieb

NEU ÄNDERN LÖSCHEN SCHLIESSEN

- Wechseln Sie in den Reiter "**Registrierung**", wählen Sie die gewünschte Registrierkasse aus, und wählen Sie die Funktion [**ÄNDERN**].

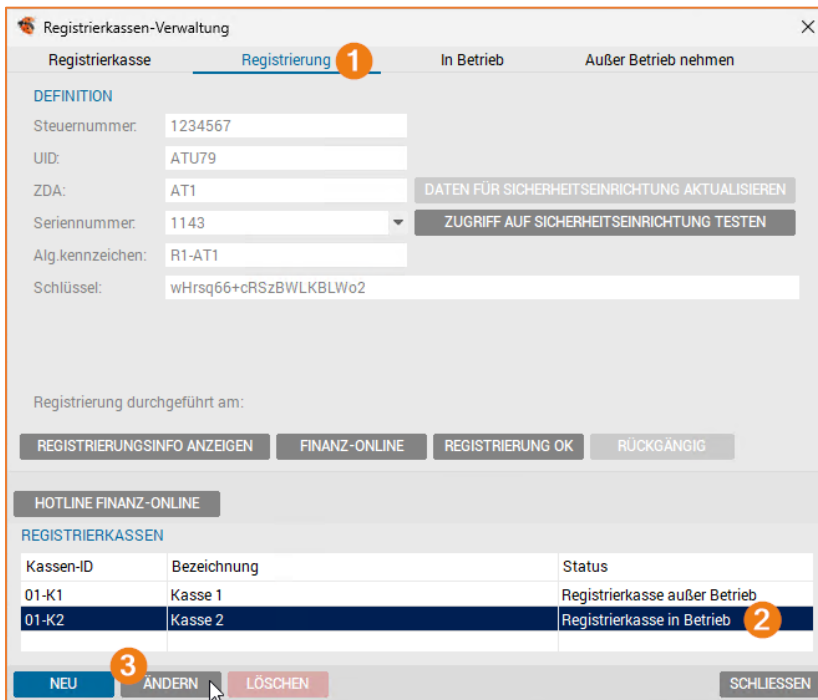

Registrierkassen-Verwaltung

Registrierkasse **Registrierung** In Betrieb Außer Betrieb nehmen

DEFINITION

Steuernummer: 1234567
 UID: ATU79
 ZDA: AT1 **DATEN FÜR SICHERHEITSEINRICHTUNG AKTUALISIEREN**
 Seriennummer: 1143 **ZUGRIFF AUF SICHERHEITSEINRICHTUNG TESTEN**
 Alg.kennzeichen: R1-AT1
 Schlüssel: wHrsq66+cRSzBWLKBLWo2

Registrierung durchgeführt am:

REGISTRIERUNGSINFO ANZEIGEN **FINANZ-ONLINE** **REGISTRIERUNG OK** **RÜCKGÄNGIG**


HOTLINE FINANZ-ONLINE

REGISTRIERKASSEN

Kassen-ID	Bezeichnung	Status
01-K1	Kasse 1	Registrierkasse außer Betrieb
01-K2	Kasse 2	Registrierkasse in Betrieb

NEU **ÄNDERN** **LÖSCHEN** **SCHLIESSEN**

- Wählen Sie die entsprechende Signatureinheit aus der angezeigten Liste im Dropdown "Seriennummer".
 - Falls die Signatureinheit nicht erscheint, überprüfen Sie die Verbindung und klicken Sie auf **[DATEN FÜR SICHERHEITSEINRICHTUNG AKTUALISIEREN]**.
 - Nach der Auswahl schließen Sie den Wechsel mit **[SPEICHERN]** ab.

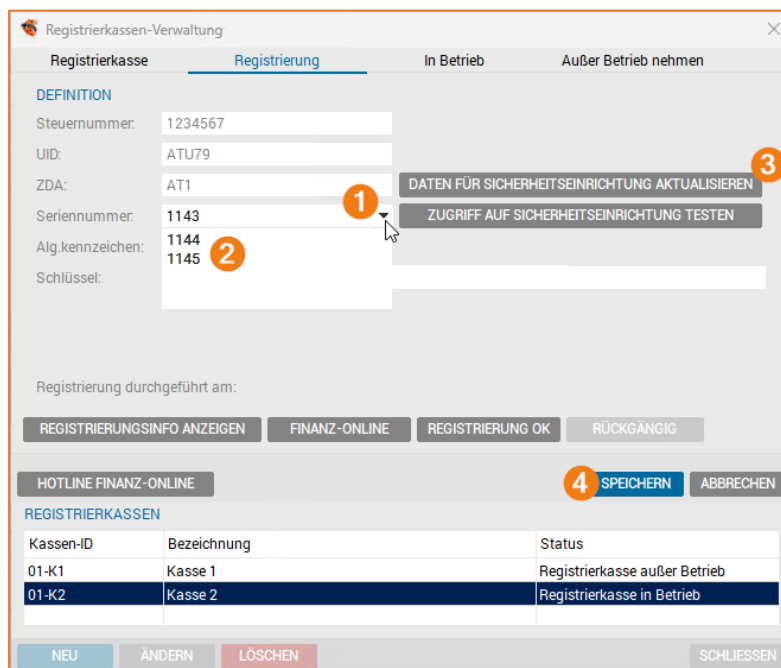

Registrierkassen-Verwaltung

Registrierkasse **Registrierung** In Betrieb Außer Betrieb nehmen

DEFINITION

Steuernummer: 1234567
 UID: ATU79
 ZDA: AT1 **DATEN FÜR SICHERHEITSEINRICHTUNG AKTUALISIEREN**
 Seriennummer: 1143 **ZUGRIFF AUF SICHERHEITSEINRICHTUNG TESTEN**
 Alg.kennzeichen: 1144
 1145
 Schlüssel:

Registrierung durchgeführt am:

REGISTRIERUNGSINFO ANZEIGEN **FINANZ-ONLINE** **REGISTRIERUNG OK** **RÜCKGÄNGIG**


HOTLINE FINANZ-ONLINE **4 SPEICHERN** **ABBRECHEN**

REGISTRIERKASSEN

Kassen-ID	Bezeichnung	Status
01-K1	Kasse 1	Registrierkasse außer Betrieb
01-K2	Kasse 2	Registrierkasse in Betrieb

NEU **ÄNDERN** **LÖSCHEN** **SCHLIESSEN**

- Danach können Sie die Registrierkassendaten für die Registrierung der Signatureinheit in FinanzOnline mit **[REGISTRIERUNGSINFO ANZEIGEN]** anzeigen lassen.

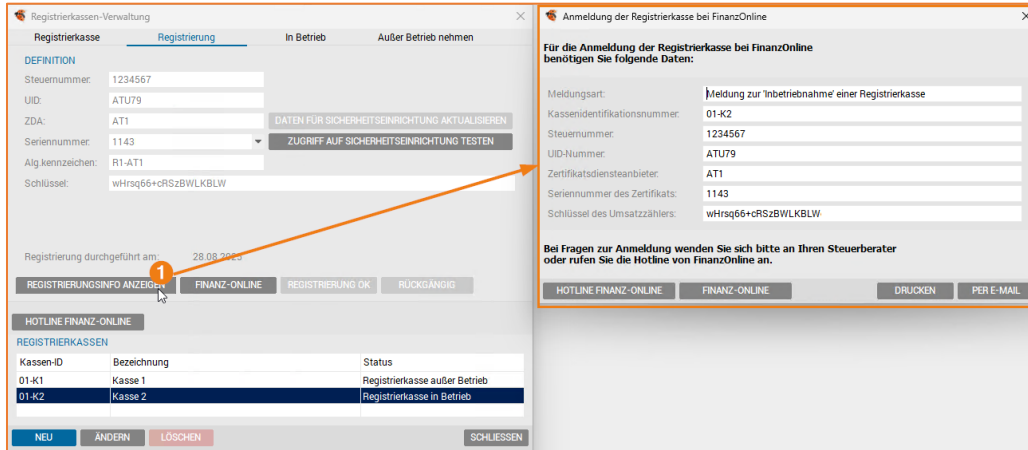

Registrierkassen-Verwaltung

Registrierkassen-Verwaltung

Registrierkassen-Verwaltung

DEFINITION

Steuernummer: 1234567

UID: ATU79

ZDA: AT1

Seriennummer: 1143

Alg.kennzeichen: R1-AT1

Schlüssel: wHrsq66+cRSzBWLKBLW

Registrierung durchgeführt am: 28.08.2011

REGISTRIERUNGSINFO ANZEIGEN

FINANZ-ONLINE

REGISTRIERUNG OK

RÜCKGÄNGIG

HOTLINE FINANZ-ONLINE

REGISTRIERKASSEN

Kassen-ID	Bezeichnung	Status
01-K1	Kasse 1	Registrierkasse außer Betrieb
01-K2	Kasse 2	Registrierkasse in Betrieb

NEU

ÄNDERN

LÖSCHEN

SCHLIESSEN

Anmeldung der Registrierkasse bei FinanzOnline

Für die Anmeldung der Registrierkasse bei FinanzOnline benötigen Sie folgende Daten:

Meldungsart: Meldung zur 'Inbetriebnahme' einer Registrierkasse

Kassenidentifikationsnummer: 01-K2

Steuernummer: 1234567

UID-Nummer: ATU79

Zertifikatsdiensteanbieter: AT1

Seriennummer des Zertifikats: 1143

Schlüssel des Umsatzzählers: wHrsq66+cRSzBWLKBLW

Bei Fragen zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder rufen Sie die Hotline von FinanzOnline an.

HOTLINE FINANZ-ONLINE

FINANZ-ONLINE

DRUCKEN

PER E-MAIL

REGISTRIERUNG DER SIGNATUREINHEIT IN FINANZONLINE



WICHTIGER HINWEIS: Leiten Sie die Daten der neuen Signatureinheit unbedingt an Ihren Steuerberater zur Eintragung in FinanzOnline weiter.

Nähere Informationen hierzu erhalten Sie direkt über <https://finanzonline.bmf.gv.at>