



HINWEIS: Die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) informiert, dass die aktuellen RKS-Signaturkarten vom Typ **ACOS-ID 2.1** ab dem **7. Juni 2025** nicht mehr verwendet werden dürfen, da ihre Zertifikate auslaufen und sie den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Aus diesem Grund müssen betroffene Registrierkassenbetreiber rechtzeitig neue, zertifizierte Signaturkarten beziehen und diese über FinanzOnline registrieren sowie die alten Karten außer Betrieb nehmen.

Aufgrund der knappen Verfügbarkeit der neuen Signaturkarten wurde zugelassen, dass bestehende Karten des Typs **ACOS-ID 2.1** über ihre technische Gültigkeit hinaus genutzt werden dürfen.

Weitere Informationen zur Vorgehensweise beim Tausch der Signaturkarte finden Sie unter:
<https://www.wko.at/steuern/vorgehensweise-tausch-rksv-signaturkarte>

Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Verbindlichkeit dieser Informationen übernehmen können.

Ob diese Schritte für Ihren konkreten Anwendungsfall ausreichend sind, ist von Ihrer individuellen Situation abhängig und sollte im Zweifel mit Ihrem Steuerberater abgestimmt werden.

Um die in Ihrer Registrierkasse für die Signatur von Belegen verwendete Signatureinheit zu wechseln, gehen Sie bitte wie folgt vor:

NEUE SIGNATUREINHEIT ANSCHLIESSEN


- Ermitteln Sie zunächst, an welchem PC (Server oder Client) die bisherige Signatureinheit angeschlossen ist.
- Entfernen Sie die alte Signatureinheit, sofern diese nicht mehr benötigt wird.
- Schließen Sie die neue Signatureinheit genau an diesen PC an einem freien USB-Anschluss an.



HINWEIS: Schließen Sie die neue Signatureinheit ausschließlich an dem PC (Server oder Arbeitsplatz) an, an dem auch die bisherige Signatureinheit betrieben wurde, da die Registrierkasse nur so ordnungsgemäß funktioniert.

SIGNATUREINHEIT IN DER REGISTRIERKASSE WECHSELN

- Öffnen Sie die Registrierkassenverwaltung ("Verwaltung" → "Registrierkassen").

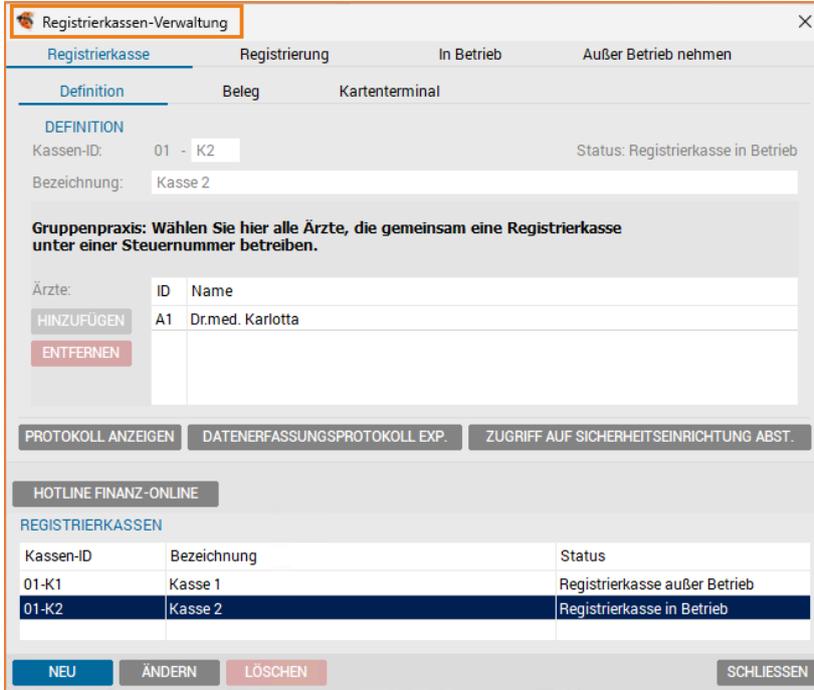

Registrierkassen-Verwaltung

Registrierkasse Registrierung In Betrieb Außer Betrieb nehmen

Definition Beleg Kartenterminal

DEFINITION

Kassen-ID: 01 - K2 Status: Registrierkasse in Betrieb

Bezeichnung: Kasse 2

Gruppenpraxis: Wählen Sie hier alle Ärzte, die gemeinsam eine Registrierkasse unter einer Steuernummer betreiben.

Ärzte:

ID	Name
A1	Dr.med. Karlotta

HINZUFÜGEN ENTFERNEN

PROTOKOLL ANZEIGEN DATENERFASSUNGSPROTOKOLL EXP. ZUGRIFF AUF SICHERHEITSEINRICHTUNG ABST.


HOTLINE FINANZ-ONLINE

REGISTRIERKASSEN

Kassen-ID	Bezeichnung	Status
01-K1	Kasse 1	Registrierkasse außer Betrieb
01-K2	Kasse 2	Registrierkasse in Betrieb

NEU ÄNDERN LÖSCHEN SCHLIESSEN

- Wechseln Sie in den Reiter "Registrierung", wählen Sie die gewünschte Registrierkasse aus, und wählen Sie die Funktion [ÄNDERN].

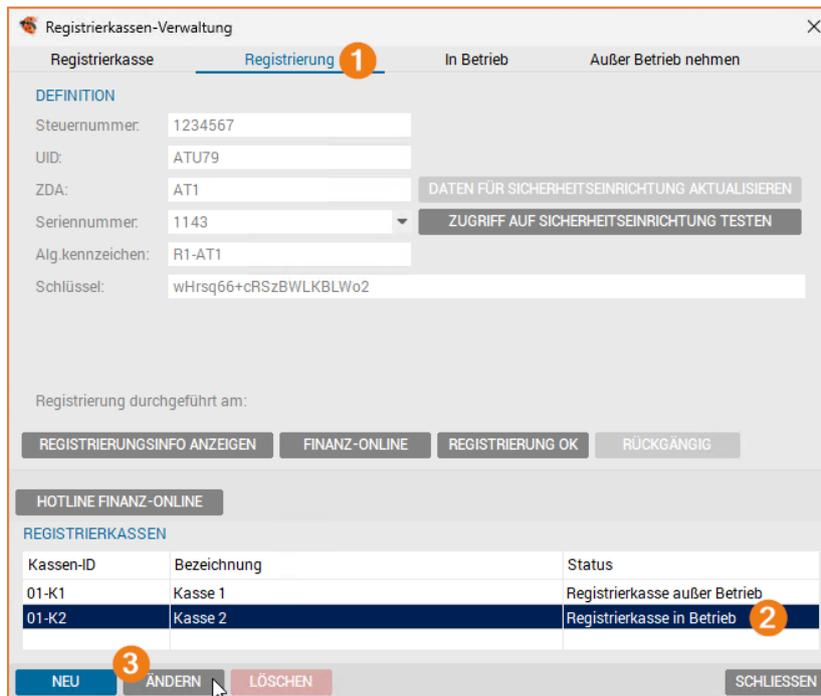

Registrierkassen-Verwaltung

Registrierkasse **Registrierung** In Betrieb Außer Betrieb nehmen

DEFINITION

Steuernummer: 1234567

UID: ATU79

ZDA: AT1 DATEN FÜR SICHERHEITSEINRICHTUNG AKTUALISIEREN

Seriennummer: 1143 ZUGRIFF AUF SICHERHEITSEINRICHTUNG TESTEN

Alg.kennzeichen: R1-AT1

Schlüssel: wHrsq66+cRSzBWLKBLWo2

Registrierung durchgeführt am:

REGISTRIERUNG/INFO ANZEIGEN FINANZ-ONLINE REGISTRIERUNG OK RÜCKGÄNGIG

HOTLINE FINANZ-ONLINE

REGISTRIERKASSEN

Kassen-ID	Bezeichnung	Status
01-K1	Kasse 1	Registrierkasse außer Betrieb
01-K2	Kasse 2	Registrierkasse in Betrieb

NEU **ÄNDERN** LÖSCHEN SCHLIESSEN

- Wählen Sie die entsprechende Signatureinheit aus der angezeigten Liste im Dropdown "Seriennummer".
 - Falls die Signatureinheit nicht erscheint, überprüfen Sie die Verbindung und klicken Sie auf **[DATEN FÜR SICHERHEITSEINRICHTUNG AKTUALISIEREN]**.
 - Nach der Auswahl schließen Sie den Wechsel mit **[SPEICHERN]** ab.

Kassen-ID	Bezeichnung	Status
01-K1	Kasse 1	Registrierkasse außer Betrieb
01-K2	Kasse 2	Registrierkasse in Betrieb

- Danach können Sie die Registrierkassendaten für die Registrierung der Signatureinheit in FinanzOnline mit **[REGISTRIERUNGSINFO ANZEIGEN]** anzeigen lassen.

REGISTRIERUNG DER SIGNATUREINHEIT IN FINANZONLINE



HINWEIS: Neue Signatureinheiten, die bisher noch nicht mit der Registrierkasse verwendet wurden, müssen in FinanzOnline registriert werden.

Nähere Informationen hierzu erhalten Sie direkt über <https://finanzonline.bmf.gv.at>