

Benutzerdokumentation

Datalogic Gryphon GD4430, GBT4430 Konfiguration

Copyright © AESCUDATA GmbH – All rights reserved

Inhaltsverzeichnis

1	Datalogic Gryphon GD4430, GBT4430.....	3
1.1	Scannen von GS1 und HIBC-Barcodes.....	3
1.2	Barcodescanner programmieren.....	3

1 Datalogic Gryphon GD4430, GBT4430

Nachfolgend finden Sie Informationen zum Einrichten des USB-Barcodescanners **Datalogic Gryphon GD4430** bzw. **GBT4430**.

1.1 Scannen von GS1 und HIBC-Barcodes

GS1 und HIBC-Barcodes enthalten einen Schlüssel, der angibt, um was es sich bei den gescannten Werten handelt.

Damit der Barcode interpretiert werden kann, muss der Scanner vorab entsprechend eingerichtet werden.

1.2 Barcodescanner programmieren


Der Scanner wird durch das Abscannen der unten abgebildeten Barcodes programmiert.

Scannen Sie die Barcodes einfach nacheinander ab. Warten Sie zwischen den einzelnen Scanvorgängen den Bestätigungston ab.

Anmerkung	Barcode
Restore Custom Defaults ~3\$P,HA00,P<CR>	
Enable Interleaved 2 of 5	
Enter Configuration ~3\$P<CR>	
i Optional! Wird nur benötigt, wenn der Mehrfachscan (Trigger gedrückt halten und mehrere Barcodes nacheinander scannen) aktiviert werden soll. Scan Mode: Trigger hold multiple ~3\$CSNRM01<CR>	

<p>Interface Selection: USB-KBD ~3\$HA35<CR></p>	
<p>Keyboard Country Mode: German ~3\$CKBCO05<CR></p>	
<p>Transmission AIM ID Code: Enable ~3\$CAIEN01<CR></p>	
<p>Character Conversion: [1D GS] * [04 EOT] * ~3\$CLFCH1D2A042AFFFFFFFF<CR></p>	
<p>Decoding Normal/Inverse Printing: Both Normal and Inverse <FNC3>\$CIPNR02<CR></p>	 <p style="text-align: center;">\$CIPNR02</p>
<p>ule 1 ~3\$U00000008554C4532000E0A0A<CR></p>	
<p>ule 2 ~3\$U0008000C0A0A7B0A7D0A0A0A040A0A0A<CR> ></p>	
<p>Exit Configuration ~3\$P<CR></p>	

Beeper Einstellungen ändern

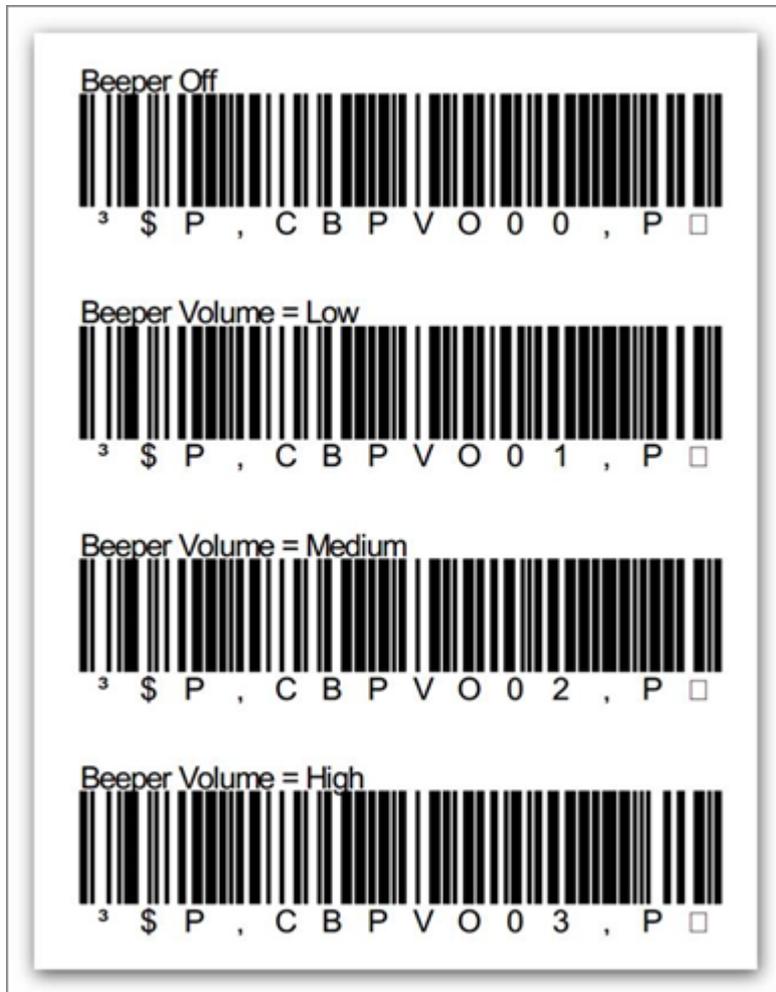

Erfolg durch Kompetenz und Engagement.

CGM – CompuGroup Medical SE ist

eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 550 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Leistungserbringer in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 55 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.600 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

Aescudata GmbH

Bahnhofstraße 37
21423 Winsen (Luhe)
vertrieb@aescudata.de
T +49 (0) 4171 696 100
F +49 (0) 4171 696 120

aescudata.de
cgm.com/de

