

Ny versjon av CGM Journal Upgrader


CGM Journal benytter CGM Journal Upgrader for å oppgradere. Ny versjon av CGM Journal Upgrader er nå tilgjengelig fra nytt endepunkt.

http://autodp.cgm.nhn.no/* → https://updates.cgmmedicalcloud.no/*


I forbindelse med overgang til nytt endepunkt, må CGM Journal Upgrader installeres på nytt. Eksisterende konfigurasjon vil bli behold. Installasjon gjennomføres i to steg.

Steg 1: Avinstaller eksisterende installasjon av CGM Journal Upgrader


Gå til kontrollpanel

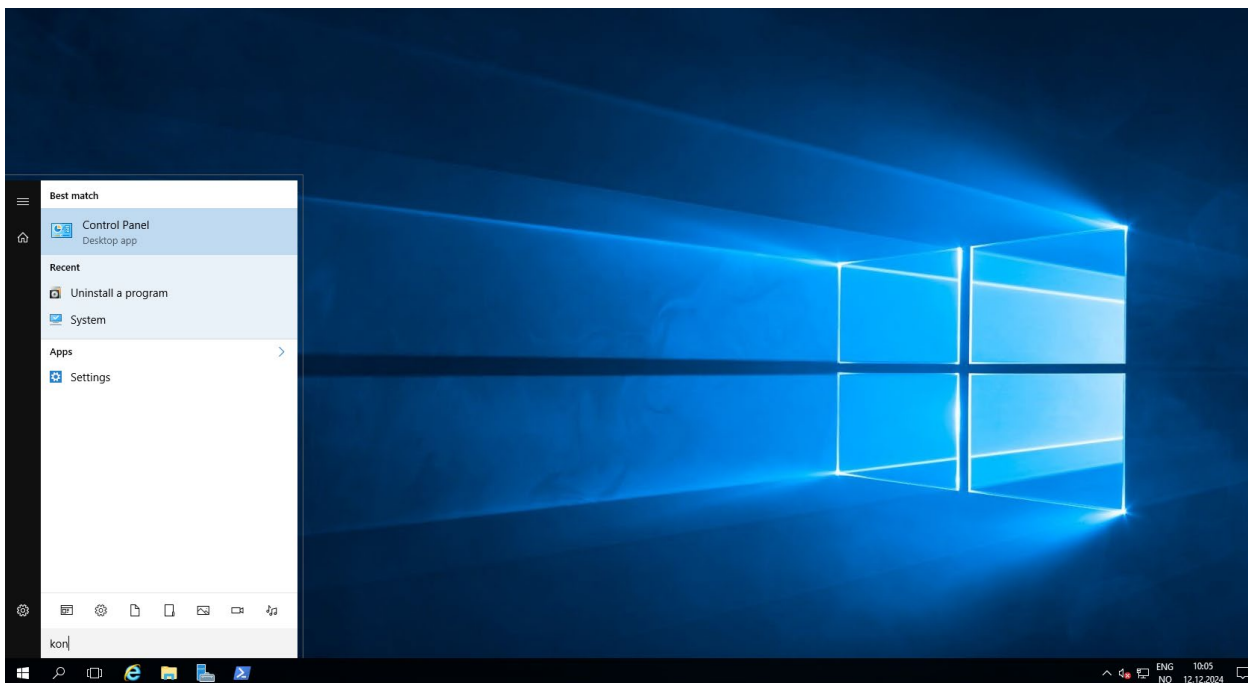


Velg avinstaller et program

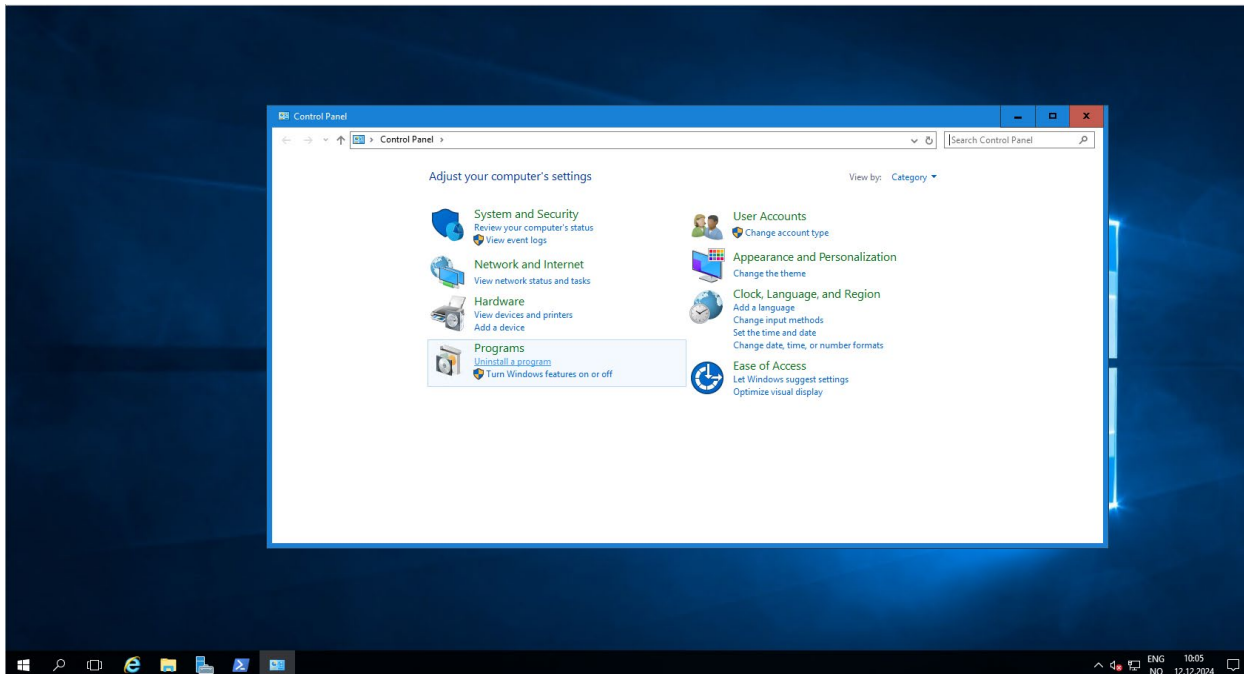

Velg CGM Journal Upgrader og klikk avinstaller

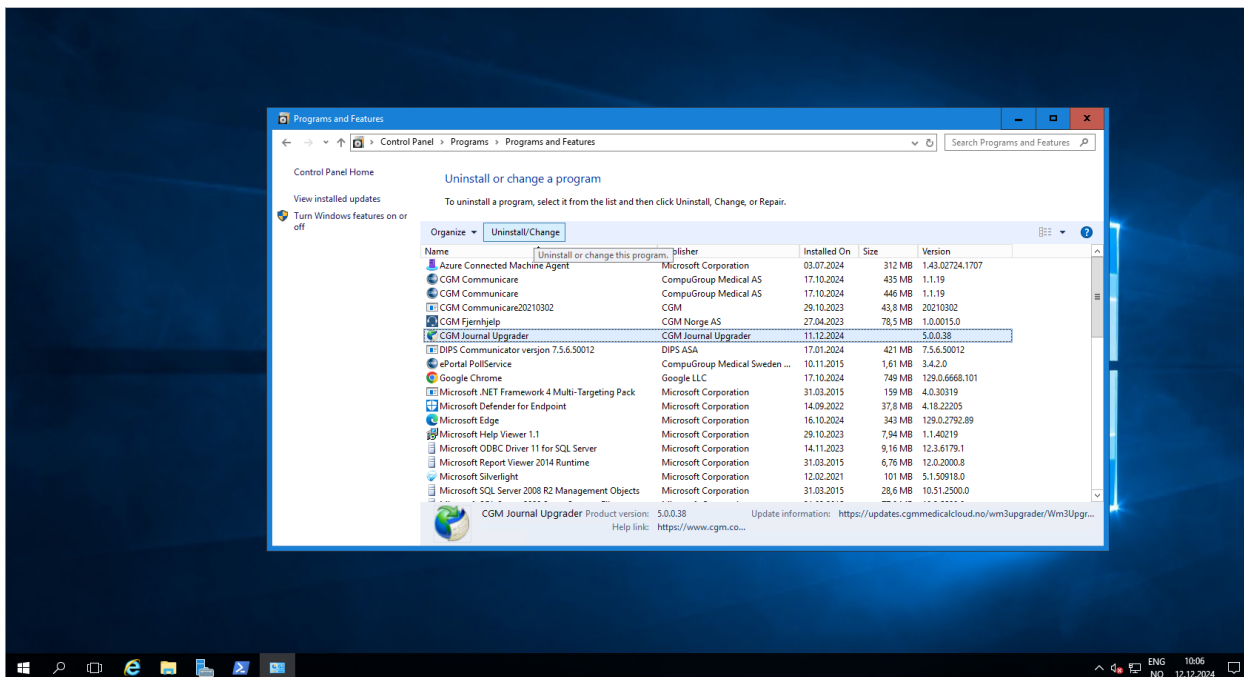


Fjern applikasjonen fra denne datamaskinen ved å klikke OK

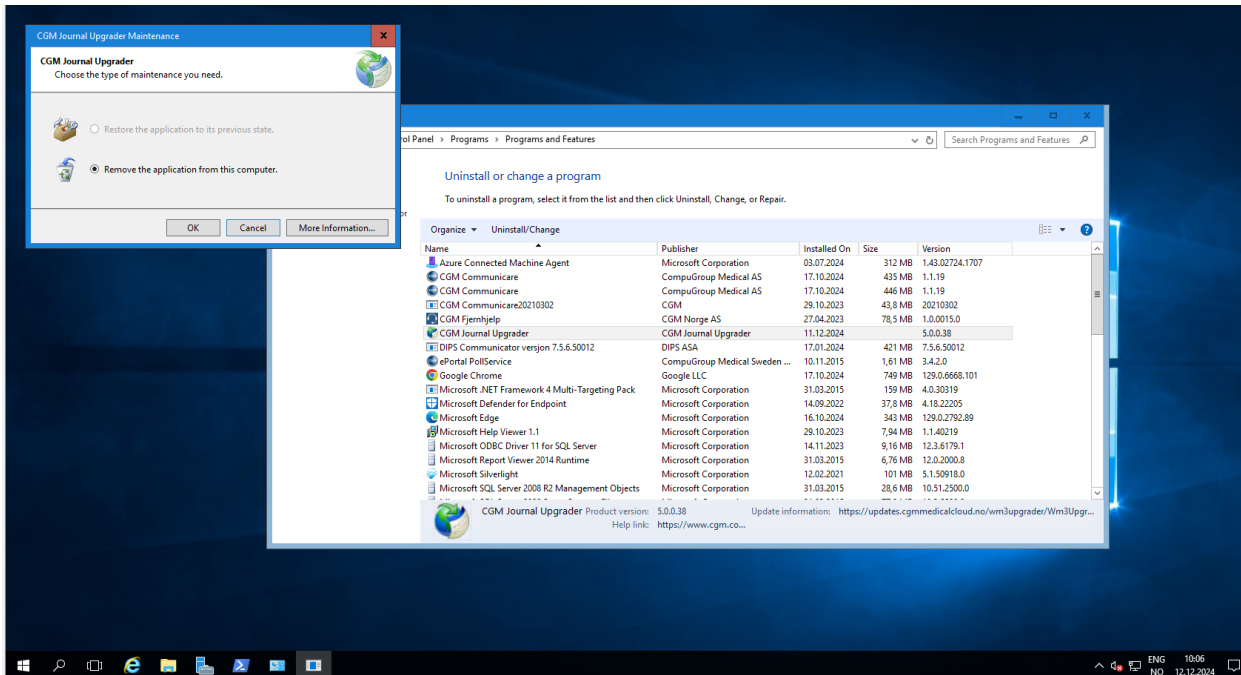


Steg 2: Installer ny versjon av CGM Journal Upgrader


I nettleseren, gå til <https://updates.cgmmmedicalcloud.no/wm3upgrader/publish.htm> og velg install

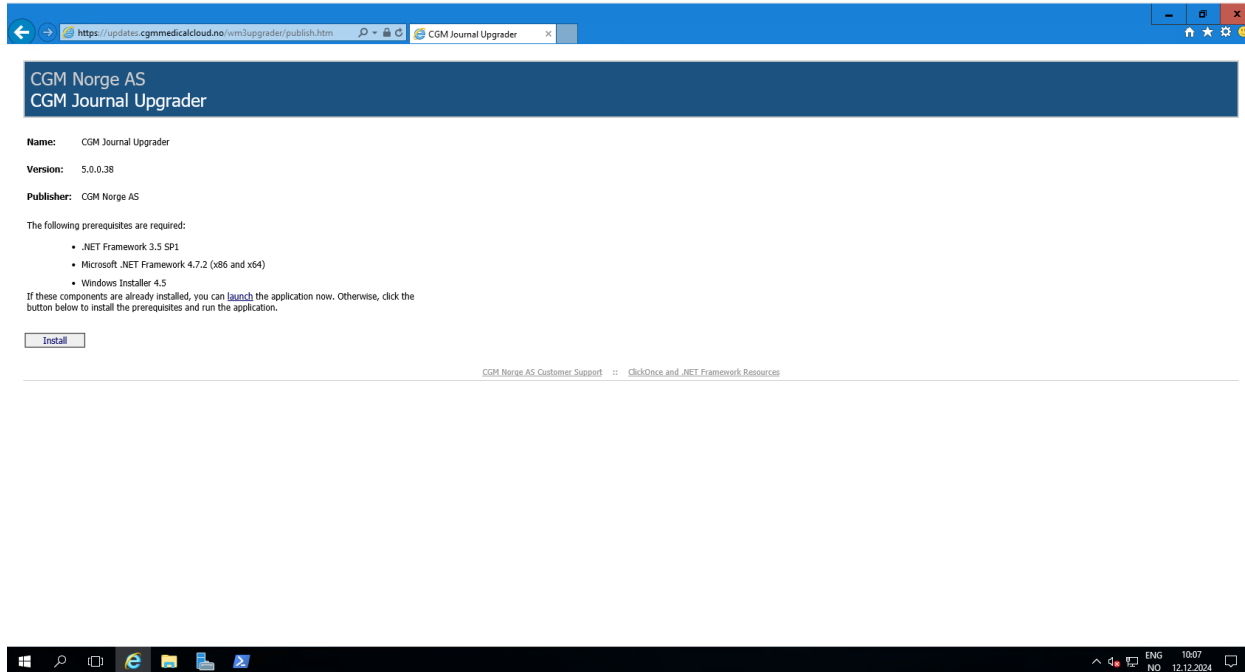


Velg kjør

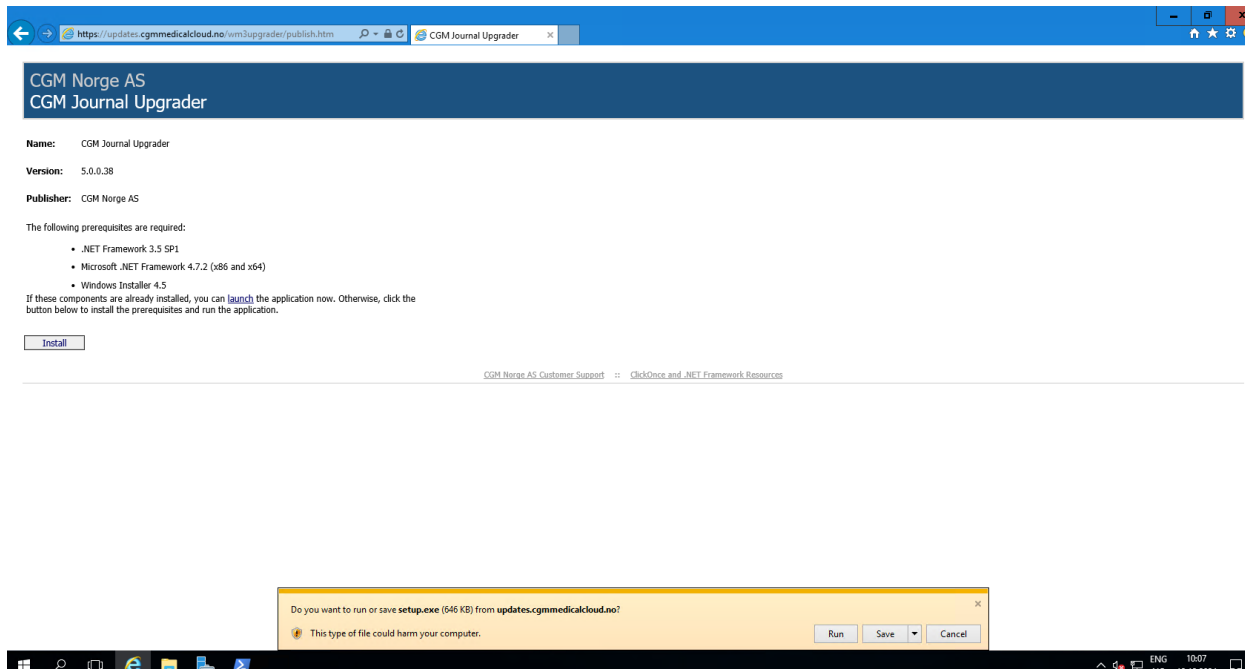


Ved advarsel fra Windows Smartscreen, velg kjør

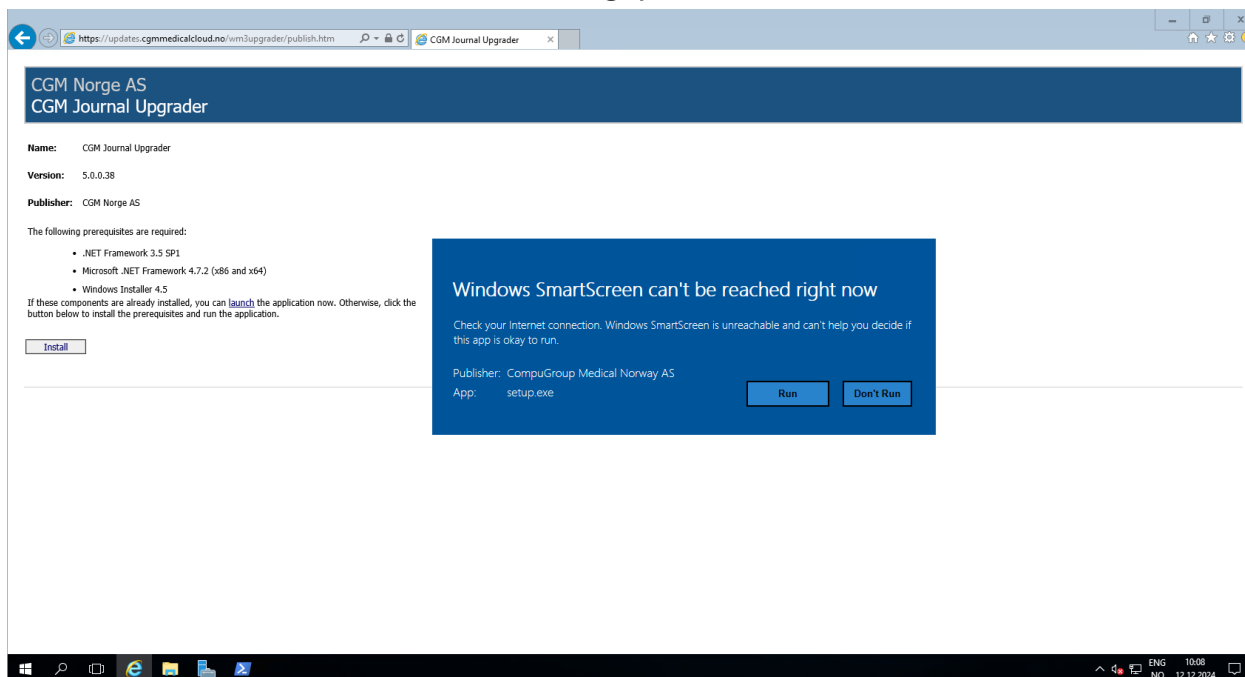

Velg Install

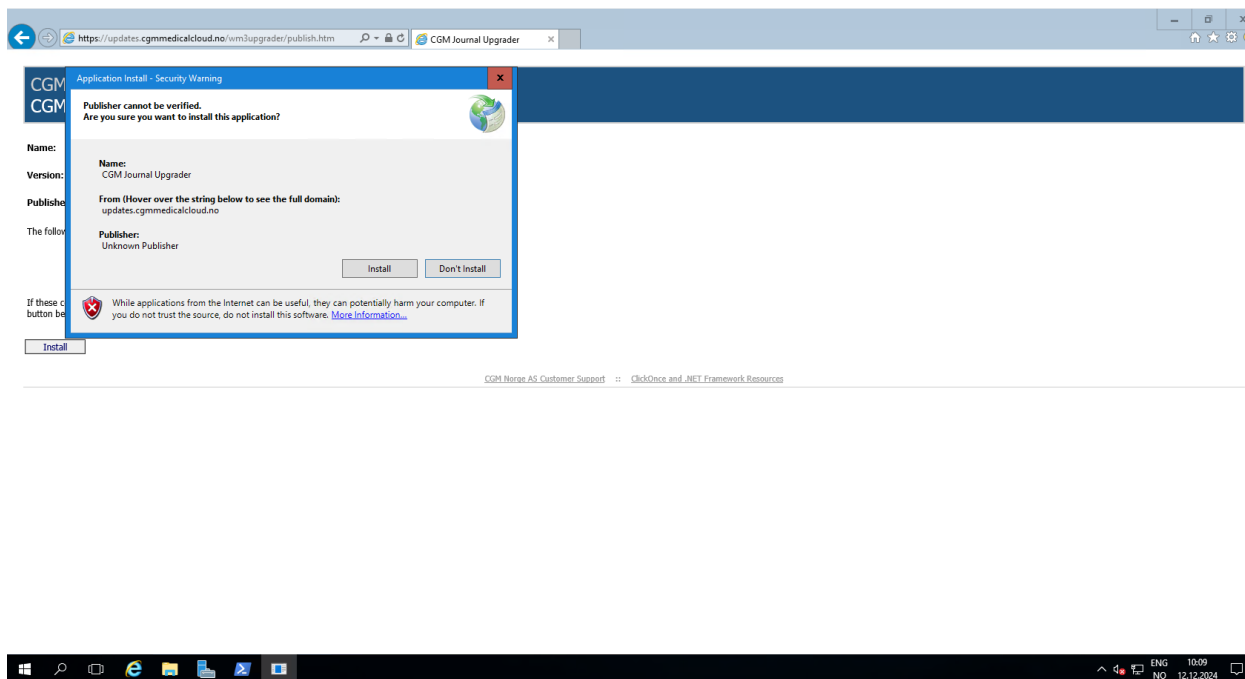

Ved advarsel fra Windows Smartscreen, velg kjør

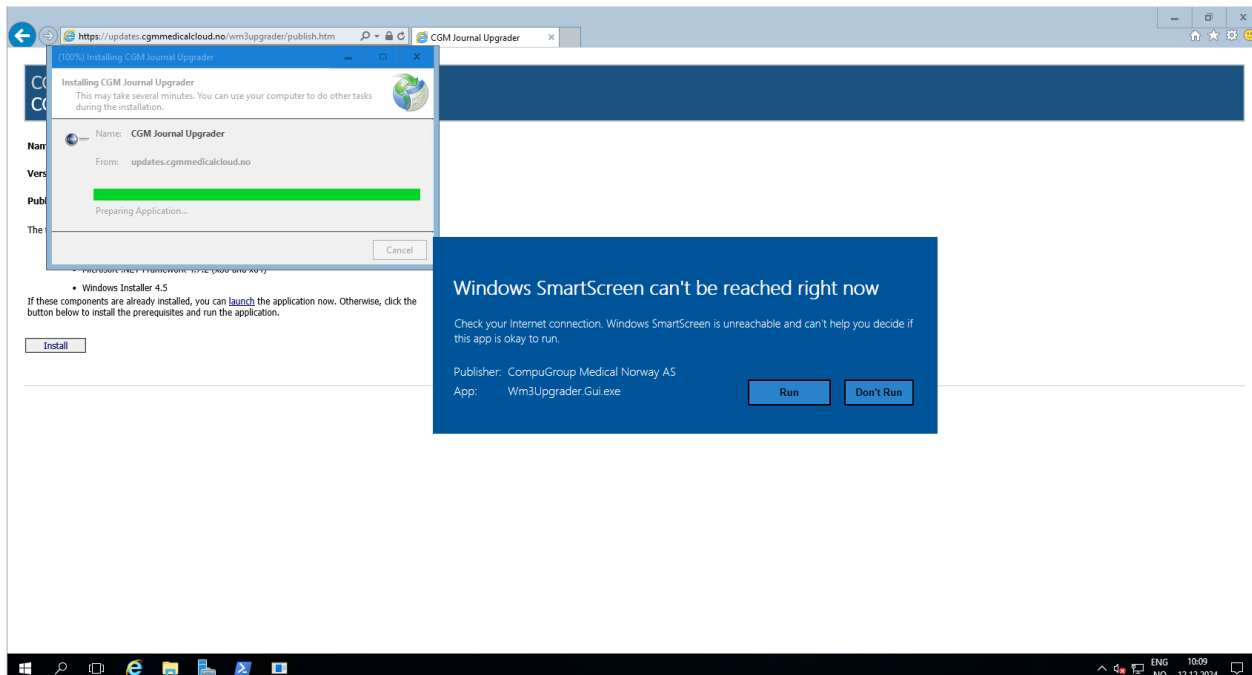


Installasjonen gjennomføres og du skal få opp ny versjon av CGM Journal Upgrader med din eksisterende konfigurasjon.

Steg 3: Verifikasjon

Sjekk at korrekt versjon (5.0.0.38 eller høyere) åpnes når du starter CGM Upgrader fra skrivebordet etter installasjon.



Sjekk også versjonsnummer på filen Wm3Upgrader.Gui.exe som du finner på C:\CGM Norge ved å høyreklikke på denne og velge «Properties» (eller Egenskaper) og gå til fanen «Details» (eller Detaljer). Det skal se slik ut:

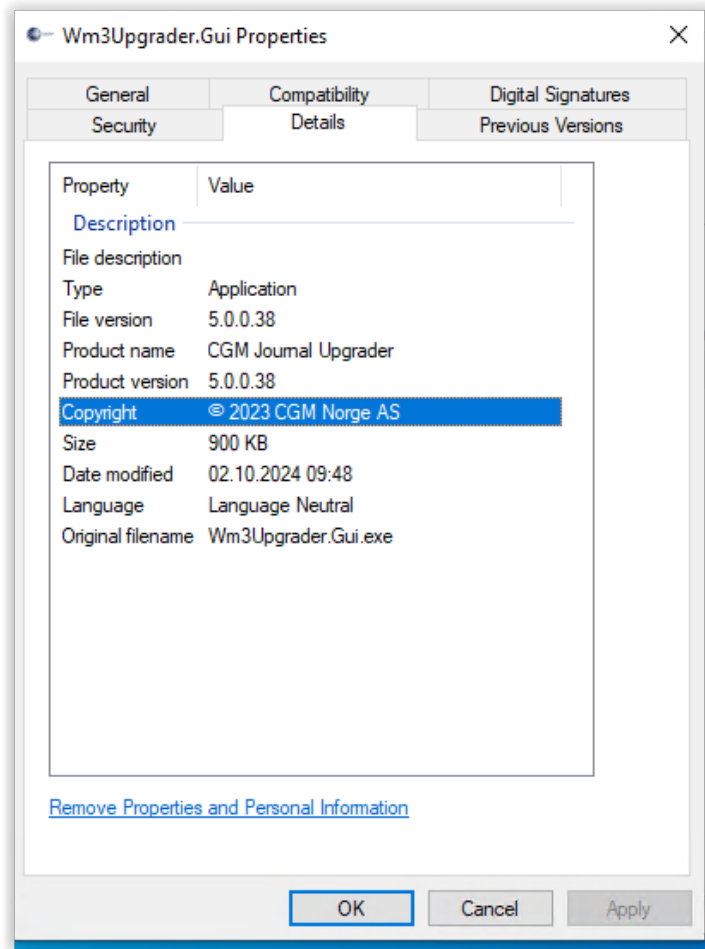


Hvis begge disse er i orden, er du klar for å ta i bruk ny versjon av CGM Journal.


Steg 4: Løsning på delvis avinstallering

I noen driftsmiljøer har vi sett at dette ikke er i orden. Da må du ta følgende ekstra steg:

Søk opp «Services» (eller Tjenester) på din server:

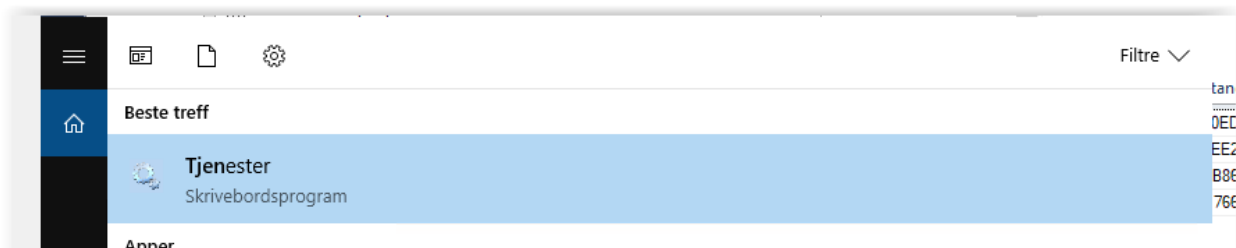

Finn tjenesten CGMUpgraderService og stopp den

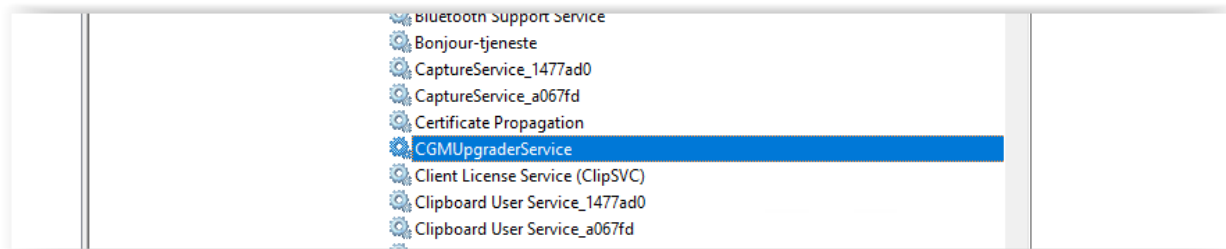

Se om mappen C:\CGM Norge har andre mapper inne i seg. Hvis ikke, renamer du mappen «CGM Norge» til f.eks. «CGM Norge_old». (Hvis det finnes mapper, f.eks. som heter «ePortal» inne i CGM Norge-mappen, ta kontakt med CGM Support for videre bistand)

Så installerer du upgrader nok en gang slik som beskrevet i Steg 2. Etter gjennomført installering kopierer du alle filer av typen «xml» fra den mappen du renamet til den nyopprettede CGM Norge-mappen. Start CGMUpgraderService.

Tiltak som må utføres, basert på type driftsmiljø

CGM Medical Cloud (drift leveres av CGM)

- Ingen tiltak nødvendig

Lokal drift (Privat driftsleverandør)

- Verifiser at du har tilgang til nytt endepunkt med å navigere til <https://updates.cgmmmedicalcloud.no/wm3upgrader/publish.htm> i nettleseren.
- Avinstaller CGM Journal Upgrader (Steg 1)
- Installer CGM Journal upgrader fra <https://updates.cgmmmedicalcloud.no/wm3upgrader/publish.htm> (Steg 2)

Kommunal drift (Kommunal driftsleverandør)

- Verifiser at du har tilgang til nytt endepunkt med å navigere til <https://updates.cgmmmedicalcloud.no/wm3upgrader/publish.htm> i nettleseren.
- Avinstaller CGM Journal Upgrader (Steg 1)

- Installer CGM Journal upgrader fra <https://updates.cgmmedicalcloud.no/wm3upgrader/publish.htm> (Steg 2)

Gammelt endepunkt	Nytt endepunkt	IP-adresse
http://autodp.cgm.nhn.no/ *	https://updates.cgmmedicalcloud.no/ *	91.186.88.61